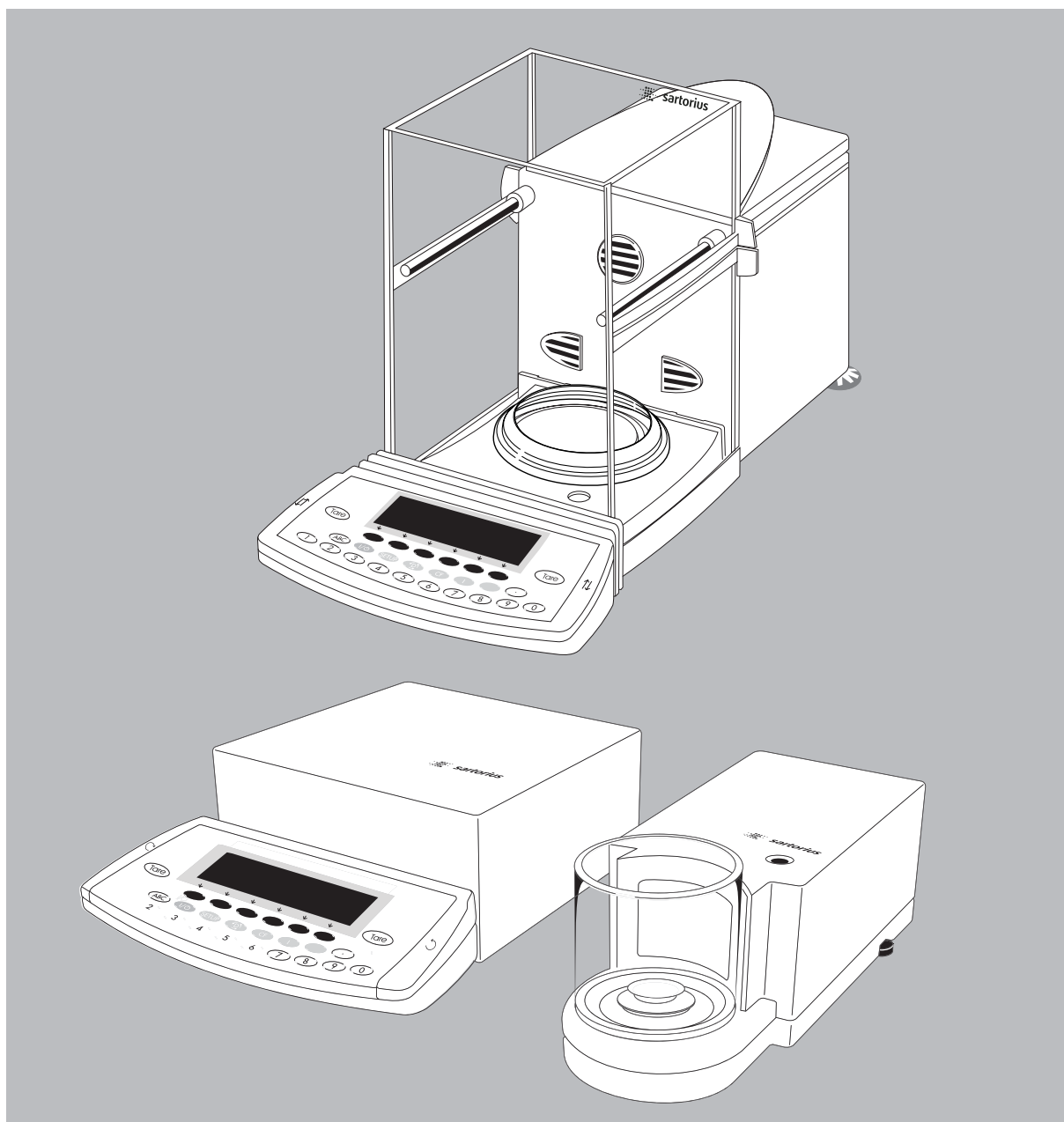


Instrucciones de funcionamiento

ME y SE Sartorius

Modelos ME y SE

Balanzas electrónicas analíticas semimicro, micro y ultramicro



Objeto de uso

Los modelos ME y SE son balanzas de precisión de alta resolución para la determinación precisa de masas, con alcances de rango entre 0,001 mg y 610 g.

Debido a sus características de prestación, se prestan en forma excelente como instrumento de control en los sistemas de gestión de la calidad:

- Función de calibración y ajuste totalmente automática: isoCAL con memoria para protocolos de calibración (dependientes de tiempo y temperatura)
- Determinación de la desviación estándar mediante reprotest
- Documentación según los estándares ISO/GLP
- Aseguramiento de los ajustes de parámetros con clave
- Indicación de los intervalos vencidos de mantenimiento

La balanza satisface los más altos requerimientos de fiabilidad en resultados de medición mediante:

- Filtración de las vibraciones
- Protector contra las corrientes de aire, totalmente automático, que consta de tres partes inteligentes, activadas por motor.
- Resultados de medición estables, reproducibles
- Excelente legibilidad bajo cualquier condición de luz
- Diseño robusto y gran durabilidad

ME215/235/254/414/614:

- Eliminador de cargas electrostáticas, integrado, para la neutralización de tales interferencias (ionizador)

La balanza alivia y acelera los procesos de rutinas de aplicaciones simples y complejas mediante:

- Respuestas breves de medición

Programas de aplicación integrados.

Aplicación 1:

- segunda unidad de peso
- conteo
- pesadas en porcentaje
- pesadas de animales
- recalculación
- cálculo
- determinación de la densidad
- pesada diferencial
- corrección del empuje del aire
- determinación de la densidad del aire
- determinación de diámetro

Aplicación 2:

- pesada de control
- funciones por control de tiempo

Aplicación 3:

- totalización
- formulación
- estadística

Mediante funciones adicionales:

- segunda memoria de tara
- identificación (identificador)
- memoria de datos de producto
- Función SQmin
- cambio de resolución
- memorización manual en aplicación 3
- incertidumbre de medición DKD

- Inicialización automática al encender la balanza

- Identificación fácil de muestras

- A petición: control por ordenador externo

Sobre los símbolos

Símbolos que se utilizan en estas instrucciones:

- para las acciones a realizar
- para las acciones que han de ejecutarse sólo bajo determinadas condiciones
- > describe lo que resulta al ejecutar una acción
- para enumerar ítems
- ⚠ advierte sobre un peligro

Importante:

- Las ilustraciones en estas instrucciones se basan en el modelo ME215S. En los demás modelos, algunas lecturas de pantalla y protocolos pueden diferir respecto a las ilustraciones; en donde esto es importante para el funcionamiento, se explican las diferencias en el texto.

Asesoría de aplicaciones/Hotline:

Informaciones sobre el uso de estas aplicaciones, rogamos consultar o bien enviar fax al representante local que corresponda. Direcciones de representantes en su país, ver en Internet bajo www.sartorius.com

Contenido

2	Objeto de uso	113	Funciones adicionales
3	Contenido	113	Segunda memoria de tara
4	Advertencias de seguridad	115	Identificación individual
5	Representación de aparato	119	Memorización manual M+
5	ME215/235/254/414/614	120	Cambio de resolución
6	ME36S	122	Memoria datos de producto
7	ME5, SE2	124	Función SQmin
8	Concepto de manejo	126	Incertidumbre de medición DKD
12	Puesta en funcionamiento	128	Combinar aplicaciones
12	Condiciones de transporte y almacenamiento	129	Combinación razonable de varias aplicaciones (ejemplo)
12	Desembalaje de la balanza	131	Salida de datos
15	Advertencias de instalación	133	Interfaces
15	Uso separado unidad indicación	136	Impresión
17	Conexión a la red	140	Comunicación serial
18	Calentamiento previo	145	Asignación de terminales
19	Nivelación del aparato	146	Diagrama de conexión
20	Transporte de la balanza	147	Mensajes de error
23	Ajustes previos	150	Cuidado y mantenimiento
23	Ajuste de lengua	152	Eliminación de desechos
24	Navegar en Setup	153	Sinopsis
25	Entrar fecha y hora	153	Datos técnicos
26	Ajustar parámetros de balanza	159	Accesorios (opciones)
29	Ajustar parámetros del aparato	160	Dimensiones (dibujos acotados)
29	Entrar clave	163	Declaraciones de conformidad
34	Ajustar parámetros de aplicación	166	Certificado de Aprobación CE de tipo
42	Ajustar impresión	168	Placas y marcas
44	Configuración protocolo	173	Índice
46	Informaciones específicas aparato		Apéndice
46	Ajuste de fábrica		Entrar clave general
			Instrucciones breves
47	Funcionamiento		
47	Función básica “Pesar”		
47	Advertencias sobre “Pesadas analíticas”		
48	Pesar por debajo de la balanza		
51	Parámetros del aparato		
51	Abrir y cerrar protector contra corrientes de aire		
53	Ionizador (eliminador de electrostática)		
55	Calibración, ajuste, linealización		
65	Test de repetibilidad		
66	Programas de aplicación		
67	Conmutar entre unidades		
69	Conteo		
72	Pesada en porcentaje		
75	Cálculo		
78	Determinación de la densidad		
83	Pesada diferencial		
95	Corrección del empuje del aire		
102	Determinación de diámetro		
105	Funciones por control de tiempo		
108	Estadística		

Advertencias de seguridad

La balanza cumple con las Directivas y Normas respecto al material eléctrico, compatibilidad electro-magnética y las medidas de seguridad prescritas.

El uso inapropiado, no obstante, puede causar daños a personas y cosas.

Lea con mucha atención las instrucciones de funcionamiento, antes de utilizar el aparato; de esta manera se evitan daños en el aparato. Conserve apropiadamente estas instrucciones.

Observe las siguientes advertencias para un trabajo seguro y sin problemas con su nueva balanza:



No emplear en atmósferas potencialmente explosivas



El valor de tensión impreso en el adaptador de CA tiene que coincidir con el valor de la tensión de red local



Al utilizarse equipo eléctrico en instalaciones, bajo condiciones ambientales que requieren altas medidas de seguridad, han de observarse las prescripciones correspondientes para la instalación.



Influencias electromagnéticas extremas pueden producir distorsiones en el valor de lectura. Finalizada la influencia distorsionadora, el producto funciona nuevamente según lo previsto.

– Las conexiones en la balanza tienen que ser realizadas con balanza desconectada de la tensión de red

– La carcasa de la balanza está protegida contra el polvo y las roceaduras de agua (IP32) – la carcasa, sin embargo, no es totalmente hermética

– Proteger el adaptador de CA contra la humedad

– Modificaciones en los aparatos o la conexión de cables o aparatos no suministrados por Sartorius es de responsabilidad del usuario y, en caso necesario, realizar las correcciones pertinentes. Sartorius pone a disposición, según consultas, informaciones sobre los datos mínimos del funcionamiento de los aparatos.

– Utilizar accesorios y opciones Sartorius, puesto que están adaptados en forma óptima a la balanza

Al limpiar, no debe penetrar líquido alguno en la balanza: utilizar sólo un paño suave, levemente humectado.

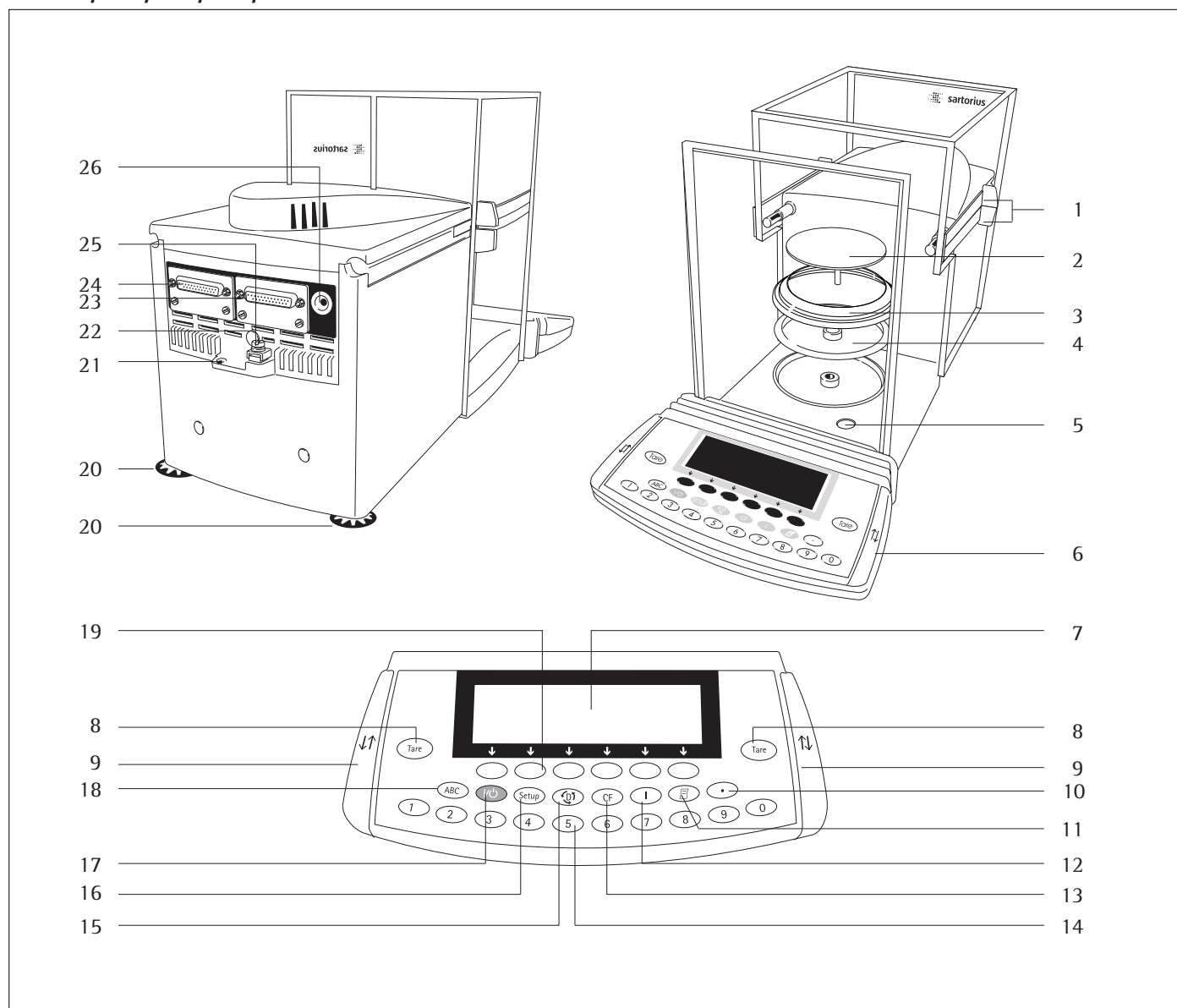
No abrir la balanza. Al violarse los sellos de seguridad se invalidan los derechos de garantía.

En caso de producirse algún problema con la balanza:

○ Comuníquese con la oficina de servicio técnico Sartorius que corresponda

Representación de aparato


ME215/235/254/414/614:



Nº	Designación	Pedido repuesto N°	Nº	Designación	Pedido repuesto N°
1	Asas para deslizar puertas		17	Tecla On/Off	
2	Plato de pesada	69 ME0001	18	Conmutar a	
3	Anillo de blindaje (sólo en ME235S/P)			entrada de letras	
4	Placa apantalladora	69 ME0002	19	Teclas de función	
5	Nivel de burbuja		20	Pata de regulación	69MA0091
6	Unidad indicación/manejo		21	Orejeta de sujeción para	
7	Pantalla			un seguro antirrobo	
8	Tecla de tara		22	Interruptor de menú	
9	Tecla “abrir/cerrar		23	Interfaz de impresora (PRINTER)	
	protector c/corr. de aire“		24	Comunicación serial	
10	Tecla punto decimal			(PERIPHERALS)	
11	Impresión (Print)		25	Borne equipotencial	
12	Activar/desactivar ionizador		26	Conector tensión de red	
13	Tecla CF (clear function)				
14	Teclas numéricas			sin ilustración:	
15	Conmutar al siguiente			Cubiertas protectoras (juego)	6960ME01
	programa de aplicación			Juego piezas pequeñas (unidad	
16	Ajustes previos			indicación/manejo)	69ME0007
				Juego de caperuzas	69ME0008

Representación de aparato

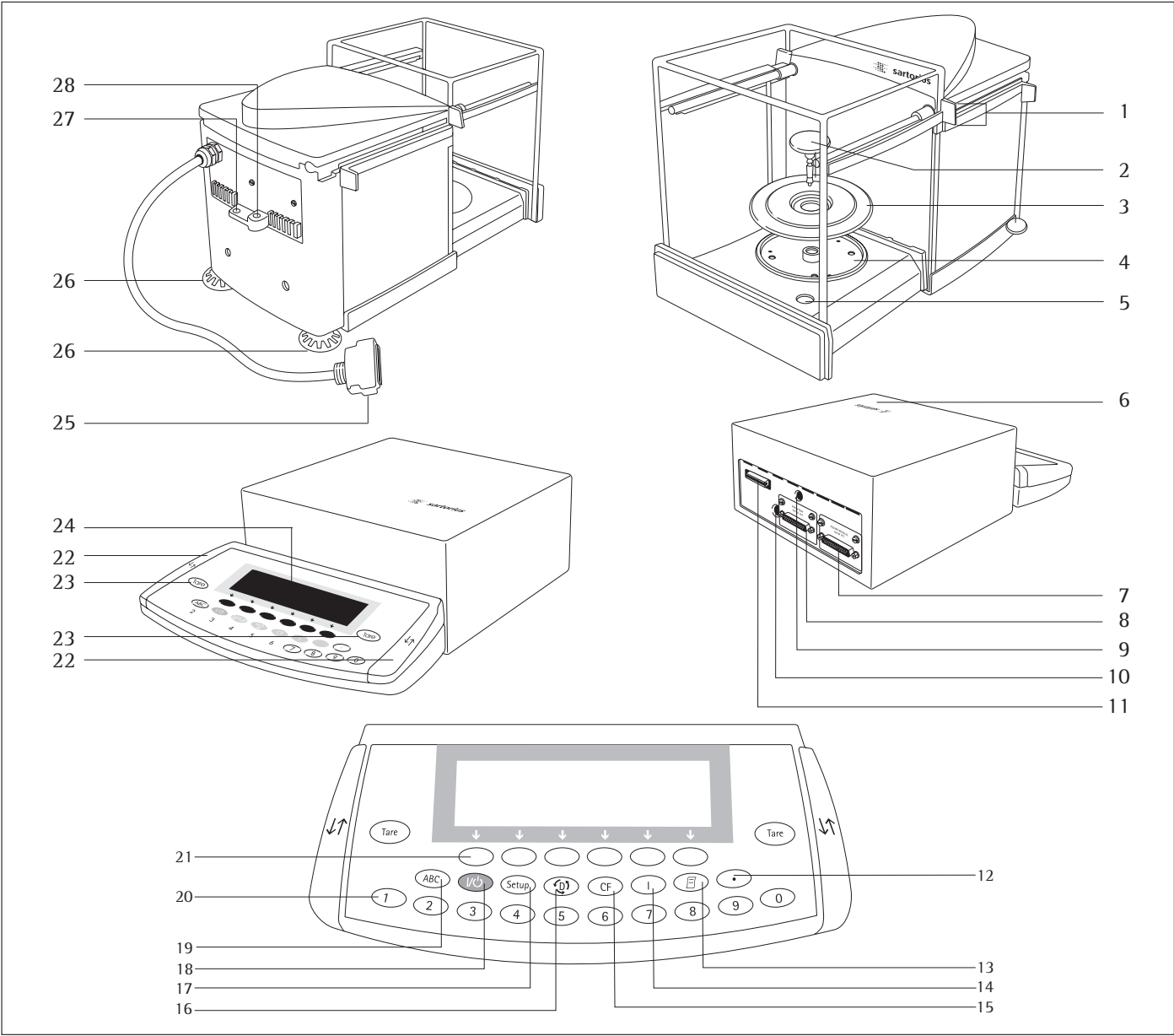ME36S




N°	Designación
1	Asas para deslizar puertas
2	Plato de pesada
3	Anillo de blindaje
4	Placa apantalladora
5	Nivel de burbuja
6	Unidad indicación/manejo
7	Interfaz de comunicación (PERIPHERALS)
8	Interfaz de impresora (PRINTER)
9	Interruptor del menú
10	Conector tensión de red
11	Hembrilla conectora unidad de pesaje
12	Tecla punto decimal
13	Impresión (Print)
14	Informaciones específicas de aparato

N°	Designación
15	Tecla CF (clear function)
16	Conmutar al siguiente programa de aplicación
17	Ajustes previos
18	Tecla On/Off
19	Tecla de conmutar para entrada de letras
20	Teclas numéricas
21	Teclas de función
22	Tecla "abrir/cerrar protector c/corr. de aire"
23	Tecla de tara
24	Pantalla
25	Conector: unidad de pesaje – unidad de manejo
26	Pata de regulación
27	Orejeta de sujeción para un seguro antirrobo
28	Borne equipotencial

Representación de aparato

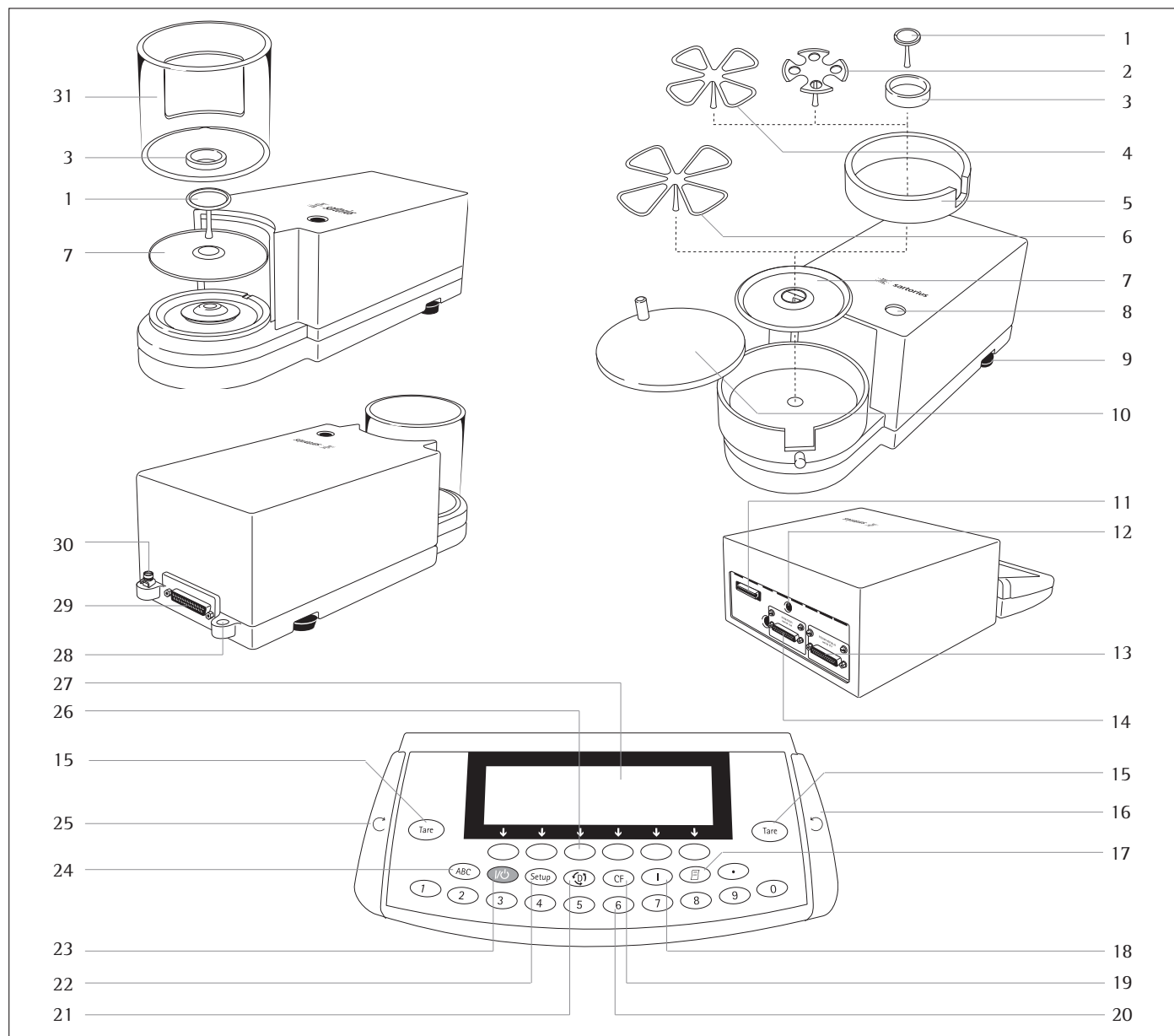ME5, SE2:



Pos. Designación

- 1 Platillo de pesada
- 2 Platillo de filtros Ø 50 mm
- 3 Protector contra corrientes de aire interno (sólo en SE2)
- 4 Platillo de filtros opcional Ø 75 mm
- 5 Anillo apantallador
- 6 Platillo de filtros opcional Ø 90 mm
- 7 Placa apantalladora
- 8 Nivel de burbuja
- 9 Pata regulación
- 10 Tapa protector contra corrientes de aire
- 11 Hembrilla conectora para célula de carga
- 12 Conector tensión de funcionamiento
- 13 Interfaz de comunicación (PERIPHERALS)
- 14 Interfaz de impresora (PRINTER)
- 15 Tecla de tara

Pos. Designación

- 16 Tecla "abrir protector en sentido contrario agujas reloj"
- 17 Impresión (Print)
- 18 Para hacer indicar informaciones específicas de aparato
- 19 Tecla CF (clear function)
- 20 Teclado decimal
- 21 Conmutar al siguiente programa de aplicación
- 22 Ajustes previos
- 23 Tecla On/Off
- 24 Tecla de conmutar para entrada de letras
- 25 Tecla "abrir protector en sentido agujas de reloj"
- 26 Teclas de función
- 27 Lectura
- 28 Dispositivo para la fijación de un seguro antirrobo
- 29 Hembrilla conectora hacia la unidad electrónica evaluación
- 30 Borne equipotencial
- 31 Protector contra corrientes de aire

Concepto de manejo

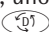
La balanza se compone de célula de pesada, protector contra corrientes de aire, unidad de indicación y manejo. Además de la alimentación de tensión de red o funcionamiento por baterías, la balanza dispone de interfaz para la conexión de dispositivos adicionales, como por ejemplo: impresora, ordenador, interruptor universal, etc.

La unidad de indicación y manejo está conectada en forma fija con la célula de pesada. El manejo de la balanza obedece un principio uniforme.

En tanto no se mencione expresamente algo diferente, los datos incluyen las variantes verificadas (identificadas con el apéndice: -.0CE).

Combinación de varias aplicaciones

Para solucionar tareas más complejas, las aplicaciones también pueden combinarse entre sí.


Seleccionar programas, uno tras otro: conmutar con la tecla .


Teclas


El manejo de la balanza se realiza ya sea mediante teclas, o bien, a través de un ordenador conectado (PC). A continuación, se describe sólo el manejo mediante teclas.


Teclas con inscripción

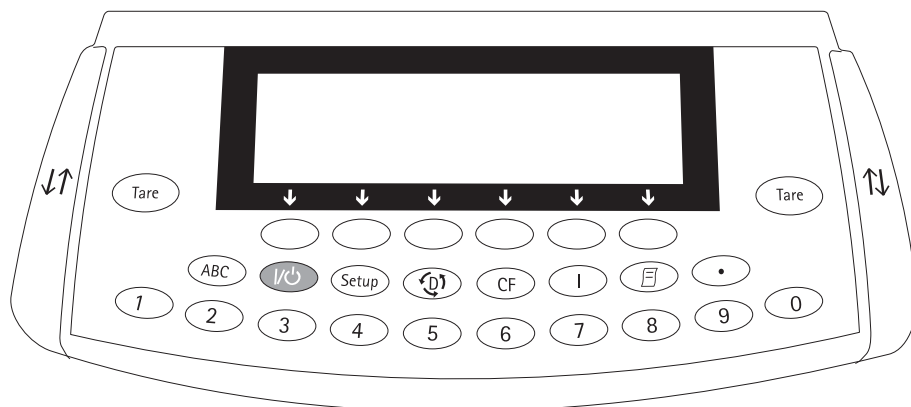
Estas teclas llevan siempre el significado impreso, sin embargo, no todas se encuentran en todo momento accesibles. La accesibilidad depende del estado de funcionamiento de la balanza y de la selección de menú.



ME215/235/254/414/614:
 Encender y apagar ionizador

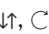
ME36S, ME5, SE2:
 Indicar informaciones específicas de aparato

 Imprimir
Se activa la salida de los valores de indicación o protocolos vía comunicación e impresora serial.





 Entrada de la coma para las posiciones decimales

 Cifras
Ver en "Entrar números"


 Tarar balanza

 Abrir y cerrar protector contra corrientes de aire

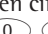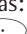Entrar números


Los números se entran en cifras: pulsar  ...   

Memorizar entrada numérica: pulsar la tecla de función correspondiente (Softkey)

Borrar entrada numérica, o bien, borrar caracteres individualmente: pulsar la tecla 

Entrar texto

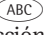
● Entrar cifras: ver en "Entrar números"


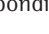
● Entrar letras/caracteres: pulsar tecla 
> Aparece selección previa para la entrada de letras, en la nota al pie


● Preselección: pulsar Softkey correspondiente

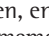
● Seleccionar letras/caracteres: pulsar Softkey correspondiente
> Aparece letra en la indicación

○ En caso dado, entrar más letras/caracteres: preselección y selección

○ Abandonar entrada de letras (p. ej. entradas de usuario, en las que el último carácter es una letra): pulsar tecla 


● Memorizar entrada de texto: pulsar la tecla de función correspondiente (Softkey) (p. ej.  

● Borrar entrada, o bien, borrar caracteres individualmente: pulsar tecla 


● Borrar datos de usuario: entrar tecla  o bien, entrar espacio en blanco " " y memorizar


Significado

 Letras
Ver en "Entrar texto"

 Encender/apagar
Enciende, apaga, pasa al modo standby

 Ajustes previos
Acceso a Setup, abandonar Setup

 Conmuta al siguiente programa de aplicación

 Clear Function
Borra entradas de teclas
Cancela procesos iniciados de calibración y ajuste
Finaliza programa de aplicación

Concepto de manejo

Teclas de función (Softkeys)

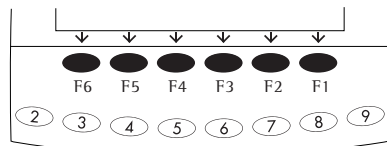
El significado de estas teclas se representa siempre en la línea inferior o nota al pie.

Pueden aparecer textos (abreviados) o símbolos.

Textos (ejemplos)

C a l: iniciar calibración/ajuste

I D - M: memorizar identificación



Las teclas de función se cuentan de derecha (F1) a izquierda (F6).

Símbolos

En la nota al pie pueden aparecer los siguientes símbolos:

- ↶ De vuelta al estado previo
(en Setup: abandonar Setup)
- Selección de un rango superior
- Indicar subítems del concepto activado
- ↶ Mover hacia arriba en la ventana de entrada/salida
- ↷ Mover hacia abajo en la ventana de entrada/salida
- ⬇ Selección del ajuste de parámetro preseleccionado

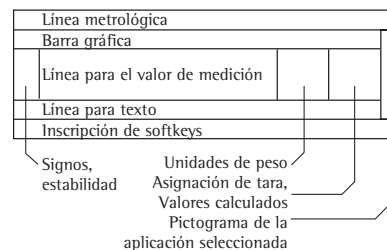
Fundamentalmente, existen dos tipos diferentes de indicación:

- para los valores de peso y valores de cálculo
- para los ajustes previos (Setup)

Manejo

Indicación de valores peso y cálculo

Esta indicación se subdivide en 9 campos.



Línea de datos metrológicos:

Al trabajar en metrología legal se indican aquí las siguientes magnitudes de la célula de pesada:

Max Límite superior del alcance

Min Límite inferior del alcance (sólo para los modelos verificados)

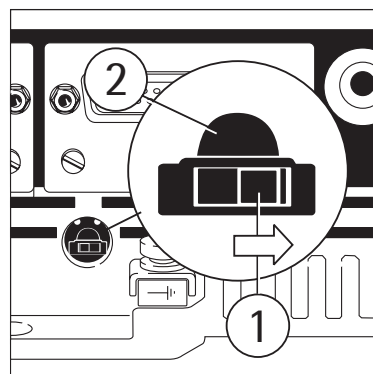
e Escalón de verificación (sólo en modelos verificados)

d Legibilidad/escalón real

En las balanzas estándares se indica sólo la magnitud **Max** y **d**.

Báscula para el uso en metrología legal

- Quitar la tapita protectora, en la parte trasera de la carcasa
- Deslizar el interruptor 1, en dirección de la flecha



Posición a la derecha del interruptor:
Metrología legal

Posición a la izquierda del interruptor:
Estándar/no apto para metrología legal

- Advertencia:
No activar el interruptor 2

Barra gráfica:

La barra gráfica indica, qué porcentaje del rango de pesada ha sido ya “cubierto” por el peso colocado y, con programa pesada de control activado, los límites correspondientes.

Pueden aparecer los siguientes símbolos:

0% Límite de carga inferior

100% Límite de carga superior

Barra gráfica con marcas de 10%

- Mínimo en pesada de control

= Valor nominal en pesada de control

+ Máximo en pesada de control

Signos, estabilidad:

Aquí aparece el signo (+ o -) para el valor de peso (o valor de cálculo, p. ej. conteo), o bien, el símbolo σ , cuando una balanza verificada* está puesta en cero o tarada.

Línea para valores de medición:

Aquí se representa el valor de peso, el valor de cálculo, así como también las entradas de cifras y letras.


Unidad de peso y estabilidad:

Aquí se indica, con estabilidad de la balanza, la unidad de peso, o bien, la unidad para el valor de cálculo.

Los valores identificados con σ no deben ser utilizados en las aplicaciones de metrología legal.

* = Escalón de verificación “e” = Legibilidad/escalón real “d”


Asignación de tara, valores calculados:
Aquí aparecen símbolos, si la memoria de tara está cubierta, o bien, si se imprimen valores de cálculo.


Pueden aparecer los siguientes símbolos:
 Valor de cálculo

NET1 Dato de valor neto/tara

NET2 memoria cubierta por una aplicación (p. ej. formulación, segunda memoria de tara)

Pictogramas de aplicaciones:
En este campo aparecen pictogramas de aplicaciones seleccionadas.
La aplicación activada se representa en forma inversa (letra en blanco sobre fondo negro).

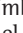

Pueden aparecer, p. ej. los siguientes símbolos al mismo tiempo:
 Aplicación activada "Conteo"

 Selección adicional: pesada de control

 Impresión

 Protocolo

Línea para texto:
En la línea para el texto aparecen datos de apoyo (p. ej. textos para guiar al usuario, identificación del programa activado, etc.)

Inscripción de Softkeys:
En esta línea aparecen identificaciones abreviadas para las teclas de flechas (Softkeys) ; también con calibración/ajuste los símbolos  y  para seleccionar el modo respectivo.

Indicación para ajustes previos (Setup)

Esta indicación está subdividida en 3 campos.

Línea de estado
Ventana entrada/salida
Inscripción de Softkeys


Línea de estado:
En la línea de estado aparece la función de la página indicada. En Setup aparece la "ruta" de las informaciones indicadas en esta línea

Ejemplo para Setup: parámetros de balanza:


SETUP	PARAM.	BAL.

Ventana entrada/salida
Aquí se representan informaciones en detalle (p. ej. sobre la aplicación seleccionada), o bien, listas de las que se puede seleccionar. Los conceptos seleccionados aparecen a la inversa (letra en blanco sobre fondo negro). También, en las áreas activadas, es posible realizar entradas de letras y cifras.

Ejemplo para Setup, parámetros de balanza, adaptación de filtro:



Muy tranquilo
 Tranquilo
Intranquilo
Muy intranquilo

Puede aparecer el siguiente símbolo en la ventana entrada/salida:

 Con este símbolo se identifica el ajuste memorizado

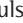

Inscripción de Softkeys:
Ver en la descripción "Teclas de función (Softkeys)", en la página anterior






Ajustar parámetro:

- Pulsar Softkey  o  , en caso dado, repetidamente, hasta que el ajuste de parámetro esté seleccionado (representación inversa)


- Confirmar parámetro: pulsar Softkey 

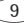Modificar el valor de un parámetro:

- Pulsar Softkey  o  , en caso dado, repetidamente, hasta que el parámetro esté seleccionado (representación inversa)

- Entrar nuevo valor: pulsar teclas   ...   o bien, tecla  y entrar más letras

- Confirmar parámetro: pulsar Softkey 

Abandonar Setup: pulsar Softkey 

Entrada



Entrada con lector código de barras o mediante un teclado

Con un lector código de barras o un teclado pueden entrarse valores alfanuméricos. Estas entradas se tratan igual que las entradas por teclas. El contenido del código de barras o de las entradas de teclado aparece sólo en la indicación; no se activa función alguna.

El usuario decide con Softkey siguiente, qué función ha de ser activada:

- Lote
- Muestra
- Valor de medición
- Número de muestra
- Valor tara
- Valor peso inicial
- Valor peso final
- Identificación de muestra

Entrada a través de interruptor de pedal, interruptor manual

En la balanza puede conectarse un interruptor de pedal o manual, que asuma la función de una tecla (p. ej. tecla , tecla ).

Entrada a través de PC

Con un ordenador pueden controlarse, vía comunicación serial, funciones de la célula de pesada y de la unidad de indicación/manejo de la balanza (ver en "Interfaces de datos").

Salida

Para la salida de valores de medición, valores calculados y ajustes de parámetros existen dos interfaces de datos:

- Comunicación serial (interfaz) (PERIPHERALS-Serial I/O)
- Impresora serial (interfaz) (PRINTER-Serial Out)


Impresora serial

En la interfaz de impresora, para la salida de datos, pueden conectarse también, además de impresoras Sartorius (p. ej. YD003-OCE), un indicador de control externo.

La salida de datos en una impresora puede ser adaptada por el usuario –mediante ajustes en Setup– a sus propios requerimientos, así como también, según los requerimientos ISO/GLP

ISO: International Organization for Standardization

GLP: Good Laboratory Practice

Las impresiones pueden realizarse mediante pulsión de la tecla , o bien, automáticamente. Pueden ser dependientes del estado de ejecución (p. ej. de las condiciones de estabilidad y definiciones de tiempo). Una descripción detallada se entrega en "Interfaces de datos".

Comunicación serial

En la interfaz de comunicación pueden conectarse, para la salida de datos (no aceptable para la verificación) un PC, un indicador de control externo, o bien, una impresora.

En metrología legal han de observarse los requerimientos de instalación adicional respectiva.

Vía interfaz se transmiten telegramas, que activan funciones de la célula de pesada y de la unidad de indicación/manejo. Algunas funciones producen telegramas respuesta.

Una descripción en detalles se entrega en "Interfaces de datos".

Mensajes de error

Activaciones de teclas que no causan efectos o no están accesibles, se indican de la siguiente manera:

- Doble tono como información acústica, cuando la tecla no tiene asignación de función
- Doble tono y el mensaje "Ninguna función" en la línea para texto, significa que la tecla de momento no tiene función

Este tratamiento de error es igual en todos los modos de funcionamiento. Una descripción detallada se entrega en "Mensajes de error".

Aseguramiento

Memorizar ajustes de parámetros

El ajuste de parámetro no se pierde al apagar la balanza. Adicionalmente, puede cargarse nuevamente un ajuste de fábrica.

Asegurar ajustes

Con una clave en Setup:
Parámetros usuario: con clave de acceso puede bloquearse el acceso a:

- Parámetros de balanza
- Parámetros del aparato
- Parámetros de aplicación
- Impresión
- Ajuste de fábrica

Puesta en funcionamiento

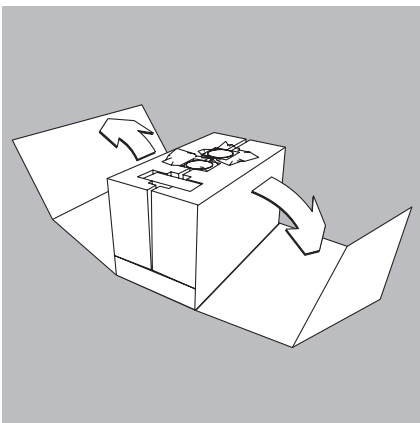
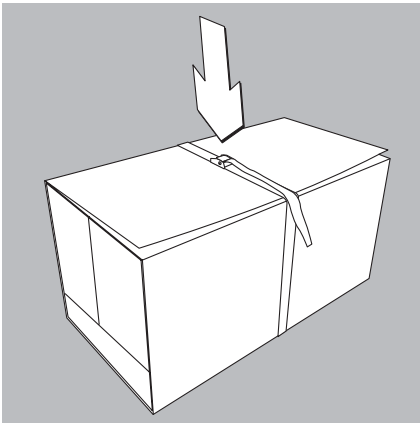
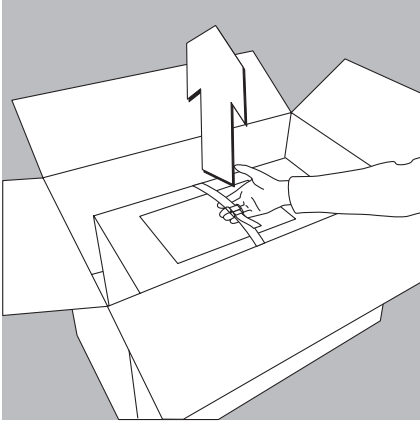
Condiciones de transporte y almacenamiento

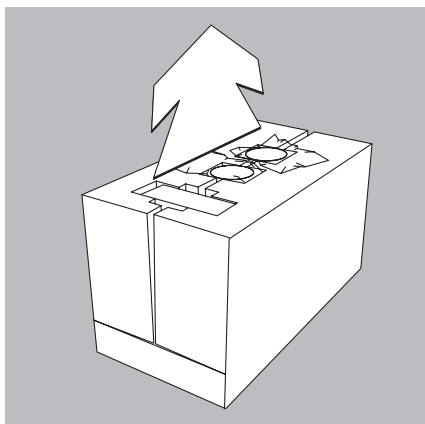
Temperatura de almacenamiento permisible: +5 ...+40 °C

El embalaje del aparato está concebido de tal manera que, en el caso de caer éste desde una altura de 80 centímetros lo resistirá sin daño alguno. No exponer el aparato a temperaturas extremas, choques, vibraciones y humedad.


Desembalaje de la balanza

- Levantar el cartón interno con la balanza asiendo de la cinta de soporte del cartón de embalaje
- Soltar la cinta de soporte.
- Retirar el cartón protector.






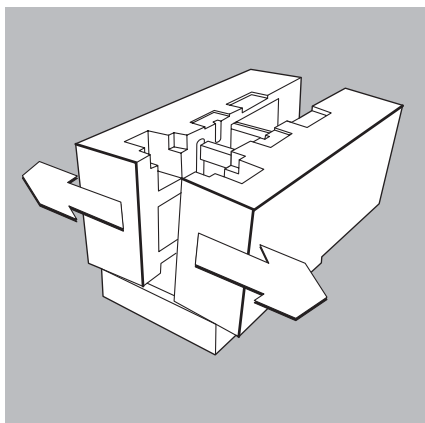
- Sacar las siguientes componentes de las cavidades del cartón interior:
 - Cartón con alimentador
 - Platillo de pesada
 - Placa apantalladora



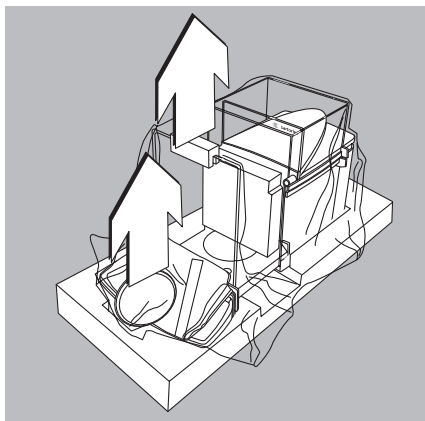
- Sacar el relleno de embalaje lateral del embalaje interior.



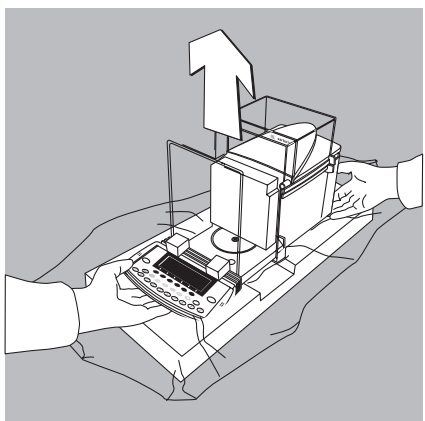
- Retirar el anillo apantallador (sólo con ME235S/P) y la cubierta protectora de polvo.
- Quitar la pieza de sujeción del protector contra corrientes de aire.
- Abrir el plástico protector.



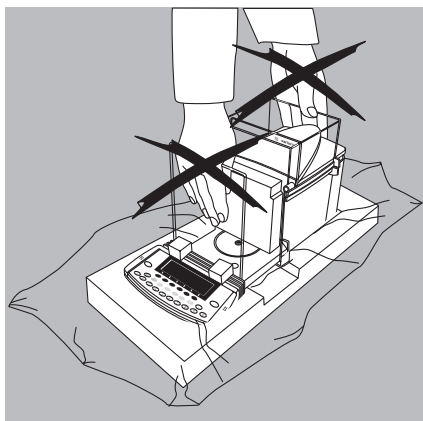- Sujetar la balanza delante por debajo la unidad de indicación/manejo, asir atrás por debajo de la carcasa de la balanza y levantarla del relleno de embalaje inferior.



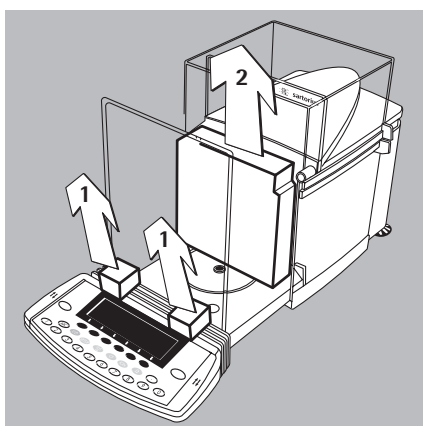¡No levantar la balanza asiéndola del protector contra corrientes de aire o de la placa frontal, esto puede causar daños!



Colocar la balanza en el lugar de instalación



Abrir las puertas del protector contra corrientes de aire



Retirar las piezas de apriete 1 del soporte de la unidad de indicación y del protector contra corrientes de aire anterior



Quitar el relleno frontal interior 2 (parte de espuma) del protector contra corrientes de aire



Conservar todas las piezas del embalaje para el caso de un envío eventual y necesario, puesto que sólo el embalaje original garantiza un transporte seguro (ver párrafo Transporte página 20).

Antes del envío, separar todos los cables conectados, para evitar daños innecesarios.

Suministro

Se suministran los siguientes componentes:

ME215/235/254/414/614

- Balanza
- Adaptador de CA con cable de conexión
- Plato de pesada con gancho para pesar por debajo de la balanza
- Soporte de plato, apantallador
- Cubierta protectora para la carcasa de la balanza
- Cubierta protectora para la unidad de indicación/manejo
- Instrucciones de funcionamiento

ME5, SE2

- Célula de carga
- Protector contra corrientes de aire
- Unidad electrónica de evaluación
- Cable de conexión
- Alimentador con cable conector
- Maletín de accesorios

En el maletín de accesorios se encuentran:

- Platillo de pesada
- Placa apantalladora
- Protector contra corrientes de aire interno (sólo en SE2)
- Pincel
- Pinza
- Paño

ME36S


- Unidad de pesaje
- Unidad electrónica de evaluación
- Alimentador con cable conector
- Platillo de pesada
- Placa apantalladora
- Cubierta protectora para la carcasa de la unidad de pesaje

ME5-F, SE2-F

- Célula de carga
- Tapa de protector contra corrientes de aire
- Anillo apantallador
- Unidad electrónica de evaluación
- Cable de conexión
- Alimentador con cable conector
- Maletín de accesorios

En el maletín de accesorios se encuentran:

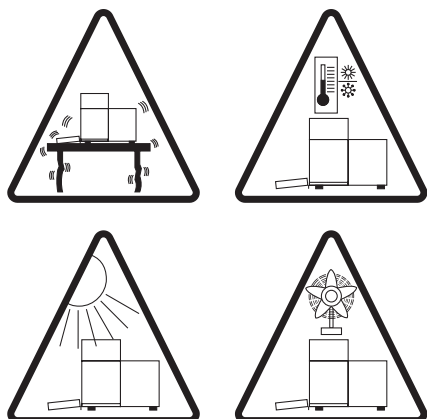- Platillo para filtros Ø 50 mm
- Platillo de pesada
- Placa apantalladora
- Protector contra corrientes de aire interno (sólo en SE2-F)
- Pincel
- Pinza
- Paño



Advertencias de instalación

La balanza está construida de manera tal que, bajo las condiciones de funcionamiento normales de empleo en el laboratorio, arrojará resultados fiables de medición. La balanza trabaja con exactitud y rapidez si se ha elegido el lugar adecuado de instalación:

- Colocar la balanza sobre una mesa de pesaje estable, sin vibraciones, o bien, en una consola de pared
- Evitar el calor extremo no colocando la balanza cerca de calefactores o exponiéndola a la radiación solar. Esta influencia de calor puede conducir a una elevación ostensible de la temperatura en la cámara de pesada y causar mediciones erróneas, debido a corrientes de convección, turbulencias y efectos de empuje del aire.
- Proteger la balanza contra las corrientes de aire directas (ventanas y puertas abiertas, ventiladores)
- Evitar variaciones esporádicas de la temperatura ambiente
- Proteger la balanza contra emanaciones químicas agresivas
- Evitar humedades extremas

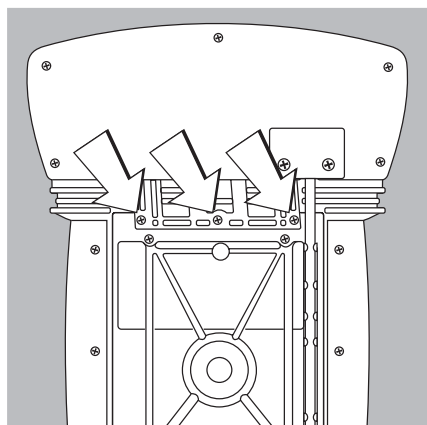
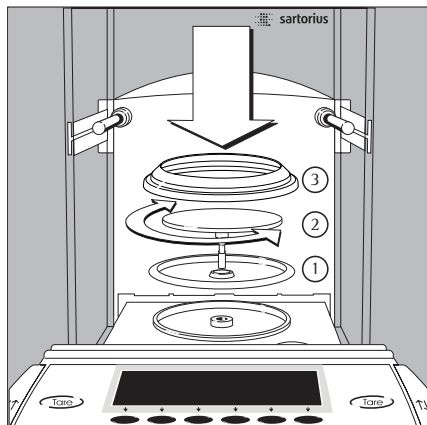
Linealizar después del transporte

Después de un transporte, la linealización de la balanza puede estar fuera de la tolerancia permitida (ver en "Datos técnicos"). Por tal razón, hay que linealizar (internamente) el aparato después de cada transporte. Con la repetición de este proceso puede alcanzarse un mejoramiento adicional. Para el desarrollo del procedimiento, ver en "Linealización".

Aclimatar la balanza

Una condensación de la humedad del aire puede producirse en el aparato que está frío, si es instalado en un ambiente con mayor temperatura. Por tal razón, hay que aclimatar el aparato a la temperatura ambiente, aproximadamente por 2 horas, manteniéndolo separado de la tensión de red. Luego, hay que dejar el aparato conectado a la red; debido a la diferencia de temperatura positiva permanente entre el interior del aparato y el ambiente se descarta casi por completo la influencia de humedad.

ME215/235/254/414/614:




Instalar la balanza modelos ME215/235/254/414/614

- Montar los componentes en la cámara de pesada, en el siguiente orden:
 - 1) Placa apantalladora
 - 2) Colocar plato de carga y girarlo a izquierda y derecha, hasta que encaje
 - 3) Anillo de blindaje (sólo en ME235S/P)
- **Advertencia:** el anillo de blindaje minimiza las influencias de las corr. de aire en la cámara de pesaje

Uso separado de la unidad de indicación/manejo


- Volcar la balanza hacia atrás, sacando previamente los conectores, apoyándola sobre una superficie suave para no dañar el sistema de medición y el protector contra corrientes de aire
- Aflojar los tres tornillos de sujeción del soporte de indicador, con llave hexagonal apropiada
- Retirar la unidad de indicación/manejo
- > Longitud de cable de conexión: 44 cm
- Para cable de conexión de mayor longitud: ver en "Accesorios"
- Montaje de cable de mayor longitud a realizar sólo por personal de servicio técnico Sartorius

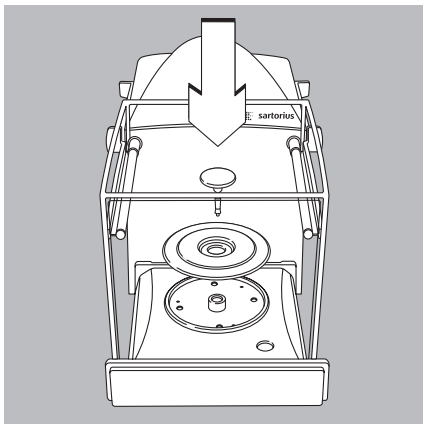ME36S:




- **Instalar balanza, modelo ME36S**
Montar los componentes en el orden siguiente:
 - Placa apantalladora
 - Platillo de pesada

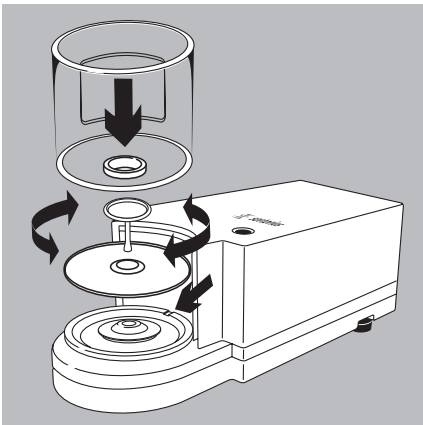ME5, SE2:



- **Instalar balanza, modelos ME5, SE2**
Montar los componentes en el orden siguiente:
 - Placa apantalladora
 - Platillo de pesada
Advertencia: colocado el platillo de pesada, girarlo un poco hacia la izquierda y hacia la derecha – y al mismo tiempo – presionarlo levemente hacia abajo.
 - Protector contra corrientes de aire interno (sólo en SE2)
 - Protector contra corrientes de aire: alineando la abertura sobre el pasador (ver flecha indicando hacia abajo)

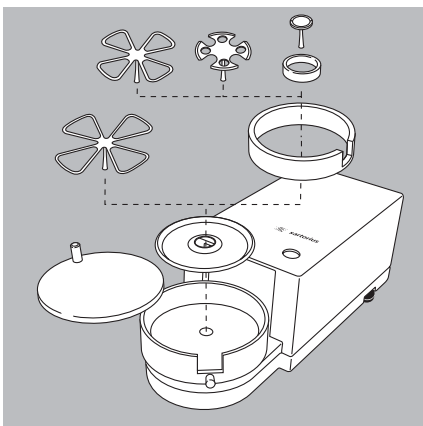


- **Instalar balanza, modelos ME5-F, SE2-F**
Montar los componentes en el orden siguiente:
 - Placa apantalladora
 - Protector contra corrientes de aire interno
 - Platillo para filtros 50 mm diám., o bien, platillo de pesada (platillos de filtro opcionales 75 /90 mm diám.)
Advertencia: colocado el platillo de pesada, girarlo un poco hacia la izquierda y hacia la derecha y – al mismo tiempo – presionarlo levemente hacia abajo.


⚠ Consejo: Después de cambiar platillo de pesada, apagar y volver a encender la balanza durante el funcionamiento

- Protector contra corrientes de aire interno (sólo en SE2)
- Tapa del protector


Poner en marcha balanza pesa-filtros para zurdos:

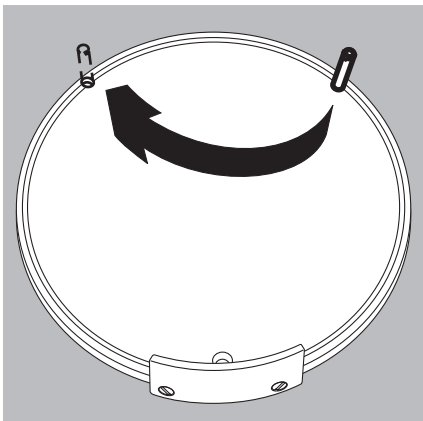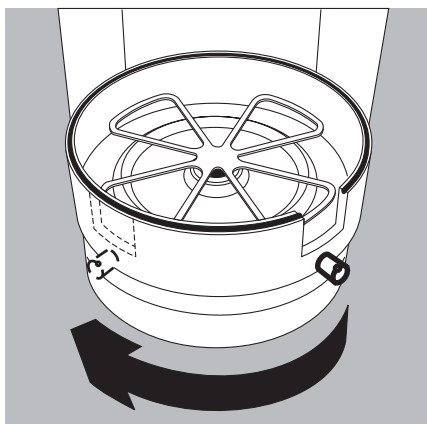- Quitar la tapa del protector contra corrientes de aire
- Desatornillar el pasador, y ponerlo a la izquierda






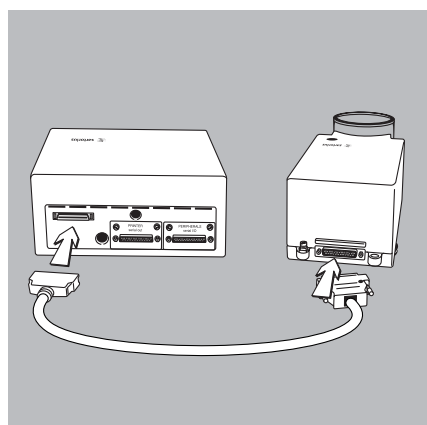- Girar el protector contra corrientes de aire hacia la izquierda, en 90° aprox..
(aflojar tornillo ranurado)



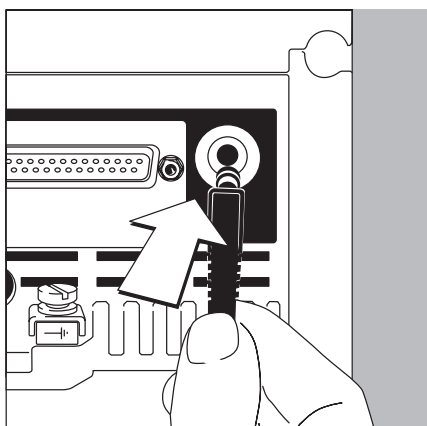
- Unir célula de carga con la unidad de indicación/manejo
 - Apretar los tornillos (con atornillador) en la hembrilla conectora de la célula de carga



Conexión a la red

El adaptador de CA con el rango más amplio es apropiado para tensiones de red entre 100 V y 240 V.

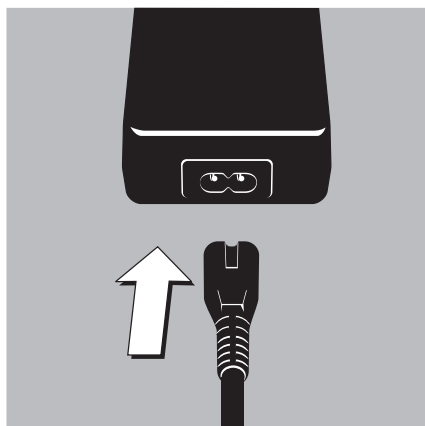- Controlar el diseño de enchufe del conector de red
 - Si no es apropiado para el tomacorriente de pared: comunicar al suministrador
- Utilizar sólo
 - Adaptadores de CA y conectores de red originales
 - Adaptadores de CA autorizados por un especialista
- Suministro de corriente desde el cielo raso o el montaje eventual de un conector CEE ha de ser realizado por un especialista y por cuenta de la misma empresa
- Para equipo externo de baterías, ver en “Accesorios”
- Insertar el enchufe del adaptador de CA en la balanza, con el ángulo hacia abajo





- Conector de red con adaptador de CA
- Alimentar balanza con tensión de red:
Enchufar el conector de red al tomacorriente de pared

Equipo de baterías para la memorización de datos:

El almacenamiento de datos se realiza en una memoria intermedia, que funciona por baterías. Al poner en marcha el aparato la primera vez, dejarlo conectado a la red un día completo. Al separar la balanza de la red los datos registrados permanecen aprox. tres meses en memoria. En el modo Standby los datos se mantienen por alimentación de red. En caso de almacenamientos más largos es aconsejable imprimir los datos de protocolo.

Medidas de protección

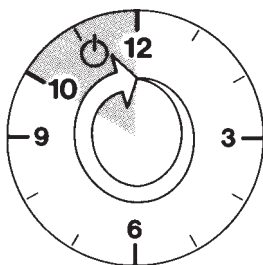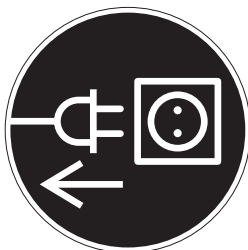El adaptador de CA, clase de protección 2, puede ser enchufado en cualquier tomacorriente de pared sin tomar medidas especiales de protección. La tensión de salida está conectada mediante un polo con la carcasa de la balanza. La carcasa de balanza ha de ser puesta a tierra, por motivos de función. También la interfaz de datos está conectada galvánicamente con la carcasa de la balanza (masa).



Conexión de componentes electrónicos (periféricos)

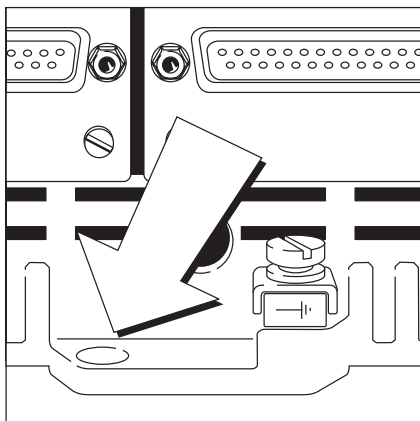
- Antes de conectar o separar dispositivos adicionales (impresora, PC) a/de la interfaz de datos, es necesario separar la balanza de la tensión de red.

Calentamiento previo

Después de un cambio de lugar hay que aclimatar la balanza, aprox. 12 horas, en el nuevo lugar de instalación. Para que la balanza entregue resultados exactos necesita, por lo menos, un tiempo de calentamiento previo de 12 horas, después de conectarla a la red; recién entonces, la balanza ha alcanzado la temperatura necesaria para el funcionamiento.

Empleo de balanzas verificadas en metrología legal:


- Observar un tiempo de calentamiento previo, mínimo 24 horas, después de conectar a la red.
- Tiempo calentamiento previo, mínimo 30 minutos, cada vez que se encienda la balanza: modelos ME614S-OCE, ME414S-OCE:
- Esperar siempre ajuste de conexión: condiciones, ver pág. 63



Seguro antirrobo

Como seguro antirrobo, utilizar el dispositivo de sujeción en la parte trasera de la balanza.

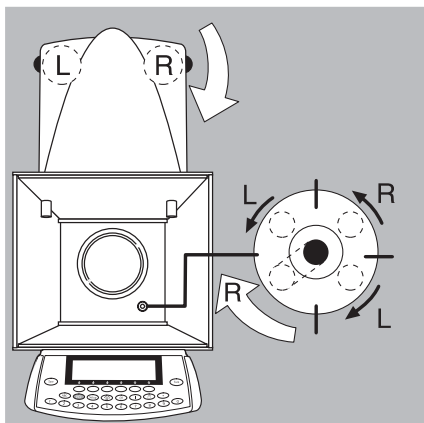- Fijar la balanza en el lugar de instalación, p. ej. con una cadena o un candado.



Nivelar la balanza

Objeto:

- Compensación de irregularidades del lugar de instalación de la balanza
- Posición horizontal exacta de la balanza, para obtener en todo momento resultados de pesada reproducibles

Nivelar la balanza siempre después de cambios de lugar de instalación.

La nivelación se realiza sólo con ambas patas de regulación traseras.

- Girar los tornillos de regulación como se indica en la ilustración, hasta que la burbuja de aire esté en el centro del círculo.
- > Por lo general, se requieren algunos pasos más para la nivelación.

Ajustar lengua

- > Ver en “Ajustar lengua”

Ajustar hora y fecha

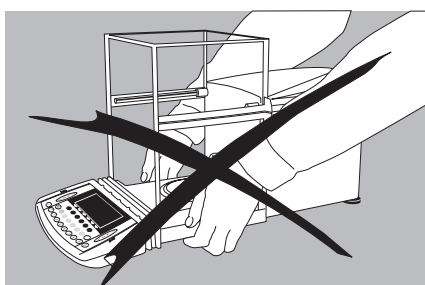
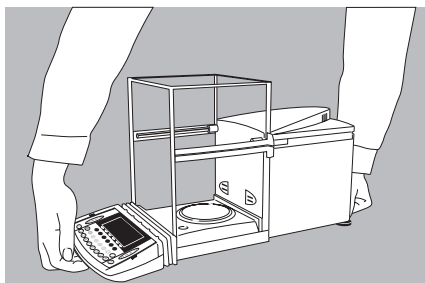
- > Ver en ej. en pág. 25

Transporte de la balanza

- ¡Desenchufar siempre la balanza (dejarla sin tensión)! Sacar el alimentador y todos los cables de interfaz de la balanza.

Transporte sobre distancias cortas

- Asir la balanza delante por debajo la unidad de indicación/manejo y atrás por debajo de la carcasa. Levantar cuidadosamente la balanza y llevarla a su nuevo lugar de instalación.
- ¡Evitar sacudidas y golpes!





¡No levantar la balanza asiéndola del protector contra corrientes de aire o de la placa frontal, esto puede causar daños!

Envío o transporte sobre grandes distancias


Usar siempre el embalaje original completo:

- cuando la balanza deba transportarse o enviarse sobre largas distancias.
- si no está asegurado un transporte horizontal.

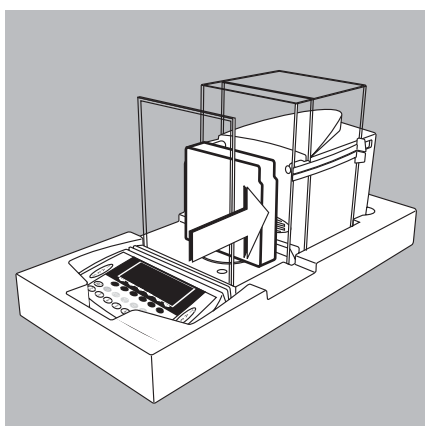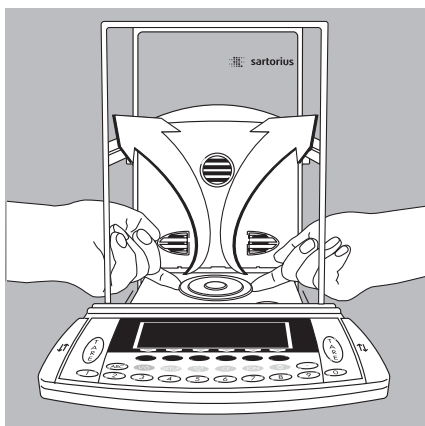
- Desmontar las siguientes partes:
 - Anillo protector (sólo con ME235S/P)
 - Platillo de pesada y placa apantalladora:
Asir por debajo de la placa apantalladora y junto con el platillo de pesada tirar hacia arriba para no dañar el sistema de pesaje.



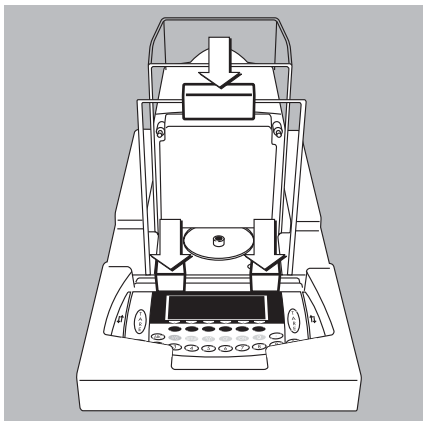
- Abrir las puertas del protector contra corrientes de aire y colocar la balanza cuidadosamente en el relleno de embalaje inferior.
- Deslizar el relleno frontal interior contra la carcasa.



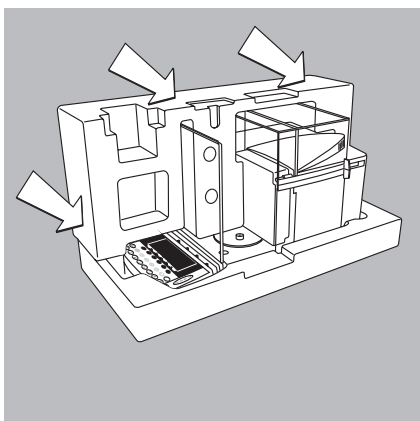
- Colocar las piezas de apriete en la placa protectora de corrientes de aire anterior y en el soporte de la unidad de indicación.
- Colocar la cubierta protectora de polvo
- Sólo con la balanza ME235S/P: colocar el anillo protector en una bolsa y colocarlo sobre la cubierta protectora de polvo.



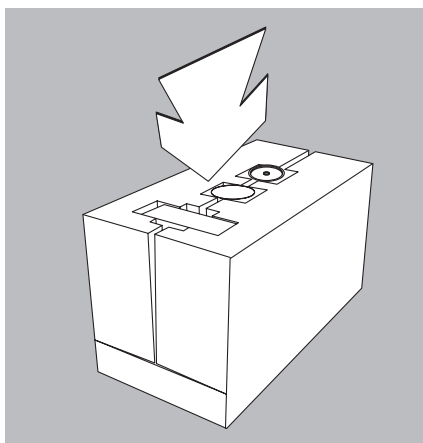
- Deslizar los rellenos de embalaje laterales sobre la balanza.



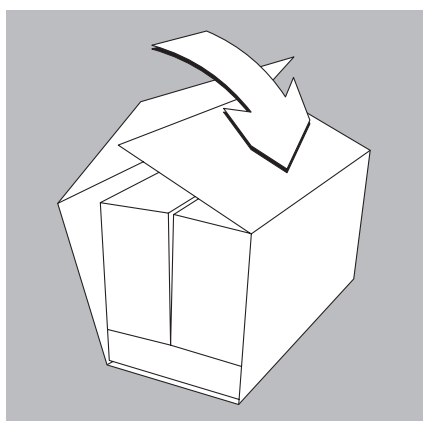
- Colocar las siguientes piezas en las cavidades:
 - Placa apantalladota
 - Platillo de pesada
 - Embalaje con alimentador



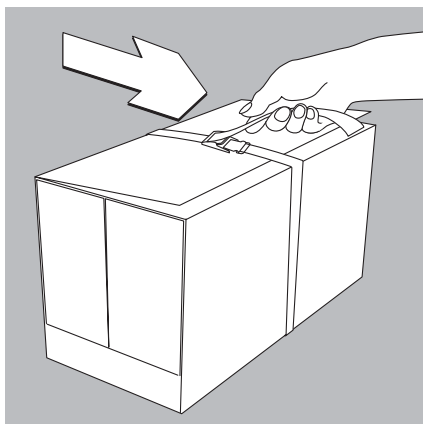- Envolver el embalaje interno con el cartón protector.



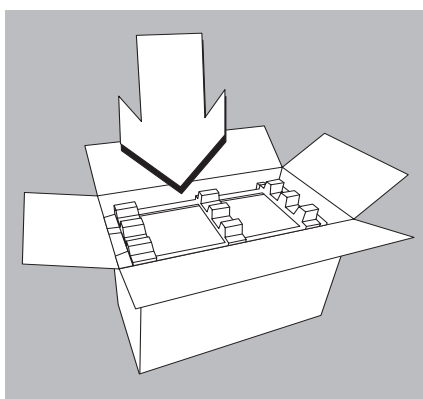- Colocar la cinta de soporte alrededor del cartón protector y tirarla hasta que quede tirante.
- Levantar la balanza embalada de la cinta de soporte y colocarla sobre el relleno de embalaje inferior en el cartón de embalaje.



- Colocar el relleno de embalaje superior.
- Cerrar adecuadamente el cartón de embalaje exterior.

Ajustes previos

Objeto

La balanza puede ser adaptada en Setup a los requerimientos del usuario. Para esto pueden entrarse datos de usuario y seleccionarse parámetros predefinidos de un menú.

Setup está compuesto de los siguientes ítems:


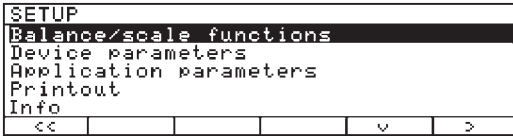









- Parámetros de balanza
- Parámetros del aparato
- Parámetros de aplicación
- Impresión
- Info datos del aparato
- Lengua
- Ajustes de fábrica

Ajustar lengua

Para la representación de informaciones existen 5 lenguas a disposición:


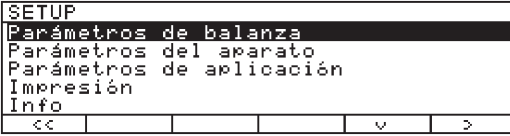

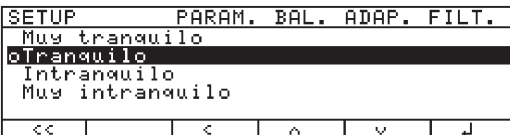
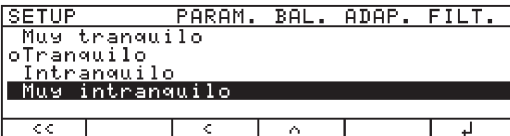

- Alemán
- Inglés (ajuste de fábrica)
- Inglés con fecha/hora EE.UU.
- Francés
- Italiano
- Español

Ejemplo: seleccionar lengua "Español"

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. seleccionar ajustes previos		
2. seleccionar lengua (Language) y confirmar	repetidam. Softkey  , Softkey 	
3. seleccionar lengua -español-	Softkey 	
4. memorizar lengua	Softkey 	
5. Setup abandonar	Softkey 	


Navegar en Setup (ejemplos)

Ejemplo: Seleccionar adaptación al lugar de instalación “Intranquilo”

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. seleccionar ajustes previos		
2. confirmar parámetro de balanza	Softkey ➤	
3. seleccionar ítem de menú “Adaptación de filtro” y confirmar	Softkey ▼, después Softkey ➤	
4. seleccionar ítem menú “muy intranquilo”	Softkey ▼	
5. confirmar ítem menú “muy intranquilo”	Softkey ⏴	
6. en caso dado, ajustar otros ítems	Softkey ▼ ▲	
7. memorizar ajuste y abandonar ajustes previos	Softkey <<	

Abandonar ajustes previos

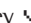

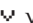
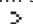






Con softkey <<:

- ajuste modificado con reinicio-software
- ajuste no modificado sin reinicio-software; el programa retorna al estado previo antes de activar la tecla .

Con tecla .

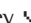- abandonar ajuste previo en general reinicio-software.

Ejemplo: Ajustar hora y fecha

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida																						
1. seleccionar ajustes previos, seleccionar parám. aparato	<u>Setup</u> , después Softkey  y Softkey 	<table><tr><td>SETUP</td><td colspan="2">APARATO</td></tr><tr><td colspan="3">Protector</td></tr><tr><td colspan="3">Ionizador*</td></tr><tr><td colspan="3">Clave</td></tr><tr><td colspan="3">ID usuario</td></tr><tr><td colspan="3">Reloj</td></tr><tr><td><<</td><td><</td><td>v ></td></tr></table>	SETUP	APARATO		Protector			Ionizador*			Clave			ID usuario			Reloj			<<	<	v >	
SETUP	APARATO																							
Protector																								
Ionizador*																								
Clave																								
ID usuario																								
Reloj																								
<<	<	v >																						
2. seleccionar hora	repetidam Softkey  y Softkey 	<table><tr><td>SETUP</td><td>APARATO</td><td>RELOJ</td></tr><tr><td>Hora:</td><td></td><td>10.51.18</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td></td><td>12.09.97</td></tr><tr><td><<</td><td><</td><td>v ></td></tr></table>	SETUP	APARATO	RELOJ	Hora:		10.51.18	Fecha:		12.09.97	<<	<	v >										
SETUP	APARATO	RELOJ																						
Hora:		10.51.18																						
Fecha:		12.09.97																						
<<	<	v >																						
3. entrar hora	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>.</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>.</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	1	1	.	1	2	.	3	0			<table><tr><td>SETUP</td><td>APARATO</td><td>RELOJ</td></tr><tr><td>Hora:</td><td></td><td>11.12.30</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td></td><td>12.09.97</td></tr><tr><td>ESC</td><td></td><td>↓</td></tr></table>	SETUP	APARATO	RELOJ	Hora:		11.12.30	Fecha:		12.09.97	ESC		↓
1	1	.	1	2																				
.	3	0																						
SETUP	APARATO	RELOJ																						
Hora:		11.12.30																						
Fecha:		12.09.97																						
ESC		↓																						
4. ajustar definición de tiempo síncrona al reloj real	Softkey 	<table><tr><td>SETUP</td><td>APARATO</td><td>RELOJ</td></tr><tr><td>Hora:</td><td></td><td>11.13.36</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td></td><td>13.03.00</td></tr><tr><td><<</td><td><</td><td>^ ></td></tr></table>	SETUP	APARATO	RELOJ	Hora:		11.13.36	Fecha:		13.03.00	<<	<	^ >										
SETUP	APARATO	RELOJ																						
Hora:		11.13.36																						
Fecha:		13.03.00																						
<<	<	^ >																						
5. entrar fecha	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	1	3	.	0	3	.	0	0															
1	3	.	0	3																				
.	0	0																						
6. memorizar fecha	Softkey 																							
7. en caso dado, entrar más datos	Softkey  																							
8. abandonar Setup	Softkey  																							

* excepto en los modelos ME36S, ME5, SE2

Ajustar parámetros de balanza (PARAM. BAL.)

Objeto

Configurar los parámetros de la balanza es adaptarla a los requerimientos del usuario mediante selección de parámetros ya definidos de un menú. El acceso al menú puede asegurarse con una clave.

Características

Los parámetros de la balanza se resumen en los siguientes grupos (1. nivel de menú):

- Calibración/ajuste
- Adaptación de filtro
- Aplicación de filtro
- Rango de estabilidad
- Tara
- Auto-cero
- Unidad de peso 1
- Exactitud de indicación 1
- Función conexión tara/cero
- Ajuste fábr.: sólo parám. de balanza

En metrología legal, la selección de los parámetros individuales está limitada.

Ajustes de fábrica

Parámetros: los ajustes de fábrica se listan a partir de la página 27 y se identifican mediante "o".

Preparación

Indicar parámetros de balanza existentes:

- Seleccionar ajustes previos:
Pulsar tecla **Setup**

> Aparece SETUP

SETUP					
Parámetros de balanza					
Parámetros del aparato					
Parámetros de aplicación					
Impresión					
Info					
<<					>>

- Seleccionar parámetros de balanza:
Softkey ➤

Si ya se ha entrado una clave:

- > Se requiere la entrada de clave
- Cuando el acceso está asegurado con clave: entrar clave mediante teclas alfanuméricas
- Cuando la clave tiene una letra como último carácter: finalizar la entrada de letras con la tecla **ABC**
- Confirmar clave e indicar parámetros de balanza: Pulsar Softkey ⬇
- > En la indicación aparecen parámetros de balanza:

SETUP	PARAM. BAL.				
Calibración/ajuste					
Adaptación de filtro					
Aplicación de filtro					
Rango de estabilidad					
Tara					
<<					>>

- Seleccionar el grupo siguiente:
Pulsar Softkey ⬇ (cursor hacia abajo)
- Seleccionar el ítem anterior de un grupo: pulsar Softkey ⬆ (cursor hacia arriba)
- Seleccionar el subítem siguiente dentro de un grupo: Pulsar Softkey ➤ (cursor hacia la derecha)
- Seleccionar grupo anterior:
Pulsar Softkey ⬅ (cursor hacia la izquierda)
- Confirmar ítems de menú seleccionados:
pulsar Softkey ⬇

Otras funciones

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey ⬅
- > Reinicio de aplicación
- Imprimir ajustes de parámetros
 - Al indicarse parámetros de balanza: Pulsar tecla **Print**
- > Impresión (ejemplo)
Textos con más de 20 caracteres se interrumpen

SETUP

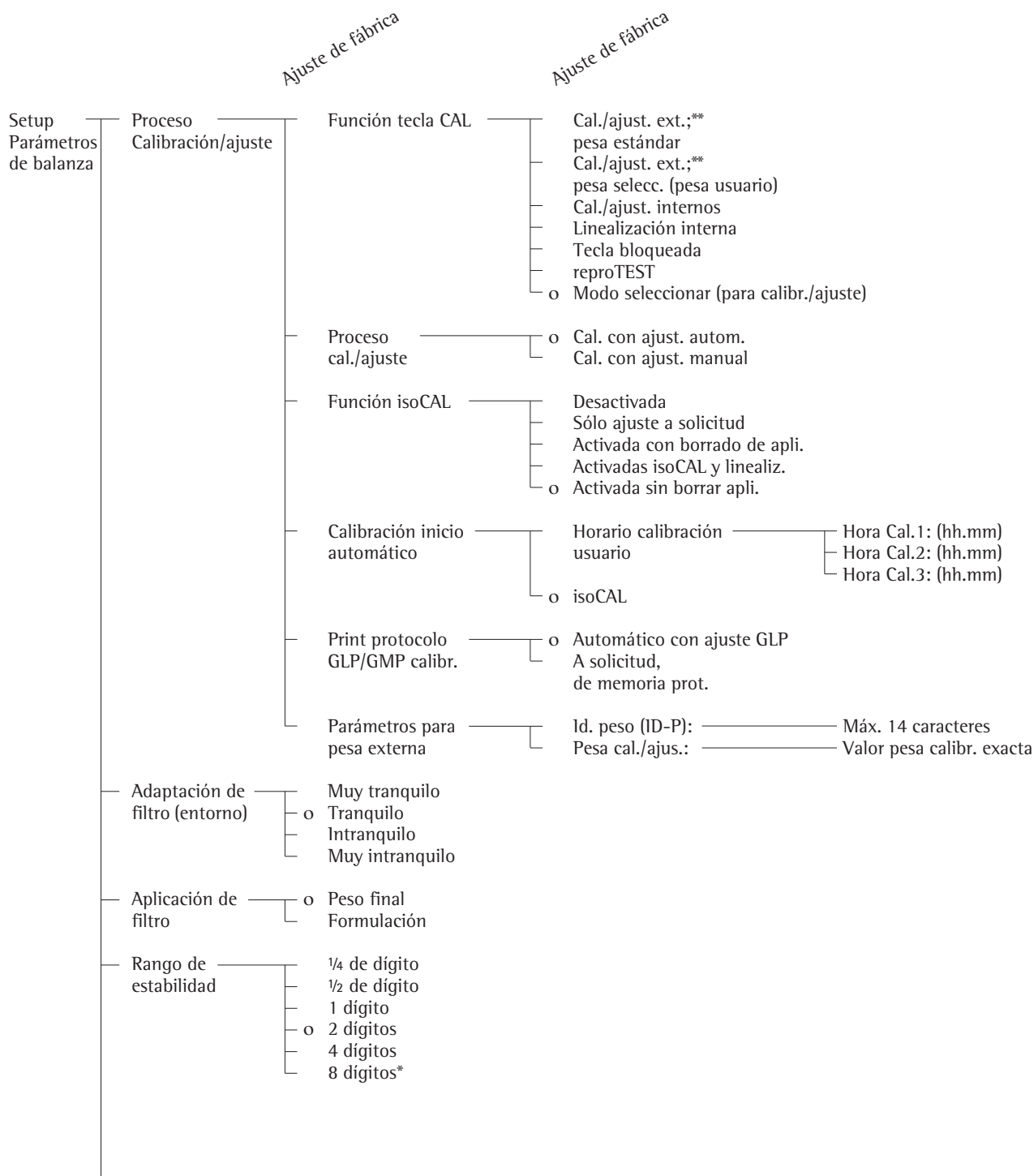
PARAM. BAL.

```
-----
CALIBRACION/AJUSTE
FUNCION TECLA CAL/
MODO SELECCIONAR
PROCESO CAL./AJUST
CAL. CON AJUST. AUTO
M.
FUNCION ISOCAL
ACTIVADA SIN BORRAR
APLI.
CALIBRACION INICIO
ISOCAL
PRINT PROTOCOLO GL
AUTOMATICO CON AJUST
E GLP
PARAMETROS PARA PE
ID. PESO(ID-P.):

PESA CAL./AJUS.:
200.00000 g
ADAPTACION DE FILTR
TRANQUILO
APLICACION DE FILTR
PESO FINAL
RANGO DE ESTABILIDA
2 DIGITOS
TARA
DESPUES DE ESTABILID
AD
AUTO-CERO
DESACTIVADA
UNIDAD DE PESO 1
GRAMOS /G
etc
```


Parámetros de balanza (Sinopsis)

- o Ajuste de fábrica
- ✓ Ajuste de usuario



* = no existe modificación de ajuste en balanzas verificadas

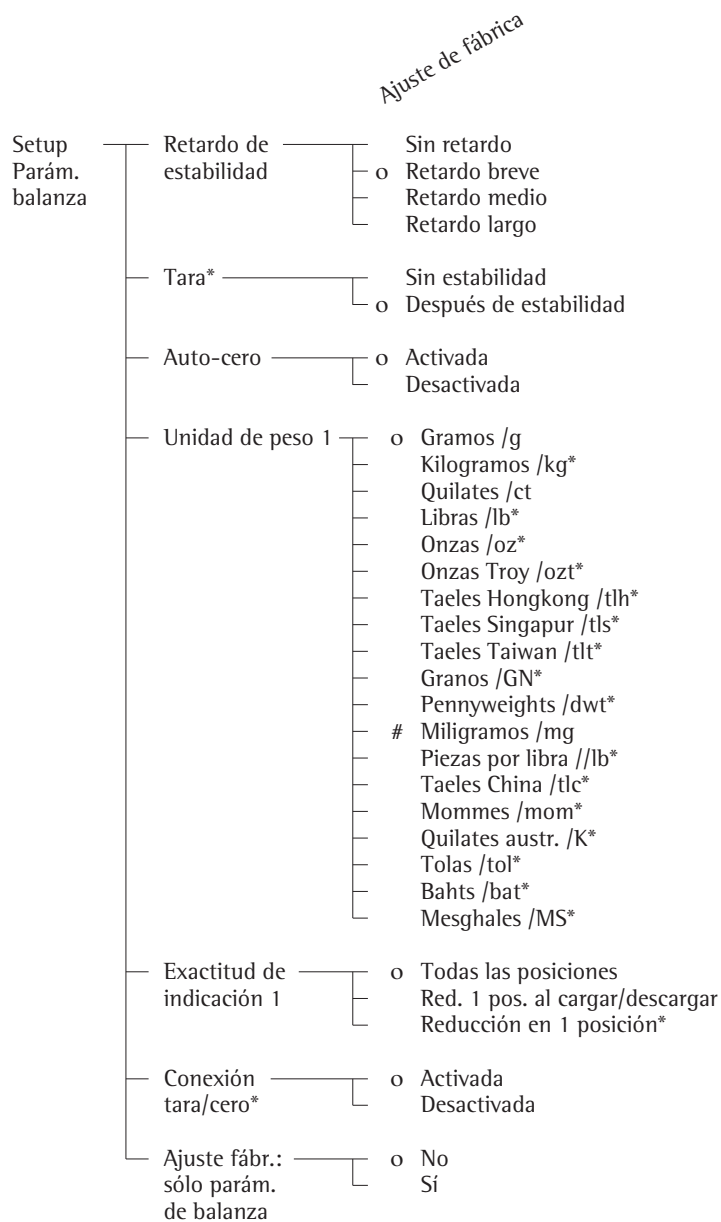** = en balanzas verificadas posible sólo la calibración externa



* = no existe modificación de ajuste en balanzas verificadas
 # = ajuste de fábrica en ME36S, ME5, SE2

Ajustar parámetros del aparato (APARATO)

Objeto

Configurar el aparato es adaptarlo a los requerimientos del usuario, mediante selección de parámetros predefinidos de un menú. El acceso al menú puede asegurarse con clave.

Características

Los parámetros del aparato están resumidos en los siguientes grupos (1. nivel de menú):

- Protector (contra corrientes de aire)
- Ionizador*
- Clave (de acceso)
- ID usuario
- Reloj
- Interfaz
- Pantalla
- Teclas
- Funciones extras
- Ajuste de fábr.: sólo parám. aparato

Ajuste de fábrica

Parámetro: los ajustes de fábrica se listan a partir de la página 31 y se identifican mediante "o".

Preparación

Indicar parámetros del aparato existentes

- Seleccionar ajustes previos:
Pulsar tecla **Setup**

> Aparece SETUP:

SETUP					
Parámetros de balanza					
Parámetros del aparato					
Parámetros de aplicación					
Impresión					
Info					
<<				v	>

- Seleccionar parámetros del aparato:
Softkeys **v** y **>**

En tanto no se haya entrado clave, el acceso a SETUP – parámetros del aparato se encuentra accesible, sin clave

Si ya se ha entrado una clave:

> Aparece el requerimiento para entrar clave

- Cuando el acceso está asegurado con clave: entrar la clave de acceso mediante teclas alfanuméricas

- Si la clave de acceso tiene una letra como último carácter:
finalizar la entrada de letras con la tecla **ABC**

- Confirmar clave e indicar parámetros del aparato: Pulsar Softkey **↓**

> Aparecen parámetros del aparato en la indicación:

SETUP APARATO					
Protector					
Ionizador*					
Clave					
ID usuario					
Reloj					
<<		<		v	>

Seleccionar el grupo siguiente:
Pulsar Softkey **v** (cursor hacia abajo)

- Seleccionar ítem anterior de un grupo:
pulsar Softkey **^** (cursor hacia arriba)
- Seleccionar subítem siguiente dentro de un grupo: Pulsar Softkey **>** (cursor hacia la derecha)
- Seleccionar grupo anterior: Pulsar Softkey **<** (cursor hacia la izquierda)
- Confirmar ítem de menú requerido:
pulsar Softkey **↓**

Entrar o modificar clave de acceso

- Entrar clave para acceder a SETUP – parámetros del aparato– con 8 caracteres máx., ya entrado

- Seleccionar ajustes previos:
Pulsar tecla **Setup**

> Aparece SETUP

- Seleccionar parámetros del aparato:
Softkeys **v** y **>**

> Aparece el requerimiento para entrar clave.

SETUP CTRL. CLAVE					
Entrar clave:					
<<		<			

- Entrar clave de acceso
- Confirmar clave e indicar parámetros del aparato: Pulsar Softkey **↓**

- Anotar aquí clave de acceso entrada:
Clave =
Si ya se ha entrado clave, pero ha sido olvidada:

- Entrar clave general (ver en Apéndice)

- Confirmar clave e indicar parámetros del aparato: Pulsar Softkey **↓**



> Aparecen parámetros en la indicación

- Seleccionar ajuste parámetros del aparato "Clave": en caso dado, pulsar repetidamente Softkey **v** o **^**, hasta que aparezca **>**


> **Clave:** y, en caso dado, clave ya existente:

SETUP APARATO CLAVE					
Clave:					
ABC123					
ESC					↓

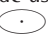* excepto en los modelos ME36S, ME5, SE2



- Nueva clave: entrar cifras y letras de la nueva clave (máx. 8 caracteres)
Clave “en blanco” significa: ninguna clave memorizada
Borrar clave de usuario:
Entrar tecla  o bien 
y memorizar

- Confirmar entrada: Pulsar Softkey 

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey 

> Reinicio de la aplicación

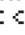Otras funciones

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey 
- > Reinicio de la aplicación
- Imprimir ajuste de parámetro:
- Al indicarse parámetros del aparato:
Pulsar tecla 
- > Impresión (ejemplo)

```

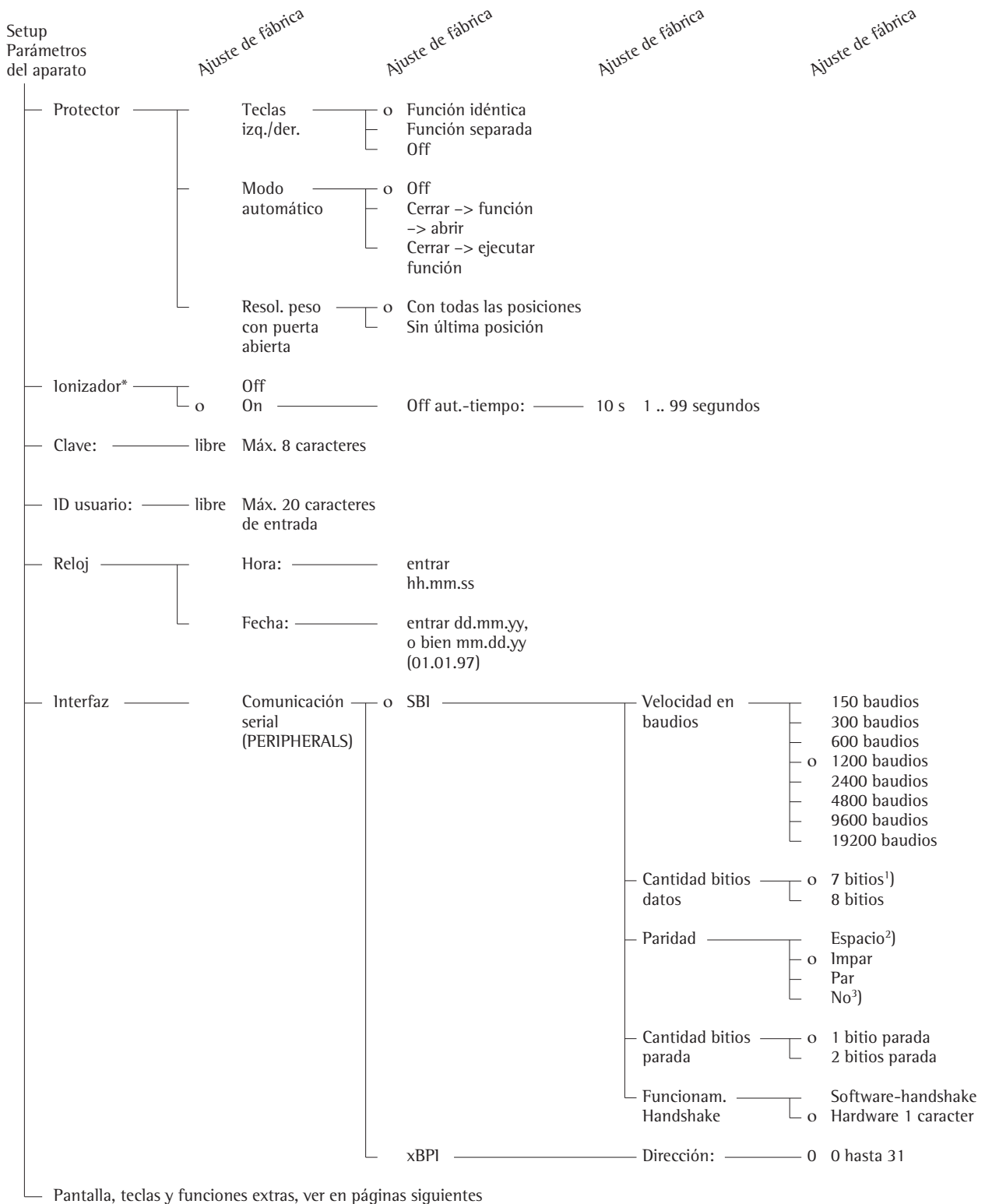
-----
SETUP
      APARATO
-----
PROTECTOR
  TECLA IZQ./DER.
    FUNCION IDENTICA
      MODO AUTOMATICO
                OFF
  RESOL. PESO AL ABR
CON TODAS LAS POSICI
ONES
  IONIZADOR
    ON
      OFF AUT.-TIEMPO:
                10 sec
  ID USUARIO
  ID USUARIO:

INTERFAZ
  COMUNICACION SERIA
    SBI
      VELOCIDAD EN BAU
                1200 BAUDIOS
      CANTIDAD BITIOS
                7 BITIOS DATOS
      PARIDAD
                IMPAR
      CANTIDAD BITIOS
                1 BITIO PARADA
      FUNCIONAM. HANDS
HARDWARE-HANDSHAKE 1
  CHARACTER
  IMPRESORA SERIAL (
    YDP03
      VELOCIDAD EN BAU
                1200 BAUDIOS
      PARIDAD
                IMPAR
      FUNCIONAM. HANDS
HARDWARE-HANDSHAKE 1
  CHARACTER
    FUNCION INTERRUPTI
      TECLA PRINT
    FUNCION CONTROL DE
etc.

```

Parámetros del aparato (sinopsis)

o Ajuste de fábrica
✓ Ajuste de usuario



* excepto en los modelos ME36S, ME5, SE2

¹⁾ excepto con paridad "No"

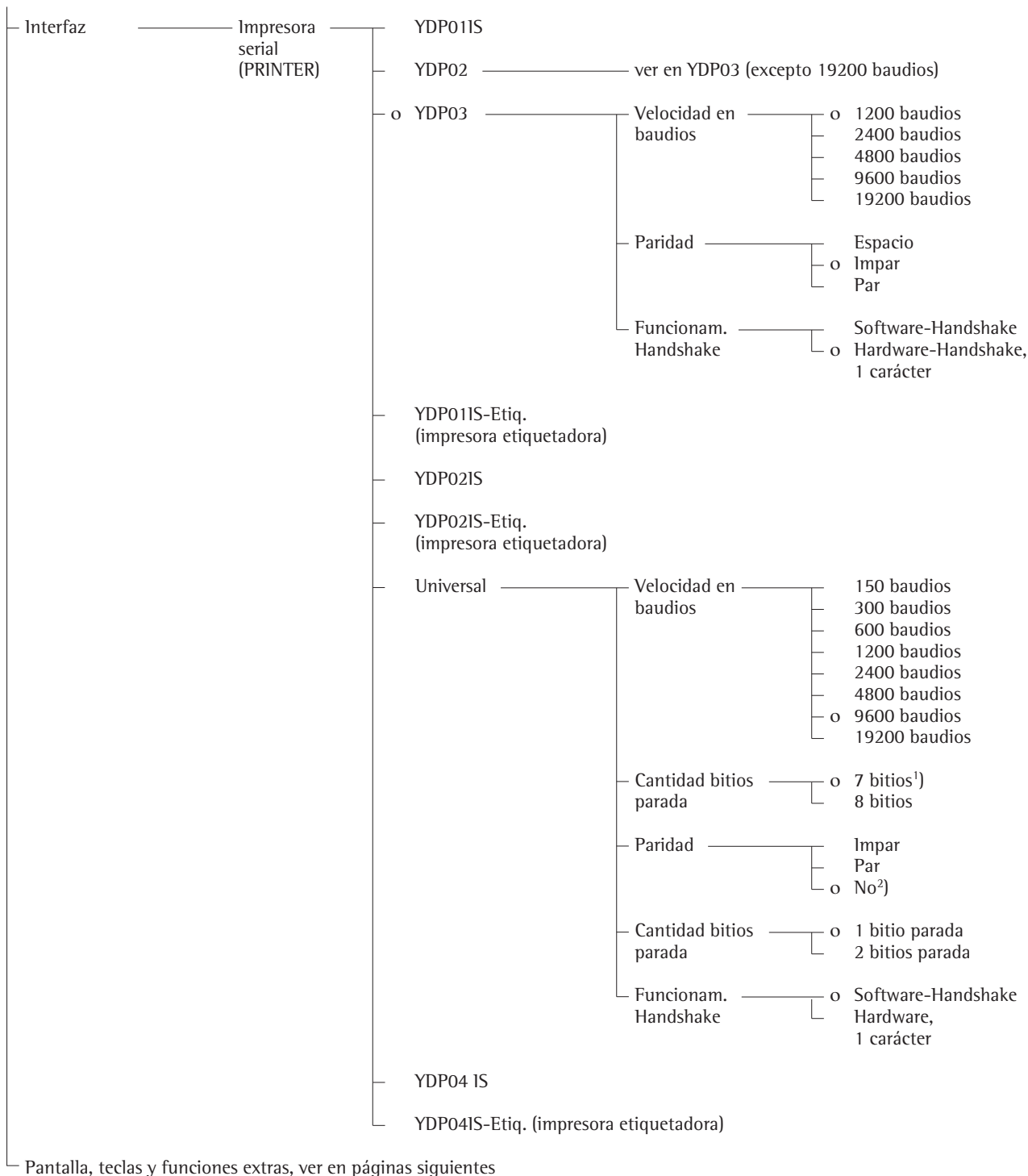
²⁾ sólo con 7 bits datos

³⁾ sólo con 8 bits datos

Setup
Parámetros
del aparato

Ajuste de fábrica

Ajuste de fábrica




¹) excepto con paridad "No"

²) sólo con 8 bitios datos

Setup
Parámetros
del aparato

Ajuste de fábrica

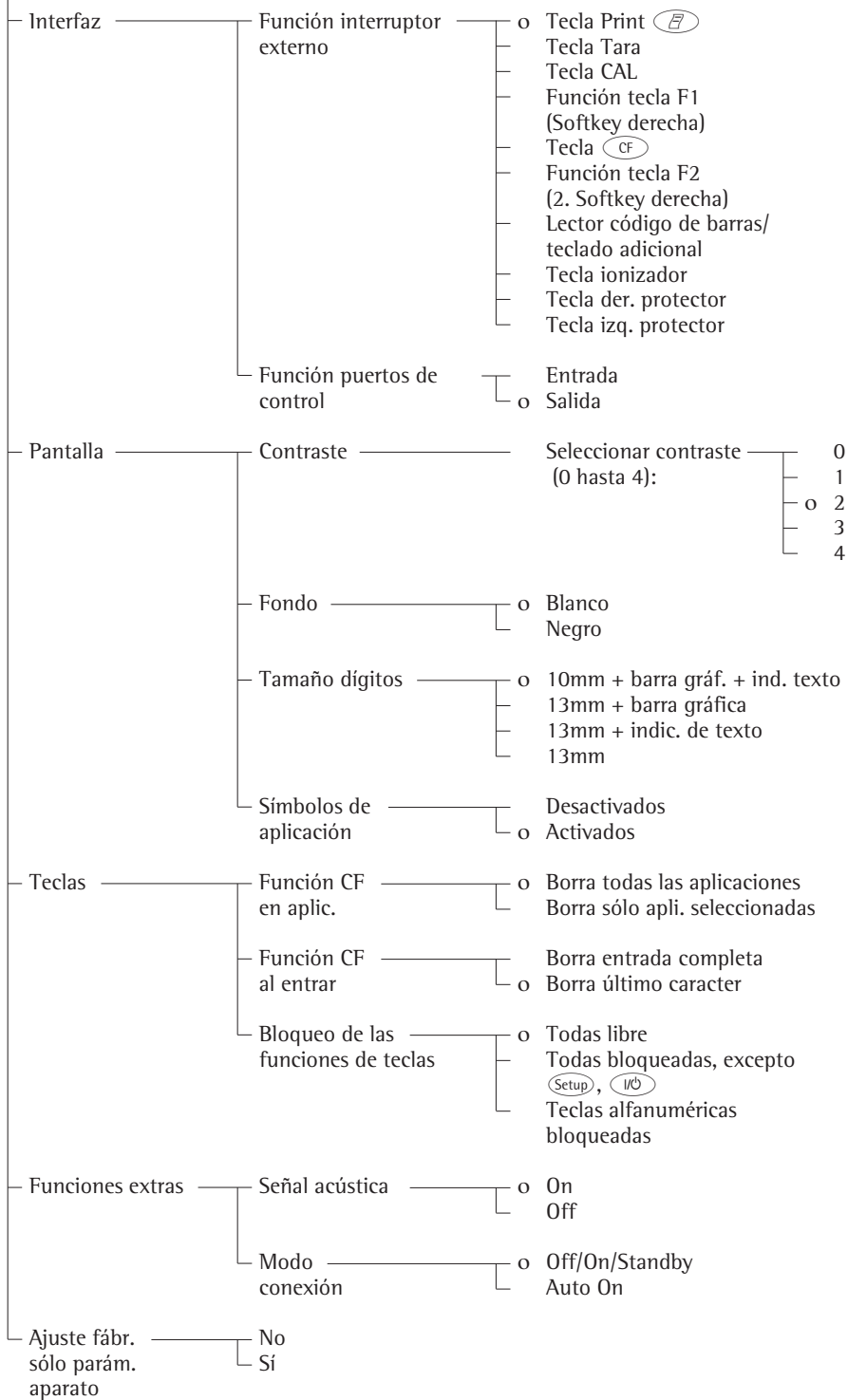Ajuste de fábrica



Ajustar parámetros de aplicación (Aplicación)

Objeto

Configuración de programas de aplicación de una balanza, es decir, adaptación a los requerimientos del usuario mediante la selección de parámetros predefinidos de un menú. El acceso al menú puede asegurarse con clave.

Características

La función básica “Pesar” está siempre disponible. De cualquiera de los grupos mencionados a continuación puede seleccionarse una aplicación para el funcionamiento. De esta manera, es posible una variedad de combinaciones.

Aplicación 1 (aplicación básica)

- Conmutar unidad
- Conteo
- Pesada en porcentaje
- Pesada de animales (formación valor medio)
- Recalculación
- Cálculo
- Determinación de la densidad
- Pesada diferencial
- Corrección empuje del aire y determinación densidad del aire
- Determinación de diámetro

Aplicación 2 (control)

- Pesada de control
- Funciones por control de tiempo

Aplicación 3 (documentación)

- Totalización
- Formulación
- Estadística

Adicionalmente, a las Softkeys pueden asignárseles 2 funciones extras, por lo menos en forma parcial, ajuste en Setup:

- 2. memoria tara
- Identificador
- Cambio de resolución
- Mem. man. en mem. apli.3 (M+)
- Memoria datos de producto
- En caso dado, función SQmin*
- En caso dado, incertidumbre de medición DKD*

Inicialización automática de la aplicación al encender la balanza


Ajuste fábrica: sólo parámetros de aplicación

Ajustes de fábrica de los parámetros

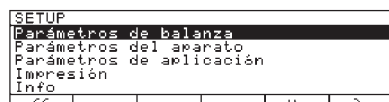
Los ajustes previos están enlistados a partir de la página 35 y se identifican mediante “o”.

Preparación

Indicar parámetros de aplicación existentes:


- Seleccionar ajustes previos:
Pulsar tecla 


> Aparece SETUP



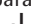- Seleccionar parámetros de aplicación:
Repetidamente Softkey  y 


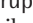



Si ya se ha entrado clave:

- > Aparece requerimiento para la entrada de clave
- Cuando el acceso está asegurado con clave: entrar clave mediante teclas alfanuméricas
- Si la clave tiene una letra como último carácter: finalizar entrada de letras con la tecla 


- Confirmar clave e indicar parámetros de balanza: Pulsar Softkey 

> En la indicación aparecen parámetros de aplicación:



- Seleccionar el grupo siguiente:
Pulsar Softkey  (cursor hacia abajo)
- Seleccionar ítem anterior de un grupo:
pulsar Softkey  (cursor hacia arriba)
- Seleccionar el siguiente subítem dentro de un grupo: Pulsar Softkey  (cursor hacia la derecha)
- Seleccionar grupo anterior:
Pulsar Softkey  (cursor hacia la izquierda)
- Confirmar ítem de menú seleccionado:
pulsar Softkey 

Otras funciones

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey 

> Reinicio de la aplicación

- Imprimir ajuste de parámetro:

- Para indicar parámetros de balanza:
Pulsar tecla 

> Impresión (ejemplo)
Textos con más de 20 caracteres se interrumpen

SETUP

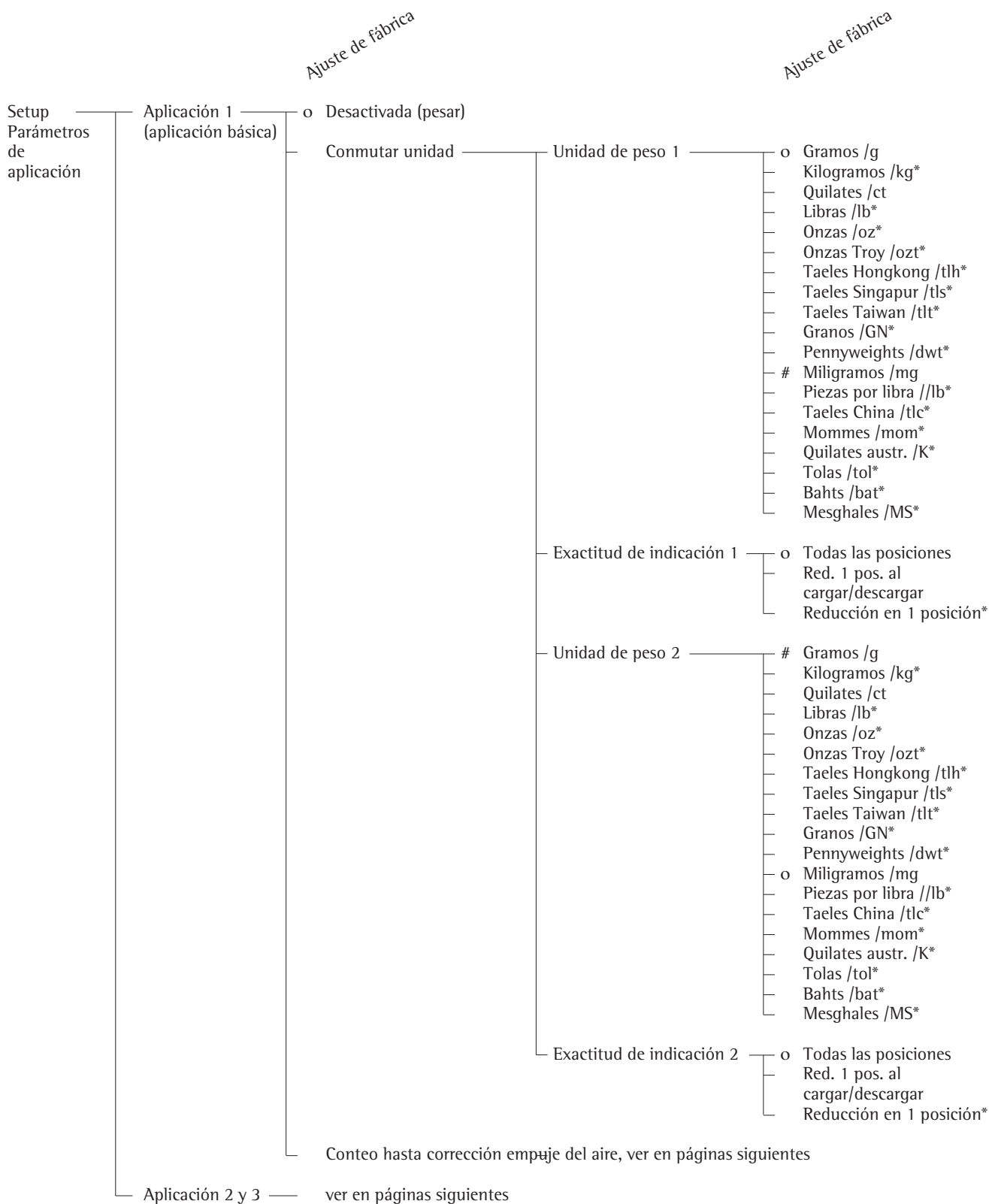
APLICACION

```
-----
APLICACION 1 (APLIC
                DESACTIVADA
APLICACION 2 (CONTR
                DESACTIVADA
APLICACION 3 (DOCUM
                DESACTIVADA
FNC. ADIC. (F4)
                DESACTIVADA
FNC. ADIC. (F5)
                DESACTIVADA
INICIO AUTO. APLIC.
                DESACTIVADA
-----
```

* = accesible para el serv. técnico


Parámetros de aplicación (sinopsis)

- o Ajuste de fábrica
- √ Ajuste de usuario




* modificaciones de ajuste no existen en balanzas verificadas

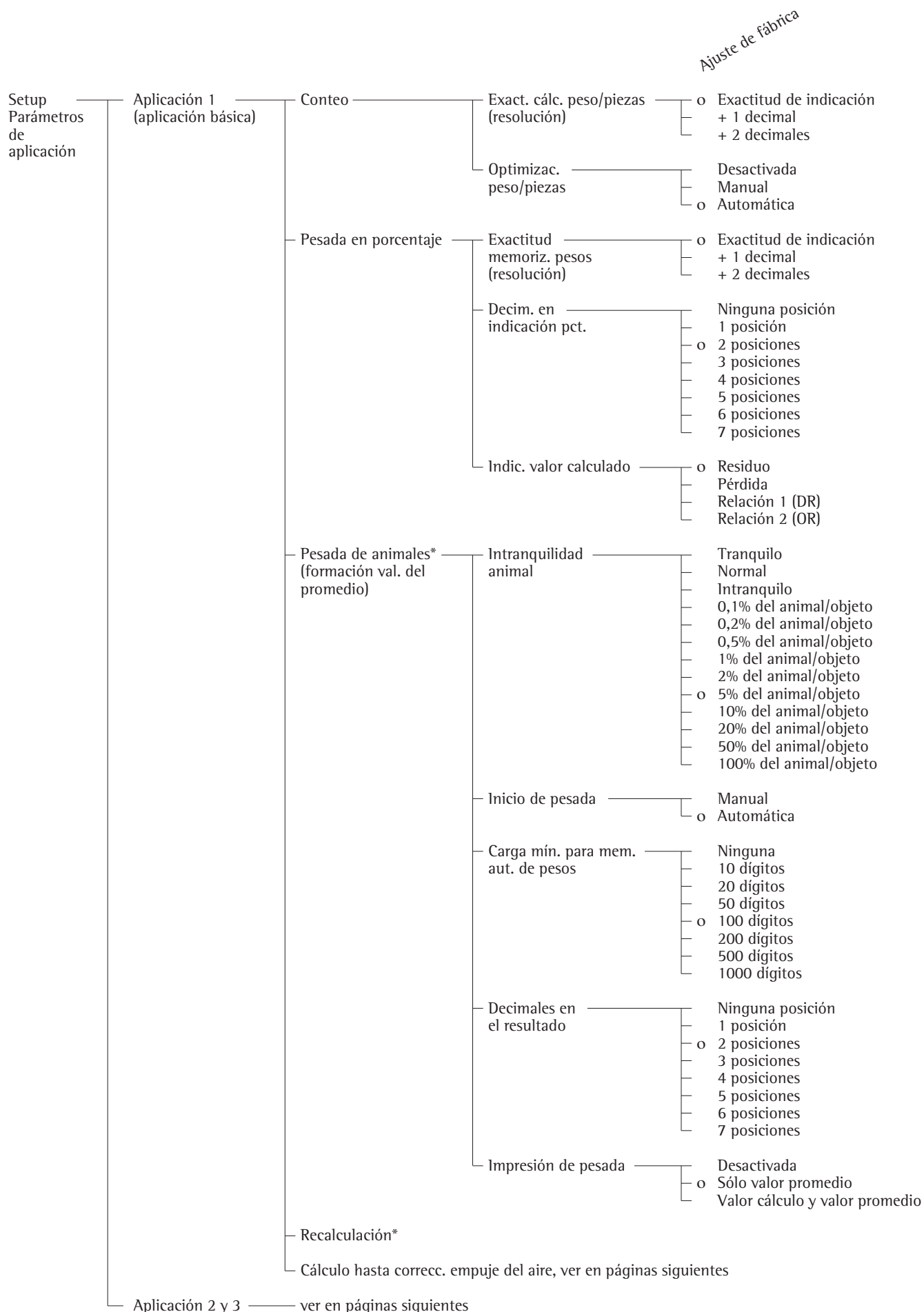= ajuste de fábrica en ME36S, ME5, SE2




* = La descripción detallada para el funcionamiento de la aplicación se encuentra en las instrucciones de Masterpro "LA....".
Solicitar estas instrucciones directamente a Sartorius, o bien, vía Internet (www.sartorius.com / bajo "downloads").

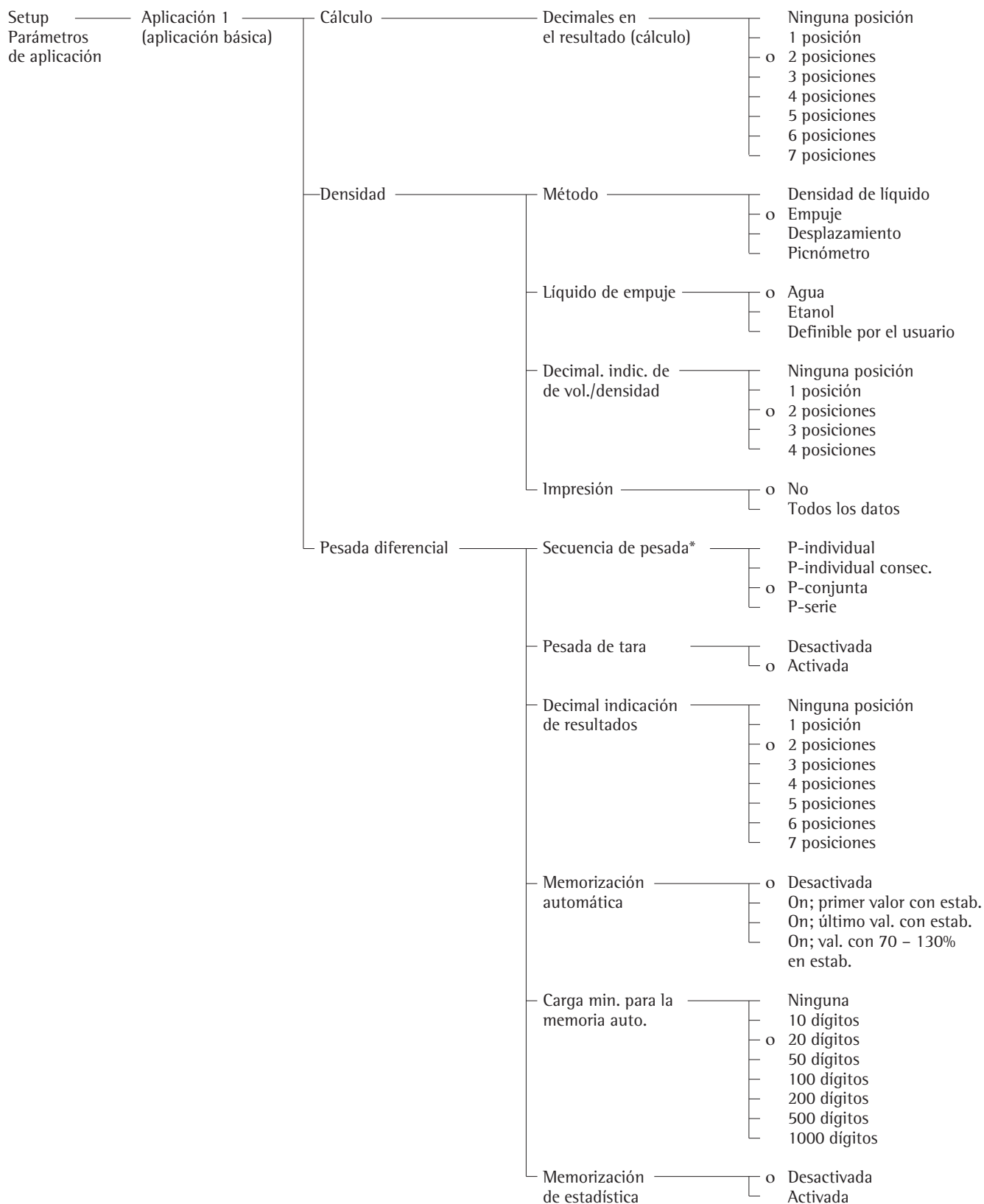
Ajuste de fábrica



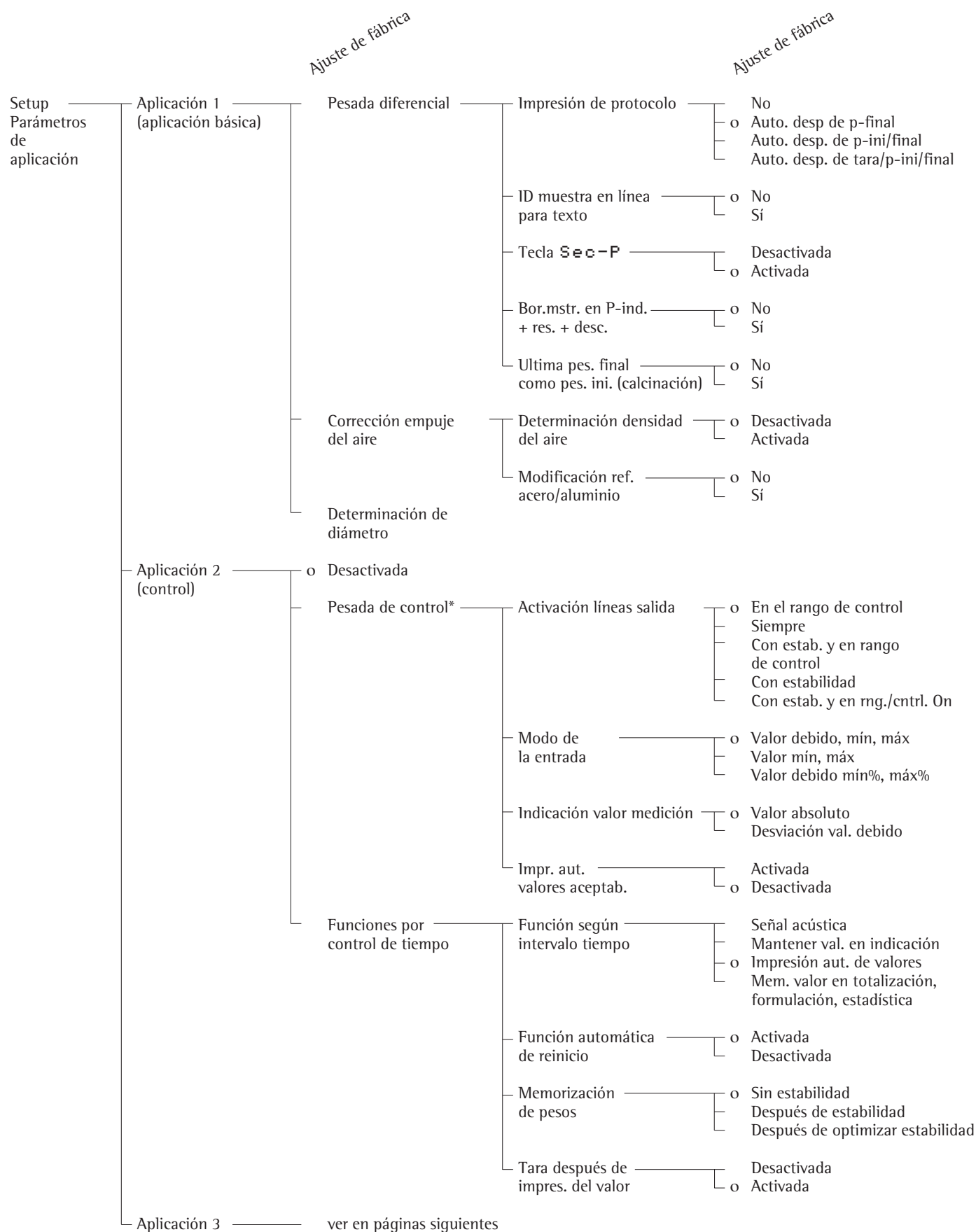
* = modificación de ajuste sólo para primera puesta en funcionam. y con tecla **Sec-P** desactivada




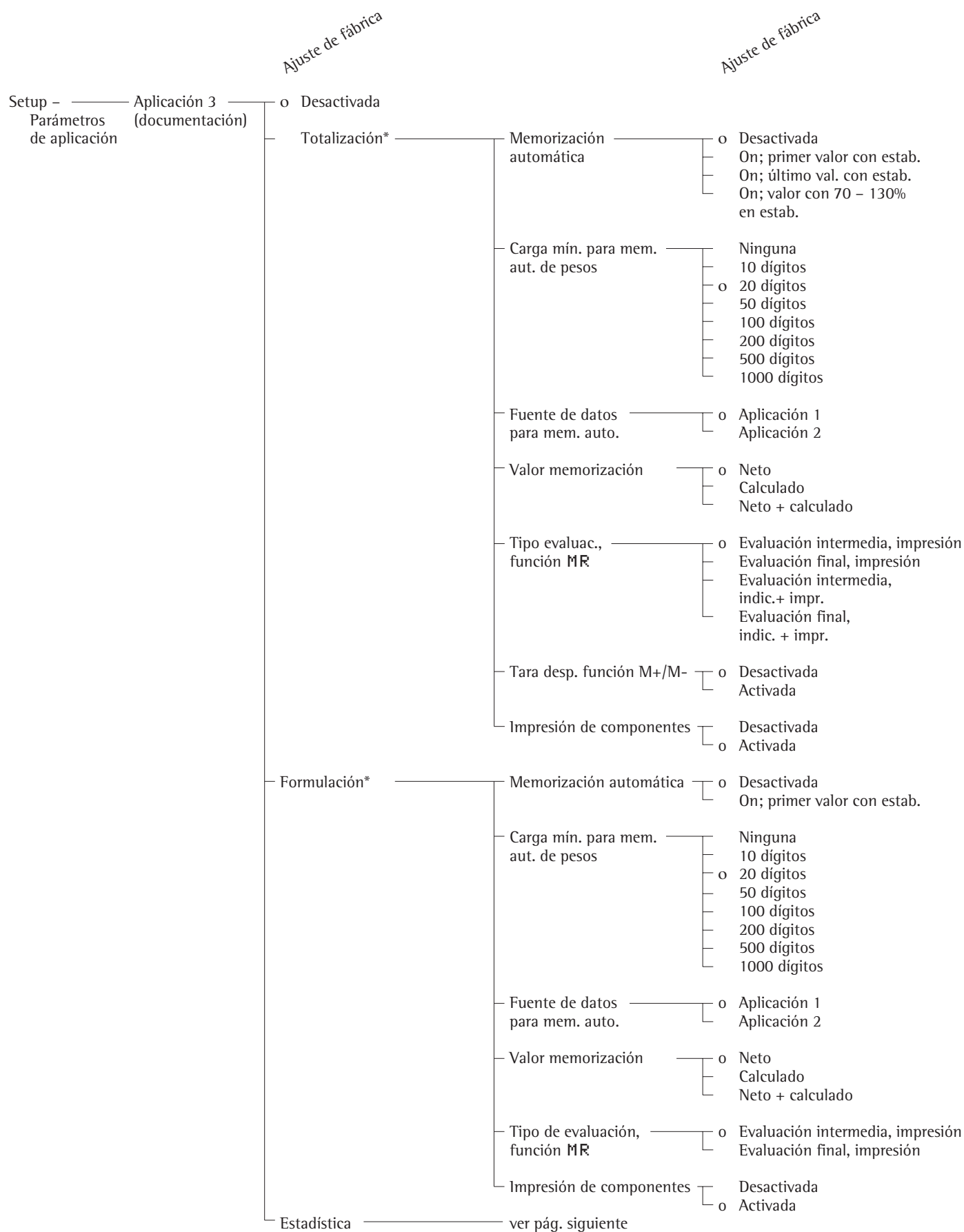* = La descripción detallada para el funcionamiento de la aplicación se encuentra en las instrucciones de Masterpro "LA....".
Solicitar estas instrucciones directamente a Sartorius, o bien, vía Internet (www.sartorius.com / bajo "downloads").



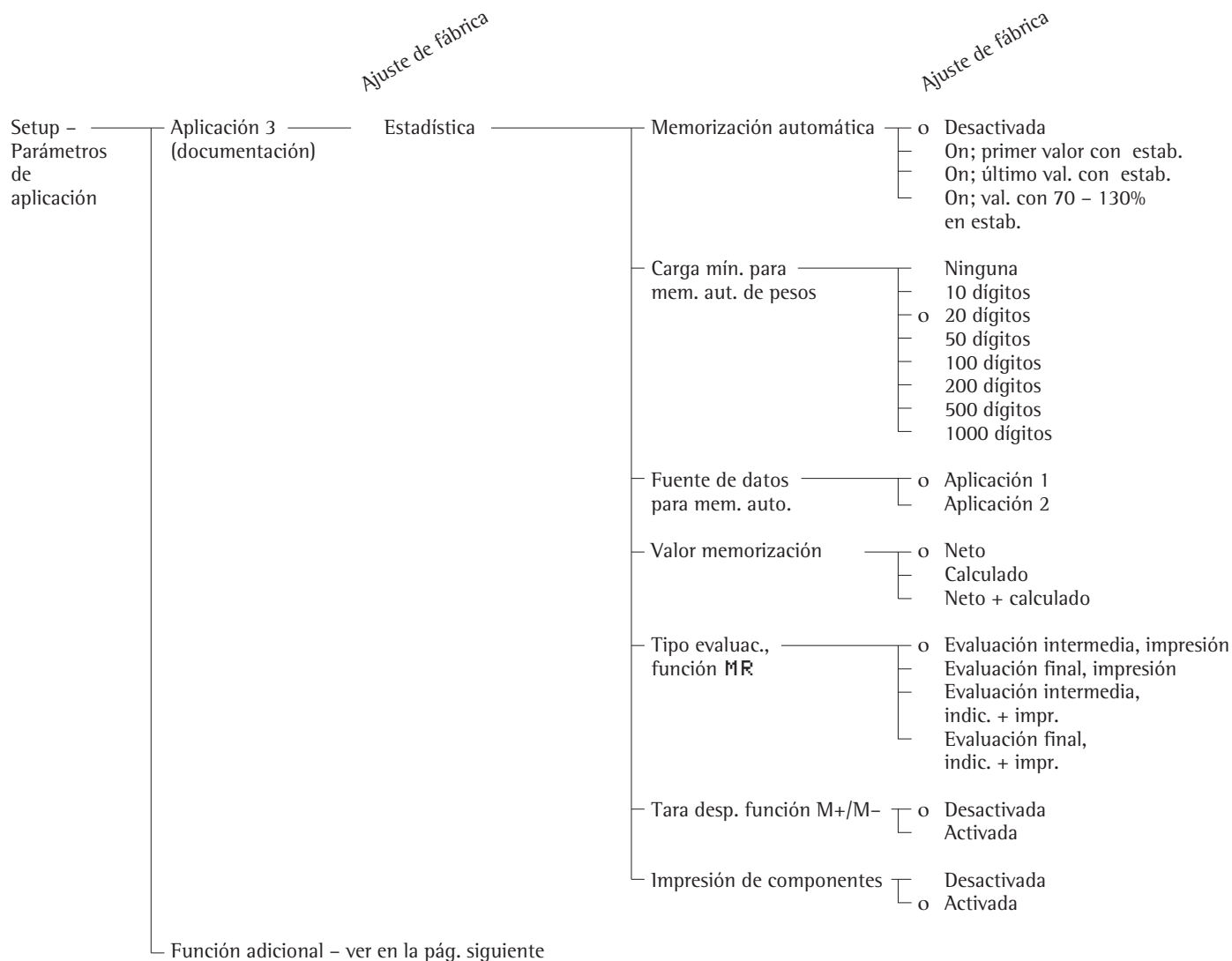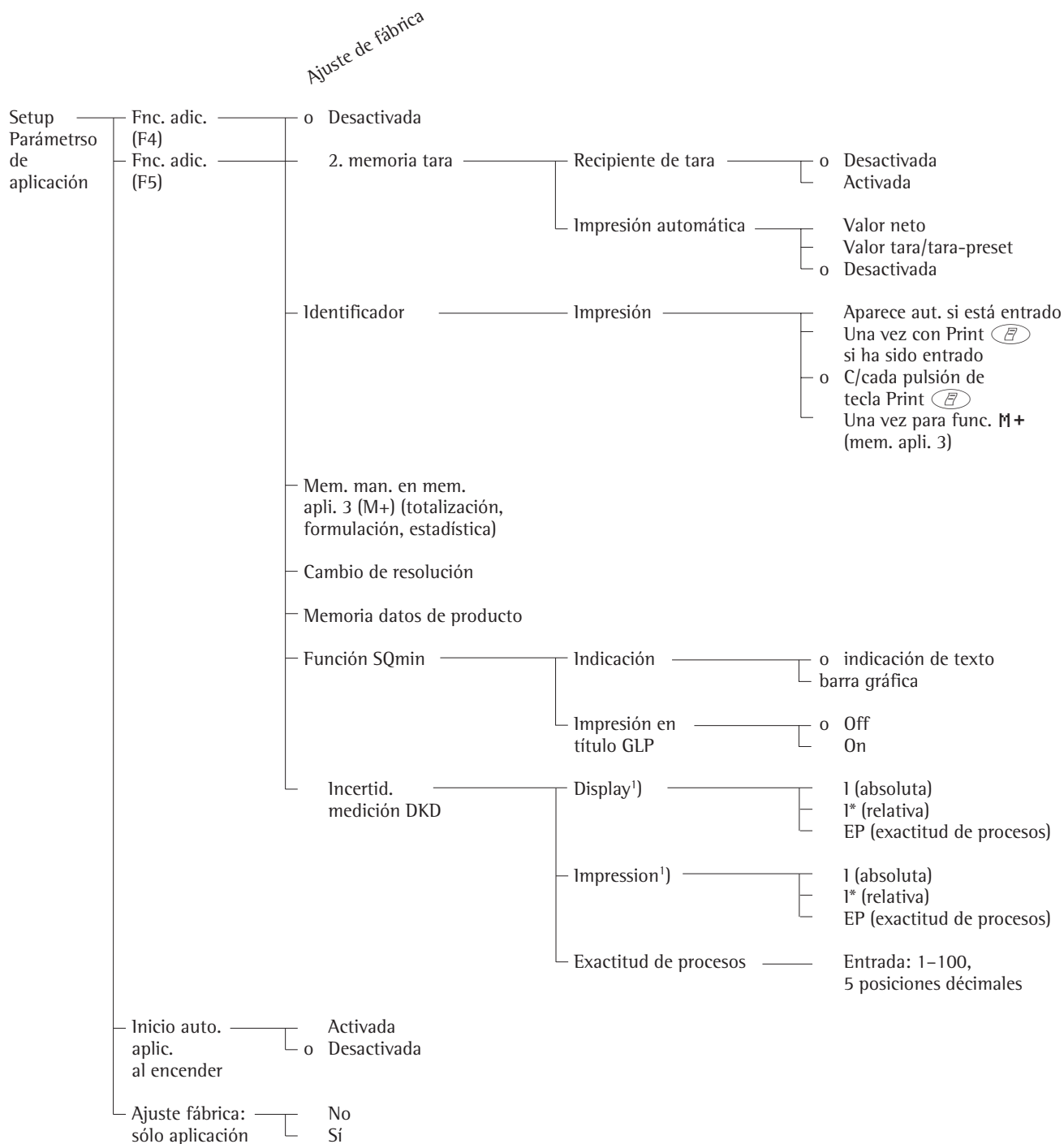* = La descripción detallada para el funcionamiento de la aplicación se encuentra en las instrucciones de Masterpro “LA....”. Solicitar estas instrucciones directamente a Sartorius, o bien, vía Internet (www.sartorius.com / bajo “downloads”).





¹⁾ “*” ítem de menú activado; máx 3 elecciones posible

Ajustar impresión (IMPRESSION)

Objeto

Configurar la impresión es adaptarla a los requerimientos del usuario, mediante selección de parámetros predefinidos en un menú. La impresión de valores de pesada, valores de medición e identificaciones está destinada a la documentación y puede ser adaptada a los más variados requerimientos. El acceso al menú puede quedar asegurado mediante una clave.

Características

Los parámetros de impresión se resumen en los siguientes grupos (1. nivel de menú):

- Salida en aplicaciones
- Salida automática valor de indicación
- Salida vía interfaces
- Formato de línea
- Protocolo ISO/GLP/GMP
- Identificador
- Ajuste fábrica: sólo de la impresión

Ajustes de fábrica

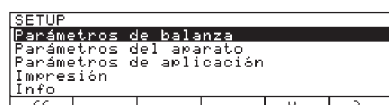
Parámetro: los ajustes de fábrica están listados en la página siguiente y se identifican mediante "o".

Preparación

Para indicar parámetros existentes

- Seleccionar ajustes previos:
Pulsar tecla **Setup**

> Aparece SETUP:



- Seleccionar parámetros de impresión:
Repetidamente Softkey **↵** y **↶**

En tanto no se haya entrado clave, el acceso a SETUP – impresión está accesible

Si ya se ha entrado clave de acceso:

- > Aparece el requerimiento para la entrada de clave
- Si el acceso está asegurado con una clave: entrar clave mediante teclas alfanuméricas
- Si la clave tiene una letra como último carácter: Finalizar entrada de letra con la tecla **ABC**

- Confirmar clave e indicar parámetros:
Pulsar Softkey **↓**

> En la indicación aparecen parámetros:



- Seleccionar el grupo siguiente:
Pulsar Softkey **↵** (cursor hacia abajo)
- Seleccionar ítem anterior de un grupo:
pulsar Softkey **↶** (cursor hacia arriba)
- Seleccionar el siguiente subítem dentro de un grupo: Pulsar Softkey **➤** (cursor hacia la derecha)
- Seleccionar grupo anterior:
Pulsar Softkey **↶** (cursor hacia la izquierda)
- Confirmar ítem de menú requerido:
pulsar Softkey **↓**

Otras funciones

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey **↶**
- > Reinicio de la aplicación
- Imprimir ajuste de parámetro:
 - Al indicarse parámetros del aparato:
Pulsar tecla **⏏**
- > Impresión (ejemplo)

SETUP

IMPRESION


```
SALIDA EN APLICACION
CRITERIO ESTABILID
DESPUES DE ESTAB
IMPRESION A SOLICI
DESACTIVADA
IMPRESION AUTOM. A
TODOS LOS VALORES
CONFIGURACION DE L
INDIV.: PROTOCOLO
SALIDA AUTOMATICA V
CRITERIO ESTABILID
SIN ESTABILIDAD
CANCELACION IMPRES
NO ES POSIBLE
IMPRESION AUTOM. E
1 CICLO LECTURA
SALIDA VIA INTERFAC
COMUNICACION SERIA
SALIDA EN APLICACION
ES
IMPRESORA SERIAL
SALIDA EN APLICACION
ES
FORMATO DE LINEA
PARA OTRAS APLI./GLP
(22 CARACTER.)
PROTOCOLO ISO/GLP/G
DESACTIVADO
ID IDENTIFICACION #
LOTE (ID-L.):
```

ID1: ID1
etc.

Parámetros de impresión (sinopsis)

o Ajuste de fábrica

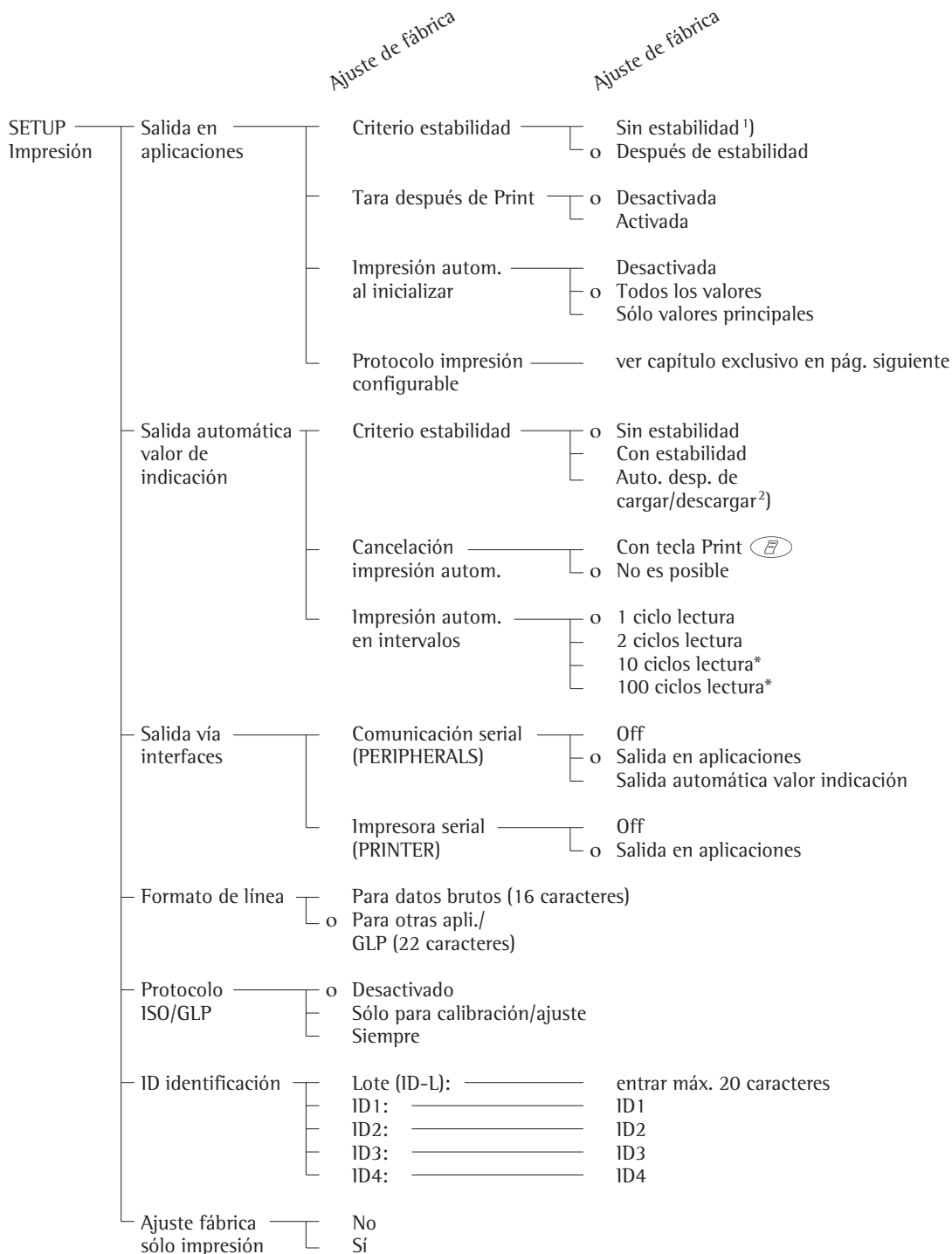√ Ajuste de usuario



* = la modificación de ajuste no vale para las balanzas verificadas

¹⁾ = Advertencia para metrología legal: permisible sólo para objeto de regulación y control: Impresión de protocolo no está permitido

²⁾ = Autoprint, cuando carga/descarga >10 d y estabilidad: desbloqueo < 5 d





Configuración de protocolo

Objeto

Definir individualmente la magnitud para todos los protocolos de medición. Con el protocolo de sumas de las aplicaciones formulación, totalización y estadística puede definirse adicionalmente qué parámetros han de imprimirse mediante la función (tecla) MR.

En Setup "protocolo de impresión configurable" puede configurarse un protocolo individual, de componentes, o bien, de sumas, que contiene los ítems de impresión disponibles para los programas de aplicación respectivos. Esto debería realizarse según ajustes previos del programa de aplicación, puesto que algunos datos en la impresión dependen de la aplicación.

Características

- Longitud de una lista de protocolo, máximo 60 ítems de impresión
- Un protocolo individual, de componentes, de sumas, pesada final y estadística puede configurarse separadamente
- Imprimir protocolo individual:
Tecla 
Impresión automática de la aplicación: p. ej. resultado de la pesada de animales, densidad (Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación1: Densidad: Impresión: Todo)
Valor aceptable pesada de control, impresión de valor por control de tiempo, 2. memoria tara
- Imprimir protocolo de componentes: totalización, formulación o estadística con la tecla **M+** o **M-** (Setup: Aplicación 3: ..., Impresión de componentes: On)
- Imprimir protocolo de sumas: En los programas seleccionados: totalización, formulación o estadística con la tecla **MR**
- Imprimir protocolo pesada final: Automático después de pesada final, o bien, con la tecla  durante la indicación del resultado (después de pesada final)
- Imprimir protocolo de estadística: En estadística activada, con la tecla 
Impresión en pesada diferencial: Protocolos pueden imprimirse como protocolos estándares o protocolos configurados (definido por el usuario).
Los siguientes protocolos pueden ser configurados por el usuario:
 - Protocolo individual
 - Protocolo pesada final
 - Protocolo de estadísticaProtocolos se imprimen:
 - a petición del usuario, al pulsar la tecla  (impresión individual)
 - automáticamente, si así se ha ajustado en Setup [Aplicac: Aplicación 1: Pesada diferencial: Impresión protocolo: Autom. ...]

- Después de conmutar un programa de aplicación o de una función adicional en Setup parámetros de aplicación, se borran las listas del protocolo
- Nueva lista de selección se crea de acuerdo a los programas de aplicación y de las funciones adicionales activadas

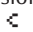

- Ítems de impresión pueden borrarse individualmente

- Con el ajuste Setup siguiente no se realiza salida de un protocolo configurado:

Setup: Salida de impresión: Formato de línea: Para datos bruto (16 caracteres)

- Ítems de impresión "Formfeed" en nota al pie de protocolo: Avance hasta el comienzo de la etiqueta siguiente en modo funcionamiento interfaz "YDP01IS-Etiq." y "YDP02IS-Etiq."


Otras funciones

- Abandonar protocolo de impresión configurable: Pulsar Softkey  

- > Reinicio de la aplicación

Imprimir ajuste de protocolo de la "Selección" y "Lista"

- **LISTA**: Impresión de la lista de protocolo correspondiente y actual
SELECCION: Ítems de impresión actual todavía seleccionables

- Cuando la barra de selección se encuentra en la **LISTA** o en la **SELECCION**: Pulsar tecla 

- > Impresión (ejemplo)

```
LISTA PROT.FINAL
=====
Fecha muestra
P-inicial
P-final
Perdida %
=====
etc.
```

Ejemplo:






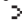







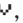
















Configurar protocolo individual para la salida de datos del programa Conteo con líneas de rayas, fecha/hora, cantidad de piezas y valor peso neto

Ajustes previos (desviaciones respecto del ajuste de fábrica):

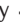Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Conteo

Abandonar Setup: Softkey <<

Luego, acceder nuevamente a Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Protocolo de impresión configurable

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida																																										
1. seleccionar ajustes previos, seleccionar impresión	 , después repetidam. Softkey  y Softkey 	<table><tr><td colspan="2">SETUP</td><td colspan="2">IMPRESION</td></tr><tr><td colspan="4">Salida en aplicaciones</td></tr><tr><td colspan="4">Salida automática valor indicación</td></tr><tr><td colspan="4">Salida vía interfaces</td></tr><tr><td colspan="4">Formato de línea</td></tr><tr><td colspan="4">Protocolo ISO/GLP/GMP</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td>></td></tr></table>	SETUP		IMPRESION		Salida en aplicaciones				Salida automática valor indicación				Salida vía interfaces				Formato de línea				Protocolo ISO/GLP/GMP				<<		<	>														
SETUP		IMPRESION																																										
Salida en aplicaciones																																												
Salida automática valor indicación																																												
Salida vía interfaces																																												
Formato de línea																																												
Protocolo ISO/GLP/GMP																																												
<<		<	>																																									
2. confirmar salida en aplicaciones	Softkey 	<table><tr><td colspan="2">SETUP</td><td colspan="2">IMPRESION</td><td colspan="2">APLICACION</td></tr><tr><td colspan="6">Criterio estabilidad</td></tr><tr><td colspan="6">Impresión a solicitud, tara</td></tr><tr><td colspan="6">Impresión autom. al inicializar</td></tr><tr><td colspan="6">Configuración de la impresión</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>></td><td></td></tr></table>	SETUP		IMPRESION		APLICACION		Criterio estabilidad						Impresión a solicitud, tara						Impresión autom. al inicializar						Configuración de la impresión						<<		<		>							
SETUP		IMPRESION		APLICACION																																								
Criterio estabilidad																																												
Impresión a solicitud, tara																																												
Impresión autom. al inicializar																																												
Configuración de la impresión																																												
<<		<		>																																								
3. seleccionar protocolo impr. configurable y confirmar	3x Softkey  y Softkey 	<table><tr><td colspan="2">IMPRESION</td><td colspan="2">APLICACION</td><td colspan="2">CONFIG.</td></tr><tr><td colspan="6">Indiv.: protocolo para aplic./pesada</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td></td><td>></td></tr></table>	IMPRESION		APLICACION		CONFIG.		Indiv.: protocolo para aplic./pesada												<<		<			>																		
IMPRESION		APLICACION		CONFIG.																																								
Indiv.: protocolo para aplic./pesada																																												
<<		<			>																																							
4. confirmar protocolo individual	Softkey 	<table><tr><td>LISTA</td><td>IMPR.INDIV.</td><td colspan="4">SELECCION</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Línea en blanco</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Form feed</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Fecha/hora</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Hora</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>></td></tr></table>	LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION						Línea en blanco						Form feed						Fecha/hora						Hora				<<					>						
LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION																																										
		Línea en blanco																																										
		Form feed																																										
		Fecha/hora																																										
		Hora																																										
<<					>																																							
5. seleccionar línea de rayas	Softkey  ,  , 	<table><tr><td>LISTA</td><td>IMPR.INDIV.</td><td colspan="4">SELECCION</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td><td colspan="4">Línea en blanco</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Form feed</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Fecha/hora</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Hora</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>></td><td></td></tr></table>	LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION				-----		Línea en blanco						Form feed						Fecha/hora						Hora				<<		<		>							
LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION																																										
-----		Línea en blanco																																										
		Form feed																																										
		Fecha/hora																																										
		Hora																																										
<<		<		>																																								
6. seleccionar fecha/hora	2x Softkey  , después Softkey 	<table><tr><td>LISTA</td><td>IMPR.INDIV.</td><td colspan="4">SELECCION</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td><td colspan="4">Línea en blanco</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha/hora</td><td colspan="4">Form feed</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Hora</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Titulo GLP</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>></td><td></td></tr></table>	LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION				-----		Línea en blanco				Fecha/hora		Form feed						Hora						Titulo GLP				<<		<		>							
LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION																																										
-----		Línea en blanco																																										
Fecha/hora		Form feed																																										
		Hora																																										
		Titulo GLP																																										
<<		<		>																																								
7. seleccionar cantidad piezas	repetidam. Softkey  , después Softkey 	<table><tr><td>LISTA</td><td>IMPR.INDIV.</td><td colspan="4">SELECCION</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td><td colspan="4">Neto (N)</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha/hora</td><td colspan="4">Bruto (G#)</td></tr><tr><td colspan="2">Cant. de piezas</td><td colspan="4">Cantidad ref.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Peso ref.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Tara1 (T1/PT1)</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>></td><td></td></tr></table>	LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION				-----		Neto (N)				Fecha/hora		Bruto (G#)				Cant. de piezas		Cantidad ref.						Peso ref.						Tara1 (T1/PT1)				<<		<		>	
LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION																																										
-----		Neto (N)																																										
Fecha/hora		Bruto (G#)																																										
Cant. de piezas		Cantidad ref.																																										
		Peso ref.																																										
		Tara1 (T1/PT1)																																										
<<		<		>																																								
8. seleccionar valor peso neto	repetidam. Softkey  , después Softkey 	<table><tr><td>LISTA</td><td>IMPR.INDIV.</td><td colspan="4">SELECCION</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td><td colspan="4">ID1</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha/hora</td><td colspan="4">ID2</td></tr><tr><td colspan="2">Cant. de piezas</td><td colspan="4">ID3</td></tr><tr><td colspan="2">Neto (N)</td><td colspan="4">ID4</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Bruto (G#)</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>></td><td></td></tr></table>	LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION				-----		ID1				Fecha/hora		ID2				Cant. de piezas		ID3				Neto (N)		ID4						Bruto (G#)				<<		<		>	
LISTA	IMPR.INDIV.	SELECCION																																										
-----		ID1																																										
Fecha/hora		ID2																																										
Cant. de piezas		ID3																																										
Neto (N)		ID4																																										
		Bruto (G#)																																										
<<		<		>																																								
9. abandonar protocolo de impresión	Softkey  <<																																											
10. realizar pesadas e imprimir		<table><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>14.01.2000</td><td>09:19</td></tr><tr><td>Qnt +</td><td>598 pcs</td></tr><tr><td>N +</td><td>2003.13 g</td></tr></table>	-----		14.01.2000	09:19	Qnt +	598 pcs	N +	2003.13 g																																		

14.01.2000	09:19																																											
Qnt +	598 pcs																																											
N +	2003.13 g																																											

Informaciones específicas de aparato

Objeto

Indicación de informaciones específicas de aparato.

Indicar informaciones específicas de aparato ME215/235/254/414/614

- Seleccionar ajustes previos:

Pulsar tecla 

> Aparece "SETUP":

SETUP	
Parámetros de balanza	
Parámetros del aparato	
Parámetros de aplicación	
Impresión	
Info	
<<	>>


- Seleccionar "Info":

Pulsar repetidamente Softkey  y Softkey 

> En la indicación aparecen informaciones específicas de aparato:

SETUP	INFO
No. versión:	01-41-05
Sist. mensaje #:	00-21-09
Protector #:	05-01-03
Modelo:	ME215S
No. serie:	91205355
<<	>>

Indicar informaciones específicas de aparato en ME36S, ME5, SE2

- Seleccionar "Info datos de aparato": pulsar la tecla 

> aparecen las informaciones específicas de aparato

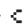
- Imprimir informaciones:

Pulsar tecla 


> Impresión (ejemplo)

```
-----
23.12.1999      13:02
Modelo          ME215S
No. serie       91205355
No. version     01-41-05
(Vers. del programa funcionam.)
ID              BECKER123
(ID usuario)
-----
SETUP
INFO
-----
NO. VERSION:
01-41-05
(Vers. del progr. funcionam.)
SIST. PESAJE #:
00-21-09
(Progr.-vers. célula de pesada)
PROTECTOR #:
05-01-03
(Progr.-vers. del protector)
MODELO:
ME215S
NO. SERIE:
91205355
PROX. MANTENIM.:
01.01.2002
TELEF. SERVICIO:
05513080
SQmin:         0.0300 g
-----
```

- Retorno a SETUP sinopsis:

Pulsar Softkey 

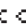- Abandonar ajustes previos:

Pulsar Softkey 

> Se retorna nuevamente al estado anterior

Ajuste de fábrica

Para cada parámetro existe un ajuste previo de fábrica. En Setup puede ajustarse que, después de la confirmación del Setup con **SI**, se repongan nuevamente todos los ajustes de fábrica (Setup).

Los siguientes ajustes no pueden reponerse:

- Lengua
- Clave de acceso
- Contraste indicación
- Hora

Funcionamiento

Función básica “Pesar”

Objeto

La función básica pesar está siempre disponible, sólo o en combinación con programas de aplicación (conmutación de unidades de peso, conteo, pesada en porcentaje, ...)

Características

- Tarar balanza
- Identificar valor de pesada
- Imprimir valor de pesada
- Imprimir identificación valor de pesada

Teclas de función – Softkeys

Cal	Iniciar procesos de calibración o ajuste
isoCAL	Iniciar procesos de calibración o ajuste, en caso necesario, con pulsión de tecla
ID-M	Memorizar identificación entrada

Advertencias sobre “Pesadas analíticas”

Manejo de muestras y recipientes

La muestra debería estar aclimatada a la temperatura de la balanza; sólo de esta manera se evitan los errores de empuje del aire y oscilaciones, debido a las corrientes de convección, en la parte superficial de la muestra.

Los efectos mencionados aumentan según volumen y superficie de la muestra. Por tal razón, debería seleccionarse el tamaño apropiado del recipiente para la pesada inicial.

Las muestras no deben agarrarse con la mano; el comportamiento higroscópico dejadas por las huellas digitales y la influencia de la temperatura se reflejan en el resultado de la medición.

La muestra ha de ser colocada muy cuidadosamente, p. ej. con una pinza u otra herramienta apropiada. El trabajo con la balanza exige un trabajo tranquilo y continuado.

Una cámara de pesaje que no ha sido abierta por largo tiempo puede tener una temperatura diferente a la del entorno de la balanza. Por lo tanto, al abrir la cámara de pesaje se produce, por razones físicas, una variación inevitable de temperatura, que puede manifestarse en una lectura modificada del peso. Algunas mediciones de ensayo indican tal influencia.

Es por esto que se recomienda abrir y cerrar en forma repetida la cámara de pesaje, antes de iniciar la serie de medición, según el ritmo ulterior de la secuencia de medición. La lectura de peso se estabiliza, por regla general, 8 segundos después de cerrar la cámara de pesaje. La exactitud de los resultados mejora cuando la uniformidad en el desarrollo del trabajo aumenta con las pesadas siguientes.

Pesar muestras y recipientes cargados electrostáticamente

Al pesar muestras que están cargadas electrostáticamente pueden producirse errores considerables de medición. En este caso resultan afectadas aquellas muestras que presentan una conductibilidad eléctrica extremadamente deficiente (vidrio, materiales sintéticos, filtros); las cargas producidas por frotación se liberan sólo después de un largo intervalo de tiempo, a través del platillo de pesada.

La consecuencia es un efecto de fuerza entre las cargas de las muestras puestas en el platillo de pesada y las partes fijas de la balanza (base de la cámara de pesaje, la construcción del protector contra corrientes de aire, carcasa de la balanza), las cuales se hacen notar en la deriva del valor de peso.

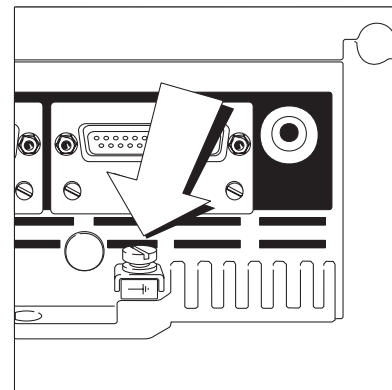
Mediante la ionización, el aire del entorno de la muestra se hace conductible y de esta manera “vía aérea” se eliminan las cargas conduciéndolas a tierra (masa).

Junto a las medidas puramente mecánicas (apantallamiento de la muestra mediante platillo de pesada especial – ver en accesorios), la neutralización de las cargas electrostáticas de superficie, mediante el bombardeo con iones de polaridad opuesta, representa ser un procedimiento altamente eficaz para la eliminación del efecto (activar ionizador, ver en la página 53).

También el entorno de la balanza, p. ej. el operador puede ser portador de carga electrostática y causar influencias perjudiciales en las pesadas. Mediante una pátina metálica en los vidrios del protector contra corrientes de aire, los modelos ME/SE ya están preparados para enfrentar constructivamente este fenómeno.

En la parte trasera de la balanza se encuentra a disposición un borne equipotencial para una puesta a tierra (p. ej. para una espátula). El tornillo

del borne está previsto para conductores unifilares de hasta 6 mm², o bien, hilo trenzado de 4 mm².



Pesar muestras imantadas o magnetizables

Por razones técnicas, el empleo de materiales magnetizables en la fabricación de balanzas es inevitable. Al fin y al cabo, el principio de funcionamiento de balanzas de alta resolución se basa en la compensación de la carga colocada mediante fuerzas magnéticas.

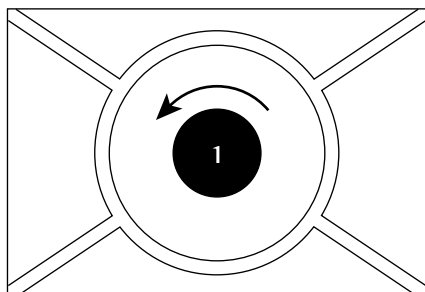
Al pesar muestras y recipientes imantados/magnetizables (p. ej. vaso aforado con paletilla) puede producirse una interacción con las partes de la balanza ya anteriormente mencionadas, distorsionando los resultados de pesada.

Contrariamente a las distorsiones causadas por las cargas electrostáticas, las interferencias magnéticas son, por lo general, temporalmente constantes, y muy sensibles, dependiendo de la posición en el platillo de pesada, lo que se refleja en una mala repetibilidad.

Para la reducción de los efectos descritos se recomienda aumentar la distancia entre muestra y platillo de pesada, con ayuda de un material no magnetizable (debilitamiento de segundo grado de la fuerza por la distancia).

Muestras magnetizables y todavía imantadas se influyen mutuamente con campos magnéticos y componentes magnetizables o magnetizados en el entorno. En forma limitada pueden apantallarse campos magnéticos exteriores mediante láminas (de material magnético suave). Normalmente es de gran ayuda, para descartar otros componentes magnéticos, el dispositivo de pesaje por debajo de la balanza con un protector libre de campos, construido de materiales no magnéticos.

ME215/235/254/414/614/36S:




Pesada por debajo de la balanza

Para las pesadas por debajo de la balanza existe un dispositivo afin.

No permitidas para el uso en metrología legal

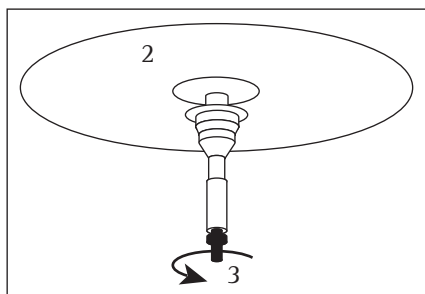
- Desatornillar la placa de cierre **1** en el fondo de la balanza



- Sacar el platillo de pesada **2** hacia arriba
- Desatornillar gancho **3**
- Volver a atornillar gancho **3** utilizando el extremo opuesto
- Volver a colocar platillo de pesada **2**
- Colgar recipiente con muestra en la muesca

- En caso dado, instalar apantallamiento contra corrientes de aire

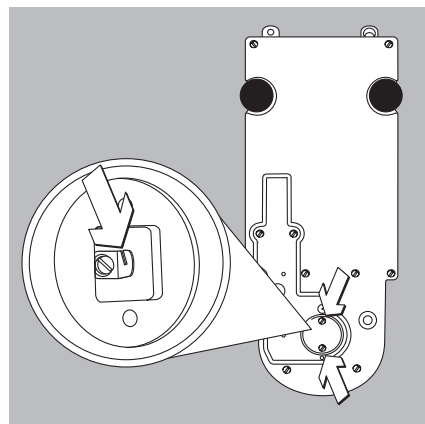ME5/SE2:



- Sacar ambos tornillos, en la base de la célula de carga, y quitar la placa de cierre
- Colgar la muestra, p. ej. con un alambre

Preparación

- Encender balanza: Pulsar tecla

> Aparece Logo Sartorius

- Al alcanzarse la fecha del próximo mantenimiento, aparece:

PRÓXIMO MANTENIMIENTO:				
Fecha:		01.01.2002		
Teléf. Servicio:		05513880		

Abandonar indicación: pulsar Softkey

- Comunicarse con servicio técnico Sartorius y convenir fecha de mantenimiento
- En caso dado, tarar balanza: Pulsar tecla
- > aparece símbolo en la indicación, cuando una balanza verificada está puesta en cero o tarada ($\pm 0,25$ de dígito)

Para el servicio

Empleo de la balanza verificada en metrología legal, en los Estados de la UE
La balanza no debe emplearse en locales de venta abiertos. La aprobación de tipo para la verificación es válida sólo para balanzas de funcionamiento no automático; para el funcionamiento automático con o sin equipamiento auxiliar de medición, han de observarse las prescripciones nacionales vigentes, respecto al lugar de instalación.

- El rango de temperatura indicado en el rótulo (°C) no debe desbordarse durante el funcionamiento
Ejemplo:
BE BK
Ⓢ 0...+40 °C

Otras funciones

Junto a las funciones

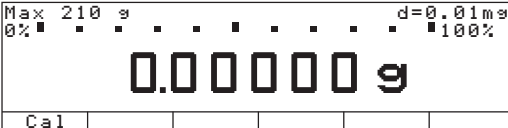
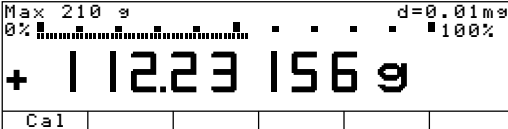
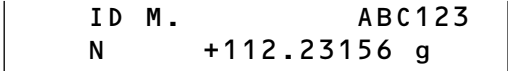
- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto con entrada alfanumérica)
- Impresión

están accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación

- Calibración/ajuste (excepto con entrada alfanumérica)
- Setup
- Apagar balanza
- Calibración
 - Pulsar Softkey **Cal**
 - > sigue en "Calibración/ajuste"
- Setup (ajustes previos)
 - Pulsar tecla **Setup**
 - > Sigue en "Ajustes previos"
- Apagar balanza
 - Pulsar tecla **⏻**
 - > se apaga la balanza
 - > indicación "standby" con retroiluminación

Ejemplos

Ejemplo W1: determinar valor de pesada

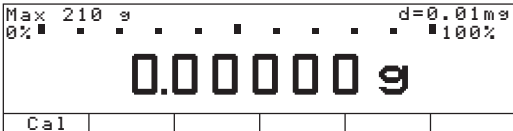

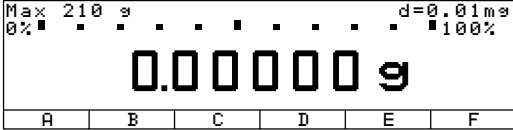
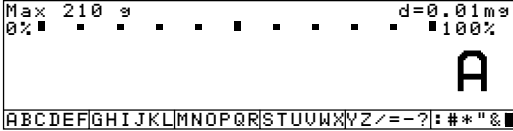

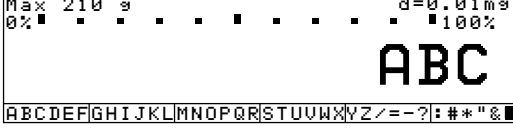

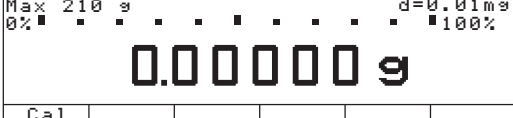

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. en caso dado, tarar (símbolo Ⓢ : balanza está tarada, sólo bal. verificadas)	Ⓢ	
2. entrar ID valor de peso	ver ejemplo W2	
3. pesar muestra (ejemplo)	colocar muestra	
4. imprimir valor de pesada	Ⓢ	

Ejemplo W2

Entrar identificación de muestras “ABC123”

¡Advertencia!

- La identificación es válida, en general, sólo para una medición
- La identificación es borrada, después de la salida de datos

Paso		Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
Estado de inicio (balanza descargada) (La identificación también puede ser entrada, cuando la balanza está cargada)			
1. selecc. entrada alfabética	(ABC)		
2. realizar selecc. previa de letra “A”	Softkey ABCDEF		
3. agregar letra “A” (borrar letra)	Softkey A (CF), (CF)		
4. realizar selecc. previa letra “B” y agregar	Softkey ABCDEF Softkey B		
5. realizar selecc. previa letra “C” y agregar (finalizar entrada, si sólo se han entrado letras)	Softkey ABCDEF Softkey C (ABC)		
6. agregar cifras 1, 2 y 3	(1) (2) (3)		
7. memorizar identificación (máx. 20 caracteres)	Softkey ID M.		
– impresión recién después de la pulsión Print siguiente			

Parámetros del aparato

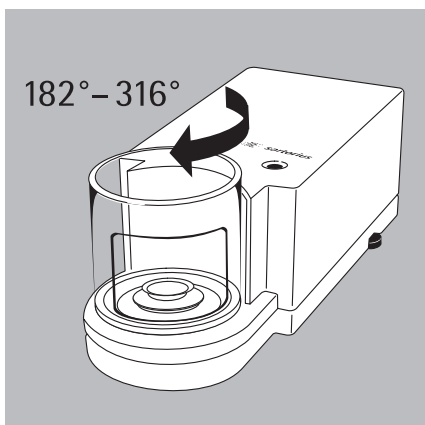
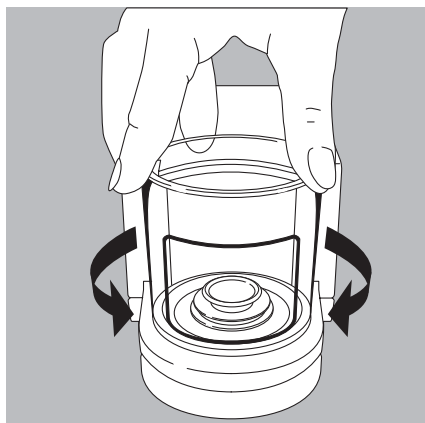
Abrir y cerrar protector contra corrientes de aire

Objeto

Los modelos ME/SE son balanzas de alta resolución. Poseen un protector contra corrientes de aire, para que no influyan las corrientes de convección sobre el resultado de pesada. Para la colocación de la muestra en la cámara de pesaje y retirarla nuevamente, tienen que abrirse y cerrarse las puertas del protector. Esto puede realizarse de diferentes maneras, y puede ser definido por el mismo usuario.

Características

- Las puertas del protector pueden ser abiertas y cerradas en todo momento, independientemente del programa de aplicación que se utiliza.
- Abrir y cerrar las puertas del protector mediante teclas, interruptor externo o mediante comando vía interfaz.
- Las puertas del protector pueden ajustarse de tal manera que al ejecutar una función de balanza, p. ej. tarar:
 - cierren automáticamente
 - cierren automáticamente y, a continuación, se vuelvan a abrir.



Esta función puede ser desactivada. Si está activada, las puertas del protector cierran automáticamente, si la balanza no se utiliza durante 2 minutos (protección contra el polvo).

- La función automática del protector "Cerrar – ejecutar función" es combinable con acciones/programas de aplicación que requieren memorización del peso en estabilidad:
 - encender la balanza (activación – tara)
 - tarar después de estabilidad
 - impresión a solicitud después de estabilidad
 - inicio de todas las funciones de calibración
 - 2. memoria tara
 - memorización manual de peso en las siguientes funciones:
 - conteo, pesada en porcentaje, recalculación, determinación de densidad, pesada diferencial
 - totalización, formulación, estadística
- Una resolución mínima para el valor de pesada es posible con puertas de protector abiertas.

- La tecla izquierda \uparrow/C y la tecla derecha \uparrow/O para activar las puertas del protector pueden
 - tener función idéntica
 - tener función separada
 - desconectarse (Off).

Protector contra corr. de aire ME215/235/414/614/36S:

- El usuario puede definir, qué puertas del protector han de abrirse o cerrarse al pulsar la tecla \uparrow izquierda o derecha (la balanza tiene la capacidad de aprender).
- Cuando la puerta, al deslizarse, encuentra un obstáculo se comporta de la manera siguiente:
 - al abrir: la puerta se detiene
 - al cerrar: la puerta se abre de nuevo.

Ajustes de fábrica de los parámetros
Tecla izquierda/derecha del protector:
Función idéntica

Modo automático: **Off**

Resol. peso al abrir puerta:
Con todas las posiciones


Protector contra corrientes de aire ME5 | SE2

- El usuario puede definir la función del protector:

Teclas	Setup, teclas del protector:	Función idéntica	Función separada
Tecla	<ul style="list-style-type: none"> abrir, según posición previamente ajustada, o bien entrada por teclado para ángulo de abertura cerrar 		<ul style="list-style-type: none"> abrir en 100° en sentido de las agujas del reloj cerrar
Teclado alfanumérico + tecla	<ul style="list-style-type: none"> entrar y memorizar ángulo de abertura 44° – 181°: abre en sentido contrario a las agujas del reloj 182° – 316°: abre en el sentido de las agujas del reloj 0° – 43°: borra la posición memorizada 		ninguna función
Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> Sí: seleccionar posición abertura deseada, manualmente 		No

Preparación

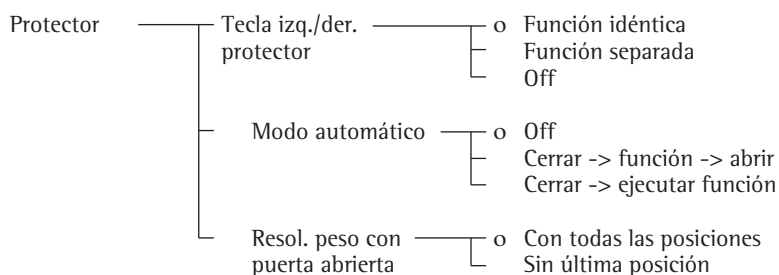- Encender balanza: tecla **1/0**
- > Aparece Logo Sartorius
- Configurar función del protector en Setup: pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar parámetros del aparato: pulsar Softkey **↵**, Softkey **➤**
- Seleccionar **Protector** : pulsar Softkey **➤**



o = Ajuste de fábrica

ver también en “Ajustes previos”: “Parámetros del aparato (sinopsis)”

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey **⏪**

Asignar función apertura de puertas en modelos ME215/235/414/614/36S:


Ejemplo 1: abrir y cerrar puertas superior y derecha del protector, con tecla **↕** derecha.

Desviación del ajuste fábrica: ninguna

- En caso dado, cerrar todas las puertas del protector.
- Desde las asas de puertas superior y derecha del protector (2 y 3) empujarlas suavemente hacia atrás ya sea simultáneamente, o bien, una después de la otra, para así activar el motor que las abra automáticamente.
- Pulsar la tecla **↕** derecha, para memorizar este modo de apertura de puertas; las puertas se cierran. Al pulsar nuevamente la tecla **↕** derecha, se activan las puertas superior y derecha del protector.
- En caso dado, cerrar todas las puertas del protector.
- Empujar suavemente hacia atrás el asa de la puerta derecha del protector (3), para activar la función del motor que la abra automáticamente.
- Pulsar tecla **↕** izquierda, para memorizar este modo de apertura; la puerta se cierra. Al volver a activar la tecla **↕** izquierda se activa la puerta derecha del protector.
- Empujar suavemente hacia atrás el asa de la puerta izquierda del protector (1), para activar la función del motor que la abra automáticamente.
- Pulsar tecla **↕** derecha, para memorizar este modo de apertura; la puerta se cierra. Al volver a activar la tecla **↕** derecha se activa la puerta izquierda del protector.

Ejemplo 2: abrir y cerrar puerta derecha del protector con tecla **↕** izquierda. Abrir y cerrar puerta izquierda del protector con tecla **↕** derecha.

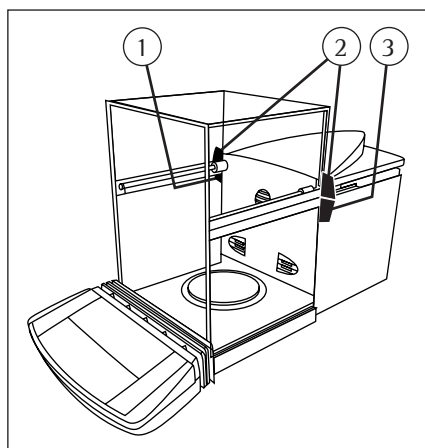Desviación del ajuste de fábrica:
Función separada



Modelos ME215/235/414/614: Eliminador de electrostática (Ionizador) ①

Objeto

Mediante la ionización del aire (con iones de cargas positivas y negativas) el aire del entorno de la muestra a pesar se hace conductible. Luego, en forma de “vía aérea” se eliminan las cargas, conduciéndolas a tierra (masa). Al pesar muestras cargadas electrostáticamente hay que poner especial cuidado.

Características

- Activar y desactivar el ionizador, independientemente de la posición de las puertas del protector contra corrientes de aire.
- Con puertas abiertas y cerradas, el ionizador se desactiva después de cumplirse un intervalo de tiempo predefinido. No obstante, el tiempo se inicia nuevamente, en caso que el ionizador esté aún activo, al cerrarse las puertas.
- El ionizador puede ser ajustado en Setup de manera que, después de iniciar, permanezca activo sólo un intervalo determinado de tiempo (parpadea desde afuera hacia adentro y viceversa).
- El ionizador activo se distingue mediante símbolo intermitente ②.

Ajuste de fábrica de los parámetros
Ionizador: On; Off aut.
tiempo después de 10 seg.

Configurar ionizador

Ionizador — Off
 — On — Off aut. -tiempo:
 1 hasta 99
 segundos

Tecla de función

① Tecla ionizador

Clave de acceso

El acceso a ajustes de parámetros en el menú y la entrada identificaciones ID, así como también de la pesa de calibración exacta puede asegurarse mediante una clave.
Una descripción en detalles, ver en “Ajustes previos: ajustar parámetros del aparato”.

ID usuario

El usuario puede entrar una identificación con su referencia (máx. 20 caracteres).

Reloj

En especial, los protocolos ISO/GLP/GMP tienen que documentar la fecha y hora de la medición. En otros protocolos puede indicarse la fecha y la hora.
Una descripción con ejemplo, ver en “Ajustes previos: ajustar parámetros del aparato”.

Interfaces

Objeto

Aquí se ajustan los parámetros para las siguientes interfaces:

- Comunicación serial
- Impresora serial
- Función interruptor externo
- Función puerto control

Comunicación serial

La comunicación serial puede ajustarse para los siguientes usos:

- SBI
- XBPI

Impresora serial

La impresora serial puede ajustarse para las siguientes impresoras:

- YDP01IS
- YDP02
- YDP03
- YDP01IS-Etia.
- YDP02IS
- YDP02IS-Etia.
- Universal
- YDP04IS
- YDP04IS-Etia.

Interruptor externo universal

A una de ambas interfaces puede conectarse un interruptor externo universal (p. ej. interruptor de pedal/lector cód. de barras/teclado).
A este interruptor puede asignársele una de las siguientes funciones, que puede ser activada mediante este dispositivo:


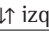

- Tecla Print
- Tecla Tara
- Tecla Cal
- Función tecla F1
- Tecla CF
- Función tecla F2
- Lector código de barras/teclado adicional (requerible cable conexión especial)
- Tecla ionizador
- Tecla der. protector
- Tecla izq. protector

Función puerto control

Vía comunicación serial o impresora serial puede conectarse un indicador de control y un interruptor externo universal en la balanza (ajuste de fábrica).

Para esto, la interfaz tiene que configurarse como **entrada** o **salida**.

Asignación de terminales (pines) de la hembrilla de interfaz

Pin	Función "entrada"
15	Tecla  ver interr. univ.
16	Tecla  izquierda
17	Tecla softkey6 (tecla Cal)
18	Tecla softkey1 (tecla F1)
19	Tecla  Tare

Pin	Función "salida"
15	"Interruptor externo universal" (ver parte anterior)
16	Salida control 1: menor
17	Salida control 2: igual
18	Salida control 3: mayor
19	Salida control 4: "set" (debido)

Más informaciones sobre asignación de terminales, ver en "Sinopsis"

Indicación

La indicación puede ajustarse individualmente.

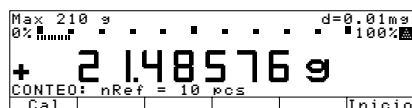
El contraste puede ajustarse en 5 grados **Contraste**

Letras y caracteres pueden aparecer en negro sobre fondo blanco, o a la inversa **Fondo**




La barra gráfica y la línea para texto pueden quitarse de la indicación, ya sea individual o conjuntamente.


Tamaño dígitos




10mm + barra gráf. + ind. texto

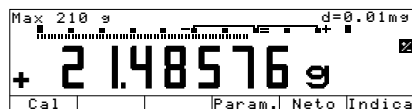

13mm+barra gráfica

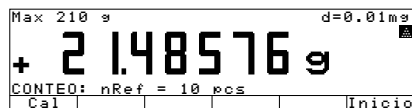

13mm + indic. de texto

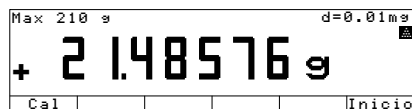


13mm

Los pictogramas de aplicación pueden ser quitados.

Símbolos de aplicación

Teclas


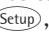
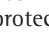

A la tecla  pueden asignársele diferentes funciones para borrar entradas y aplicaciones.

En aplicaciones se borran, ya sea, los valores memorizados de todas las aplicaciones, o bien, selectivamente sólo los valores memorizados de la aplicación activa.

Función CF en aplic.

En las entradas se borra, ya sea, la entrada total, o bien, sólo el último carácter.

Función CF al entrar

Las funciones de teclas pueden quedar bloqueadas, ya sea, todas las teclas (excepto las teclas    , protector a derecha/izquierda y ionizador), o bien, sólo las teclas alfanuméricas.

Bloqueo de las funciones de teclas

Funciones extras

Señal acústica

La pulsión de una tecla es confirmada mediante una señal acústica. Cuando la activación de tecla está permitida en el estado de funcionamiento actual, se emite un tono simple, si no está permitida se emite doble tono (la tecla, en este caso, no activa función). En Setup puede ajustarse que

- la señal acústica se emita (On)
- la señal acústica no se emita (Off)

Modo activación

La balanza puede ajustarse para que, al realizar conexión a la red

- active el modo (Off) (Off/On/Standby)
- active el modo automáticamente (Auto On).

Además, la balanza puede ajustarse de tal manera que al apagar (después de estar en funcionamiento) active el modo Standby (Off/On/Standby).

Después de encender se realiza un test de las funciones (línea para texto: TEST; Barra gráfica: sube).

Calibración, ajuste, linealización

Objeto

Calibrar es determinar la desviación entre el valor de medición indicado y el valor real de masa. Al calibrar no se realiza modificación alguna en la balanza.

Ajustar es la acción que repara la desviación entre valor indicado y valor real de masa, o bien, que la reduce a límites permisibles de error.

Linealizar es la actividad que elimina la desviación de la línea característica de medición ideal entre el valor de peso indicado y el valor de masa real, o bien, que la reduce a límites permisibles de error. La línea característica de medición representa una recta entre carga cero y máxima.

Características

Puede definirse, si el modo de calibración

- es con ajuste fijo (externo/interno) o bien
- el usuario puede seleccionar – después de pulsar softkey **Cal –Modo seleccionar**

La calibración puede realizarse externamente (Parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Función tecla CAL; Item de menú **Cal./ajust. ext.: pesa estándar** o bien **Cal./ajust. ext.: pesa selecc.**) o bien, internamente **Cal./ajust. internos**.

El ajuste puede ser:

- automático, después de calibrar **Cal. con ajust. ext. autom.** o bien
- en caso necesario, iniciar a solicitud después de calibrar **Cal. con ajust. manual**

La linealización se realiza, si en Setup se ha seleccionado **Linealización interna** o bien el usuario la ha ajustado mediante **Modo seleccionar**.

La necesidad de una calibración puede indicarse automáticamente, cuando la temperatura del entorno ha variado, con relación al último proceso de calibración/ajuste, o bien, cuando un intervalo fijo de tiempo se ha completado.

El proceso de calibración/ajuste puede inicializarse automáticamente (isoCAL), cuando el valor de intervalo o de temperatura han sido superados **Activada con borrado de apli.** y **Activada sin borrar apli.** (ver aquí también página 63).

Los resultados de calibración y ajuste pueden ser impresos en un protocolo ISO/GLP (ver en pág. 139).

Ajuste de fábrica de los parámetros

Modo de calibración y ajuste: **Modo seleccionar**

Proceso de la calibración y ajuste: **Cal. con ajust. autom.**

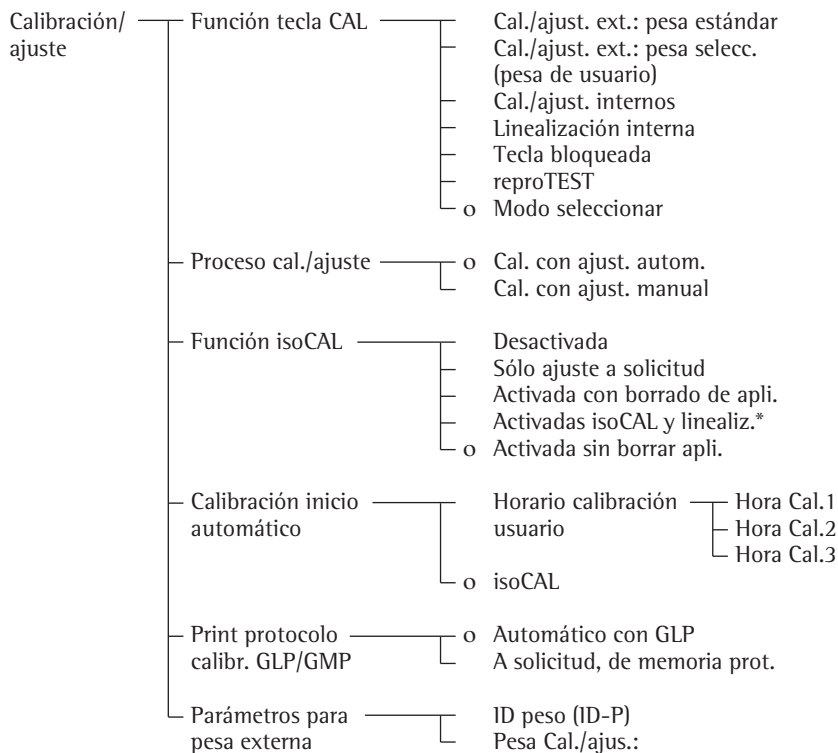
Función isoCAL: **Activada sin borrar apli.**

Inicio calibración automática: **isoCAL**

Print protocolo calibr. GLP/GMP: **Automático con ajuste GLP**

Preparación

- Ajustar parámetros de balanza para “Calibración/ajuste”: pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar **Parámetros de balanza**: pulsar Softkey **➤**
- Seleccionar **Calibración/ajuste**: pulsar Softkey **➤**




o = ajuste de fábrica

* con borrado de la aplicación

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀◀**

Desbloquear calibración externa en balanzas verificadas

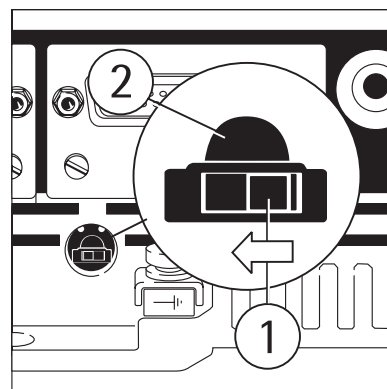- Quitar tapita protectora, en la parte trasera de la carcasa
- Deslizar interruptor 1, en dirección de flecha


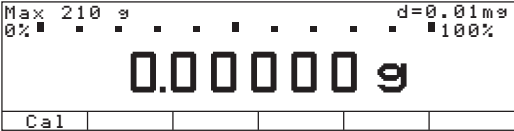

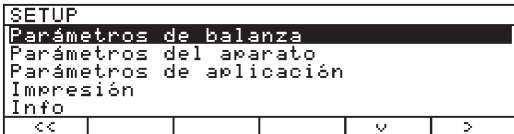

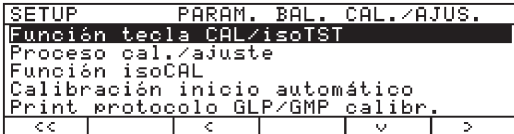
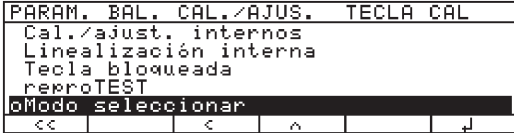
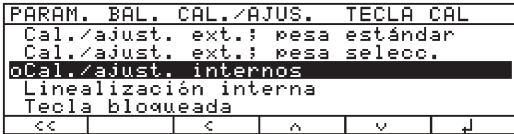
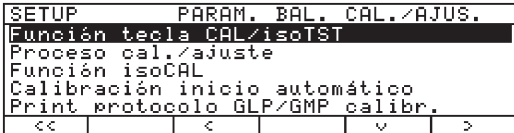
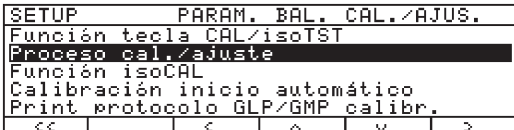


- > Posición a la izquierda del interruptor: calibración externa accesible
- Posición a la derecha del interruptor: calibración externa bloqueada

- Advertencia:
No activar el interruptor 2

Preparación

Ejemplo: Ajustar parámetros para “Calibración y ajuste”, p. ej. con calibración y ajuste manual, isoCAL desactivada

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. en caso dado, encender		logo Sartorius 
2. seleccionar ajustes previos		
3. seleccionar parámetro de balanza	Softkey ➤	
4. seleccionar calibración/ajuste	Softkey ➤	
5. seleccionar función tecla CAL	Softkey ➤	 ◻ = ajuste última selección
6. seleccionar función deseada y confirmar (p. ej. Cal./ajust. internos)	caso dado, repetidam.Softkey ↗ Softkey ↵	
7. abandonar función tecla CAL	Softkey ⬅	
8. seleccionar proceso Cal./ajuste	Softkey ▼	

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
9. confirmar proceso Cal./ajuste	Softkey ➤	<div>PARAM. BAL. CAL./AJUS. PROC.CAL./A</div> <div>oCal. con ajust. autom.</div> <div>Cal. con ajust. manual</div> <div><< < v ↓</div> <div>○ = ajuste última selección</div>
10. en caso dado, seleccionar otro ajuste y confirmar (p. ej. Cal. con ajust. manual)	Softkey v y ↓	<div>PARAM. BAL. CAL./AJUS. PROC.CAL./A</div> <div>Cal. con ajust. autom.</div> <div>oCal. con ajust. manual</div> <div><< < ^ ↓</div>
11. abandonar proceso Cal./ajuste	Softkey <	<div>SETUP PARAM. BAL. CAL./AJUS.</div> <div>Función tecla CAL/isoTST</div> <div>Proceso cal./ajuste</div> <div>Función isoCAL</div> <div>Calibración inicio automático</div> <div>Print protocolo GLP/GMP calibr.</div> <div><< < ^ v ></div>
12. seleccionar función isoCAL	Softkey v	<div>SETUP PARAM. BAL. CAL./AJUS.</div> <div>Función tecla CAL/isoTST</div> <div>Proceso cal./ajuste</div> <div>Función isoCAL</div> <div>Calibración inicio automático</div> <div>Print protocolo GLP/GMP calibr.</div> <div><< < ^ v ></div>
y confirmar	Softkey ➤	<div>PARAM. BAL. CAL./AJUS. FNC. ISOCAL</div> <div>Desactivada</div> <div>Sólo ajuste a solicitud</div> <div>Activada con borrado de apli.</div> <div>Activadas isoCAL y linealiz.</div> <div>oActivada sin borrar apli.</div> <div><< < ^ ↓</div> <div>○ = ajuste última selección</div>
13. caso dado, seleccionar otro ajuste y confirmar (aquí p. ej. desactivar función isoCAL)	repetidam. Softkey ^ Softkey ↓	<div>PARAM. BAL. CAL./AJUS. FNC. ISOCAL</div> <div>oDesactivada</div> <div>Sólo ajuste a solicitud</div> <div>Activada con borrado de apli.</div> <div>Activadas isoCAL y linealiz.</div> <div>Activada sin borrar apli.</div> <div><< < v ↓</div>
14. memorizar ajustes y abandonar Setup	Softkey <<	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 100%</div> <div>0.00000 g</div> <div>Cal</div>

Selección del modo de calibración y ajuste






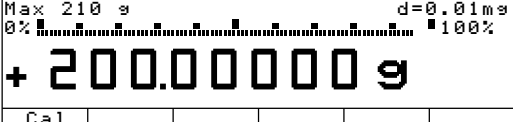
En Setup (parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Tecla función CAL debe estar ajustado el ítem **Modo seleccionar** (ajuste de fábrica). Después de pulsar Softkey **Cal** puede seleccionarse con Softkey **Selecc** uno de los siguientes modos:

- Calibración/ajuste internos **Cal./ajust. internos**
- Linealización interna **Linealización interna**
- Test de repetibilidad **reproTEST**
- Calibración/ajuste externos con valor predefinido de pesa **Cal./ajust. ext. pesa estándar**
- Calibración/ajuste externos con valor de pesa entrado por el usuario **Cal./ajust. ext. selecc.**

- Iniciar modo deseado: pulsar Softkey **Inicio**

En modo seleccionar: calibrar balanza en forma externa y ajustar automáticamente con pesa estándar

Ajustes previos:
como el ajuste de fábrica

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. seleccionar calibración	Softkey Cal	
2. seleccionar calibración/ajuste externos con pesa estándar	3 x Softkey Selecc	
3. iniciar calibración/ajuste externos	Softkey Inicio	
4. poner pesa estándar (p. ej. 200,00000 g) signo -: peso muy liviano signo +: demasiado peso sin signo: peso o.k.	colocar pesa estándar	
después de calibrar aparece por aprox. 10 segundos: (en balanzas verificadas aparece la desviación entre valor peso indicado y el valor masa convencional)		
después de ajustar aparece		
5. descargar balanza (protocolo ISO/GLP: ver en pág. 139)		

Calibración/ajuste internos

En Setup (parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Función tecla CAL) tiene que estar ajustado, ya sea, **Cal./ajust. internos** o bien, seleccionar mediante **Modo seleccionar** (ajuste de fábrica). En la balanza se encuentra integrada una pesa calibración/ajuste, que puede ser aplicada internamente por motor.

El proceso de calibración y ajuste se desarrolla de la siguiente manera:

- Descargar balanza
- Seleccionar calibración: Softkey **Cal**, Softkey **Inicio**
 - > Pesa de calibración es aplicada automáticamente
 - > Balanza se calibra
 - > Si en Setup está ajustado **Cal. con ajust. autom.** (ajuste de fábrica), la balanza se ajusta a continuación automáticamente
 - > Si en Setup está ajustado **Cal. con ajust. manual**, puede aquí finalizarse “Calibración/ajuste internos” sin ajustar la balanza (por lo demás, ver en “Proceso de calibración/ajuste”, página siguiente)
 - > Balanza retira la pesa de calibración interna
 - > Protocolo ISO/GLP, ver en página 139

Linealización interna

En Setup (parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Función tecla CAL) tiene que estar ajustado, ya sea, **Linealización interna** o bien, seleccionar mediante **Modo seleccionar** (ajuste de fábrica). En la balanza se encuentra integrada una pesa de calibración/ajuste, aplicada internamente por motor.

El proceso de linealización se desarrolla de la siguiente manera:

- Descargar balanza
- Seleccionar linealización: Softkey **Cal**, Softkey **Selecc**, Softkey **Inicio**
 - > Las pesas se aplican una tras otra por motor.
 - > La balanza linealiza
 - > La balanza retira las pesas de linealización
 - > La balanza se ajusta después del proceso interno de linealización automáticamente.
 - > Protocolo ISO/GLP, ver en página 139

Proceso de calibración y ajuste

En Setup puede ajustarse que:

- la calibración y ajuste sea siempre un proceso automático.
Cal. con ajust. autom.
(ajuste de fábrica) o bien, que
- después de la calibración exista la posibilidad de finalizar el proceso o de iniciar el ajuste **Cal. con ajust. manual**

Si al calibrar no se detecta desviación representativa que afecte la precisión exigida de medición, no será necesario ajustar la balanza. Para este caso, el proceso de calibración/ajuste puede ser finalizado después de calibrar.

Dos Softkeys se encuentran activas:

- **Inicio** para inicializar el proceso
- **Fin** para finalizar el proceso

Calibración/ajuste externos con un valor de pesa entrado por el usuario

En Setup (parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Función tecla CAL) tiene que estar ajustado el ítem **Cal./ajust. ext.: pesa selecc.** o bien, seleccionar mediante **Modo seleccionar** (ajuste de fábrica).

Puede utilizarse una pesa propia para la calibración/ajuste. Calibración/ajuste externos ha de realizarse sólo con pesas que tengan trazabilidad con un estándar nacional y cuyos límites de error importen, como máximo, 1/3 de la tolerancia exigida para la precisión de indicación.


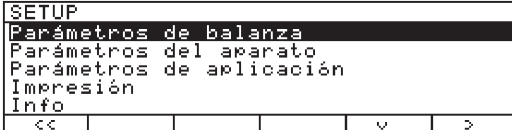



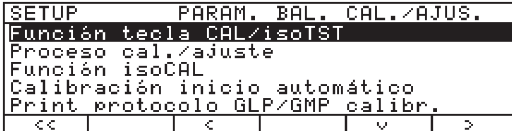
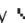
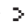
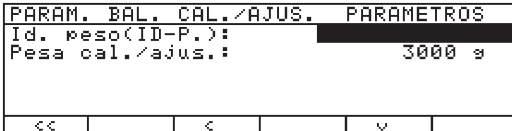


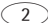

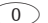


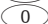
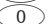
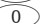


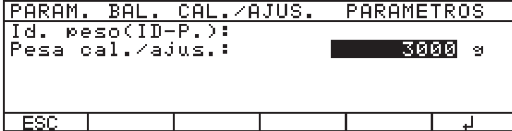

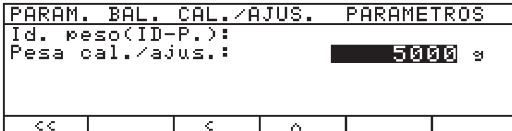

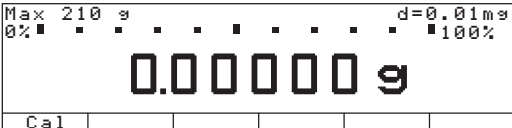
Proceso de calibración/ajuste externos: ver columna izquierda. Primeramente seleccionar modo cal./ajust. externos, elegir "pesa selecc." (pesa usuario).

En fábrica se ha definido un valor de pesa (ver en "Datos técnicos").

Restituir valor de pesa entrado al ajuste de fábrica:

- Entrar manualmente valor de pesa: ver en "Datos técnicos"

Entrar pesa de calibración

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. seleccionar Setup		
2. seleccionar parámetros de balanza	Softkey 	
3. seleccionar calibración/ajuste	Softkey 	
4. seleccionar parámetros para pesa externa	5 x Softkey  Softkey 	
5. selecc. línea para pesa Cal./ajust	Softkey 	
6. entrar pesa calibración (p. ej. 200,00000 g) y memorizar	         	<p>100.00000 = ajuste última selección</p> 
7. memorizar pesa calibración	Softkey 	
8. abandonar Setup	Softkey 	

isoCAL:

Calibrar, ajustar y linealizar automáticamente

En Setup (parámetros de balanza: Calibración/ajuste: Función isoCAL) tiene que estar ajustado, ya sea, el ítem **Activada con borrado de apli.** o bien, **Activadas isoCAL y linealización** o bien, **Activada sin borrar apli.** (ajuste de fábrica).

La balanza indica automáticamente, con el texto intermitente “isoCAL”, si la temperatura del entorno ha variado respecto al último proceso de calibración/ajuste, o bien, cuando se ha cumplido un intervalo de tiempo predefinido. La balanza, entonces, quiere autocalibrarse.

Se anuncia el proceso de calibración/ajuste internos, si se cumplen las siguientes condiciones:

- variación de temperatura mayor que 1,5° o intervalo de tiempo mayor que 4 horas.
- balanza no está en modo Setup
- sin entrada activa de cifras o letras
- ninguna modificación de carga durante los últimos 2 minutos
- balanza no es utilizada durante 2 minutos
- el peso colocado debe importar máximo 2% de alcance máximo.
 - encendida después de una separación de la tensión de red, en balanzas verificadas.

Si las condiciones se han cumplido, aparece **C** en la línea para valores de peso.

En caso que, a continuación, no se realice manejo ni exista variación de carga, se inicializará, después de 15 segundos, automáticamente la calibración/ajuste internos.

Calibración, ajuste, linealización automáticos en intervalos fijos*

Para la calibración pueden entrarse en Setup hasta 3 tiempos fijos por día (ver en sinopsis del menú, página 55). La balanza indica automáticamente, mediante el símbolo intermitente “isoCAL”. La calibración según tiempo fijo no se recupera, si la balanza durante ese momento

- se encontraba apagada (standby), o bien,
- en modo Setup.

La calibración según tiempo fijo no se recupera, si la balanza está operando durante el momento de cumplirse el intervalo.

La calibración y ajuste internos automáticos en tiempos fijos se indica, si se satisfacen los siguientes requerimientos:

- cumplido el tiempo fijado
- balanza no se encuentra en modo Setup
- sin entrada activa de cifras o letras (p. ej. también entrada de ecuación)
- ninguna variación de carga durante los últimos 2 minutos
- sin utilizar la balanza durante los 2 últimos minutos
- valor de pesa colocada debe importar máximo 2% del alcance máximo

* = excepto en balanzas verificadas

En Setup puede ajustarse que, después de la calibración y ajuste

- reinicie el programa de aplicación **Activada con borrado de apli.**
- se active isoCAL y linealización y que se reinicie el programa de aplicación **Activadas isoCAL y linealización**
- permanezca el programa de aplicación en el modo previo **Activada sin borrar apli.**

En Setup puede ajustarse que sólo se indique el deseo de calibración de balanza, sin realizar calibración y ajuste automáticos

Sólo ajuste a solicitud

Protocolo de bloque
El resultado de un proceso de calibración/ajuste puede ser impreso. La definición de ajuste se realiza: Impresión inmediatamente al finalizar el proceso, o bien, con acumulación de resultados (hasta 50 procesos) y a solicitud como protocolo de bloque.

Protocolo de bloque de los resultados de calibración/ajuste
Pueden acumularse hasta 50 protocolos de procesos de calibración/ajuste e imprimirse a solicitud, si lo siguiente está ajustado en Setup (Setup: Parámetros de balanza: Calibración/ajuste):

- A solicitud, de
memoria prot.

Con un contenido de memoria de 50 protocolos:

- los protocolos siguientes son impresos inmediatamente

Si existe, por lo menos, un protocolo, aparecen, después de pulsar softkey **CALL**, las siguientes Softkeys:

Info Indica, en la línea de texto, la cantidad de protocolos acumulados

ImPro Imprimir protocolos
acumulados

BorPro Borrar de la memoria protocolos acumulados, después de realizada una impresión exitosa. En caso que en el Setup: Parám. aparato – se encuentre definición de clave de acceso – entonces, hay que entrar primeramente esta clave, o bien, la clave general de usuario, antes de borrar protocolos.

En ajuste interno se imprime también el motivo para iniciar proceso de calibración/ajuste en la línea:

Inicio

```

-----
13.03.2000      09:17
          SARTORIUS
Mod.            ME215S
N. serie       60419914
N. vers.       01-41-01
ID

```

```
24.04.2000      12:03
Ini:            manual
Diff. +        0.00001 g
Calibracion externa
                listo
```

```
25.04.2000      12:10
Ini:      isoCAL/Temp
Diff. +      0.00001 g
Ajuste interno
           listo
Diff. +      0.00000 g
```

```

25.04.2000      18:30
Ini:           hora
Diff. +      0.00001 g
Ajuste interno
              listo
Diff. +      0.00000 g

```

```
26.04.2000      9:37
Ini:            manual
Diff. +        0.00001 g
Ajuste interno
               listo
Diff. +        0.00000 g
```

```

27.04.2000      11:53
Ini:           cal. ext.
W ID
Nom    + 2000.00000 g
Diff.  + 0.00001 g
Ajuste externo
        listo
Diff.  + 0.00000 g

```

13.05.2000 09:17
Nomb:

Lista de procesos de calibración/ajuste:
Ejemplo 1:
Calibración externa

Ejemplo 2:
isoCAL, por diferencia de temperatura

Ejemplo 3:
isoCAL, con tiempo fijo

Ejemplo 4:
Calibración/ajuste internos activación a solicitud (manual)

Ejemplo 5: Calibración/ajuste externos

Pie de pág. GLP

Test de repetibilidad (reproTEST)






Definición

La repetibilidad es la aptitud de la balanza para indicar resultados concordantes, al colocarse repetidamente la misma muestra en el plato de carga, bajo condiciones constantes de control. Como dato cuantitativo se utiliza la desviación estándar de una cantidad predefinida de mediciones.


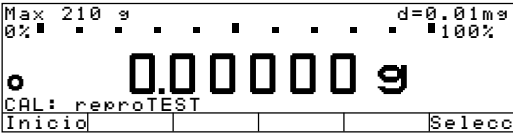
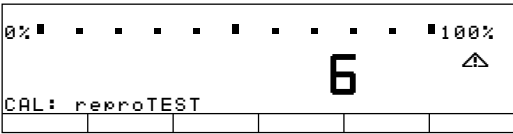
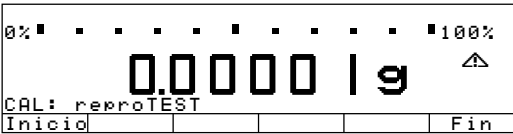
Objeto

La función reproTEST emite la repetibilidad automáticamente (seis mediciones individuales). De esta manera, la balanza cumple con una de las magnitudes más importantes. La indicación se realiza con exactitud de balanza.

Preparación

- Encender balanza: Pulsar tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar reproTEST en Setup: pulsar tecla 
- Parámetros de balanza: Calibración/ajuste: seleccionar Función tecla CAL: utilizar Softkeys  
- Ajustar **reproTEST** o bien, **Modo seleccionar** (ajuste de fábrica): ver en "Ajustes previos"
- Abandonar Setup: pulsar Softkey 

Controlar la repetibilidad de balanza

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. con ajuste previo = reproTEST seguir en ítem 4. Con ajuste previo = Modo seleccionar	Softkey Cal Softkey Cal	
2. seleccionar test repetibilidad	Softkey Selecc	
3. iniciar test repetibilidad	Softkey Inicio	
4. aparece número actual medición p. ej. 6 mediciones a realizar		
aparece desviación estándar		
5. finalizar reproTEST o bien, reiniciar	Softkey Fin Softkey Inicio	

Programas de aplicación

Restituir ajustes de fábrica en el menú

Para cada parámetro existe un ajuste de fábrica. En Setup puede ajustarse que, al confirmar con **Sí**

- se restituyan todos los ajustes de fábrica Setup (**Ajuste fábrica**)

Teclas de función Softkeys

Inicio Iniciar aplicación


Pesar Conmutar a la función básica “Pesar”

Aplicación con inicio automático al encender

En Setup puede ajustarse que la aplicación activa, antes de apagar, inicie automáticamente después de encender (Setup: Parámetros de aplicación: Función : Inicio auto. aplic. al encender)

Advertencia sobre balanzas verificadas:

Todos los programas de aplicación pueden ser seleccionados en las balanzas verificadas. Valores de cálculo están identificados con los siguientes caracteres:

- Porcentaje = %
- Cantidad piezas (conteo) = pcs
- Valores cálculo = 0, 

Conmutación de unidades U1/U2

Objeto

Con este programa de aplicación puede indicarse un valor de peso en dos unidades diferentes. La conmutación se realiza con Softkey. Este programa de aplicación puede utilizarse junto con aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y aplicación 3 (totales, formulación, estadística y funciones adicionales).

Características

- Conmutar unidad del valor de peso
- Ajustar exactitud indicada
- por lo demás, igual que la función básica "Pesar"

Ajustes de fábrica de los parámetros

ME215/235/254/414/614:

Unidad de peso 1: Gramos /g

ME36S, ME5, SE2:

Unidad de peso 1:

Milligramos /mg

Exactitud de indicación 1:

Todas las posiciones

Unidad de peso 2:

Milligramos /mg

Exactitud de indicación 2:





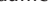


Todas las posiciones


Preparación

En balanzas verificadas: sólo las unidades gramos, quilates y miligramos

En balanzas no verificadas: todas las unidades presentadas a continuación:

Unidad	Conversión	Indicac./impresión	Línea metrológica
Gramos	1.000000000000	g	g
Kilogramos#	0.001000000000	kg	kg
Quilates	5.000000000000	ct	ct
Libras	0.00220462260	lb	lb
Onzas	0.03527396200	oz	oz
Onzas Troy	0.03215074700	ozt	ozt
Tael Hongkong	0.02671725000	tlh	tlh
Tael Singapur	0.02645544638	tls	tls
Tael Taiwan	0.02666666000	tlt	tlt
Granos	15,43235835000	GN	GN
Pennyweight	0.64301493100	dwt	dwt
Miligramos	1000.00000000000	mg	mg
Piezas por libra	1.12876677120	/lb	lb
Tael China	0.02645547175	tlc	tlc
Momes	0.26670000000	mom	M
Quilates austr	5.00000000000	K	K
Tolas	0.08573333810	tol	tol
Bahts	0.06578947437	bat	bat
Mesghales	0.21700000000	MS	MS

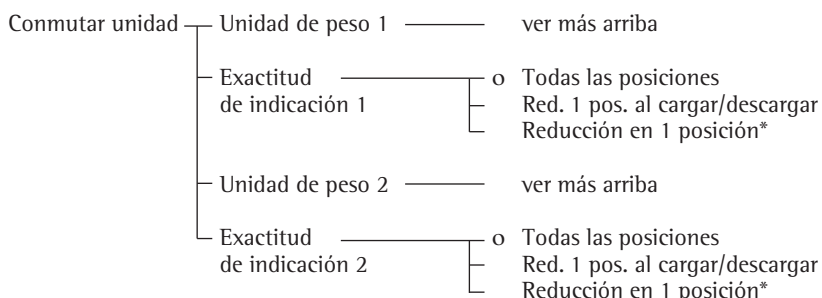- Ajustar programa de aplicación "Conmutar unidades" en Setup: pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2 x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 1 (Aplicación básica)**: pulsar Softkey 
- Seleccionar **Conmutar unidad**: pulsar Softkey , o bien,  (repetidamente)
- Confirmar **Conmutar unidad**: pulsar Softkey 



o = ajuste de fábrica

* = excepto en balanzas verificadas

= excepto en ME36S, ME5, SE2

ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey 

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión (entrada Print-NUM, ID M)

se encuentran accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:

- Calibración/ajuste
- Pulsar Softkey **C** **1**

> seguir en la parte “Calibración, ajuste”

Conmutación a la siguiente aplicación

- Pulsar tecla **↵**

> seguir en programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla **Setup**

> seguir en “Ajustes previos”

Apagar balanza

- Pulsar tecla **⏻**

> La balanza se apaga

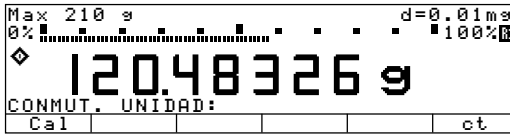
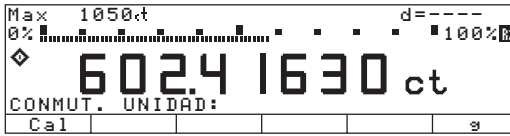
> Indicación Off/standby con retroiluminación

Ejemplo

Conmutar unidad de gramos [g] (1. unidad) a quilates [ct] (2. unidad)

Ajustes previos (desviación del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Conmutar unidad: Unidad de peso 2: Quilates/ct


Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. retornar a la unidad básica (u1: unidad peso 1)	CF	
2. conmutar a unidad peso quilate/ct (u2: unidad peso 2)	Softkey ct	
3. conmutar a unidad de peso gramos [g]	Softkey g	

Objeto

Con este programa de aplicación se determinan cantidades de piezas de peso similar.

Conteo puede utilizarse en combinación con aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y aplicación 3 (totalización, formulación, estadística y funciones adicionales)

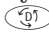Características

- En Setup, la balanza puede ajustarse de tal manera que al ser encendida pueda inicializar con la última cantidad de piezas de referencia nRef y el último peso para la pieza de referencia wRef utilizados Setup: Parámetros de aplicación: Inicio auto. aplic. al encender: On.
- Entrada de la cantidad de piezas de referencia nRef mediante teclas
- Entrada del peso de pieza de referencia wRef mediante teclas
- Memorización del valor de peso actual de la cantidad definida de piezas nRef, para la inicialización al comenzar a trabajar con el programa Conteo
- Ajuste de la Exact. cálc. peso/piezas al memorizar el peso pieza de referencia wRef, en la calculación de la cantidad de piezas
- Salida automática de la cantidad de piezas y peso de piezas, vía interfaz de datos, al finalizar inicialización u optimización durante el modo Conteo (Impresión: Salida aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos los valores
- Conmutar entre cantidad de piezas y valor de peso, con Softkey **Conteo** o **Pesar**
- Conmutación entre conteo y otras aplicaciones, con la tecla  (p. ej. pesada de control

Ajuste de fábrica de los parámetros

Exactitud del cálculo para el peso de piezas:

Exactitud de indicación

Optimización del peso de pieza:

Automática

Teclas de función – Softkeys

nRef	Memorizar valor entrado como cantidad de piezas de referencia
wRef	Memorizar valor entrado como peso de pieza de referencia
Opt.	Criterio de optimización de referencia cumplido y optimización de referencia realizable
Conteo	Conmutación a la aplicación conteo
Pesar	Conmutación al modo pesar
Inicio	Memorización valor peso actual para cantidad predefinida de piezas

Preparación

Para el cálculo de la cantidad de piezas tiene que conocerse el peso promedio de pieza.
Para esto, existen 3 maneras diferentes

- El peso de pieza de referencia se entra mediante teclas y se memoriza.
- Después de encender, la balanza carga la última cantidad entrada de piezas de referencia y se indica. Una cantidad correspondiente de piezas se coloca en la balanza y la inicialización se activa.
- Si la inicialización automática está activada (Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos los valores), después de encender, la balanza conecta en el modo Conteo con el último peso de pieza de referencia, entrado o calculado, más la respectiva cantidad de piezas de referencia.

Optimización de referencia

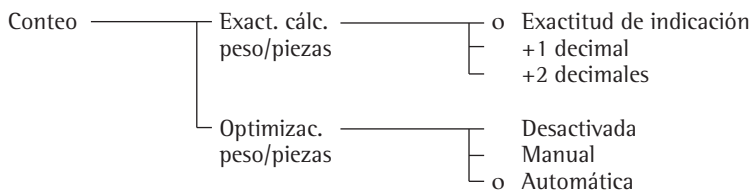
Durante el conteo (al indicarse la cantidad de piezas) puede realizarse una optimización de referencia, si en Setup existe ajuste para la optimización del peso de pieza: manual o automática. La optimización manual puede realizarse sólo al indicarse Softkey **Opt.**. La optimización de referencia debe estar completada en funcionamiento con la aplicación 3.

Softkey **Opt.** se indica si:

- la balanza indica estabilidad
- la cantidad actual de piezas es mayor o menor que la cantidad original
- la cantidad actual de piezas es mayor que 100
- la cantidad de piezas calculada internamente (p. ej. 17,24 pcs) presenta una desviación menor que $\pm 0,3$ pcs respecto a la cantidad total (aquí: 17 pcs).

La optimización manual puede realizarse repetidamente, con cantidad de piezas aproximada al doble.

- Realizar optimización de referencia: pulsar Softkey **Opt.**
- Encender balanza: tecla **ON**
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Conteo": pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2 x Softkey **↵**, Softkey **➤**
- Seleccionar **Aplicación 1 (Aplicación básica)**: pulsar Softkey **➤**
- Seleccionar **Conteo**: pulsar, en caso dado, repetidam. Softkey **↵** o bien **↵**
- Confirmar **Conteo**: pulsar Softkey **➤**



ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀◀**

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

están accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:

Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
- > seguir en "Calibración, ajuste"

Conmutación a la siguiente aplicación

- Pulsar tecla **↵**
- > seguir en el programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla **Setup**
- > seguir en "Ajustes previos"

Apagar balanza

- Pulsar tecla **OFF**
- > Balanza se apaga
- > Indicación Off/standby con retroiluminación


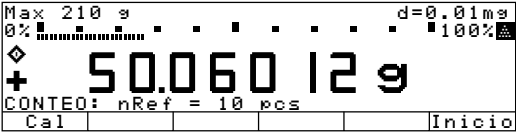

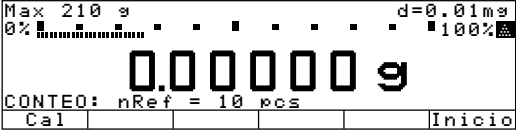
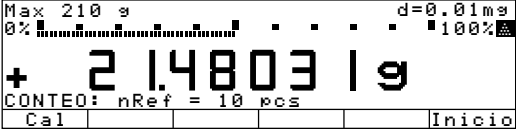
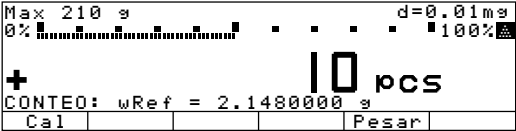
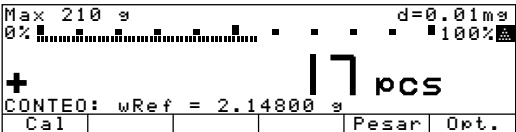
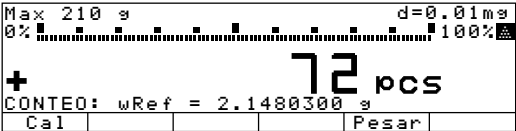

Ejemplo

Determinación de una cantidad de piezas desconocida: pesar cantidad referencial de piezas predefinida

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Conteo: Optimización peso de pieza: Manual

Setup: Salida en aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos los valores

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, borrar valores memorizados		
2. colocar recipiente para llenar con piezas	colocar recip. vacío en la balanza	
3. tarar		
4. colocar cantidad, aquí nRef = 10 pcs	colocar cantidad piezas en el recipiente	
5. determinar peso promedio de pieza (cantidad de decimales del peso pieza de referencia depende del modelo)	Softkey Inicio	 <div> <div>(la salida puede impedirse mediante Setup)</div> <div> nRef + 10 pcs wRef +2.1480300 g </div> </div>
6. caso dado, aumentar cantidad de piezas y realizar optimización de ref. (aquí p. ej. + 7piezas)	Colocar más piezas Softkey Opt.	 <div> nRef + 17 pcs wRef +2.1480300 g </div>
7. pesar cant. desconocida de piezas	colocar muestras en el recipiente	 <div> Qnt + 72 pcs </div>
8. caso dado, imprimir valor medición (aquí p. ej. 72 piezas)		

Pesadas en porcentaje %

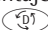
Objeto

Con este programa de aplicación se puede determinar el porcentaje de muestras en relación a un peso de referencia.

Alternativamente puede determinarse la diferencia porcentual entre valor de pesada y peso de referencia, Relación 1 o Relación 2.

La pesada en porcentaje puede combinarse con la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística y funciones adicionales).

Características

- Cargar la cantidad porcentual de referencia pRef, memorizada a largo plazo, al encender la balanza.
- Inicialización automática, al encender la balanza, con cantidad porcentual de referencia pRef, memorizada a largo plazo, y peso de referencia Wxx%, si existe el ajuste en Setup. Setup: Parámetros de aplicación: Inicio auto. aplic. al encender: On
- Indicación del valor de medición como:
 - Residuo
 - Pérdida (valor de diferencia)
 - Relación 1
 - Relación 2dependiente de la selección en Setup.
- Entrada del valor porcentual de referencia pRef mediante teclas
- Memorización del valor de peso actual como peso de referencia Wxx% para la inicialización al comenzar a trabajar con el programa Pesada en porcentaje
- Entrada del peso de referencia Wxx% mediante teclas
- Ajuste de Exactitud memoriz. pesos (redondeo) al memorizar el peso de referencia W100% en el cálculo de porcentaje
- Ajuste de los decimales para la indicación del valor en porcentaje
- Impresión automática del peso de referencia Wxx% en la línea para texto y vía interfaz (si existe ajuste en Setup) al finalizar la inicialización en modo Pesada de porcentaje (Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos los valores)
- Conmutación entre valor porcentaje y peso, con Softkey **Pesar**, o bien, **pct.**
- Conmutación entre pesada de porcentaje y otras aplicaciones con tecla  (p. ej. pesada de control)

Ajuste de fábrica de los parámetros

Exactitud de memorización del valor de peso:

Exactitud de indicación

Posiciones decimales en la indicación del porcentaje: **2 Posiciones**

Indicación cálculo: **Residuo**

Teclas de función – Softkeys

- | | |
|---------------|---|
| pRef | Memorizar valor entrado como valor porcentual de referencia |
| Wxx% | Memorizar valor entrado como peso de referencia |
| Pct. | Conmutación a la aplicación pesada en porcentaje |
| Re-ini | Memorizar el siguiente valor |
| Pesar | Conmutación al modo pesar |
| Inicio | Memorización valor peso actual para cantidad porcentual predefinida |

Preparación

Para el cálculo del valor porcentual tiene que conocerse el valor porcentual de referencia. Para esto, existen 3 maneras diferentes:

- Después de encender la balanza se carga y se indica el último valor porcentual de referencia entrado. Se coloca en la plataforma de pesada un peso de referencia correspondiente y la inicialización se activa.
- Si la inicialización automática (ver pág. anterior) está activada (Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos los valores), la balanza – después de encender – activa el modo Pesada en porcentaje con el valor porcentual de referencia entrado últimamente y el peso de referencia respectivo.
- El peso de referencia se entra mediante teclas y se memoriza (Softkey $\text{M}\times\times\%$) como peso 100%.

- Encender balanza: tecla I/O

> Aparece Logo Sartorius

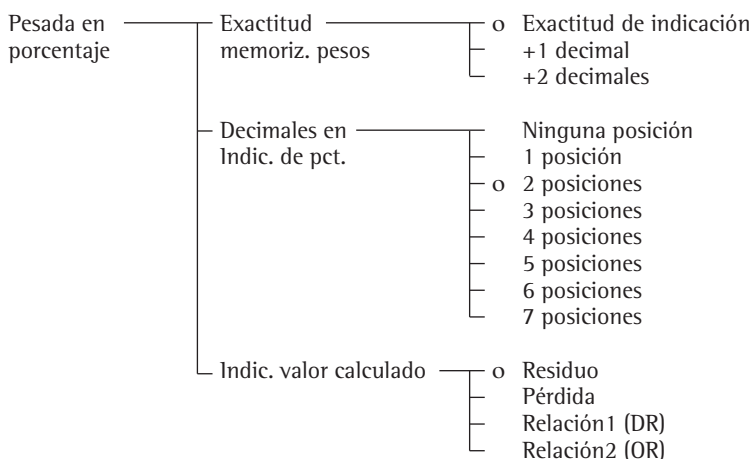
- Ajustar programa de aplicación “Pesada en porcentaje”: pulsar tecla Setup

- Seleccionar parámetros de aplicación: pulsar 2 x Softkey V , Softkey Z

- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey Z

- Seleccionar **Pesada en porcentaje**: pulsar Softkey A o bien V , en caso dado, repetidamente

- Confirmar **Pesada en porcentaje**: pulsar Softkey Z



o = ajuste de fábrica

ver también en “Ajustes previos”: “Parámetros de aplicación (sinopsis)”

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey < <

Ecuación

Residuo, pérdida, relación1 y relación2 se calculan de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}
 \text{Residuo (Pesada en porcentaje)} &= \text{peso actual} / \text{peso } 100\% \cdot 100\% \\
 \text{Pérdida (Porcentaje-diff:)} &= (\text{peso actual} - \text{peso } 100\%) / \text{peso } 100\% \cdot 100\% \\
 \text{Relación1 (Porcentaje-Rel.1:)} &= (\text{peso } 100\% - \text{peso actual}) / \text{peso actual} \cdot 100\% \\
 \text{Relación2 (Porcentaje-Rel.2:)} &= \text{peso } 100\% / \text{peso actual} \cdot 100\%
 \end{aligned}$$

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

se encuentran accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:

Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**

> seguir en “Calibración, ajuste”

Conmutación a la siguiente aplicación

- Pulsar tecla D

> seguir en el programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla Setup

> seguir en “Ajustes previos”

Apagar balanza

- Pulsar tecla I/O

> Balanza se apaga

> Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplos

Calcular valor porcentaje con: memorizar peso colocado como peso de referencia

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Pesada en porcentaje

Setup : Impresión : Salida en aplicaciones: Impresión autom. al inicializar: Todos lo valores




Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, borrar valores memorizados	CF	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>+ 50.060 18 g</div> <div>PES. PORCENT.: pRef = 100 %</div> <div>Cal Inicio</div>
2. colocar recipiente para llenar con piezas		
3. Tara	Tare	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>0.00000 g</div> <div>PES. PORCENT.: pRef = 100 %</div> <div>Cal Inicio</div>
4. poner peso de referencia (p. ej.: 18,21480 g corresponde a 100%)	colocar peso referencia en el recipiente	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>+ 18.2 1480 g</div> <div>PES. PORCENT.: pRef = 100 %</div> <div>Cal Inicio</div>
5. iniciar la balanza	Softkey Inicio	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>+ 100.00 %</div> <div>PES. PORCENT.: Wxx% = 18.21480 g</div> <div>Cal Pesar Re-ini</div> <div>pRef + 100 %</div> <div>Wxx% + 18.21480 g</div>
6. descargar la balanza	retirar peso de referencia del recipiente	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>0.00 %</div> <div>PES. PORCENT.: Wxx% = 18.21480 g</div> <div>Cal Pesar Re-ini</div>
7. calcular valor porcentaje de un peso	colocar muestra en el recipiente	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% 100%</div> <div>+ 98.37 %</div> <div>PES. PORCENT.: Wxx% = 18.21480 g</div> <div>Cal Pesar Re-ini</div>
8. caso dado, imprimir valor medición (aquí p. ej. 98,37%)		<div>pRef + 100 %</div> <div>Wxx% + 18.21480 g</div> <div>Prc + 98.37 %</div>

Objeto

Con este programa, el valor de peso puede ser calculado con auxilio de una ecuación algebraica. Se emplea, p. ej., en la determinación del peso de superficies del papel.

El cálculo puede utilizarse en combinación con la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística y funciones adicionales).

Características

- Inicialización automática al encender la balanza con ecuación memorizada, en tanto se haya entrado en Setup la ecuación y esté ajustado inicialización automática al encender (Setup: Parámetros de aplicación: Inicio auto. aplic. al encender).
- El valor de peso calculado se indica con la identificación . La ecuación aparece en la línea para texto.
- Si no existe ecuación, se indica sólo el valor de peso.
- Conmutar entre indicación valor de peso, entrada de ecuación e indicación del resultado de cálculo, con Softkeys (desde el resultado de cálculo al valor de peso también con la tecla .
- Para la entrada de la ecuación existen cuatro signos de operación (+, -, *, /) y un operando (valor de peso).
- La longitud de la ecuación está limitada a un máximo de 28 caracteres.
- Borrar ecuación o último carácter, con la tecla , según sea el ajuste en Setup (Setup: Parámetros del aparato: Teclas: Función CF al entrar: Borra último carácter).
- Representación del resultado del cálculo con la cantidad de posiciones decimales ajustada en Setup. Las posiciones decimales se reducen, cuando el resultado del cálculo tiene más posiciones de las que pueden aparecer en indicación. Aparece un mensaje de error en los resultados de cálculo que necesitan más posiciones decimales de las que pueden aparecer en la indicación.
- La ecuación se memoriza a prueba contra los fallos de red.

Ajuste de fábrica de los parámetros

Posiciones decimales de resultados del cálculo: **2 posiciones**

Teclas de función – Softkeys

- Ecu.ac.** Conmutar a entrada de ecuación
- +** Agregar signo de adición en la ecuación
- Agregar signo de sustracción en la ecuación
- *** Agregar signo de multiplicación en la ecuación
- /** Agregar signo de división en la ecuación
- Inicio** Iniciar cálculo
- Pesar** Conmutar al modo pesar
- Peso** Agregar operando de valor peso en la ecuación








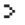
Impresión del cálculo


Se imprime el resultado del cálculo.

Res + 693.88 o

Res: Resultado del cálculo de ecuación



Preparación

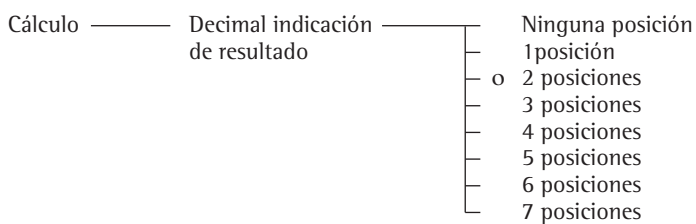- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Cálculo": pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey 
- Seleccionar **Cálculo**: pulsar Softkey  o bien , en caso dado, repetidamente
- Confirmar **Cálculo**: pulsar Softkey 



o = ajuste de fábrica

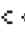ver también "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey  

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

se encuentran accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:


Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
- > seguir en "Calibración, ajuste"


Conmutación a la siguiente aplicación

- Pulsar tecla 
- > seguir en el programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla 
- > seguir en "Ajustes previos"

Apagar balanza




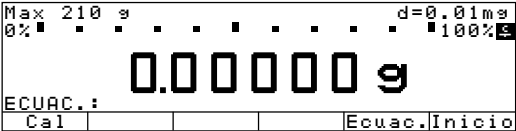
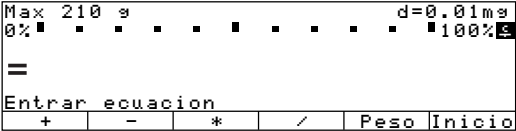





- Pulsar tecla 
- > Balanza se apaga
- > Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplo

Cálculo peso de superficie de papel: Determinar el peso de la superficie de una hoja, norma DIN A4 con superficie $0,210 \text{ m} \times 0,297 \text{ m} = 0,06237 \text{ m}^2$. El peso de superficie resulta al dividir el valor de peso por la superficie.

Ajustes previos (desviación del ajuste de fábrica):

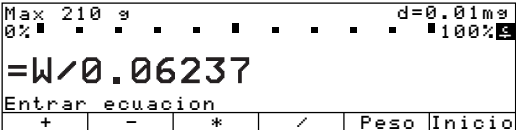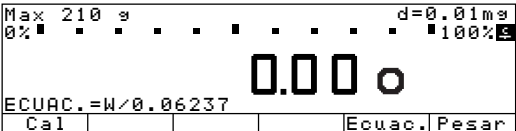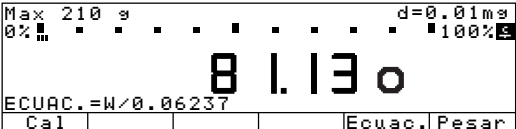Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Cálculo

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes, ver más arriba		
2. caso dado, borrar valores memorizados		
3. tara		
4. seleccionar entrada ecuación cálculo	Softkey Ecuac.	
5. entrar valor de pesada entrar signo de división entrar superficie hoja DIN A 4	Softkey Peso Softkey  	
6. activar indicación resultado del cálculo	Softkey Inicio	
7. determinar peso de superficie	colocar hoja DIN A4	

Determinación de densidad

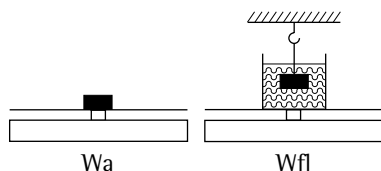
Objeto

Con este programa de aplicación puede determinarse la densidad y el volumen de materias sólidas, pastosas, pulverulentas y líquidas.


La determinación de densidad puede utilizarse en combinación con la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística) y funciones adicionales.

Características


- Determinación de densidad de materias sólidas mediante el método
- empuje



- o desplazamiento

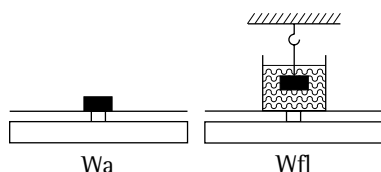

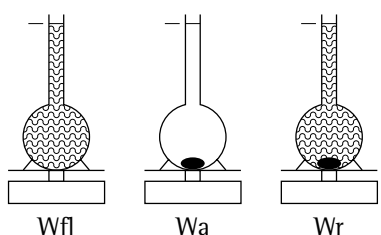- Determinación de densidad de materias pastosas, pulverulentas, según el método del picnómetro



- Determinación de densidad de materias líquidas, según el método de densidad de líquido
- Líquidos agentes pueden ser:
 - agua
 - etanol
 - otros líquidos (entradas las realiza el usuario)
- Entrada de valores conocidos mediante teclas
 - Peso de la muestra en el aire (W_a)
 - Peso de la muestra en líquido, o bien, peso del líquido agente en picnómetro (W_{fl})
 - Peso de la muestra y del líquido agente en picnómetro (W_r)
- Memorización a largo plazo de los parámetros:
 - Temperatura
 - Corrección de empuje
 - Densidad del aire
 - Densidad del líquido de medición
 - Coeficiente de dilatación
 - Volumen del cuerpo sumergible

Ajuste de fábrica de los parámetros

Método: **Empuje**

Líquido de empuje: **Agua**

Decimales en la determinación de la densidad/volumen:

2 Posiciones

Impresión: **No**

Teclas de función – Softkeys

Wa Memoria del valor peso en el aire

Wfl En líquido, empuje y desplazamiento:

- memoria del valor peso en líquido

En picnómetro:

- memoria del valor peso del líquido agente

Wr En picnómetro: memoria del peso de la muestra y líquido agente

Inicio Inicio de una nueva medición

Param. Conmutación a entrada de parámetros (depende del método de medición)



Dens. Indicación de la densidad (la selección se mantiene para la siguiente medición)


Peso Indicación del peso (la selección se mantiene para la siguiente medición)

Vol. Indicación del volumen (la selección se mantiene para la siguiente medición)

Empuje :	<p>Ecuaciones para la determinación de densidad</p> $\text{Rho} = (\text{Wa} * (\text{Rhofl} - \text{LA})) / ((\text{Wa} - \text{Wfl}) * \text{Corr}) + \text{LA}$ <p>En el método empuje se considera en el cálculo, como definición de fábrica – para la corrección del empuje mediante los alambres de la jaula de inmersión del kit para determinar la densidad YDK01 (LP) – el factor 0,99983. Este factor resulta al considerar</p> $\text{Empuje de alambres} = 2 * d^2 / D^2 (\text{Wa} - \text{Wfl})$ <p>En el cálculo se consideran: la cantidad de alambres, el diámetro de los alambres de la jaula de inmersión y el diámetro interno del recipiente utilizado.</p> <p>El factor Corr = 0.99983 resulta también de: $1 - 2 \times d^2 / D^2$</p> <p>En donde: 2 = cantidad de alambres d = diámetro de alambres (0,7 mm) de YDK01 D = diámetro interno de recipiente (76 mm) de YDK01</p> <p>La modificación de este factor Corr puede realizarse al emplear otros recipientes u otros dispositivos de inmersión conmutando con Softkey Par am.</p> <p>Para determinar la densidad de un cuerpo sólido, según el método empuje, hay que utilizar el kit de densidad YDK y recipiente con diámetro 76 mm.</p>
Desplazamiento:	$\text{Rho} = (\text{Wa} * (\text{Rhofl} - \text{LA})) / (\text{Wfl} * \text{Corr}) + \text{LA}$ <p>En el método desplazamiento se considera en el cálculo – para la corrección del empuje y debido al alambre colgante (hilo) en el líquido – el factor 1.00000 con ajuste de fábrica.</p> <p>La modificación de este factor Corr puede realizarse conmutando con Softkey Par am. al emplear otros recipientes, o bien, otros dispositivos de inmersión.</p> <p>En el cálculo del factor de corrección se consideran: la cantidad de alambres, el diámetro del alambre y el diámetro interno del recipiente utilizado.</p> <p>Este factor resulta de: $\text{Corr} = 1 - x * d^2 / D^2$</p> <p>En donde: x = cantidad de alambres d = diámetro del alambre D = diámetro del recipiente</p>
Con:	<p>Rhofl = Densidad del líquido de empuje Wa = Peso de la muestra en el aire Wfl = Peso de la muestra en el líquido/empuje de la muestra Corr = Corrección de empuje mediante alambre inmerso – con método empuje = 0,99983 – con método desplazamiento = 1 LA = Corrección del empuje del aire = 0,0012 g/ccm</p>
Pícnómetro: Con:	<p>$\text{Rho} = (\text{Wa} * (\text{Rhofl} - \text{LA})) / (\text{Wfl} + \text{Wa} - \text{Wr}) + \text{LA}$</p> <p>Rhofl = Densidad del líquido agente Wa = Peso de la muestra Wfl = Peso del agente líquido Wr = Peso de la muestra y agente líquido LA = Corrección del empuje del aire = 0,0012 g/ccm</p>

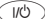Preparación

- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius, se realiza autochequeo
- Ajustar en Setup programa de aplicación “Densidad”: pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey ∇ , Softkey \triangleright
- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey \triangleright
- Seleccionar **Densidad**: pulsar Softkey \wedge o bien ∇ , en caso dado, repetidamente
- Confirmar **Densidad**: pulsar Softkey \triangleright

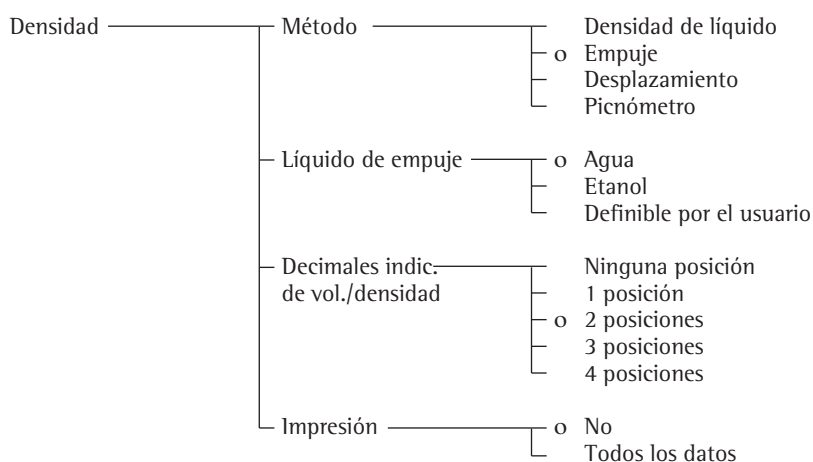

o = ajuste de fábrica

ver también en “Ajustes previos”: “Parámetros de aplicaciones (sinopsis)”

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

se encuentran accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:

Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
> seguir en “Calibración, ajuste”


Conmutación a la siguiente aplicación

- Pulsar tecla 
- > seguir en el programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla **Setup**
- > seguir en “Ajustes previos”

Apagar balanza


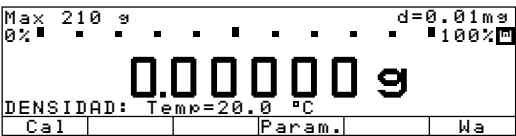
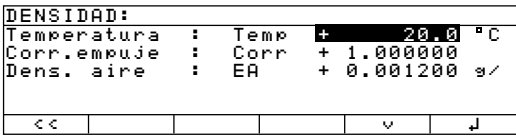
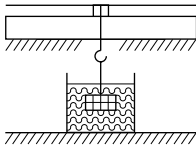

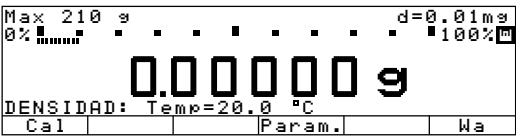
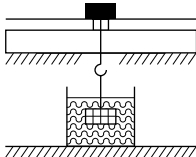
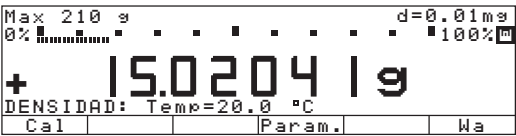
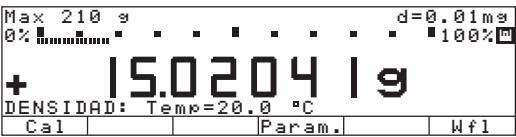
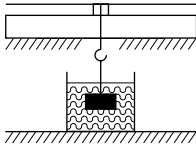
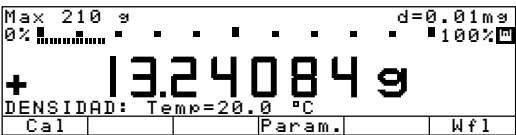
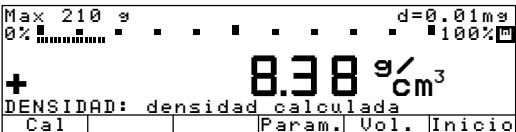
- Pulsar tecla 
- > Balanza se apaga
- > Indicación: Off/Standby con retroiluminación



Ejemplo

Empuje: Determinación de densidad de un cuerpo sólido, según el método empuje en agua como agente líquido.

Ajustes previos (desviación del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Densidad

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, borrar valores memorizados		
2. caso dado, modificar parámetro	Softkey Param.	
3. colgar jaula, sumergida en agua		
4. tarar balanza		
5. determinar peso del cuerpo en el aire: colocar muestra en la balanza		
6. memorizar valor de pesada	Softkey Wa	
7. determinar peso en líquido: colocar muestra en la jaula		
8. memorizar peso muestra en líquido, se indica densidad de la muestra	Softkey W f 1	

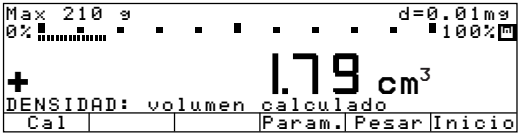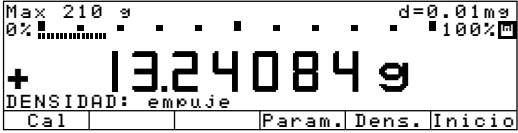Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
9. indicar volumen de la muestra	Softkey V o l .	
10. indicar valor de pesada	Softkey P e s a r	
11. caso dado, pesar sig. muestra	Softkey I n i c i o	

Pesada diferencial ↗

Objeto

Con este programa de aplicación pueden pesarse una o varias muestras en estado original y después de un tratamiento (p. ej. secado, calcinación) y luego emitir y calcular la diferencia de los pesos.

Aquí son posibles diferentes procedimientos:

- Determinación completa de la muestra con peso tara, pesada inicial y pesada final; luego, determinar la muestra siguiente, etc. (pesada individual consecutiva).
- Determinar primero peso tara y peso inicial de cada muestra; después, determinar todos los valores de las pesadas finales (pesada conjunta).
- Determinar primero los pesos tara de todas las muestras, luego los pesos iniciales de todas las muestras y, finalmente, los pesos finales de todas las muestras (pesada en serie).

Característica

- 4 secuencias diferentes para las mediciones pesos tara, valores pesadas iniciales y pesadas finales:
 - Pesada individual
 - Pesada individual consecutiva
 - Pesada conjunta
 - Pesada en serie
- Pesada consecutiva ajustable en Setup, o bien, con Softkey **Sec-P** (si en Setup está ajustado "Tecla Sec-P")
- Posible hasta 99 pesadas finales por muestra
- Pesada diferencial con y sin pesada de tara, posible (p. ej. pesadas tara no son necesarias al medir recubrimientos)
- Cantidad de decimales para el valor de indicación cálculo, ajustable
- Memorización automática de valores peso dependiente de estabilidad, ajustable
- Alcance mínimo para memorización automática de valores peso ajustable, dependiente de los dígitos de indicación
- Función catálogo con

Página de lote:

Lista de todos los lotes (máx. 100) con cantidad de muestras y estado de ejecución (pesada tara, inicial, final)
Ver, definir, renombrar y borrar lotes
Entrada de un factor de cálculo
al definir un nuevo lote

Página de las muestras:

Lista de todas las muestras (máx. 999) con estado de ejecución:
Ver, borrar, omitir e incluir muestras

Página valores de medición:

Fecha, hora, identificación y valor determinado de una muestra

Página resultado:

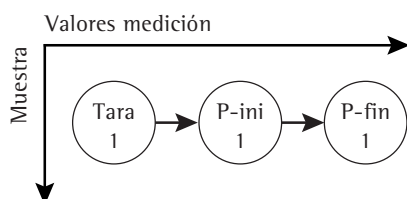
Valores calculados (residuo, pérdida, Relación 1, Relación 2) de una muestra

- Estadística de lotes dependiente del valor residuo, pérdida o Relación, posible en página estadística especial
- Indicación de página lotes, muestras, valores medición, resultados, mediante Softkey correspondiente
- Indicación de determinados lotes/ muestras/valores medición, según entrada alfanumérica de identificación y Softkey **Lote/Muestr./Peso**
- Impresión de protocolo dependiente del estado de ejecución de la muestra, posible
- Salida como protocolo individual, pesada final y estadística
- Impresión de protocolo configurable por el usuario
- Selección de la secuencia de medición y selección de resultado, se memoriza según lote.


Pesada diferencial: definir secuencia de medición

Existen 4 secuencias diferentes para las mediciones de pesos tara, pesos iniciales y pesos finales en la pesada diferencial:

1. Pesada individual
pesada de tara, pesada inicial y pesada final de una muestra se determinan en esta secuencia.




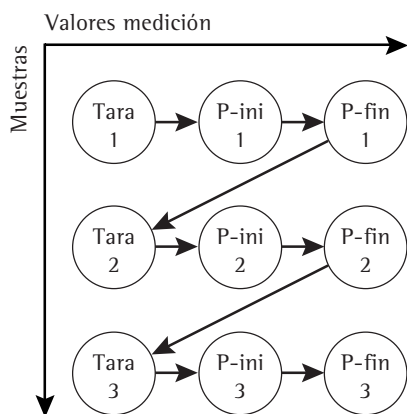2. Pesada individual consecutiva de varias pesadas individuales (ver más arriba) se realizan una tras otra.




3. Pesada conjunta

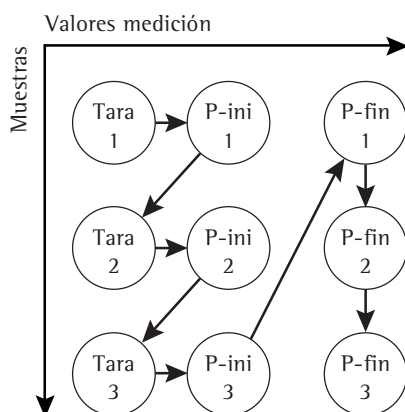Primero se determina el peso tara y peso inicial de cada muestra (en esta secuencia), después se determinan los pesos finales de todas las muestras.



4. Pesada en serie

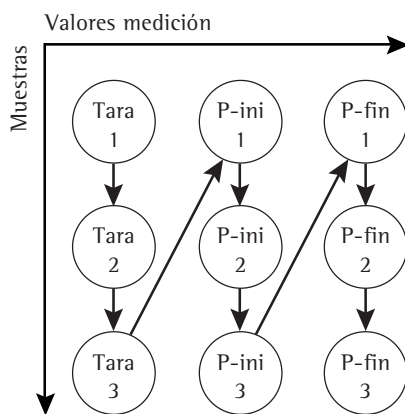Primero se determina el peso tara de cada muestra, luego se determina el peso inicial de cada muestra, finalmente se determina el peso final de cada muestra.



secuencia de pesada se ajusta en Setup, o bien, con Softkey **Sec-P** (si ajuste "Tecla Sec-P" está activado en Setup

Ajuste de fábrica de los parámetros

Secuencia de pesada:

P- conjunta

Pesada de tara: **Activada**

Resultado con decimal:

2 posiciones

Memorización automática:

Desactivada

Carga mínima para la memoria auto.:

10 dígitos

Memorización de estadística: **No**

Impresión de protocolo:

Auto. desp. de p-final

ID muestra en línea para texto:

No

Tecla Sec-P:

Sí

Borrar muestra con descarga + result + p-indiv.:

No

Memoriz. últ. resultado como p-ini.:

No

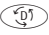

Impresión de protocolo para pesada diferencial


Impresión automática de protocolos configurados

El protocolo configurado de pesadas finales se imprime automáticamente, después de realizar pesada final, si ha sido ajustado en Setup: Aplicación 1: Pesada diferencial: Impresión de protocolo uno de los tres ajustes siguientes:

Autom. después de la pesada final
Autom. después de pesada inicial y final
Autom. desp. de p-tara, inicial, final

Impresión manual de protocolos configurados

El “protocolo individual” configurado se imprime durante la tara, pesada inicial, pesada final y después de conmutar al modo de pesada con la tecla  se pulsa la tecla .

El “protocolo pesada final” configurado se imprime, al pulsar la tecla  después de pesada final con indicación de resultado.

El “protocolo de estadística” configurado se imprime, si




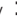

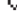


- se indica la página de estadísticas
- en las muestras con diferente cantidad de mediciones por muestra (p. ej. estadística de todas las muestras con 2 pesadas finales): se han seleccionado las muestras con una cantidad determinada de pesadas finales

y se pulsa la tecla 

Se imprime:
protocolo de pesada final configurado (ejemplo)

-----		Línea de rayas
16.11.1999	14:55:12	Fecha/hora
Lote	CH12345	Identific. lote
Muestra	14	Número de muestra
ID	CX88	Identific. de muestra
T1	+ 23.45821 g	Peso tara (con entrada PT1)
N1	+125.57234 g	Peso inicial
R (3)	+103.68442 g	Peso final (residuo como peso)
R	+ 82.57 %	Residuo en porcentaje
D	- 21.88792 g	Pérdida como peso
D	- 17.43 %	Pérdida en porcentaje
Fact	+ 1.10345	Factor de cálculo
D-Res	- 24.15 o	Pérdida calculada
Rel.1	+ 21.11 %	Relación1
Rel.2	+ 121.11 %	Relación2
-----		Línea de rayas

Preparación

- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius, se realiza autochequeo
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Pesada diferencial": tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2 x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey 
- Seleccionar **Pesada diferencial**: pulsar Softkey  o bien , en caso dado, repetidamente
- Confirmar **Pesada diferencial**: pulsar Softkey 

Pesada diferencial	Secuencia de pesada ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Pesada individual Pesada indiv. consecutiva o Pesada conjunta Pesada en serie
	Pesada de tara	<ul style="list-style-type: none"> Desactivada o Activada
	Resultado con Decimal	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna posición 1 posición o 2 posiciones 3 posiciones 4 posiciones 5 posiciones 6 posiciones 7 posiciones
	Memorización Automática	<ul style="list-style-type: none"> o Desactivada Activada; 1. valor con estabilidad Activada; últ. valor con estabilidad²⁾ Activada; valor 70 – 130% en estabilidad³⁾
	Carga mínima para la memoria auto.	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna 10 dígitos o 20 dígitos 50 dígitos 100 dígitos 200 dígitos 500 dígitos 1000 dígitos
	Memorización de estadística	<ul style="list-style-type: none"> o No Sí
	Impresión de protocolo	<ul style="list-style-type: none"> Desactivada o Auto. desp. de p-final Auto. desp. de p-ini. y p-final Auto. desp. de p-tara, p-ini. y p-final
	ID muestra en línea para texto	<ul style="list-style-type: none"> o No Sí
	Tecla Sec-P	<ul style="list-style-type: none"> No o Sí
	Borrar muestra con descarga + result + p-indiv.	<ul style="list-style-type: none"> o No Sí
	Memoriz. últ. resultado como p-ini. (calcinación)	<ul style="list-style-type: none"> o No Sí

o = ajuste de fábrica

¹⁾ Modificación de ajuste sólo con primera puesta en funcionamiento y con tecla **Sec-P** desactivada


²⁾ El último valor con símbolo estabilidad es memorizado sólo en pesada inicial. La memorización de pesada tara y pesada final se realiza como primer valor con estabilidad. Este ítem de menú posibilita la dosificación de pesadas iniciales.

³⁾ Condición para la memorización automática de un valor entre 70 y 130% del valor inicialización es la descarga previa de la balanza bajo el 30%, o bien, carga sobre 170% de este valor.

Ecuaciones

Residuo en %:	$\text{Pesada final} / \text{Pesada inicial} * 100\%$
Pérdida en unidad de peso:	$\text{Pesada final} - \text{Pesada inicial}$
Pérdida en %:	$(\text{Pesada final} - \text{Pesada inicial}) / \text{Pesada inicial} * 100\%$
Pérdida – calculado:	$(\text{Pesada final} - \text{Pesada inicial}) * \text{Factor}$
Relación 1 en %:	$(\text{Pesada inicial} - \text{Pesada final}) / \text{Pesada final} * 100\%$
Relación 2 en %:	$\text{Pesada inicial} / \text{Pesada final} * 100\%$

Borrar con la tecla

Sec. de pesada	Estado actual	Pulsar 	valor borrado	Estado ulterior
Pesada individual	Pesada tara	–	–	–
	Pesada inicial	1 x	Tara	Pesada tara
	Pesada final	1 x	Peso inicial	Pesada inicial
		2 x	Tara	Pesada tara
	Indicac. resultado	1 x	Peso final	Pesada final
Pesada indiv. consecutiva	como en pesada indiv.			
Pesada conjunta	Pesada tara	1 x	P-inicial previo	Pesada inicial
		2 x	Tara previa	Pesada tara
	Pesada inicial	1 x	Tara	Pesada tara
	Pesada final	1 x	P-final previo	Pesada final
	Indic. resultado	1 x	P-final último	Pesada final
Pesada en serie	Pesada tara	1 x	Tara previa	Pesada tara previa
	Pesada inicial	1 x	P-inicial previo	Pesada inicial previa
	Pesada final	1 x	P-final previo	Pesada final previa
	Indic. resultado	1 x	P-final último	Pesada final

Teclas de función-Softkeys


Defina	Crear nuevos lotes
Lote	Seleccionar/indicar página lotes
P-ini.	Memorizar valor peso inicial
>P-ini.	Conmutar a pesada inicial
Result.	Indicar página resultados
>Result	Conmutar a indicación resultado
Ini-M	Entrar pesada inicial
Fin-M	Entrar pesada final
Tara-M	Entrar valor tara
Borrar	Borrar lote/muestra
Valor	Seleccionar/indicar página valor pesos
Muestr	Indicar página muestras
Muestr#	Seleccionar/crear memoria de muestras
P-fin	Memorizar valor peso final
>P-fin	Conmutar a pesada final
Omitir	Omitir/incluir muestra(s)
Estad.	Indicar página estadística
Tara	Memorizar valor tara
>Tara	Conmutar a pesada de tara
Sec-P	Seleccionar secuencia de pesada

Seleccionar directamente lote/muestra/valor de medición

Con entrada alfanumérica, en la indicación valores de medición pueden

- modificarse lotes y muestras directamente (indicación en la línea para texto)
- indicarse directamente muestras y página valores de peso

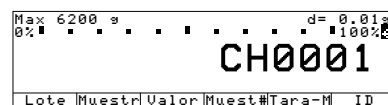● Entrar identificación



(aquí p. ej. “CH0001” para lote)

● Pulsar Softkey correspondiente

- > Softkey **Lote**: Se indica lote entrado (si no existe: indicación página de lotes)
- > Softkey **Muestr**: Se indica página de muestras del lote actual, según número de muestra entrada
- > Softkey **Valor**: Se indica página valores de peso de la muestra entrada
- > Softkey **#Muestr**: Cambio de muestra sin función catálogo

Conmutar pesada diferencial/Pesar:

Tecla 

Seleccionar directamente secuencia de pesada

La secuencia de pesada (pesada individual, pesada conjunta, etc.) puede modificarse en el modo de funcionamiento directamente con **Sec-P**, si está ajustado en Setup [Parámetros de aplicación: Aplicación1: Pesada diferencial: Tecla Sec-P: Sí]

LOTES:	792	Muestr.disp
1	1	Muestras T
122	1	Muestras T,N
AB05	20	Muestras T,N,R1
CH0001	10	Muestras T,N
CH01234	2	Muestras T,N,R1
<<	Borrar	Defina
	^	v
		Muestr

MUESTR:	Disp	792	Lote:	CH0001
Muestr	1:	T,N,R(1)		CX87
Muestr	2:	T,N,R(1)		CX88
Muestr	3:	T,N		
Muestr	4:	T,N		
Muestr	5:	T,N		
<<	Borrar	<	^	v
				Valor

VALORES:	Lote:	CH0001	Muestr:	2
Fecha,Hora:	16.11.1999	15:11:17		
Nombre:	ID			CX88
Tara:	T1	+324.72654 g		
Peso inicial:	N1	+414.45432 g		
Peso final:	F (1)	+393.55678 g		
<<	Resul.	<	^	v

RESULT:	Lote:	CH0001	Muestr:	2
Residuo:	R	+ 20.74345 g		
Residuo:	R	+ 80.48 %		
Pérdida:	D	- 5.03565 g		
Pérdida:	D	- 19.52 %		
Relacion1:	DR	+ 24.25 %		
<<	Valor	<	^	v
				↓

ESTADISTICA:	Lote:	CH6789
Estadística de:	F (1)	5 Mstras
Estadística de:	F (2)	3 Mstras
Estadística de:	F (*)	8 Mstras
<<		^
		v
		↓

ESTADISTICA:	Lote:	CH6789
Fecha,Hora:	04.02.2000	14:31:30
Estadística de:	F (1)	>Residuo<
Cant-medicion:	n	2
Promedio:	Promed+	93.28 %
Desv-estandar:	std	0.01 %
<<		

Función catálogo en pesada diferencial

El catálogo consta de cuatro páginas: Página de lotes, página de muestras, página valores de medición y página de resultados.

Página de lotes

En la página de lotes se encuentran las identificaciones de lotes ya definidos, así como también la cantidad de las muestras ejecutadas y el estado de ejecución de la muestra seleccionada (peso tara, peso inicial y peso final). Lotes pueden definirse en la página de lotes, renombrarse, borrarse e imprimirse. Además, puede entrarse un factor de cálculo para pérdida cálculo, p. ej. para el cálculo de pesos de superficies.

Con entrada alfanumérica puede indicarse directamente un lote deseado.

Página de muestras





En la página de muestras se encuentran las identificaciones de muestras de un lote anteriormente seleccionado, con su estado de ejecución (peso tara, peso inicial, peso final) y el ID.

Con entrada alfanumérica puede indicarse directamente una muestra deseada.

Página valores de medición

En la página valores de medición se encuentran, junto a la fecha, hora e identificación de muestra, los valores medidos de una muestra anteriormente seleccionada.


Página de resultado

En la página de resultados se encuentran los valores calculados de una muestra anteriormente seleccionada. Estos son el residuo, la pérdida, la pérdida calculada con factor y valores relación. La identificación  indica el valor que aparece en la indicación después de la pesada final (modificar con Softkey  o bien , confirmar con ).

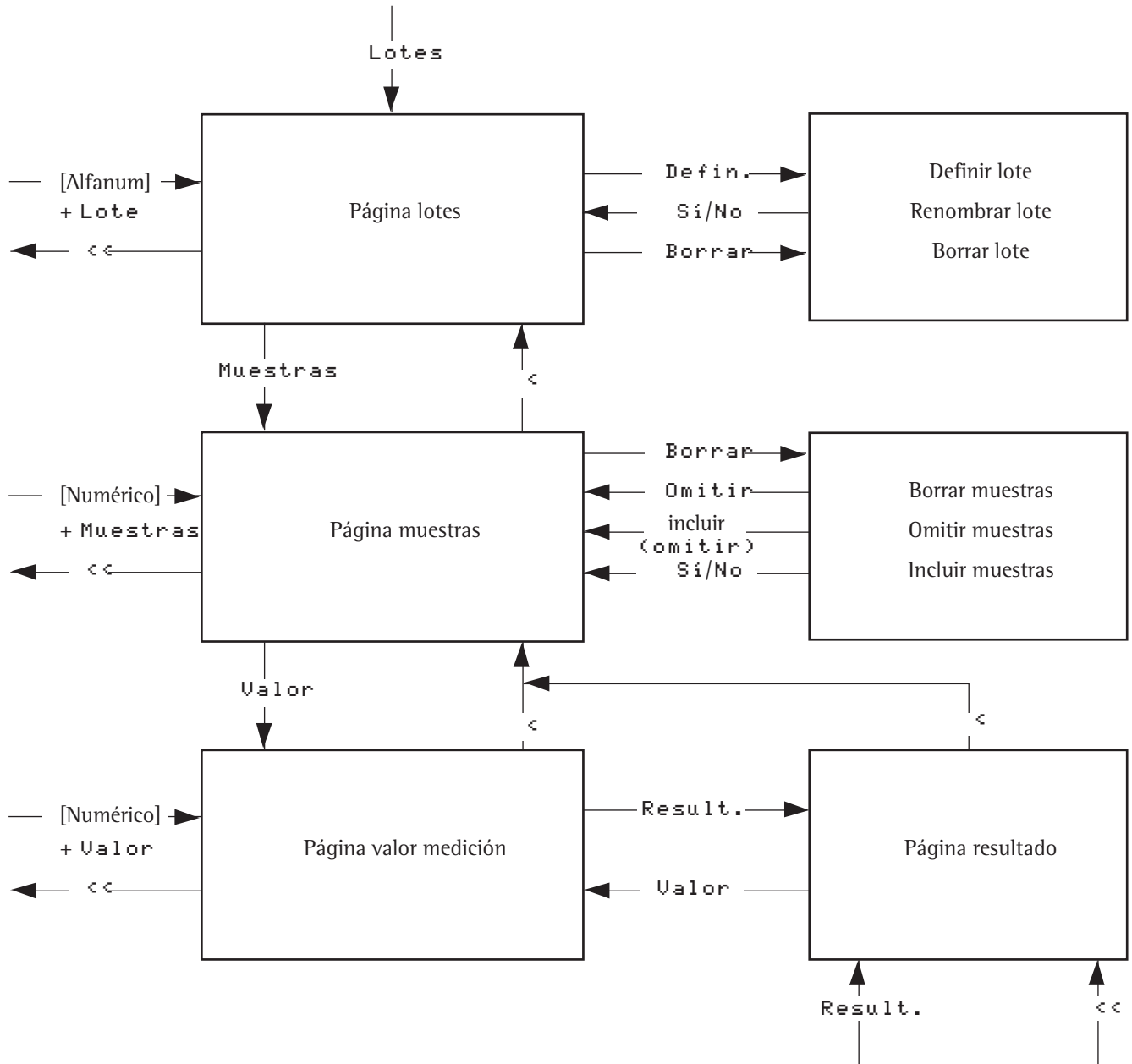
Página de estadística

En la página de estadística se encuentran, junto a los datos característicos para lotes (fecha, hora, estadística, p. ej. sobre residuo, cantidad de muestras), los valores calculados (valor promedio, desviación estándar).

Seleccionar estadística con cantidad de pesadas finales diferentes dentro de un lote:

Indicar estadística con Softkey  :


Esquema de selección de la función catálogo en pesada diferencial






Indicar e imprimir páginas catálogo

Las páginas catálogo (página lotes, página muestras, página valores medición y página resultados) pueden imprimirse manualmente.

Ver e imprimir página valores de medición:

- Indicar página lotes: pulsar Softkey **Lote**
- Indicar página muestras: pulsar Softkey **Muestr**
- Indicar página valores medición: pulsar Softkey **Peso**
- Imprimir página valores medición: pulsar tecla 

PRINT: Lote: CH0001	Muestr:1
Muestra actual	
Todas las muestras (5)	
<<	<
	>
	>>

- Seleccionar magnitud de impresión: pulsar Softkey  o bien 
- Confirmar comando de impresión: pulsar Softkey 




Página lotes y página muestras pueden ser impresos, si son indicados.

Ver página resultados:

- Indicar página lotes: pulsar Softkey **Lote**
- Indicar página muestras: pulsar Softkey **Muestr**
- Indicar página valores medición: pulsar Softkey **Peso**
- Indicar página resultados: pulsar Softkey **Result.**
- Imprimir página resultados: ver en imprimir página valores medición

La página estadísticas puede imprimirse manualmente, si se indica

Indicar página estadísticas:

- Seleccionar estadística: pulsar Softkey **Estad.**
- En muestras con cantidad diferente de pesadas finales:
Seleccionar tipo de estadística:
pulsar Softkey  
- Confirmar la selección: pulsar Softkey 

Borrar u omitir lotes/muestras

Lotes pueden borrarse y muestras pueden borrarse y omitirse.

- El usuario puede decidir, si
 - quiere borrar el lote actual o
 - todos los lotes.

El usuario puede decidir, si

- quiere borrar la muestra actual completa, o bien,
- de la muestra actual sólo los valores de medición, o bien,
- todas las muestras completas, o bien
- de todas las muestras sólo los valores de medición, o bien,
- quiere omitir una muestra

Borrar lote/muestra

- Indicar página lotes/página muestras
- Seleccionar lote/muestra deseados
- Seleccionar borrar: pulsar Softkey **Borrar**
- Seleccionar magnitud a borrar y confirmar
- Confirmar nuevamente borrar con “Sí”, o bien, cancelar con “No”

BORR.: Lote: CH0001	Muestr:3
Muestra actual	
Muestra actual solo pesada	
Todas las muestras (3)	
Todas las muestras solo pesada (3)	
<	<
	>
	>>

Ejemplo: borrar todas las muestras completas (aquí 3)

Omitir/incluir muestra

- Indicar página de muestras
- Seleccionar muestra deseada (en caso dado, omitida)
- Seleccionar borrar: Pulsar Softkey **Borrar**
- Seleccionar omitir: pulsar Softkey **Omitir**

MUESTR: Disp: 792	Lote: CH0001
Muestr: 1: T.N.F(1)	CX87
Muestr: 2: T.N.F(1)	CX88
Muestr: 3: T.N	<omitido>
<<	Borrar
<	>
	Valor

Ejemplo: muestra omitida (aquí número 3)

Otras funciones

Junto a las funciones:


- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

se encuentran accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación:


Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
- > seguir en “Calibración, ajuste”

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla 
- > seguir en “Ajustes previos”

Apagar balanza

- Pulsar tecla 
- > Balanza apaga
- > Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplo


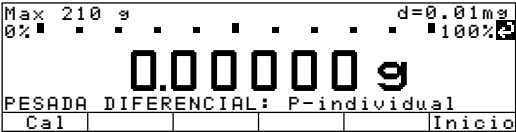

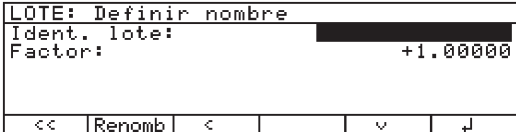





Pesada diferencial: Pesada individual consecutiva; Seleccionar lotes y determinar peso de diferencia entre pesada inicial y pesada final para dos muestras; Definir estadística e imprimir; Sin imprimir protocolos de pesadas individuales y pesadas finales

Ajustes previos (desviación del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Pesada diferencial: Pesada consecutiva: Pesada individual consecutiva


Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Pesada diferencial: Memorización de estadística: Sí

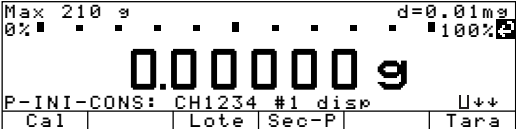Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Pesada diferencial: Impresión de protocolo: Desactivada

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba		
2. iniciar pesada diferencial (caso dado, seleccionar pesada individual consecutiva)	Softkey Inicio Softkey Sec-P	
3. seleccionar lote o definir – seleccionar: seguir en paso 7 – definir: ver paso 4	Softkey Lote Softkey ↵ o bien ↶	
4. seleccionar entrada identificación de lote	Softkey Defina	
5. entrar identificación de lote	 Softkey ABCDEF Softkey C Softkey GHIJKL Softkey H 	
6. confirmar entrada	Softkey ↵	
7. activar indicación valor de pesada	Softkey <<	

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
8. determinar peso tara 1	colocar recipiente vacío	
9. memorizar peso tara	Softkey Tara	
10. descargar balanza	quitar recipiente vacío	
11. determinar peso inicial (aquí p. ej. peso inicial 24,51 g)	llenar recipiente 1 con muestra; colocar recipiente	
12. memorizar peso inicial	Softkey P-ini . retirar recipiente con muestra	
13. tratar muestra en recipiente 1 (p. ej. secar)		
14. determinar peso final	colocar recipiente 1	
15. memorizar peso final (se indica el valor seleccionado en la página resultados, aquí p. ej. residuo en %)	Softkey P-fin	
16. descargar balanza	retirar recipiente 1	
17. determinar peso tara 2	colocar recipiente vacío 2	

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
18. memorizar peso tara	Softkey Tara	
19. descargar balanza	retirar recipiente vacío	
20. determinar peso inicial (aquí p. ej. peso inicial 25,77 g)	llenar recipiente 2 con muestra; colocar recipiente	
21. memorizar peso inicial	Softkey P-ini retirar recipiente lleno	
22. tratar muestra en recipiente 2 (p. ej. secar)		
23. determinar peso final	colocar recipiente 2	
24. memorizar peso final	Softkey P-fin	
25. descargar balanza volver a tratar muestra en recipiente 2 (p. ej. secar)	retirar recipiente 2	
26. iniciar segunda pesada final para la muestra número 2	volver a colocar recipiente 2 tecla (2) , Softkey #Muestr	
27. memorizar peso final	Softkey P-fin	

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida																																										
28. indicar estadística	Softkey Estad.	<table><tr><td colspan="6">ESTADISTICA:Lote:CH1234</td></tr><tr><td colspan="6">Estadística de: F (1) 1 Mstras</td></tr><tr><td colspan="6">Estadística de: F (2) 1 Mstras</td></tr><tr><td colspan="6">Estadística de: F (*) 2 Mstras</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td></td><td>^</td><td>v</td><td>↓</td></tr></table>	ESTADISTICA:Lote:CH1234						Estadística de: F (1) 1 Mstras						Estadística de: F (2) 1 Mstras						Estadística de: F (*) 2 Mstras						<<			^	v	↓												
ESTADISTICA:Lote:CH1234																																												
Estadística de: F (1) 1 Mstras																																												
Estadística de: F (2) 1 Mstras																																												
Estadística de: F (*) 2 Mstras																																												
<<			^	v	↓																																							
29. seleccionar modo estadística y confirmar (aquí p. ej. estadística de: F (*))	Softkey v ^ Softkey ↓	<table><tr><td colspan="6">ESTADISTICA: Lote:CH1234</td></tr><tr><td colspan="6">Fecha.hora: 17.11.1998 15:44:56</td></tr><tr><td colspan="6">Estadística de: R (*) >Residuo<</td></tr><tr><td colspan="6">Cant-medicion.: n 2</td></tr><tr><td colspan="6">Promedio: Promed+ 78.29 %</td></tr><tr><td colspan="6">Desv-estandar: std 1.40 %</td></tr><tr><td><<</td><td></td><td><</td><td></td><td>v</td><td></td></tr></table>	ESTADISTICA: Lote:CH1234						Fecha.hora: 17.11.1998 15:44:56						Estadística de: R (*) >Residuo<						Cant-medicion.: n 2						Promedio: Promed+ 78.29 %						Desv-estandar: std 1.40 %						<<		<		v	
ESTADISTICA: Lote:CH1234																																												
Fecha.hora: 17.11.1998 15:44:56																																												
Estadística de: R (*) >Residuo<																																												
Cant-medicion.: n 2																																												
Promedio: Promed+ 78.29 %																																												
Desv-estandar: std 1.40 %																																												
<<		<		v																																								
30. imprimir protocolo estadística (modo y magnitud de los ítems impresos seg. configuración)		<table><tr><td>17.01.2000</td><td>15:44:56</td></tr><tr><td>Lote</td><td>CH1234</td></tr><tr><td>R (*)</td><td>>Residuo<</td></tr><tr><td>n</td><td>2</td></tr><tr><td>Promed+</td><td>78.29 %</td></tr><tr><td>s</td><td>1.40 %</td></tr></table>	17.01.2000	15:44:56	Lote	CH1234	R (*)	>Residuo<	n	2	Promed+	78.29 %	s	1.40 %																														
17.01.2000	15:44:56																																											
Lote	CH1234																																											
R (*)	>Residuo<																																											
n	2																																											
Promed+	78.29 %																																											
s	1.40 %																																											
31. descargar balanza	retirar recipiente 2																																											

Corrección empuje del aire

Objeto

Con este programa de aplicación pueden corregirse errores de pesadas, que surgen al trabajar con pesos de densidad diferente a causa del empuje del aire.


Corrección empuje del aire puede utilizarse en combinación con la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y la aplicación 3 (totalización, estadística) además de las funciones adicionales.

La corrección del empuje del aire no puede combinarse con los programas de aplicación Formulación y 2. memoria de tara.

Para el cálculo de corrección del empuje se requiere el valor para la densidad del aire. Debido a que la densidad del aire $1,2 \text{ kg/m}^3$ no es la misma en todos los lugares, es posible de calcularla con el programa determinación de la densidad del aire.

Características

Corrección del empuje:

- Inicialización automática al encender con densidad de muestra **RhoP** memorizada a largo plazo y la densidad del aire últimamente memorizada **RhoA**. Indicación **RhoP** en la línea para texto.
- Inicio automático de la corrección empuje del aire e indicación del símbolo  para los valores calculados, si así ha sido ajustado en Setup (Setup: Inicio auto. aplic. al encender)
- Entrada de la densidad de la muestra mediante teclas numéricas y Softkey **RhoP**. En caso de no estar todavía activada, se activa con esto la corrección del empuje del aire.
- Rango para la entrada de la densidad de la muestra: $0,1 \text{ g/cm}^3 - 22,5 \text{ g/cm}^3$.
- memorización de los valores de densidad con seguro contra los fallos de red (**RhoP** y **RhoA**).
- Desactivación de la corrección empuje del aire conmutando al modo "Pesar" (pesar sin corrección del empuje del aire)

Determinación de la densidad del aire:

- Una pesa de acero y una pesa de aluminio son adquirible como kit de determinación de la densidad YSS45 con certificado "Valores característicos de pesas". Las densidades de referencias para el acero (8,0) y aluminio (2,7) están definidos como valores fijos y no pueden ser modificados.
- Determinación de la densidad del aire mediante
 - Entrada numérica
 - Entrada de valores característicos para el acero/aluminio y para el valor de pesas de acero/aluminio (accesorio: YSS45)
- Con la entrada de la densidad del aire mediante teclas numéricas se borran los valores de referencia (densidad y peso) para el acero y aluminio en la página "PARAM. D-AIRE".
- La salida de los valores de referencia se realiza después de determinar y memorizar la densidad del aire mediante Softkey **Inicio**.
- Valor con ajuste previo para la densidad del aire: $1,2 \text{ kg/m}^3$
- Rango de valores para la densidad del aire: $1,0 \text{ kg/m}^3 - 1,4 \text{ kg/m}^3$.
- Determinación de la densidad del aire puede activarse mediante Setup, o bien, desactivarse y, con esto, bloquearse.
- Determinación de la densidad del aire se realiza generalmente en unidad de peso gramos.
- Indicación de la densidad del aire **RhoA** con determinación de densidad del aire desactivada y Softkey **RhoA**, por 2 segundos en la línea para texto.
- Después de la determinación de la densidad del aire puede memorizarse el valor, pero no es obligatorio.
- La memorización de los valores característicos (referencias) puede bloquearse en Setup (Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Corrección empuje del aire: Modificación ref. acero/aluminio).
- Densidades de la página de referencia son predefiniciones fijas.

Ajuste de fábrica de los parámetros

Determinación densidad del aire:

Desactivada

Modificación ref. acero/aluminio:

Desactivada

Teclas de función – Softkeys

Diff. Indicación de diferencia valor medición – valor referencia acero/aluminio durante la determinación de la densidad

Res. Conmutación a la página resultado

Fact. Indicación del factor de corrección K en la línea para texto (ver “Ecuación para la corrección empuje del aire”, en esta página)

Corr. Inicio de la corrección empuje del aire con densidad de la muestra entrada

Neto Indicación del valor peso actual

Param. Conmutación a la indicación del parámetro actual para la corrección empuje del aire (densidad del aire, valores específicos del acero, aluminio, etc.)

Ref. Conmutación a la indicación y entrada eventual de referencias de densidad del aire (valores específicos para el acero, aluminio)

RhoP Entrada de densidad de la muestra a través de teclas numéricas

RhoA Activación de la determinación densidad del aire, o bien, salida **RhoA** por 2 segundos en la línea para texto, si - Determinación densidad del aire “Desactivada”


Inicio Inicio de la corrección empuje del aire y determinación densidad del aire con densidad ya memorizada de la muestra

Sto Memorización de los valores de referencia para el acero/aluminio

Pesar Conmutación al modo “Pesar” sin corrección empuje del aire

Corrección empuje del aire

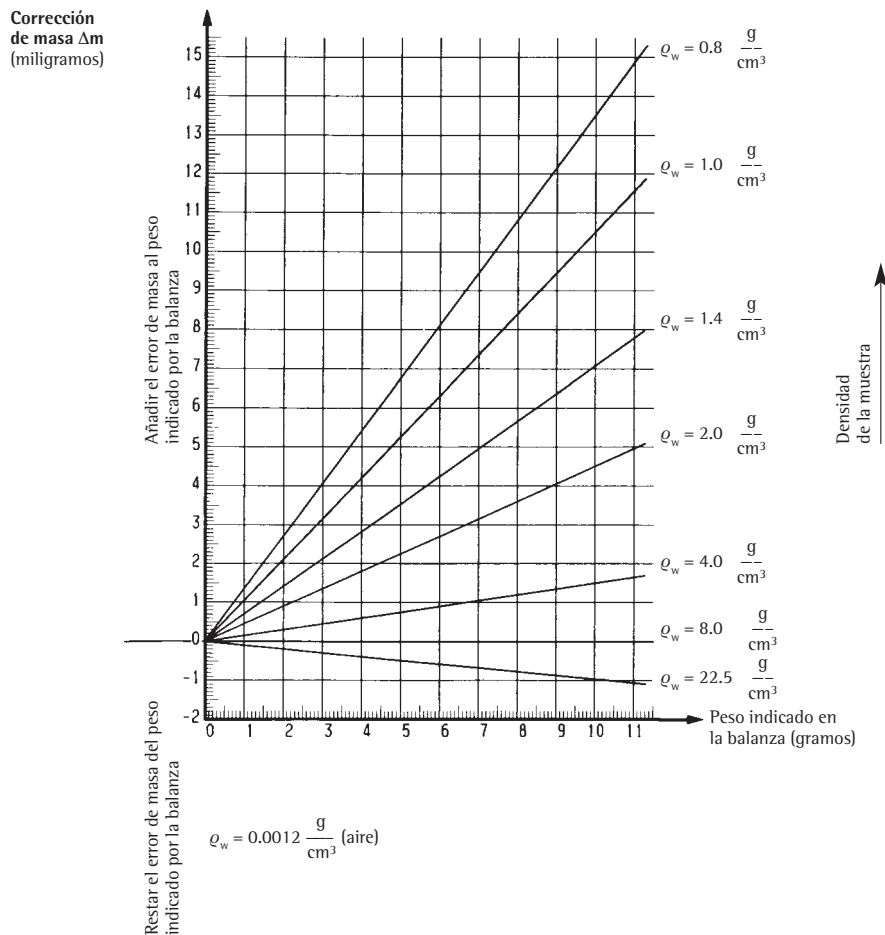Diagrama para la corrección empuje del aire



Ecuaciones para la corrección empuje del aire

Para mantener la masa de la muestra, se multiplica el valor de pesada con el factor K siguiente:

$$K = (1 - \rho_A / \rho_{AC}) / (1 - \rho_A / \rho_P)$$









en donde:

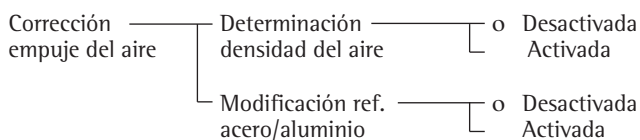
ρ_A = densidad del aire [kg/m^3]

ρ_{AC} = densidad del acero ($8000 kg/m^3$)

ρ_P = densidad de la muestra [kg/m^3]

Preparación

- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius, se realiza autochequeo
- Iniciar en Setup programa de aplicación "Corrección empuje del aire": pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey 
- Seleccionar **Corrección empuje del aire**: pulsar Softkey  o bien , en caso dado, repetidamente
- Confirmar **Corrección empuje del aire**: pulsar Softkey 



o = ajuste de fábrica

ver también "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey  

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión


se encuentran accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación:

Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**

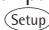
> seguir en "Calibración, ajuste"

Conmutar a otras aplicaciones

- Pulsar tecla 


> seguir en programa aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla 

> seguir en "Ajustes previos"

Apagar balanza

- Pulsar tecla 

> Balanza apaga



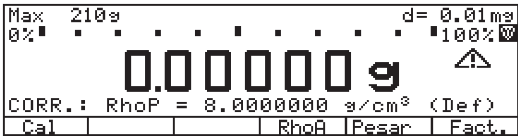






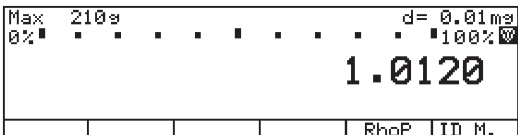

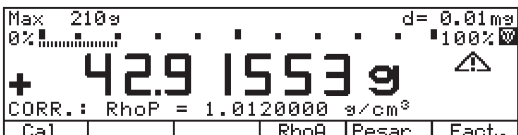

> Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplo

Para la determinación correcta del valor de medición se entra la densidad de la muestra. La densidad del aire se considera así como se ha memorizado en la balanza.

Ajustes de fábrica (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Corrección empuje del aire: Determinación densidad del aire: Activada

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba		
2. iniciar corrección empuje del aire	Softkey Inicio	
3. entrar densidad de muestra (aquí p. ej. 1,0120 g/cm³)	     	
4. memorizar densidad de la muestra como Rho _p con activación de la corrección empuje del aire	Softkey RhoP	
5. colocar muestra en la balanza (aquí p. ej. 42,12648 g)	cargar balanza	
6. caso dado, indicar densidad del aire memorizada	Softkey RhoA	
7. abandonar indic. densidad del aire	Softkey <<	

Determinación densidad del aire

Ecuaciones para la determinación de la densidad del aire

La densidad del aire se calcula empleando los pesos de referencia suministrados para el acero y aluminio, según la siguiente ecuación:

$$\text{Rho}_A = \frac{\frac{m_{AL} \cdot W_{AC}}{\text{Rho}_{AL}} - \frac{m_{AC} \cdot W_{AL}}{\text{Rho}_{AC}}}{\frac{m_{AL} \cdot W_{AC}}{\text{Rho}_{AL}} - \frac{m_{AC} \cdot W_{AL}}{\text{Rho}_{AC}}}$$

en donde:

Rho_A = densidad del aire [kg/m³]

Rho_{AL} = densidad del aluminio [kg/m³] Rho_{AC} = densidad del acero [kg/m³]

m_{AL} = masa del aluminio

m_{AC} = masa del acero

W_{AL} = valor medición del aluminio

W_{AC} = valor medición del acero

La masa del aluminio se calcula según la siguiente ecuación:

$$m_{AL} = M_{AL} \cdot (1 - 1,2 / 8000) / (1 - 1,2 / \text{Rho}_{AL})$$

en donde:

m_{AL} = masa del aluminio (valor específico)

M_{AL} = valor pesada convencional del aluminio

Rho_{AL} = densidad del aluminio [kg/m³]

La masa del acero se calcula según la siguiente ecuación:

$$m_{AC} = M_{AC} \cdot (1 - 1,2 / 8000) / (1 - 1,2 / \text{Rho}_{AC})$$

en donde:

m_{AC} = masa del acero (valor específico)

M_{AC} = valor pesada convencional del acero

Rho_{AC} = densidad del acero [kg/m³]

La densidad del aire está disponible en las aplicaciones de las siguientes maneras:

1. Entrada de la densidad del aire mediante teclas numéricas
- Encender balanza y seleccionar parámetros de aplicación, en la forma descrita para la corrección del empuje
- Iniciar aplicación corrección empuje del aire: pulsar Softkey **Inicio**
- Iniciar determinación de la densidad del aire: pulsar Softkey **RhoA**
- Entrar valor para densidad del aire mediante teclas numéricas (1,0 – 1,4 kg/m³):
teclas **1** **.** **2** ... **0**
- Memorizar valor para densidad del aire: pulsar Softkey **RhoA**
- Abandonar aplicación determinación densidad del aire: pulsar Softkey **<** **<**
2. Memorización de los pesos de referencia para el acero y aluminio mediante pesada
- ver ejemplo en las páginas siguientes

Ejemplo

Determinación de la densidad del aire utilizando las pesas de referencias suministradas para el acero y aluminio

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Corrección empuje del aire: Determinación densidad del aire: Activada
Corrección empuje del aire: Modificación ref. acero/aluminio: Activada

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza		
2. iniciar corrección empuje del aire	Softkey Inicio	
3. conmutar al modo determinación de la densidad del aire para entrar valores espec. del acero y aluminio	Softkey RhoA	
4. conmutar a indicación de parámetros densidad del aire	Softkey Param.	
5. conmutar a indicación de referencias densidad de laire	Softkey Ref.	
6. entrar val. espec. de referencias para el acero suministradas (aquí p. ej. 200,00821 g/cm³)		
7. confirmar valor entrado	Softkey ↵	
8. entrar val. espec. de la referencias para aluminio suministrado (aquí p. ej. 200,00348 g/cm³)		

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
9. confirmar valor entrado	Softkey \downarrow	 <p>REF. D-AIRE: Entrar Espec. p-ac Esp-ac+200.00821 g Espec. p-al Esp-al+200.00348 g D-acero Rho-ac 8.0 g/cm³ D-aluminio Rho-al 2.7 g/cm³ << Param. ^ v ↓</p>
10. abandonar página parámetros	Softkey <<	 <p>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000 g D-Air: RhoA = 1.2000000 kg/m³ (Def) << Param. Inicio</p>
11. iniciar medición de pesas de referencia	Softkey Inicio	 <p>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000 g D-Air: Ref.ac 200.00821 g coloca ++ << Param. Diff.</p>
12. colocar pesa referencia acero	cargar balanza	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% +200.02142 g D-Air: Ref.ac memorizar ++ << Param. Diff. Memor.</p>
13. memorizar pesa referencia acero	Softkey Memor.	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% +200.02142 g D-Air: Ref.ac retirar ++ << Param. Diff.</p>
14. retirar pesa referencia acero	descargar balanza	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% 0.00000 g D-Air: Ref.al 200.00348 g coloca ++ << Param. Diff.</p>
15. colocar pesa referencia aluminio	cargar balanza	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% +200.01082 g D-Air: Ref.al memorizar ++ << Param. Diff. Memor.</p>
16. memorizar pesa referencia alu	Softkey Memor.	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% +200.01082 g D-Air: Ref.al retirar ++ << Param. Diff.</p>
17. retirar pesa referencia alu. (se indica densidad del aire calculada, aquí 1,3195259)	descargar balanza	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% 0.00000 g D-Air: RhoA = 1.3195259 kg/m³ << Param. Inicio</p>
18. abandonar determ. de la densidad	Softkey <<	

Determinación de diámetro

Objeto

Con este programa de aplicación puede determinarse el diámetro de alambres redondos e hilos metálicos. Campo de empleo es, p. ej., la determinación de diámetro de filamentos incandescentes en espiral.

La determinación de diámetro puede utilizarse en combinación con un programa de aplicación 2 (pesada control, funciones controladas por tiempo) y aplicación 3 (totalización, formulación, estadística).

Características

Entrada y modificación de los datos unitarios, según Softkey **Param.**:

- Designación 1 **Text1** (máx. 20 caracteres)
- Designación 2 **Text2** (máx. 20 caracteres)
- Densidad de la muestra **RhoP** (0,01 hasta 50,0 g/cm³; Ajuste de fábrica = 8,0 g/cm³)
- Longitud de la muestra en milímetros (rango = 0,1 hasta 99999 mm)
- Cantidad de posiciones decimales para el resultado de diámetro (ajuste de fábrica = 3)
- Entrada de la densidad y longitud de la muestra, directamente por teclado decimal

Se indican las siguientes informaciones en la línea para texto:

- designación del bloque de datos (si se definió mediante la función "Memoria datos de producto")
- densidad de la muestra **RhoP**
- longitud en milímetros **mm**
- Se indica el resultado de diámetro con la identificación "mm".
- Inicialización automática al encender con bloque de datos memorizado, en tanto se hayan entrado datos e inicialización automática al encender, si se ha realizado el ajuste en Setup (Setup: Parámetros de aplicación: Inicio auto. aplicación al encender: On)
La página de inicio se salta y se activa de inmediato determinación de diámetro.
- Función adicional memoria datos producto: memoriza hasta 300 bloques datos, máx., para la determinación diámetro (otras características, ver en la página 122)
- Finalizar determinación diámetro, con la tecla **CF**

Teclas de funciones – Softkeys

Inicio	Iniciar determinación de diámetro
Param.	Comenzar entrada de densidad y longitud
RhoP	Aceptación de la densidad de la muestra
1 (mm)	Aceptación de longitud de la muestra
Pesar	Lectura valores de medida
Diám	Lectura resultado del diámetro

Preparación

- Encender balanza: tecla **ON**
> aparece logo Sartorius
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Determinación de diámetro": pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar parámetros de aplicación: Pulsar 2x Softkey **↵**, Softkey **➤**
- Seleccionar **Aplicación 1 (aplicación básica)**: pulsar Softkey **➤**
- Seleccionar **Determinación de diámetro**: pulsar, en caso dado, repetidam. Softkey **↵** o bien **↵**
- Confirmar **Determinación de diámetro**: pulsar Softkey **➤**
- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar Softkey **↵**

Otras funciones

Junto a las funciones:

- Entrada alfanumérica
- Tara (excepto en entrada alfanumérica)
- Impresión

están accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación:

Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **CAL**
> seguir, así como en el capítulo "Calibración, ajuste"

Conmutar a la aplicación siguiente

- Pulsar tecla **↵**
> seguir en el programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetro)

- Pulsar tecla **Setup**
> seguir en capítulo "Ajustes previos"

Apagar balanza

- Pulsar tecla **OFF**
> la balanza se apaga



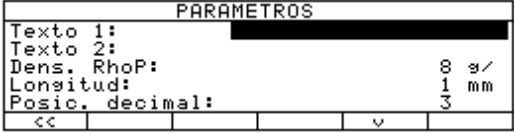

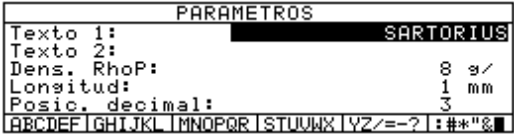



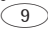









Ejemplo

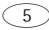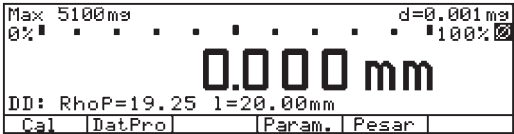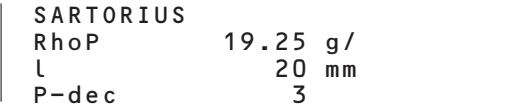
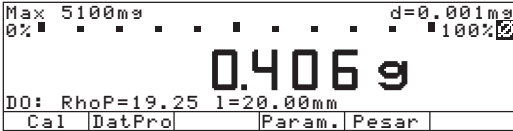


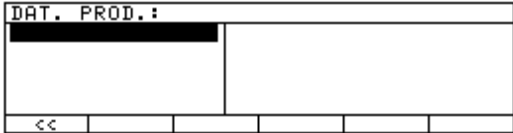

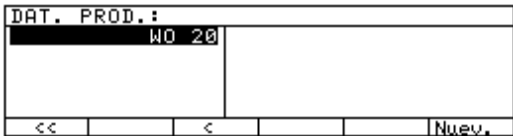



Determinación de densidad de hilos metálicos y alambres (p. ej. filamentos incandescentes en espiral).

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Determinación de diámetro

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F5): Memoria datos de producto

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. en caso dado, encender balanza		
2. conmutar a lectura de parámetros	Softkey Param.	
3. entrar designación para FIRMA (aquí, p. ej. Sartorius)	 ... ver también en pág. 50	
4. confirmar entrada	 , Softkey ↵	
5. entrar valor densidad de filamento incandescente (aquí wolframio)	Softkey ↵ ,      ,	
6. entrar longitud de hilo en milímetros y abandonar Ajustes de parámetros	  , Softkey ↵ , Softkey <<	
7. iniciar Determinación de diámetro	Softkey Inicio	
La impresión puede desactivarse en Setup (Setup: Impresión: Salida en aplicación: Impresión automática al iniciar: Off)		

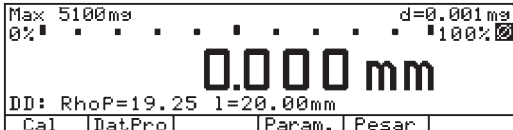Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
8. colocar filamento wolframio cerrar protector	cargar balanza 	
9. imprimir valor de peso (en caso dado, continuar pesando e imprimir)		
10. conmutar para ver datos de producto (eventualm. se indican bloques de datos existentes)	softkey DatPro	
11. entrar nombre para nuevo bloque de datos (aquí, p. ej. WO 20)	 ... ver también página 50	
12. memorizar parámetros actuales de determinación de diámetro	softkey Nuevo	
13. confirmar memoria	softkey Memor.	
14. abandonar datos producto, iniciar determinación diámetro	softkey << softkey Inicio	

Funciones por control de tiempo

Objeto

Con este programa de aplicación pueden activarse funciones de la balanza (p. ej. impresión aut. de valores, mem. val. en mem. apli. 3) a una hora fija, o bien, según intervalos determinados de tiempo.

Las funciones por control de tiempo pueden utilizarse en combinación con la aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada de control) y la aplicación 3 (p. ej. totalización, formulación y funciones adicionales).

Características

- Activación por control de tiempo de las funciones de la balanza
- por una sola vez, a una hora determinada
(en la línea para texto aparece **Fecha=**)
- repetir, según intervalos de tiempo definidos
(en la línea para texto se indica: **Intervalo=**, si la función no ha sido todavía activada y **Repite Real=**, si la función fue activada)
- Funciones activables son
 - señal acústica
 - mantener val. en indicación
 - impresión aut. de valores
 - mem. valores en mem. apli. 3
- Impresión de la hora como complemento para el valor de peso
- Memorización dependiente de la estabilidad de la balanza
- Tara después de impresión del valor
- Cancelación de la función por control de tiempo con Softkey

Ajuste de fábrica de los parámetros

Función desp. de intervalo:
Impresión aut. de valores

Función automática de reinicio:
Activada

Memorización de pesos:
Sin estabilidad

Tara después de impresión del valor:
Activada

Teclas de función – Softkeys

Stop	Interrumpir aplicación
Esc	Finalizar función ejecutada (p.ej. “mantener val. en indicación” o bien “señal acústica”)
Interv	Memorizar intervalo definido de tiempo para funciones por control de tiempo
Fecha	Memorizar la hora entrada para el reloj
Inicio	Inicio de la función por control de tiempo










Impresión en funciones por control de tiempo

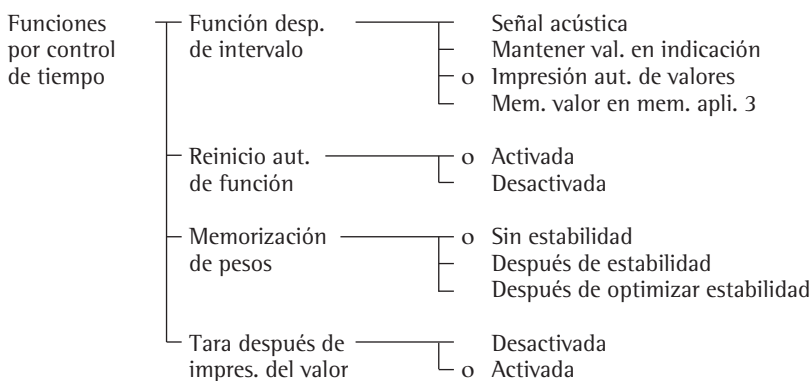
Si se ha seleccionado “Impresión aut. de valores”, se imprime la hora y el valor medición.

Hora: 10:15:00
N +150.00000 g

Hora de memorización valor
N: Peso neto

Preparación

- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Fnc. por control de tiempo": pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 2 (control)**: pulsar Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Funciones por control de tiempo**: pulsar Softkey  o bien 
- Confirmar **Funciones por control de tiempo**: pulsar Softkey 



o = ajuste de fábrica

ver también en "Ajustes previos": "Menú de aplicaciones (sinopsis)"

- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey  

Imprimir valores netos sin indicación de tiempo

Seleccionar ajustes previos:

Setup: Impresión: Impresión en aplicación: Print automat. al inicializar: Desactivada

Otras funciones

Junto a las funciones:


- Entrada alfanumérica (ninguna entrada de letras al inicializar)
- Tara (excepto entrada alfanumérica)
- Impresión

están accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación:


Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
- > seguir en Calibración, ajuste


Conmutar a otra aplicación

- Pulsar tecla 
- > seguir en programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla 
- > seguir en "Ajustes previos"

Apagar balanza

- Pulsar tecla 
- > Balanza apaga
- > Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplo




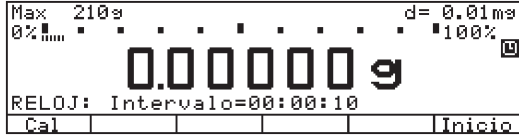
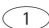

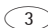
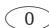
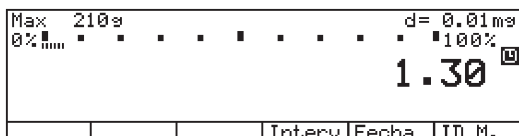


Documentación de la cantidad de evaporación de una sustancia con superficie definida, temperatura y presión barométrica durante el intervalo de tiempo predefinido de 1 minuto 30 segundos.

Ajustes de fábrica (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 2: Funciones por control de tiempo

Setup: Parámetros de balanza: Tara: Sin estabilidad

Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Criterio de estabilidad: Sin estabilidad

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida																
1. en caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba																		
2. en caso dado, borrar val. memorizados																		
3. colocar recipiente con muestra y tarar																		
4. entrar intervalo: 1 minuto 30 segundos	   																	
5. memorizar intervalo	Softkey Interv																	
6. iniciar documentación (en línea para texto se indicará el tiempo restante hasta la siguiente impresión)	Softkey Inicio																	
impresión de la cantidad evaporada después de cada: 1 minuto 30 segundos		<table><tr><td>Hora:</td><td>15:19:50</td></tr><tr><td>N</td><td>- 0.37158 g</td></tr><tr><td>Hora:</td><td>15:21:20</td></tr><tr><td>N</td><td>- 0.33215 g</td></tr><tr><td>Hora:</td><td>15:22:50</td></tr><tr><td>N</td><td>- 0.30187 g</td></tr><tr><td>Hora:</td><td>15:24:20</td></tr><tr><td>N</td><td>- 0.40518 g</td></tr></table>	Hora:	15:19:50	N	- 0.37158 g	Hora:	15:21:20	N	- 0.33215 g	Hora:	15:22:50	N	- 0.30187 g	Hora:	15:24:20	N	- 0.40518 g
Hora:	15:19:50																	
N	- 0.37158 g																	
Hora:	15:21:20																	
N	- 0.33215 g																	
Hora:	15:22:50																	
N	- 0.30187 g																	
Hora:	15:24:20																	
N	- 0.40518 g																	
7. detener documentación	Softkey Stop																	

Objeto

Con este programa de aplicación se pueden memorizar valores de peso y valores de cálculo, y evaluarse estadísticamente.

Para la evaluación se calculan

- Valor promedio
- Desviación estándar
- Coeficiente de variación
- Suma de valores
- Valor mínimo (Mín)
- Valor máximo (Máx)
- Diferencia entre mínimo y máximo

Estadística puede utilizarse en combinación con la aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada en porcentaje) y la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo y funciones adicionales).

Características

- Memorización de valores de pesada y valores de cálculo
- Memorización simultánea de valores netos y de cálculo, cuando existan
- Valores de pesada y valores de cálculo, tanto de aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada en porcentaje) como de aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo); ajustable en Setup
- Memoria de sumas para 65535 ítems
- Indicación de numeradores de ítems y, p. ej., del total actual en la línea para texto
- Tara de la balanza después de memorizar un ítem, si existe ajuste en Setup y no ha sido entrado Preset-tara
- Entrada de la cantidad de mediciones individuales, mediante teclas numéricas, y confirmada con Softkey **nDef** (cant. de mediciones debidas nDef). Impresión del resultado y borrado de memoria al alcanzarse nDef
- Adición del valor de medición actual al total existente, exactitud de indicación, con Softkey **M+** e impresión de protocolo, si existe ajuste en Setup
- Memorización de valor de medición dependiente de la estabilidad de balanza, según el ajuste en Setup: **Parámetro de balanza, rango de estabilidad**
- Memorización automática del valor de medición, posible. Memorización del valor de medición se indica con **→←**. **↕↕** indica que la balanza puede ser cargada.
- Umbral de alcance mínimo en memorización automática del valor de medición
- Borrar último ítem en memoria de totales con Softkey **M-**. Numerador de ítem se reduce en 1 y se imprime un protocolo.
- Indicación de una ventana Info, con Softkey **MR**: cantidad, valor promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, sumas, valor mínimo/máximo y diferencia entre valor mínimo/máximo, si existe ajuste en Setup: evaluación intermedia, indic.+impresión o evaluación final, indic.+impr.
- En la ventana Info, con Softkeys **↕**, **↓** (**□**), puede seleccionarse qué indicación del valor de medición ha de aparecer en la línea para texto
- Impresión de un protocolo de resultado, dependiente del ajuste de aplicación 1 o de aplicación 2. La magnitud del protocolo es ajustable en Setup (impresión de componentes)
- Protocolo con posibilidad de evaluación intermedia, después de cada adición, o bien, evaluación final con Softkey **MR**
- Evaluación final al cancelar estadística mediante la tecla **CF**, si anteriormente no se ha realizado evaluación final con Softkey **MR**
- Borrar memoria de estadística y restituir numerador de ítem con tecla **CF**, o bien, con impresión de un protocolo de resultado, si existe ajuste en Setup
- Memorización, a prueba contra los fallos de red, de los contenidos de memoria de estadística y numerador de ítems
- Continuación de la memorización después de apagar/encender

Ajustes de fábrica de los parámetros

Memorización autom. de pesos:
Desactivada

Carga mín. para mem. aut. de pesos:
10 dígitos

Fuente de datos para mem. auto.:
Aplicación 1

Valor a memorizar: **Neto**

Modo de evaluación, Tecla MR:
Evaluación intermedia, impresión

Tara desp. función M+/M-:
Desactivada

Impresión de componentes individu.:
Sí

Parámetros de balanza: rango de estabilidad: **2 dígitos**

Impresión : Salida en aplicaciones:
Tara después de Print:
Desactivada

Teclas de función – Softkeys

M+ Memorización de valores de peso o de aplicación. Con cada pulsión de tecla el numerador de componentes o de ítems se eleva en 1.

M- Borrado del último ítem en la memoria; con esto, el numerador de ítem se reduce en 1. No es posible, al pulsar repetidamente, borrar más ítems.

MR Imprimir o indicar evaluación intermedia o final

nDef Memorizar cantidad entrada de componentes.

Impresión en estadística



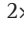

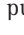




Delante de los valores de medición se imprime siempre el numerador de ítems o de componentes “n”.


En la evaluación intermedia y final se imprimen los resultados de estadística.

n		5	
Total	+	151.67321	g
Promed	+	33.0	pcs
s	+	3.2	pcs
srel	+	9.70	%
Total	+	165	pcs
Min	+	29	pcs
Max	+	37	pcs
Diff	+	8	pcs

n:	Numerador ítems
Total:	Suma de valores
Promed:	Valor promedio
s:	Desviación estándar
srel:	Coefficiente de variación
Total:	Suma de valores
Min:	Mínimo
Max:	Máximo
Diff:	Diferencia entre Máximo y Mínimo

Preparación

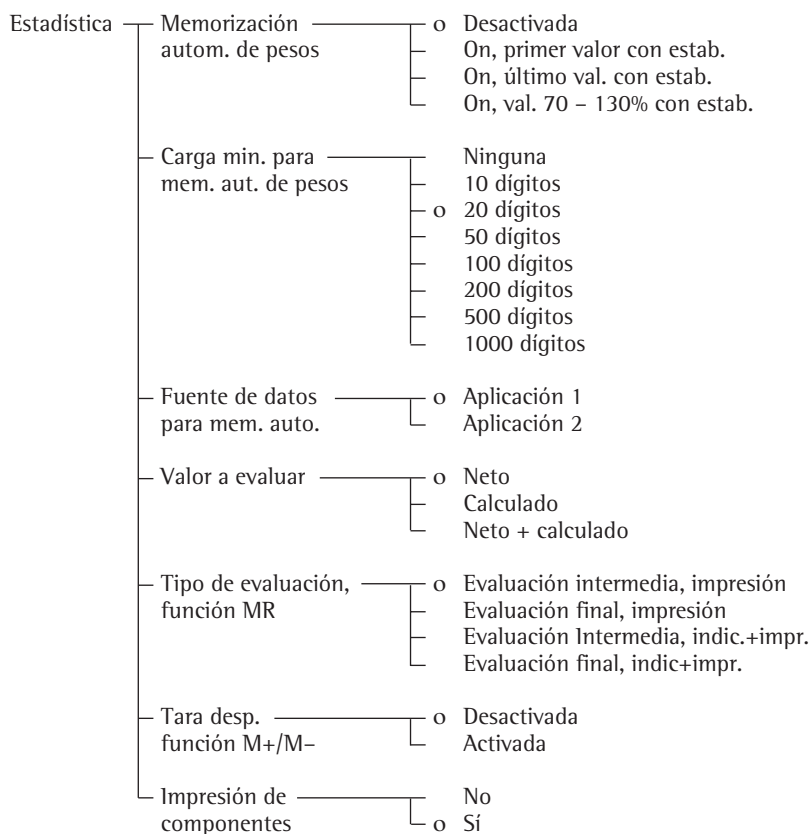- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup programa de aplicación "Estadística": pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Aplicación 3 (documentación)**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Estadística**: pulsar Softkey  o bien 
- Confirmar **Estadística**: pulsar Softkey 



o = ajuste de fábrica

ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey  

Otras funciones

Junto a las funciones:


- Entrada alfanumérica (ninguna entrada de letras al inicializar)
- Tara (excepto entrada alfanumérica)
- Impresión

están accesibles las siguientes funciones de este programa de aplicación:


Calibración/ajuste

- Pulsar Softkey **Cal**
- > seguir en Calibración, ajuste


Conmutar a otra aplicación

- Pulsar tecla 
- > seguir en programa de aplicación correspondiente

Setup (ajustar parámetros)

- Pulsar tecla 
- > seguir en "Ajustes previos"

Apagar balanza

- Pulsar tecla 
- > Balanza apaga
- > Indicación: Off/Standby con retroiluminación

Ejemplo: Pesada de animales con estadística (formación del valor promedio)

Ha de determinarse el peso de cada uno de los 7 animalillos y evaluarse y documentarse estadísticamente.

Ajustes previos (desviación del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1: Pesada de animales: Impresión: Desactivada

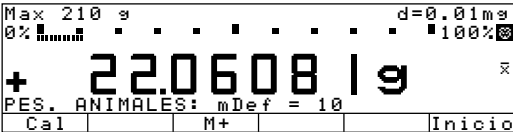

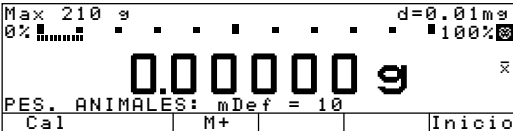
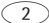

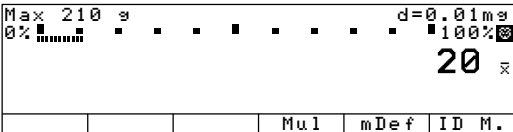
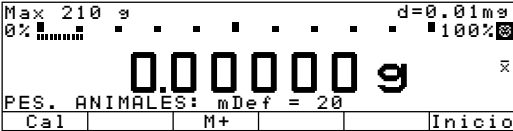
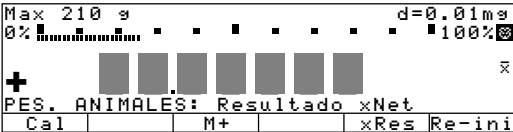
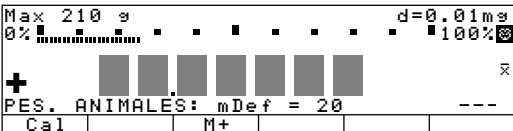
Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 3: Estadística: Memorización automática de valores: On, primer valor con estab.

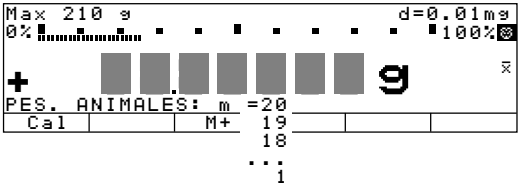
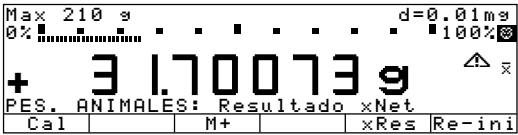
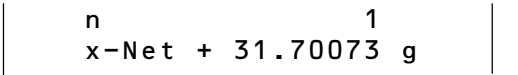
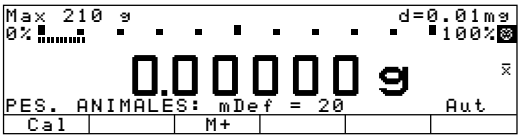
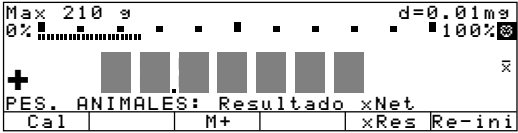
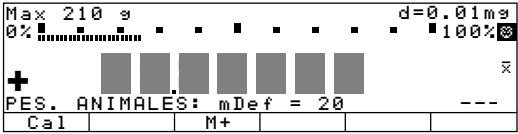



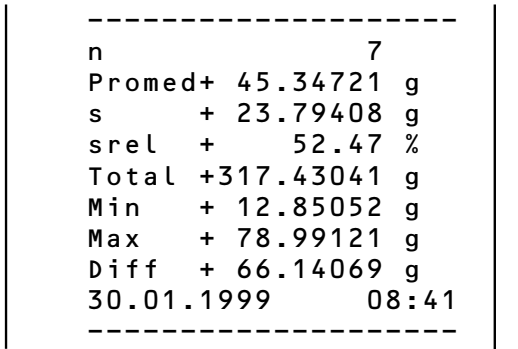
Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 3: Estadística: Carga mínima para la memoriz. autom. del valor: 100 dígitos

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 3: Estadística: Valor a memorizar: Calculado

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 3: Estadística: Tipo de evaluación, función MR: Evaluación intermedia indic.+impr.

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4): Mem. valor en mem. apli. 3 (M+)

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. preparar recipiente (jaula)	colocar recipiente vacío en la balanza	
2. Tara		
3. entrar cantidad mediciones para formación val. promedio	 	
4. memorizar cantidad	Softkey mDef	
5. pesar primer animal	poner 1. animal en el recipiente	<p>peso oscila debido a la intranquilidad</p> 
6. iniciar pesada automática	Softkey Inicio	

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
la balanza retarda el comienzo de la pesada hasta que la desviación de 3 mediciones satisface el criterio de un animal tranquilo	satisfecho el criterio, inicia la serie de medición	
después de 20 mediciones (n: número secuencial de la medición x-net: val. promed. aritm., valor neto)		
7. memorizar resultado medición y activar memoriz. auto. pulsando tecla (aquí no se realiza aún memorización automática*)	Softkey M+	
8. descargar balanza	sacar animal del recipiente	
9. pesar los 7 animalillos	colocarlos uno tras otro en el recipiente	
la medición siguiente inicia automáticamente; resultado medición se memoriza automáticamente en la estadística		
10. ver evaluación e imprimir	 Softkey MR 	
* Con memoria estadística borrada, la memorización del primer val. ha de activarse manualm. con Softkey M+. Todos los demás valores de página de estadística se memorizan después automáticamente.		

Funciones adicionales

Segunda memoria de tara (Preset-Tara)

Objeto

Con esta función adicional puede memorizarse un valor de peso como compensación de tara, o bien, entrarse un valor numérico como valor tara-preset.

Segunda memoria tara puede utilizarse en combinación con la aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada en porcentaje) la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística y funciones adicionales).

Características

- Memorización de un valor de peso en la 2a. memoria tara (sin entrada numérica previa)
- memorización de un valor de peso en la 2a. memoria tara (con entrada numérica previa)
- Identificación del valor neto con **NET 1** en 2a. memoria tara, cubierta
- La función puede ser asignada a la cuarta o quinta tecla Softkey (desde la derecha, F4 o F5)
Inscripción de Softkey es: **PT 1** / **T 1**
- La función tara de recipientes puede activarse mediante Setup. Valores de peso subsiguientes, después de la descarga previa, mayores que el 70% de la tara del recipiente son considerados y tarados automáticamente como peso de recipiente
- Impresión automática al memorizar o entrar (ver en "Ajustes previos")
- Valor tara (preset) puede borrarse con la tecla **CF**

Ajuste de fábrica de los parámetros

Tara recipiente: **Desactivada**

Impresión automática:

Desactivada

Teclas de función – Softkeys

PT 1 / **T 1** Memorizar valor peso como peso tara

PT 1 memorizar valor bloque numérico entrado como peso tara

Impresión 2. memoria de tara

Se imprime, ya sea:

- Valor neto **N 1**, o bien
- Peso tara **T 1**, o bien
- valor entrado **PT 1** mediante teclas

N 1 **63.48253 g**
T 1 **138.73234 g**
PT 1 **150.00000 g**

N1: Valor neto con memoria de tara cubierta

T1: Valor peso tara

PT1: Valor tara predefinido por teclas

Preparación

- Encender balanza: tecla **UO**

> Aparece Logo Sartorius

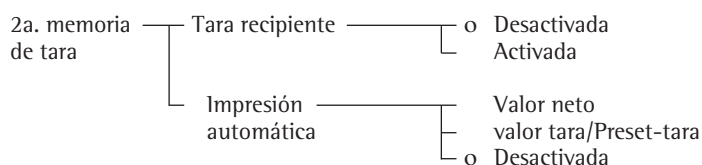
- Ajustar en Setup "Función adicional" (F4), o bien, "Función adicional" (F5): pulsar tecla **Setup**

- Seleccionar **Parámetros de aplicación:** pulsar 2x Softkey **↵**, Softkey **➤**

- Seleccionar **Función adicional (F4)** o bien **Función adicional (F5)**: pulsar 3 x (o bien 4 x) Softkey **↵**, Softkey **➤**

- Seleccionar **2a. memoria de tara**

- Confirmar **2a. memoria de tara**



o = ajuste de fábrica

ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀**

Segunda memoria de tara en metrología legal

- Info para el valor tara mediante definición por teclas numéricas con softkey **◀ i ➤ PT 1**
- Para el valor neto se imprime el valor tara PT 1

Ejemplo
Determinar el contenido de botellas: el peso de las botellas es de 100 g.

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional(F4): 2a. memoria de tara: Impresión automática: Valor tara/Preset-tara

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba	<div>10</div>	
2. entrar peso de botellas (aquí p. ej. 50 g)	<div>50</div>	<div>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 50 PT1 ID M.</div>
3. memorizar valor tara	Softkey P T 1	<div>Max 210g d=0.01mg 0% 100% - 50.00000g NET TARA1: Mem. PT1 Cal PT1/T1</div> <div>PT1 + 50.00 g</div>
4. determinar contenido botellas (aquí p. ej. contenido = 125 g)	colocar botella llena en la balanza	<div>Max 210g d=0.01mg 0% 100% + 125.00000g NET1 Cal PT1/T1</div>

Identificación individual (Identificador ID)

Objeto

Con esta función adicional pueden memorizarse identificaciones para los valores de medición y mantenerlos expeditos para la impresión.

La identificación individual puede utilizarse en combinación con la aplicación 1 (p. ej: conteo, pesada en porcentaje), aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y aplicación 3 (totalización, formulación, estadística y funciones adicionales).

Características

- Pueden memorizarse, modificarse y borrarse individualmente hasta 4 identificadores.
- Cada identificador tiene un nombre y un valor; ambos pueden ser entrados por el usuario.
- Los nombres para los identificadores son entrados en el Setup: Impresión: Identificador
- Pueden entrarse máximo 20 caracteres para el nombre; sin embargo, en la entrada posterior del valor de identificador aparecen en la indicación, como máximo, 15 caracteres.
- Los valores de identificadores se entran con programa de aplicación activado, después de conmutar con softkey **ID**.
- Pueden entrarse máximo 20 caracteres para el valor del identificador.
- De los cuatro valores de identificadores, uno se obtiene también directamente, mediante entrada de bloque numérico. Los tres restantes se obtienen sólo después de conmutar para indicar el identificador, con softkey **ID**.
- La función puede asignarse a la cuarta o quinta tecla softkey (desde la derecha) (F4, o bien, F5)
- Los identificadores se imprimen, para el caso que fue ajustado en Setup (ver "Preparación")
- En la lista de protocolo individual y sumas, cada identificador puede ser incluido una sola vez, en cualquier posición.
- El nombre se imprime a la izquierda, el valor a la derecha. Cuando nombre y valor son demasiado largos para una línea de impresión, se imprimen en dos líneas.
- Caracteres individuales de un valor identificador pueden ser borrados con la tecla **CF**, si existe el ajuste en Setup: Parámetros del aparato: Teclas: Función CF al entrar: Borra último carácter
- Los identificadores pueden borrarse con Softkey **Borrar**

Ajuste previo de los nombres de identificadores

ID1: **ID 1**
ID2: **ID 2**
ID3: **ID 3**
ID4: **ID 4**

Ajuste previo de los valores de identificadores

Sin preajuste de valores

Ajuste de fábrica de los parámetros

Impresión: C/cada pulsión de tecla Print

Teclas de función: Softkeys

ID Cambio a menú "Identificación individual (identificador)"

Borrar Borrar valor identificador seleccionado







Impresión de identificador

Se imprimen hasta 4 identificadores (memorizados).

ID1 No.de lote 1234
ID2 Eisenmeier GmbH
ID3 Tornillos M4x6
ID4 Sr. Schmidt

ID1: Identificación 1 (Identificador 1)
ID2: Identificación 2 (Identificador 2)
ID3: Identificación 3 (Identificador 3)
ID3: Identificación 4 (Identificador 4)

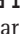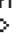Preparación








- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup “Función adicional(F4)” o bien “Función adicional(F5)”:
pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2× Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Función adicional(F4)** o bien **Función adicional(F5)**: pulsar 3 × (o bien 4 ×) Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Identificador**
- Confirmar **Identificador**

Identificador — Impresión —————

	Aut. si está entrado
	1* vez con Print si ha sido entrado
o	C/cada pulsión de la tecla Print
	1* vez con func. M+ (mem. apli. 3)

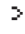o = ajuste de fábrica

ver también en “Ajustes previos”: “Parámetros de aplicación (sinopsis)”

- Pulsar 4 × Softkey 
- Entrar nombre para Identificador: seleccionar Impresión: pulsar Softkey , Softkey 
- Seleccionar Identificador: pulsar 5 × Softkey , Softkey 
- Seleccionar **ID1**:
- Entrar nombre para **ID1** y confirmar: pulsar teclas numéricas, pulsar Softkeys para letras
- Caso dado, entrar nombre para **ID2**, **ID3** e **ID4**
- Abandonar Setup: pulsar Softkey  

Ejemplo

Ver página siguiente

Ejemplo

Protocolos impresos han de ser identificados con la dirección de la empresa y número de lote al que pertenecen.

Cada identificador ha de comenzar con el nombre para la línea (nombre del identificador). Esta identificación ha de imprimirse para cada valor neto.

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):




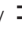

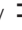






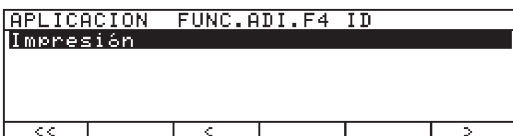



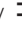

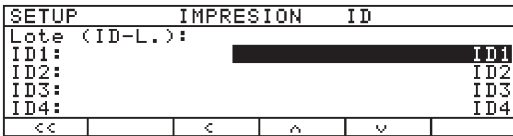



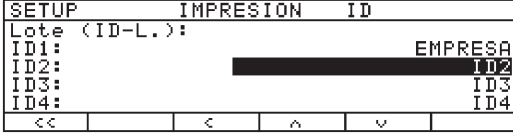
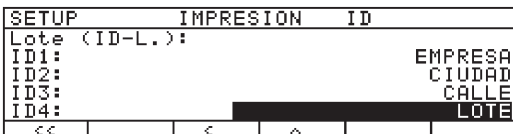
Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional(F4): Identificador








Setup: Input: ID1: Empresa

Setup: Input: ID2: Ciudad

Setup: Input: ID3: Calle

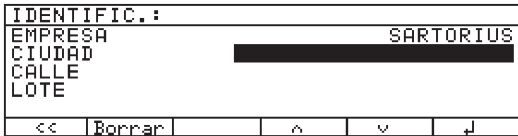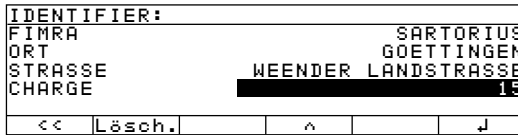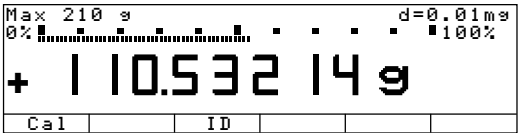Setup: Input: ID4: Lote

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza		
2. seleccionar func. adic.(F4) en Setup	 2 x Softkey  , Softkey  3 x Softkey  , Softkey 	
3. seleccionar Identificador	caso dado, repetidamente Softkey  o bien 	
4. confirmar identificador y después, abandonar función adic. F4	Softkey  , luego 3 x Softkey 	
5. seleccionar identificador ID1 (impresión: identificador)	Softkey  , Softkey  5 x Softkey  , Softkey  , Softkey 	
6. entrar nombre para ID1 (aquí: EMPRESA) y confirmar	 ... ver también pág. 50  , Softkey 	
7. repetir pasos 6 y 7 para: ID2: CIUDAD ID3: CALLE ID4: LOTE		

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
8. abandonar Setup seleccionar entrada para valores identif.	Softkey << Softkey ID	
9. entrar nombre EMPRESA (p. ej. Sartorius)	(ABC) ... ver también pág. 50	
10. confirmar entrada	(ABC), Softkey ↵	
11. repetir pasos 10 y 11 para CIUDAD: GOETTINGEN CALLE: WEENDER LANDSTRASSE LOTE: 15		
12. colocar primera muestra (aquí p. ej. con 110,53214 g)	cargar balanza	
13. imprimir valor de la muestra (caso dado, realizar e imprimir más mediciones)	(P)	
14. al finalizar las mediciones borrar identificadores individualmente, o bien, desactivar identificador: Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4)/(F5): Off	Softkey ID 4 x Softkey Borrar	

Memorización manual M+

Objeto

Con esta función adicional pueden memorizarse valores de medición y resultados directamente desde la aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada en porcentaje), o bien, desde la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) en la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística).





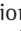

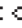
Característica

- La función puede ser asignada a Softkey cuarta o quinta (desde la derecha) (F4 o F5). Inscripción de Softkey es: **M+**
- Tiene que activarse un programa de la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística), para luego poder indicar e imprimir el resultado

Ajuste de fábrica de los parámetros

Sin parámetro ajustable

Preparación

- Encender balanza: tecla 
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup “Función adicional(F4)” o bien “Función adicional(F5)”:
pulsar tecla 
- Seleccionar **parámetros de aplicación:** pulsar 2 x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Función adicional(F4)** o bien **Función adicional(F5)**: pulsar 3 x (o bien 4 x) Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Mem. man. en mem. apli. 3 (M+)**
- Confirmar **Mem. man. en mem. apli. 3 (M+)**
ver también en “Ajustes previos”: “Parámetros de aplicación (sinopsis)”
- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey 

Cambio de resolución

Objeto

Cambiar la resolución de los resultados de pesada. Esto permite una pesada más rápida con una resolución reducida.

Características

- Se muestran los pesos con una resolución reducida.
- Una vez que se ha seleccionado esta función, aparece como siempre, p. ej., " ... d=0,01 mg". Para conmutar al rango de 4 dígitos:
pulsar la tecla **d*10**.
En el indicador de metrología, la lectura conmuta al correspondiente " ... d=0,1 mg" y Softkey con inscripción **d/10**.
- La balanza es puesta a cero cada vez que se conmuta el número de posiciones decimales. Esto asegura que cada vez que se conmute, la unidad tare con precisión, de acuerdo a las normas que rigen la metrología legal.
- Esta función puede ser asignada a la cuarta o quinta tecla Softkey (desde la derecha) (F4 o F5).
Las Softkeys se marcan como sigue:
 - durante la resolución normal **d*10**
 - durante la resolución reducida **d/10**
- Si la balanza está cargada, la pantalla no puede ponerse en cero: En este caso, aparece el mensaje de error:
ERR 08 <> rango cero.

Ajuste de fábrica de los parámetros

Sin parámetros ajustables.

Preparación




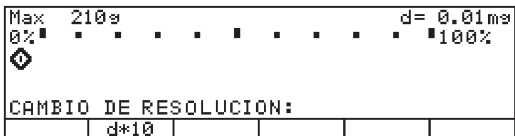

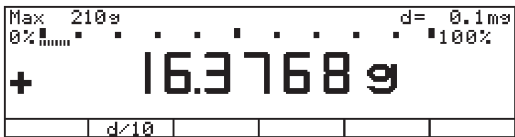

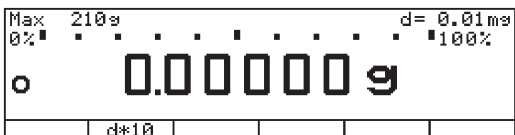
- Encender la balanza pulsando la tecla: **ON**
- > Aparece Logo Sartorius.
- Ajustar en Setup "Función adicional(F4)" o bien "Función adicional(F5)": pulsar la tecla **Setup**.
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey **↵**, Softkey **➤**.
- Seleccionar **Función adicional (F4)** o **función adicional (F5)**, pulsando varias veces la Softkey **↵** y Softkey **➤**.
- Seleccionar **Cambio de resolución**.
- Confirmar **Cambio de resolución**.
ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"
- Memorizar los ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀◀**

Ejemplo

Determinación consecutiva rápida de pesos de algunas muestras con resolución reducida.

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F5): Cambio de resolución

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba		
2. descargar la balanza y tarar		
3. reducir la resolución (aquí: 0,01 mg) indicación durante el cambio:	Softkey $d \cdot 10$	
después, aparece en la pantalla la resolución reducida		
3. reducir la resolución (aquí: 0,1 mg)	Softkey $d \cdot 10$	
4. pesar la muestra (ejemplo) y, si es necesario, pesar otras muestras	colocar la muestra en el platillo de pesada	
5. volver a cambiar la resolución a resolución normal: descargar la balanza y, si es necesario, tarar		
6. cambiar la resolución (aquí: 0,01 mg)	Softkey $d \cdot 10$	

Memoria datos de producto

Objeto

Con esta función adicional pueden memorizarse, asegurarse y cargarse datos de inicio y de usuario.

Esta función adicional puede utilizarse en combinación con la aplicación 1 (p. ej. conteo, pesada en porcentaje), aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo) y las funciones adicionales F4 y F5 (identificadores, segunda memoria de tara).

Características

- Pueden memorizarse máximo 300 registros para datos.
- Registros de datos pueden ser definidos, sobrescritos y borrados individualmente.
- Indicación de datos de productos mediante Softkey **DatPro**.
- El nombre de cada registro de datos puede ser entrado con letras y números (alfanumérico) por el usuario mediante el teclado (máximo 15 caracteres para cada nombre). Con esto, en la memoria de datos de productos se indica la posición deseada.
- Identif. datos de producto, cargable, sin identificador activo con softkey F4/F5

- Con la entrada del nombre para el registro de datos puede borrarse el carácter entrado últimamente, con la tecla **CF**, si así ha sido definido en el Setup: Parám. aparato: Teclado: Función CF al entrar: Borra último carácter.
 - Registros de datos son indicados en orden alfabético.
 - Los datos de inicio ajustados en el programa de aplicación (p. ej. wRef, nRef) son considerados al memorizar. Con varias aplicaciones activas y funciones adicionales, una selección posibilita, antes de memorizar, la selección de los datos de inicialización deseados.
 - Con entrada alfanumérica puede buscarse e indicarse un registro de datos en particular.
 - La función puede ser asignada a la cuarta o quinta tecla Softkey (desde la derecha) (F4 o F5).
 - Mensajes de error se indican mediante texto, en la línea correspondiente a texto.
 - Registros de datos pueden borrarse con la tecla Softkey **Borrar**
- Cargar equipo de baterías para la memorización de datos:
La memorización de datos se realiza, naturalmente, en una memoria intermedia a batería. Al separar la balanza de la tensión de red, los datos emitidos permanecen almacenados aprox. tres meses. En modo standby, los datos se mantienen mediante alimentación de red. Antes de un almacenamiento largo, imprimir los datos del protocolo.

Ajuste de fábrica de los parámetros

Sin parámetros ajustables.

Teclas de función: Softkey

- DatPro** Conmutar a visualización de datos básicos
- Borrar** Borrar registro de datos seleccionado
- Cargar** Reemplazar datos de inicio de la aplicación actual por los datos del registro seleccionado
- Modif.** Modificar los datos del registro memorizado.
- Nuev.** Definición de una nueva partida o registro de datos, entrando el nombre para el registro y eventualm. la selección de aplicación.
- Memor.** Memorizar datos de inicio de la aplicación actual bajo el nombre seleccionado del registro de datos. En caso de existir datos para el registro seleccionado, se pregunta, si estos datos han de ser sobrescritos.
- No** Pregunta para la seguridad: Con No se cancela el proceso iniciado: Borrar o sobrescribir.
- Si** Pregunta para la seguridad: Con Si se realiza el proceso iniciado: Borrar o sobrescribir.

Preparación

- Encender balanza: tecla **ON**
- > Aparece Logo Sartorius
- Ajustar en Setup "Función adicional(F4)" o bien "Función adicional(F5)": pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2 x Softkey **↙**, Softkey **➤**
- Seleccionar **Función adicional(F4)** o bien **Función adicional(F5)**: pulsar 3 x (o bien 4 x) Softkey **↙**, Softkey **➤**
- Seleccionar **Memoria datos de producto**
- Confirmar **Memoria datos de producto** ver también en "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"
- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey **↵**


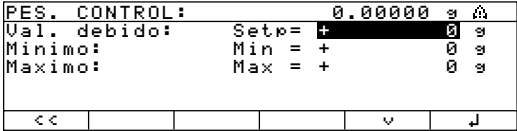
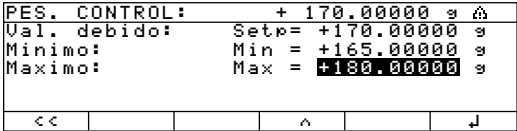







Ejemplo

Definir nueva partida de datos para los parámetros de inicialización en pesada de control: Valor debido, Mínimo, Máximo

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional(F4): Memoria datos de producto

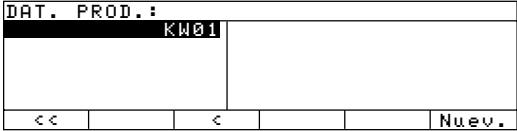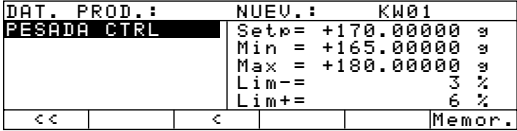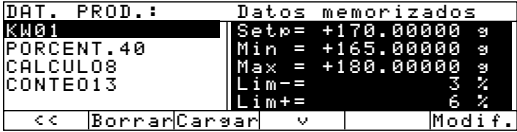Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 2: Pesada de control

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba		
2. conmutar a la aplicación pesada de control para la entrada de valor debido, mínimo y máximo	Softkey Param.	
3. entrar valor debido 170 g, mín. 165 g y máx. 180 g	ver ejemplo en pesada de control, pasos 5 hasta 9	
4. conmutar a visualización datos de producto (se indican, eventualmente partidas de datos existentes, aquí p. ej. ya existen 3 partidas de datos)	Softkey DatPro	
5. entrar nombres para nuevas partidas de datos (aquí p. ej. KW01)	 Softkey GHIJKL , Softkey K Softkey STUVWX , Softkey W  	
6. memorizar parámetro actual de pesada de control como partida de datos	Softkey Nuev.	
7. confirmar memoria	Softkey Memor.	
8. abandonar visualiz. datos producto	Softkey <<	

Función SQmin

Objeto

Mostrar en la pantalla la cantidad mínima de muestra autorizada "SQmin" según la United States Pharmacopeia (USP). De acuerdo a las normas de la USP, la incertidumbre de la medición no debe exceder un 0,1% de la cantidad de muestra cuando las sustancias se pesan con el grado de exactitud más alto para la determinación del contenido. La función adicional asegura que los resultados de pesada estén situados dentro de los límites de tolerancia definidos, los cuales corresponden a las exigencias de su sistema de garantía de calidad.

Características

- El técnico de servicio deberá determinar, en la localidad donde está instalada la balanza, la cantidad de muestra mínima necesaria, basándose en las exigencias de garantía de calidad. Después de eso, memorizará este valor en la balanza. El usuario no puede cambiar este ajuste. Una vez que se ha terminado con la programación de la balanza, el técnico entrega un certificado "Test de acuerdo a USP", en el cual están anotadas las mediciones, como también la pesada mínima para la balanza. Si Ud. utiliza la función SQmin, puede estar seguro que los resultados de pesada cumplen con las especificaciones del certificado y, por lo tanto, con las normas USP.
- Indicación de la cantidad mínima de muestra:
El valor se muestra en la línea de texto durante 4 segundos después de haber pulsado la Softkey "SQmin", o bien, el valor aparece constantemente en lugar de la barra gráfica.
- Esta función puede ser asignada a la cuarta o quinta tecla Softkey (desde la derecha) (F4 o F5).
La Softkey se marca con **SQmin**.
- Si no se ha alcanzado la cantidad mínima de muestra:
La Softkey **SQmin** parpadea, en color invertido.
Los valores de pesada se marcan con un asterisco (*) en la impresión.
- Título para protocolo GLP: Adicionalmente, puede imprimirse la cantidad de la muestra mínima ingresada para "SQmin".
- Función con básculas multirango (p. ej. modelo ME235P):
La función SQmin se activa sólo en el rango fino (p. ej. con ME235P hasta el rango de pesada de 60 g con una legibilidad de 0,01 mg).

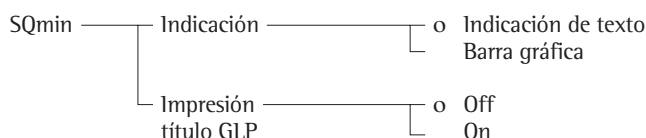
Ajustes de fábrica de los parámetros

Pantalla: **indicación de texto**

Impresión en título GLP: **Desactivada**

Preparación

- Encender la balanza: pulsar la tecla: **ON**
- > Aparece Logo Sartorius.
- Ajustar en Setup "Función adicional(F4)" o bien "Función adicional(F5)": pulsar la tecla **Setup**.
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey **▼**, Softkey **➤**.
- Seleccionar **Función adicional (F4)** o **Función adicional (F5)**, pulsando varias veces la Softkey **▼** y Softkey **➤**.
- Seleccionar **SQmin**.
- Confirmar **SQmin**.



o = Ajustes de fábrica



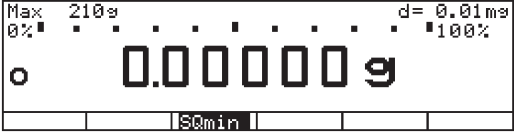





ver también an "Ajustes previos": "Parámetros de aplicación (sinopsis)"

- Memorizar los ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀◀**

Ejemplo

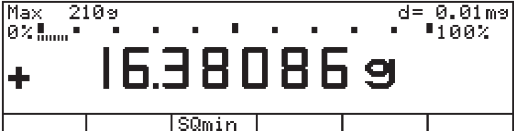Determinar los valores de pesada con control de la pesada mínima (aquí SQmin: 30 mg)

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):
Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4): SQmin

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos, ver más arriba		
2. colocar sobre el platillo el recipiente, dentro del cual se colocará la muestra, y tarar la balanza		
3. pesar una muestra (aquí: transgredir la pesada mínima)	colocar la muestra en el platillo de la balanza	
4. imprimir el peso		<div>*N + 0.02510 g</div>
5. medir el peso de otra muestra (aquí: exceder la pesada mínima)	colocar la muestra en el platillo de la balanza	
6. imprimir valor de pesada		<div>N + 16.38086 g</div>
7. se muestra la pesada mínima durante 4 segundos	Softkey SQmin	
8. pesar más muestras, si es necesario		

Incertidumbre de medición DKD

Objeto

Lectura de la incertidumbre dinámica de medición, conforme con los datos especificados en el certificado de calibración DKD.

Características






Después de la preparación por el Servicio:

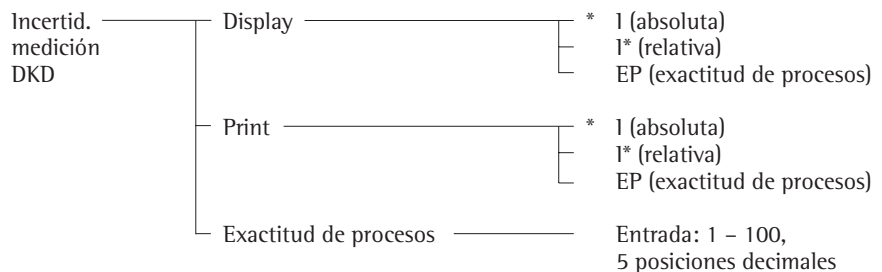
- La incertidumbre de medición de la balanza se determina directamente, mediante una calibración DKD, en el lugar de instalación por un técnico de Servicio. En el certificado de calibración DKD se encuentran protocolizados las mediciones y la incertidumbre de medición para la pesada inicial. Los datos así determinados los memoriza el técnico de Servicio, en la balanza.
- Lectura del factor entrado y exponente, vía Info Menú Setup: incertidumbre de medición DKD
- Lectura de la incertidumbre de medición, p. ej.:
Incertidumbre de medición absoluta:
I = 0.000292 g
Incertidumbre de medición relativa:
I* = 0.00029 %
Exactitud de procesos:
EP = 0.00087 %
- Lectura de hasta 2 valores de incertidumbre de medición DKD, máximo:
Se indican los dos primeros cálculos activados vía Menú Setup “Display”.
- La función puede ser asignada a la cuarta o quinta tecla Softkey (desde la derecha) (F4 o F5).
Inscripción de Softkey es: **I / EP**
- Resolución
La incertidumbre de medición absoluta se indica con la resolución elevada de factor 10.
La incertidumbre de medición absoluta y la fiabilidad de proceso se indican con hasta 5 posiciones decimales, máx. (2 posiciones significativas).
- Salida de datos de sumando y factor de la incertidumbre de medición después de encender:
Seleccionar en el Menú Setup
“Impresión autom. Impresión al iniciar.: Todos los valores”
- Lectura ----- (para I* y EP) en:
 - Valores netos calculados (p. ej. Contaje, Pesada en porcentaje, etc.)
 - Valores mayores que 100%
 - Valor neto igual a “cero”
- La función para la incertidumbre de medición DKD sólo puede activarse con la resolución más alta seleccionada para la unidad de peso básica en la balanza.

Preparación

- encender balanza: tecla 

> aparece logo Sartorius

- Ajustar “Función adicional(F4)” o bien “Función adicional(F5)” en el Setup:
pulsar tecla 
- Seleccionar **Parámetros de aplicación**: pulsar 2x Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Función adicional(F4)** o bien **Función adicional(F5)**: pulsar repetidamente Softkey , Softkey 
- Seleccionar **Incertidumbre de medición DKD**
- Confirmar **Incertidumbre de medición DKD**



* = ajuste de fábrica, “*” ítem de menú activado; máx 3 elecciones posible

ver también en el capítulo “Ajustes previos”: “Parámetros de aplicación (sinópsis)”

- Memorizar ajuste y abandonar Setup: pulsar tecla Softkey 

Ejemplo




Realizar proceso con incertidumbre de medición DKD

Ajustes previos:

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4): Incertidumbre de medición DKD: Display: EP (Exactitud de proceso)

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4): Incertidumbre de medición DKD: Display: EP (Exactitud de procesos)

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional (F4): Incertidumbre de medición DKD: Display: Entrada: 3.00000 (ajuste de fábrica)

Paso	Pulsar tecla (acción)	Indicación/salida
1. en caso dado, encender balanza y entrar ajustes previos		
2. colocar recipiente para la muestra en la balanza y tarar		<div><div>Max 210g</div><div>U = 0.000013 g PG = ----- % d= 0.01mg</div><div><div>o</div><div>0.00000 g</div></div><div><div>Cal</div><div></div><div>I/EP</div><div></div><div></div><div></div></div></div>
3. pesar una muestra	colocar muestra	<div><div>Max 210g</div><div>U = 0.000292 g PG = 0.00087 % d= 0.02mg</div><div><div>+</div><div>100.54292 g</div></div><div><div>Cal</div><div></div><div>I/EP</div><div></div><div></div><div></div></div></div>
4. imprimir valor de medida		<div><div>I0.000292 g</div><div>EP0.00087 %</div><div>N+100.54292 g</div></div>
5. en caso dado, pesar más muestras		

Combinar aplicaciones

A continuación se entrega una tabla resumen de las posibilidades que existen para combinar aplicaciones. Cada línea significa una posible combinación. La función básica "Pesar" está disponible en general, excepto para combinar con una función de cálculo.

Aplicación 1 (Función básica)	Aplicación 2 (Función control)	Aplicación 3 (Función protocolo)
Conteo	–	Totalización
Conteo	–	Formulación
Conteo	–	Estadística
Pesada en porcentaje	–	Totalización
Pesada en porcentaje	–	Formulación
Pesada en porcentaje	–	Estadística
Pesada de animales	–	Totalización
Pesada de animales	–	Estadística
Recalculación	–	Totalización
Recalculación	–	Estadística
Cálculo	–	Totalización
Cálculo	–	Formulación
Cálculo	–	Estadística
Determinación densidad	–	Estadística
Determinación densidad	Func. por control de tiempo	Estadística
Pesada diferencial	–	–
Corrección empuje del aire	–	Totalización
Corrección empuje del aire	–	Estadística
Determinación de diámetro	–	Totalización
Determinación de diámetro	–	Formulación
Determinación de diámetro	–	Estadística
–	Pesada de control	Totalización
–	Pesada de control	Formulación
–	Pesada de control	Estadística
Conteo	Pesada de control	Totalización
Conteo	Pesada de control	Formulación
Conteo	Pesada de control	Estadística
Pesada en porcentaje	Pesada de control	Totalización
Pesada en porcentaje	Pesada de control	Formulación
Pesada en porcentaje	Pesada de control	Estadística
Recalculación	Pesada de control	Totalización
Recalculación	Pesada de control	Estadística
Cálculo	Pesada de control	Totalización
Cálculo	Pesada de control	Formulación
Cálculo	Pesada de control	Estadística
Corrección empuje del aire	Pesada de control	Totalización
Corrección empuje del aire	Pesada de control	Estadística
Determinación de diámetro	–	Totalización
Determinación de diámetro	–	Formulación
Determinación de diámetro	–	Estadística
–	Func. por control de tiempo	Totalización
–	Func. por control de tiempo	Formulación
–	Func. por control de tiempo	Estadística
Conteo	Func. por control de tiempo	Totalización
Conteo	Func. por control de tiempo	Formulación
Conteo	Func. por control de tiempo	Estadística
Pesada en porcentaje	Func. por control de tiempo	Totalización
Pesada en porcentaje	Func. por control de tiempo	Formulación
Pesada en porcentaje	Func. por control de tiempo	Estadística
Pesada de animales	Func. por control de tiempo	Totalización
Pesada de animales	Func. por control de tiempo	Estadística
Recalculación	Func. por control de tiempo	Totalización
Recalculación	Func. por control de tiempo	Estadística
Cálculo	Func. por control de tiempo	Totalización
Cálculo	Func. por control de tiempo	Formulación
Cálculo	Func. por control de tiempo	Estadística
Corrección empuje del aire	Funciones por control de tiempo	Totalización
Corrección empuje del aire	Funciones por control de tiempo	Estadística
Determinación de diámetro	–	Totalización
Determinación de diámetro	–	Formulación
Determinación de diámetro	–	Estadística

Combinación razonable entre varias aplicaciones

Ejemplo: Determinación de la densidad con evaluación estadística

Determinación de la densidad de una muestra sólida según el método desplazamiento en agua como líquido de empuje y evaluación estadística con 10 mediciones

Ajustes previos (desviaciones del ajuste de fábrica):

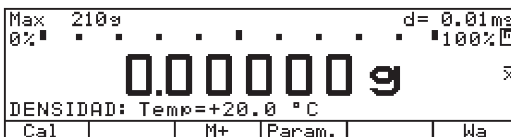
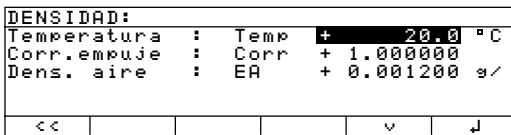
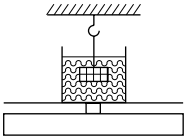
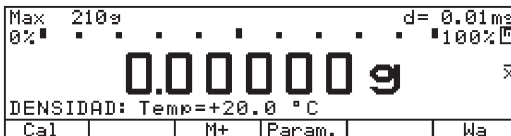
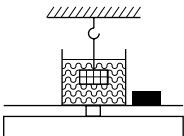
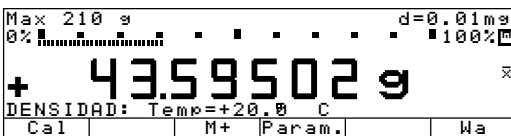

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1 (Aplicación básica): Densidad: Método: Desplazamiento



Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 1 (Aplicación básica): Densidad: Posiciones decim. en vol./indicación densidad: 2 posiciones

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 2 (control): Desactivada

Setup: Parámetros de aplicación: Aplicación 3 (documentación): Estadística: Valor a memorizar: Calculado

Setup: Parámetros de aplicación: Función adicional(F4): Mem. man. en apli. 3 (M+)

Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
1. caso dado, borrar valores memorizados	CF	
2. caso dado, modificar parámetro y memorizar	Softkey Param., Softkey <<	
3. colgar jaula, sumergida en agua		
4. tarar balanza	Tare	
5. determinar peso de la muestra en el aire: colocar muestra en la balanza		
6. memorizar valor de pesada	Softkey Wa	

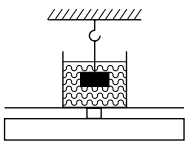Paso	Pulsar teclas (acción)	Indicación/salida
7. determinar valor de pesada en líquido: colocar muestra en la jaula		<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% ██████████ 100%</div> <div>+ 34.093 13 g</div> <div>DENSIDAD: Temp=+20.0 C</div> <div>Cal M+ Param. Wf1</div>
8. memorizar peso muestra en líquido; se indica la densidad de la muestra (eventualm. conmutar densidad/vol./peso)	Softkey W f 1	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% ██████████ 100%</div> <div>+ 1.28 g/cm³</div> <div>DENSIDAD: densidad calculada</div> <div>Cal M+ Param. Vol. Inicio</div>
9. memorizar densidad en memoria de estadística se indican número de muestra y densidad por 2 segundos	Softkey M+	<div>Max 210 g d=0.01mg</div> <div>0% ██████████ 100%</div> <div>+ 1.28 g/cm³</div> <div>STATI: n=1 Rho + 1.28 g/</div> <div>Cal M+ Param. Vol. Inicio</div>
número de muestra y densidad se imprimen automáticamente		<div>n 1</div> <div>Rho + 1.28 g/</div>
10. realizar más determinaciones de densidad y almacenar en memoria de estadística, como en los pasos 5 hasta 9 (aquí p. ej. 10 muestras)		<div>n 10</div> <div>Rho + 1.29 g/</div>
11. imprimir protocolo estadística conmutar a la aplicación estadística; imprimir protocolo	 , Softkey MR,	<div>-----</div> <div>n 10</div> <div>Promed.+ 1.28 g/</div> <div>s + 0.02 g/</div> <div>srel + 1.78 %</div> <div>Total + 12.82 g/</div> <div>Min + 1.27 g/</div> <div>Max + 1.30 g/</div> <div>Diff + 0.03 g/</div> <div>11.01.2000 15:44</div> <div>-----</div>

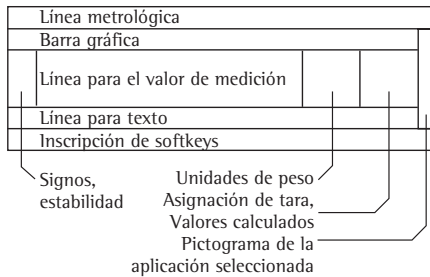
Salida de datos

Para la salida de datos existen tres posibilidades:

- Lectura en la unidad indicación/manejo
- Impresora serial (impresión de protocolo)
- Comunicación serial (p. ej. PC)

Lectura en la unidad de indicación/manejo

El campo de indicación está compuesto de 9 "líneas", en las cuales aparecen datos sobre la balanza, la aplicación y la muestra a medir



- Línea metrológica
- Barra gráfica
- Signos, estabilidad
- Línea para el valor de peso
- Unidades de peso
- Asignación de tara, valores calculados
- Pictograma de la aplicación seleccionada
- Línea para texto
- Inscripción Softkeys

Línea metrológica (en metrología legal)
En esta línea se representan

Max 210 g

- Rango superior capac. de pesada (p. ej. 210 g)

Min 1 g

- Rango inferior capac. de pesada (p. ej. 1 g), el que, en metrología legal, no puede ser inferior

e= 0.1mg

- Escalón de verificación (p. ej. 0,1 mg); sin importancia en balanzas que no se emplean en metrología legal

d=0.01mg

- Legibilidad/escalón real: especificación del escalón de la balanza (p. ej. 0,01 mg)

Barra gráfica (indicación sinóptica)

En la barra gráfica, el valor de medición se representa, ya sea



- como un valor porcentaje en relación al alcance máximo de la balanza, o bien,
- en relación a un valor debido con valores límites de tolerancia.

La barra gráfica puede suprimirse en la indicación

(Setup: Parám. aparato: Indicación: Tamaño dígitos: 13 mm + Indic. texto, o bien 13 mm)

Signos, estabilidad

En esta línea se representan



- Símbolo Busy



- Signos



- Símbolo de puesta a cero

125.03
35
= 18.3 * 0.9

- Línea para el valor de peso
En esta línea se representan:
 - El valor de peso actual
 - Valores calculados (p. ej. cantidades de piezas con unidad pcs)
 - Las entradas del usuario (p. ej. número de lote, ecuaciones)

g
PCS
▲
NET1 NET2

- Unidades de peso
En esta línea se representan:
 - La unidad de peso actual (p. ej. g)
 - Identificación para otras medidas (p. ej. cantidad de piezas)
- Asignación de tara, valores calculados
En esta línea se representan:
 - Advertencia sobre valores calculados (valores no verificados)
 - Advertencia sobre asignación de tara mediante el programa de aplicación

▲ % ⊗ ⊕
% ⊕
Σ ⊕ ⊗
⊗
⊕

- Pictogramas de la aplicación seleccionada
En esta línea se representan:
 - Símbolo para la aplicación 1 (conmutación de unidades, conteo, pesada en porcentaje, pesada de animales, cálculo, etc.)
 - Símbolo para la aplicación 2 (pesada de control, funciones por control de tiempo)
 - Símbolo para la aplicación 3 (totalización, formulación, estadística)
 - Símbolo para el proceso de impresión en desarrollo
 - Símbolo para protocolo ISO/GLP

CONTEO: nRef = 10 pcs
Peso ref. muy liviano

- Línea para texto
En esta línea se representan:
 - Texto de apoyo para el programa de aplicación (p. ej. "conteo")
 - Texto de mensajes de error

S-ID (= ID-M)
◀ ◁ ▴ ▾ ▶ ▸

- Inscripción en Softkeys
En esta línea se representan:
 - Textos (abreviaturas) como descripción de la función, asignada a la tecla de flecha subyacente
 - Símbolos para la selección y confirmación de ajustes de parámetros (ver también "Concepto de manejo")

Informaciones de balanza
En Setup pueden consultarse informaciones sobre la balanza;
bajo Setup: Info: Info datos del aparato:

SETUP	INFO
No. versión:	01-41-05
Sist. pesaje #:	00-21-09
Protector #:	05-01-03
Modelo:	ME215S
No. serie:	91205355
<<	<
	✓

- Número versión del software
- Número versión de la balanza
- Número versión protector
- Modelo de la balanza
- Número serie de la balanza
- Fecha: próximo mantenimiento
- Número teléfono de servicio
- Pesada mínima SQmin

Interfaces

Objeto

Las balanzas ME/SE están equipadas con dos interfaces, a través de las cuales pueden transferirse valores de medición, valores calculados y ajustes de parámetros a una impresora, PC o indicadores de control. Vía interfaz también pueden realizarse comandos de control (p. ej. activaciones de teclas a través de interruptor de pedal) y entradas alfanuméricas (p. ej. a través de lector código de barras).

Características

- Las balanzas ME/SE poseen dos interfaces seriales:
- Impresora serial (PRINTER-Serial Out)
- Comunicación serial (PERIPHERALS-Serial I/O)
- La impresora serial está equipada con hembra 25 contactos D-SUB (RS 232)
- En impresora serial pueden conectarse las siguientes impresoras:
- YDP02
- YDP03
- YDP01IS
- YDP01IS-Etiq.
- YDP02IS
- YDP02IS-Etiq.
- Universal
- YDP04IS
- YDP04IS-Etiq.



En caso dado, aparatos periféricos funcionamiento mediante alimentación de tensión externa.

- En impresora serial pueden conectarse también los siguientes aparatos:
- Interruptor manual
- Interruptor de pedal
- Indicador externo de control
- Lector código de barras*
- Teclado*

* con adaptador
YCC01-0024M01 (accesorio)

- La comunicación serial está equipada en forma estándar con hembra de 25 contactos D-SUB. Esta puede ser reemplazada por:
- hembra redonda de 12 contactos (RS 485 para XBPI; RS 232 para SBI, XBPI)
- hembra de 9 contactos D-SUB para la conexión directa de PC
- Tanto la salida de datos de 12 contactos como la hembra de 9 contactos están equipadas adicionalmente con conector de 5 pines para la conexión directa de un lector código de barras externo o un teclado.
- La comunicación serial puede utilizarse en los siguientes modos de funcionamiento:
- SBI
- XBPI (BPI)

- En comunicación serial pueden conectarse los siguientes aparatos:
- Impresora estándar
- PC
- Segundo indicador
- Interruptor manual
- Interruptor de pedal
- Indicador de control externo
- Conector en T
- Lector código de barras*
- Teclado*


* en hembra de 25 contactos D-SUB con adaptador
YCC01-0024M01 (accesorio)

- La impresión desde programas de aplicación o mediante tecla Print configurable puede realizarse vía impresora serial, comunicación serial, o bien, a través de ambas.

- Con ajuste "Autoprint", esto se realiza vía comunicación serial, las salidas desde los programas de aplicación se realizan entonces sólo vía impresora serial.

- En funcionamiento XBPI comunicación serial puede activarse independientemente de la impresora serial (es decir, memorización de datos y control mediante PC y al mismo tiempo salida de impresión vía impresora serial)

- En funcionamiento SBI, la balanza puede ser controlada mediante comandos ESC desde PC vía comunicación serial.

- En impresión a solicitud decide el ítem de menú, en qué interfaz se realizarán las salidas de datos activadas con ESC P o tecla .

Ajuste de fábrica de los parámetros

Parámetros del aparato: Interfaces:

Comunicación serial: **SBI**

Impresora serial: **YDP03**

Impresión: Salida vía interfaces:

Comunicación serial (PERIPHERALS):

Salida en aplicaciones

Impresión: Salida vía interfaces:

Impresora serial (PRINTER):

Salida en aplicaciones

Preparación

Configurar interfaz

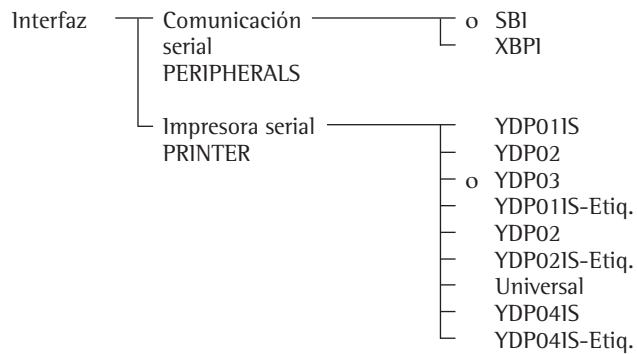
- Encender balanza: tecla **ON**

> Aparece Logo Sartorius, se realiza autochequeo

- Ajustar interfaz: pulsar teclas **Setup**

- Seleccionar **Parámetros del aparato**: pulsar Softkey **▼**, Softkey **➤**

- Seleccionar **Interfaz**: pulsar 5 × Softkey **▼**, Softkey **➤**




o = ajuste de fábrica

ver también en “Ajustes previos”: “Menú de aplicación (sinopsis)”

- Memorizar ajustes y abandonar Setup: pulsar Softkey **◀** **◀**

Configuración de la impresión

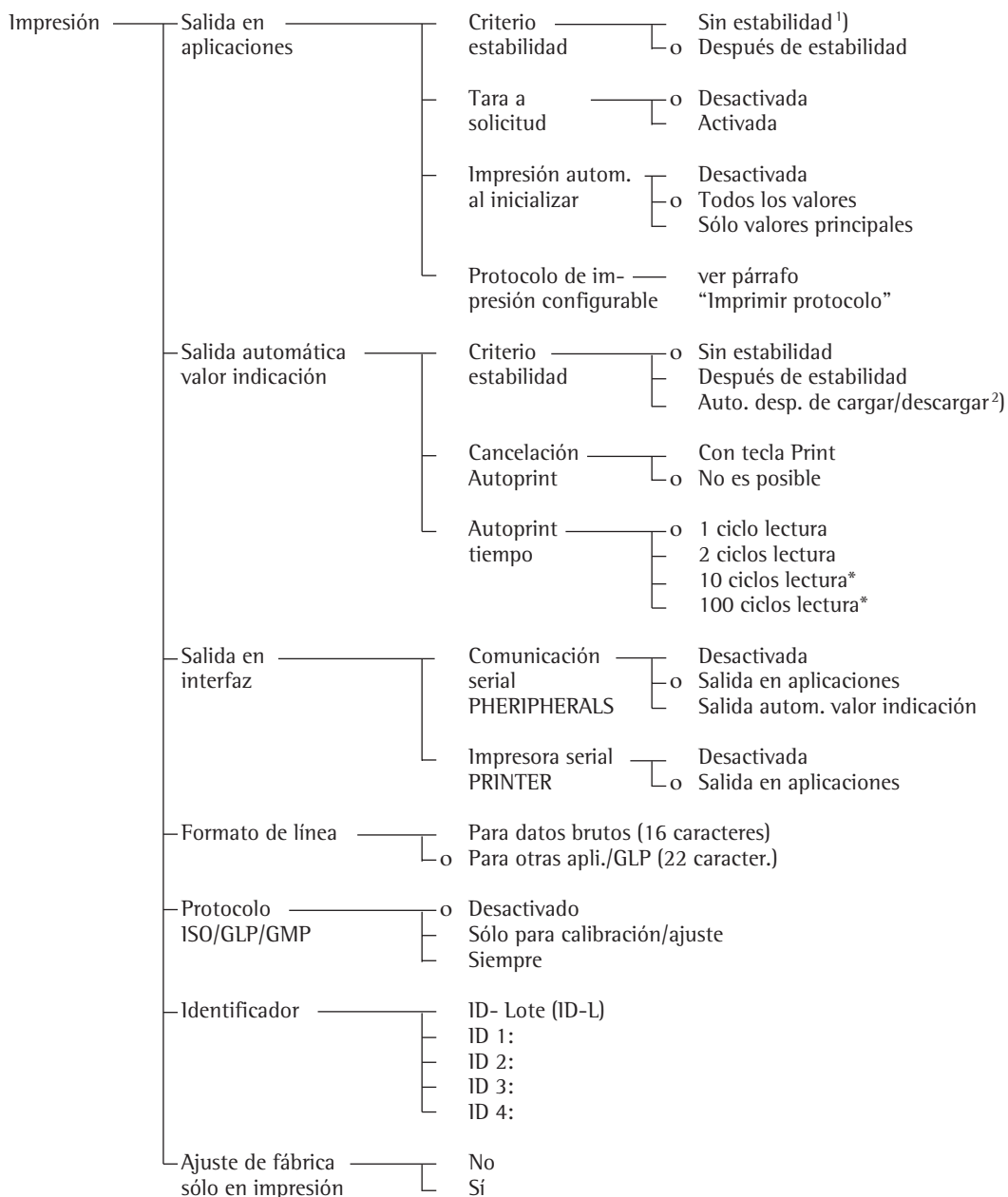- Seleccionar Setup: pulsar tecla **Setup**
- Seleccionar **Impresión**: pulsar 3 x Softkey **↵**, Softkey **➤**



o = ajuste de fábrica

* = sin modificación de ajuste en balanzas verificadas

¹⁾ = Advertencia para metrología legal: permisible sólo para objeto de regulación y control: Impresión de protocolo no está permitido

²⁾ = Autoprint, si la carga varía >10 d y estabilidad: desbloqueo < 5 d

Impresión

Objeto

La impresión de valores de peso, valores de medición e identificaciones están destinados para la documentación y puede ser adaptada a los más diversos requerimientos.

Características

Formato de línea: Identificación de todo valor impreso con 6 caracteres, máximo, al comienzo de línea

Identificación para valor del peso:

Línea adicional frente al valor de peso, o bien, valor calculado con identificación **I D – M**

Impresión parámetros de aplicación:

impresión de valores inicialización antes de la impresión de resultados de medición

Protocolo ISO/GLP: impresión de referencias del entorno de medición

Impresión en pesada de animales:

impresión aplicativa del peso del animal, o bien, peso del animal y valor calculado al finalizar la formación del valor promedio

Optimizar interfaces :

- en lo posible, trabajar con la más alta velocidad baudios
- desactivar interfaces que no se utilicen
- minimizar caudal de datos

Salida vía interfaces

Modo Print PERIPHERALS	Activador	Modo funcionamiento PERIPHERALS	
		SBI	xBPI
	ESC P (PERIPHERALS)		No es posible
Aplicación	Tecla Print de balanza	Imprime individualmente o Print config. según ajuste en menú	
Impresión (individual):	Tecla Print en impresora, o bien, ESC P (PRINTER)	PRINTER, PERIPHERALS o en ambas	Imprime indiv. o Print config. en PRINTER, si en menú hay ajuste: activada
	Aplicación		
Autoprint	ESC P (PERIPHERALS)	Conmuta autoprint On/Off, si es desactivable, de lo contrario imprime	No es posible
	Tecla Print de balanza	impr. indiv. o Print config. en PRINTER. Salida cíclica en PERIPHERALS	Conmuta Autoprint On/Off, si es desactivable, de lo contrario imprime indiv. o config.
		Print en PRINTER	
	Tecla Print en impresora, o bien, ESC P (PRINTER)	Imprime indiv. o Print config. en PRINTER.	Imprime indiv. o Print config. en PRINTER.
	Aplicación		

Interfaz impresora

Tipo de interfaz:	interfaz serial
Funcionamiento:	dúplex total
Nivel:	RS 232
Hembrilla:	D-SUB 25 contactos
Velocidad de transmisión:*	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 baudios
Paridad:*	espacio en blanco, impar, par
Sincronización:*	bitio inicio, 7-/8 bitios ASCII, paridad, 1 o 2 bitios parada
Handshake:	en interfaz bifilar: Software (XON/XOFF); en interfaz tetrafilar: Hardware (CTS/DTR)
Modo funcionamiento:	YDP02, YDP03, YDP011S, YDP02IS, YDP011S-Etiq., YDP02IS-Etiq., Universal, YDP04IS, YDP04IS-Etiq.
Impresión manual	sin estabilidad, después de estabilidad
Impresión de aplicación	sólo salida de aplicación
Formato de salida balanza:	16 caracteres, 22 caracteres

* según modo de funcionamiento

Estructura de la impresión

Para una serie de programas de aplicación pueden imprimirse valores de inicialización. Todos los valores de inicialización, o bien, sólo valores principales pueden ser impresos, en tanto se haya realizado el ajuste correspondiente (ver también pág. 146, parámetros de aplicación).

Impresión autom. al inicializar

Valores de peso y valores calculados pueden ser impresos como valores numéricos sin identificación antepuesta (16 caracteres) o bien, con identificación (22 caracteres). Ver también en "Salida de datos" **Formato de línea**

El protocolo ISO/GLP puede imprimirse siempre sólo en calibración/ajuste, o nunca. Ver también en página 139.

Imprimir protocolo ISO/GLP
En Setup puede ajustarse que

- no se imprima protocolo ISO/GLP (**Desactivado**)
- sólo se imprima un protocolo ISO/GLP en calibración/ajuste (**Sólo en calibración/ajuste**)
- cada impresión aparezca como protocolo ISO/GLP (**Siempre**)

Print de aplicación en pesada de control: impresión del valor de peso, si éste está dentro de los límites predefinidos en estabilidad de balanza

Print de aplicación en funciones por control de tiempo: impresión del valor de peso, después de transcurrir el intervalo entrado o tiempo

Impresión de la evaluación intermedia o evaluación final en totalización, formulación y estadística, al pulsar Softkey **MR**

Definir impresión aceptable para la verificación: En Setup de la balanza puede ajustarse para la impresora Sartorius la impresión aceptable para la verificación:

- YDP02
- YDP03
- YDP01IS
- YDP01IS-Etiq.
- YDP02IS
- YDP02IS-Etiq.
- YDP04IS
- YDP04IS-Etiq.

Tecla 

Aparece el valor actual en la pantalla (valor peso con unidad, valor calculado, indicación alfanumérica)

Ajuste:

Impresión: Salida en aplicaciones, o bien, salida automática valor indicación


Formato de línea

El valor actual en la indicación puede imprimirse, adicionalmente, con un identificador. Este identificador aparece al comienzo de la línea impresa y consta de 6 caracteres, como máx. Así, p. ej., puede identificarse un valor de peso como valor neto (N), o bien, un valor calculado como cantidad de piezas (Qnt)

Ajuste:

Setup: Impresión: Formato de línea: para otras apli./GLP (22 caracteres)

Identificación del valor de peso

A cada valor de peso o valor calculado impresos puede anteponérsele una línea, con entrada de números y letras mediante teclado. Esta línea se imprime como entrada numérica/alfabética en forma inmediata (tecla ) , o bien, se memoriza primero como identificación (Softkey **ID M.**) y se imprime sólo recién en la próxima salida, si el formato de línea: para otras apli./GLP (22 caracteres) está ajustado.

Impresión parámetros de aplicación

Pueden imprimirse uno a más valores de inicialización del programa de aplicación automáticamente, tan pronto como la balanza ha inicializado; estos, p. ej., pueden ser valores como: nRef, wRef, pRef, etc.

Ajuste:

Setup: Impresión: Salida en aplicaciones: Impr. aut. al inicializar.

Autoprint

El resultado de medición puede imprimirse automáticamente¹, dependiendo de una cantidad de ciclos de lectura² y estabilidad de la balanza³. El intervalo de indicación depende del modo de funcionamiento y modelo de la balanza.

Ejemplos

```
+153.00000 g
+ 58.56234 o z t
+      253 p c s
+    88.23 %
+   105.78 o
```


Valor de pesada en gramos
Valor de pesada en onzas troy
Cant. de piezas
Valor de porcentaje
Valor calculado

```
ID      ABC123DEF456GH
ID-L    ABC123DEF456GH
ID-P    ABC123DEF456GH
N       +153.00000 g
Qnt     +      253 p c s
Pr c    +    88.23 %
```

Número de identificación*
Número serie de medición*
Número juego de pesas*
Valor neto
Cant. de piezas
Valor de porcentaje

* = sólo en protocolo ISO/GLP

```
ID-M    ABC123DEF456GH
ABC123DEF456GHI789JK
NUM      12345678
```

Identificación valor peso (con menos de 14 caracteres)
Identificación valor peso (con más de 14 caracteres)
Salida bloque numérico con tecla 

```
nRef      10 p c s
wRef      1.23456 g
pRef      80 %
```

Conteo: cant. piezas de referencia
Conteo: peso de referencia
Pesada en porcentaje: cant. porcentaje de referencia
Pesada en porcentaje: peso de referencia
Pesada de animales: cantidad de mediciones para la formación valor promedio
Pesada de animales: factor para el cálculo
Cálculo: ecuación para la conversión
Pesada de control: peso debido
Pesada de control: límite inferior
Pesada de control: límite superior

```
wxx%      120.00000 g
mDef      10
```

```
MuL      0.00347
ECUAC. = W*18.3*0.9
Setp     +100.00035 g
Min      + 98.10540 g
Max      +102.00630 g
```

```
N       +153.00000 g
ID-M    12345678901234
Stat     L
Stat     H
```

Peso neto
Identificación del valor de pesada
Indicación en blanco
Indicación para carga muy liviana
Indicación para sobrecarga

Ajuste:

¹Setup: Impresión: impresión automática valor indicación

²Setup: Impresión: impresión automática valor indicación: Autoprint dependiente de tiempo

³Setup: Impresión: impresión automática valor indicación: Criterio de estabilidad

Protocolo ISO/GLP

Los datos del aparato y números de identificación, además de la fecha actual pueden ser impresos antes (título GLP) y después de los valores de la serie de medición (pie de línea GLP). (Setup: Impresión: Protocolo ISO/GLP: Siempre) Estos son:

Título GLP:

- fecha
- hora de comienzo de la serie de medición
- fabricante de la balanza
- modelo de balanza
- número de serie del modelo
- número de versión del software
- número de identificación de la serie de medición

Pie de línea GLP:

- fecha
- hora del fin de la serie de medición
- espacio para firmar

Funcionamiento de la balanza con dispositivo auxiliar para documentar según ISO/GLP.

Para la documentación conforme a ISO/GLP con ordenador se requiere un software especial. Una descripción detallada sobre la elaboración del software puede ser solicitada directamente a Sartorius.

Ajuste:

Setup: Impresión: Protocolo ISO/GLP: Siempre

La impresión se realiza con una impresora YDP03-OCE u ordenador.

Finalizar protocolo GLP:

- Pulsar tecla **CF**

Finalizar protocolo GLP en aplicaciones seleccionadas:

Para el protocolo GLP y programa de aplicación debería ajustarse: Setup: Parámetros de aparato: Teclado: Función CF en aplic.: borra sólo apli. seleccionadas

- Pulsar tecla **CF**
- > Línea para texto: selección CF: borra aplicación
- Pulsar Softkey **GLP**

```
-----
17.01.2000      16:12
      SARTORIUS
Mod.            ME215S
N.SERIE        91205355
N.VERS.        01-41-05
ID             12345678901234
-----
ID-L 12345678901234
nRef          10 pcs
wRef          1.35274 g
Qnt +         235 pcs
Qnt +         4721 pcs
ID-M 12345678901234
Qnt +          567 pcs
-----
17.01.2000      16:13
NOMB:
-----
```

```
-----
17.01.2000      16:24
      SARTORIUS
Mod.            ME215S
N.SERIE        91205355
N.VERS.        01-41-05
ID
-----
ID L
CALIBRACION INTERNA
INICIO:         MANUAL
DIFF. + 0.06365 g
CALIBRACION INTERNA
LISTO
DIFF. + 0.00000 g
-----
17.01.2000      16:25
NOMB:
-----
```

Línea de rayas
Fecha/hora
Fabricante de balanza
Modelo de balanza
Número de serie de balanza
Versión del software (unidad de indic.)
N° Ident.
Línea de rayas
N° de serie de medición
Valor inicialización de la aplicación
Valor inicialización de la aplicación
Resultado de conteo
Resultado de conteo
Identificación del valor de conteo
Resultado de conteo
Línea de rayas
Fecha/hora
Espacio para firmar
Línea en blanco
Línea de rayas

Protocolo para
calibración/ajuste internos:
Línea de rayas
Fecha/hora
Fabricante de balanza
Modelo de balanza
N° serie de balanza
Versión del software (unidad indicac.)
N° Ident.
Línea de rayas
N° serie medición
Modo de calibración/ajuste
Modo comienzo calibración
Diferencia después de calibrar
Confirmación del proceso
ajuste finalizado
Diferencia respecto al valor debido después
del ajuste
Línea de rayas
Fecha/hora
Espacio para firmar
Línea en blanco
Línea de rayas

Comunicación serial

Objeto

La balanza está equipada con interfaz para la comunicación serial (PERIPHERALS), a la que pueden conectarse un ordenador, un segundo indicador, o bien, un indicador de control externo.

A través de ordenador pueden modificarse, iniciarse y controlar las funciones de balanza y las funciones de los programas de aplicación.

Mediante comunicación serial están también a disposición líneas de control para el programa de aplicación "Pesada de control". Conexión también para interruptor pedal y manual

⚠ Advertencia al emplear cable conector RS232 de otras marcas:

Cables RS232 adquiridos de otros fabricantes tienen a menudo terminales de asignación incompatibles con las balanzas Sartorius. Por lo tanto, antes de realizar conexiones, controle el diagrama de asignación de terminales correspondiente y separe las líneas con asignación diferente (p. ej. pin 6). La no observación de esto puede conducir a funciones erróneas o a la destrucción de la balanza o aparato periférico conectado.

Características

Tipo de interfaz:	interfaz serial
Funcionamiento:	dúplex total
Nivel:	RS 232 (opcional RS 485)
Hembrilla:	D-SUB de 25 contactos opcional: hembrilla redonda 12 contactos opcional: D-SUB hembrilla de 9 contactos (opcional con hembrilla Din de 5 contactos, respectivamente)
Velocidad de transmisión:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 baudios
Paridad:	espacio en blanco, impar, par
Sincronización:	bitio inicio, 7-/8 bitios ASCII, paridad, 1 o 2 bitios parada
Handshake:	en interfaz bifilar: software (XON/XOFF); en interfaz tetrafilar: hardware (CTS/DTR)
Conexión:	SBI, XBPI*
Dirección en red*:	1, 2, ..., 31, 32
Impresión manual	sin estabilidad, después de estabilidad
Impresión automática	sin estabilidad, en estabilidad, al variar peso de carga
Formato salida de balanza:	16 caracteres, 22 caracteres

* Modo funcionam. XBPI siempre con 9600 baudios, 8 bitios, paridad impar, 1 bitio parada

** Dirección de red importante sólo en modo funcionam. XBPI

Ajuste de fábrica de los parámetros:

Velocidad de transmisión:	1200 baudios
Paridad:	impar
Bitios parada:	1 bitio
Handshake:	Hardware Handshake, Después de CTS todavía 1 caracter
Conexión:	SBI
Dirección en red:	0
Impresión manual/automática:	manual después de estabilidad/automática sin estabilidad
Cancelación impresión automática:	no es posible
Impresión automática, seg. tiempo:	después de 1 ciclo indicación
Tara después de impr. a solicitud:	desactivada
Aplicación valores básicos:	desactivada
Formato de línea:	para otras apli./GLP (22 caracteres)

Preparación

- Asignación de terminales y diagrama de conexión, a partir de la pág. 145.

Formato de la salida de datos

Los contenidos de la línea para el valor de medición y unidad de peso pueden aparecer con o sin identificación.

Ejemplo: sin identificación
+ 253 pcs

Ejemplo: con identificación
Qnt + 253 pcs

El modo de salida se ajusta en setup (Setup: Ajustes básicos: configuración de impresión: formato de línea).

En la salida sin identificación se emiten 16 caracteres; en la salida con identificación se emiten 22 caracteres.

Formato de salida con 16 caracteres

Caracteres que en la indicación aparecen en blanco, se imprimen como espacios en blanco. Con caracteres sin punto decimal no se imprime decimal.

Caracteres posibles dependientes de la posición de salida

Funcionamiento normal

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
o bien	-		*	*	*		
o bien	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					

*: Espacio en blanco
 A: Signo de la indicación
 E: Símbolo para la unidad de peso
 CR: Carriage Return
 LF: Line Feed

Funcionamiento especial

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	CR	LF
o bien	*	*	*	*	*	*	A	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF
o bien	*	*	*	*	*	*	A	B	*	*	*	*	*	*	CR	LF
y sólo a solicitud con ESC w0 (sin Print):	*	*	*	*	*	*	W	*	X	X	X	Y	Y	Y	CR	LF
o bien	*	*	*	*	*	*	I	*	X	X	X	*	*	*	CR	LF

*: Espacio en blanco
 AB = - -: Pesada
 A = H: Sobrecarga
 AB = H H: Sobrecarga pes. control
 A = L: Carga muy liviana
 AB = L L: Carga m. liv. pes. control
 A = C: Calibración
 W: Protector c/corr. aire
 I: Ionizador
 Y, Y, Y = puertas del protector
 XXX = Val. decimal calculado de informaciones binarias:

Val. decimal	Val. binario	Adv. control
1	Bit0 = 0: Bit0 = 1:	ningún error/ionizador desactiv. error prot. c/corr. aire/ionizador activ.
2	Bit1 = 0: Bit1 = 1:	motores prot. desactivados puertas prot. en movimiento
8	Bit3 = 0: Bit3 = 1:	"Función aprendizaje" Off "Función aprendizaje" On
16	Bit4 = 0: Bit4 = 1:	abierta, por lo menos 1 puerta del prot. puertas prot. cerradas
64	Bit6 = 0: Bit6 = 1:	manejo motor protector manejo manual protector

Ejemplos para ME215/235/254/414/614/365:

R, M, L = COO: puerta derecha cerrada (Closed), puertas central e izquierda abiertas (Open)
 R, M, L = OCC: puerta derecha abierta (Open), puertas central e izquierda cerradas (Closed)

Ejemplo para ME5, SE2:

W 008210

Angulo de giro

El protector ha girado a la posición absoluta 210°

Advertencia del control

0 → Bit 6 – manejo por motor
 + 0 → Bit 4 – abierto
 + 8 → Bit 3 – "función aprendizaje" On
 + 0 → Bit 1 – motor Off
 + 0 → Bit 0 – sin error de control
 = 08

Mensaje de error

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	E	r	r	*	*/#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*: Espacio en blanco
#: Número de error

Ejemplo: salida del valor peso + 111,25507 mg

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	1	1	1	.	2	5	5	0	7	*	m	g	*	CR	LF

Posición 1: Signo +, - o espacio en blanco
Posición 2: Espacio en blanco o valor peso
Posición 3 – 10: Peso con decimal, ceros iniciales se imprimen como espacios en blanco
Posición 11: Espacio en blanco
Posición 12 – 14: Símbolo para unidad de peso, o bien, espacio en blanco
Posición 15: Carriage Return
Posición 16: Line Feed

Formato de salida con 22 caracteres

Aquí, al formato de salida con 16 caracteres se le antepone un bloque de 6 caracteres.

Estos 6 caracteres identifican el valor que se representa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K	K	K	K	K	K	+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
	*	*	*	*	*	-		*	*	*		
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

K: Caracter de identificación¹⁾ E: Símbolo de unidad de medición¹⁾ ver
*: Espacio en blanco en "Conmutar unidades de peso"
A: Signo de la indicación CR: Carriage Return
 LF: Line Feed

¹⁾ Dependiente del modelo, p. ej. no todas las unidades e identificaciones están disponibles en balanzas verificadas

Funcionamiento especial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF
												H	H									
												L	L									
												C										

*: Espacio en blanco L: Carga muy liviana
- -: Peso L L: Carga muy liviana en pesada de control
H: Sobrepeso C: Calibración
H H: Sobrepeso en pesada control Protector c/corr. aire y estado
 ionizador análogo al formato
 de salida con 16 caracteres

Mensaje de error

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*: Espacio en blanco # # #: Número de error

Caracteres para identificación K ¹⁾

S t a t	Estado
I D	Identificación (Identificador)
I D L.	Número de serie de medición
I D P.	Número del juego de pesas
Debido	Valor de pesa de calibración exacto
I D M.	Identificación valor de pesada
NUM	Entrada bloque numérico
T 1	Tara 1 aplicación
N	Neto (T1 = 0)
N 1	Neto (T1 ≠ 0)
Q n t	Cantidad de piezas
P r c	Cantidad de porcentaje
n R e f	Cant. piezas de ref.
p R e f	Valor porcentaje de ref.
w R e f	Peso piezas de ref.
W x x %	Peso porcentaje de ref.
m D e f	Cant. mediciones debida en pesada de animales
M u l	Factor de cálculo en pesada de animales
x - N e t	Resultado pesada de animales
x - R e s	Resultado calculado en pesada de animales
R e s	Resultado del cálculo de ecuación (cálculo)
S e t p	Valor debido en pesada de control
M i n	Límite inferior en pesada de control
M a x	Límite superior en pesada de control
H O R A	Hora de la memorización
C o m p x x	Componentes xx en formulación
T - C O M P	Total de pesos en formulación
n	Contador de ítems
T O T A L	Suma de valores
P R O M E D	Valor promedio en estadística
s	Desviación estándar
s r e l	Coefficiente de variación
D i f f	Diferencia entre Máx. Mín.

Funciones "Teclado externo" (Teclado PC)









Ajuste previo

setup: interfaces:función teclado
externo:teclado adicional

Los códigos de teclas alfanuméricas realizados se refieren exclusivamente a un layout de teclado alemán. Teclas alfanuméricas, en parte con tecla [Shift]:

a - z, A - Z, 0 - 9, espacio en blanco,
,,, \+ '<> / " \$ @ % / () ; = : _ ? *

Teclas de función:

Teclado PC	Balanzas ME/SE
F1	Tecla 
F2	Tecla 
F3	Softkey F6 (totalmente a la izquierda) tecla Cal
F4	Softkey F5 (2ª de la izquierda)
F5	Softkey F4 (3ª de la izquierda)
F6	Softkey F3 (3ª de la derecha)
F7	Softkey F2 (2ª de la derecha)
F8	Softkey F1 (totalmente a la derecha)
F9	Tecla 
F10	-
F11	Tecla 
F12	-
Print (imprimir)	Tecla 
Return  (Enter)	Softkey F1 (totalmente a la derecha)
Cursor Up (arriba)	Softkey F4 (3ª de la izquierda)
Cursor Left (izquierda)	Softkey F3 (3ª de la derecha)
Cursor Down (abajo)	Softkey F2 (2ª de la derecha)
Cursor Right (derecha)	Softkey F1 (totalmente a la derecha)
POS 1 (Home)	Softkey F6 (totalmente a la izquierda) tecla Cal
Backspace	Tecla 
ESC	Tecla 

Sincronización

Para la transferencia de datos entre balanza y ordenador se transmiten telegramas en caracteres ASCII, vía interfaz de datos.

Para una transferencia libre de errores tienen que concordar los parámetros para la velocidad, en baudios, paridad y handshake y el formato de caracteres.

La adaptación de la balanza se realiza mediante los ajustes correspondientes en el Setup. Adicionalmente a estos ajustes, la salida de datos de la balanza puede depender de diferentes condiciones; estas condiciones se describen en el programa de aplicación respectivo.

Una interfaz de datos libre, sin conexión de periférico, no registra mensajes de error.

Handshake

La interfaz de datos SBI (Sartorius Balance Interface) de la balanza está provista con memoria intermedia de emisor-receptor. En el Setup de la balanza pueden ajustarse los modos handshake:

- Hardware Handshake (CTS/DTR)
- Software Handshake (XON, XOFF)

Hardware handshake

En hardware handshake con interfaz de datos tetrafilar puede enviarse todavía 1 carácter, después de CTS.

Software handshake

El software handshake es controlado mediante XON y XOFF. Al activar un aparato ha de enviarse un XON, para liberar un aparato eventualmente conectado.

Cuando software handshake está ajustado en Setup, hardware handshake se activa respectivamente, después de software handshake.

El proceso de la transferencia de datos se representa de la siguiente manera:

Balanza	---	byte	---	Ordenador
(Emisor)	---	byte	---	(Receptor)
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	<---	XOFF	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	...			
	(Pausa)			
	...			
	<---	XON	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	

Emisor:

El recibo de un XOFF obstaculiza el envío de otros caracteres. El recibo de un XON, permite nuevamente el envío.


Receptor:

Para no recargar demasiado la transferencia con caracteres de control, la liberación mediante XON se realiza recién después que la memoria intermedia ha sido desocupada casi por completo.

Activar salida de datos


La salida de datos puede realizarse después de una instrucción Print, o bien, síncrona automática a la indicación, es decir, en un ciclo fijo (ver en programas de aplicación y ajustes impresión automática).

Salida de datos después de instrucción Print

La instrucción Print puede activarse pulsando la tecla , o bien, mediante un comando de software (Esc P).

Salida de datos automática

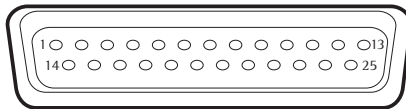
En el modo "Autoprint" los datos transmitidos vía interfaz se realizan sin comando Print. La salida puede realizarse autom. síncrona a la indicación en intervalos seleccionables, con o sin estabilidad de la balanza. El intervalo depende del estado funcionam. de la balanza y del modelo.

Con salida automática ajustada en setup, ésta inicializa inmediatamente al encender la balanza. En el setup puede ajustarse, si la salida automática ha de detenerse e iniciarse con pulsión de tecla .

Asignación de terminales

Hembrilla de interfaz de datos:

D-subminiatura para 25 puntas, DB25S, con unión de rosca




Conector macho requerido

(se recomienda usar los conectores con las mismas especificaciones):

D-subminiatura de 25 puntas, DB25S, con equipo de grampa de cable apantallado que consta de cubiertas y una placa apantallada (Amp, tipo 826 985-1C) y tornillos de apriete (Amp, tipo 164 868-1)

Asignación de terminales (pines) hembrilla 25 contactos, RS 232:


Pin 1:	Tierra
Pin 2:	Salida datos (TxD)
Pin 3:	Entrada datos (RxD)
Pin 4:	signal GND
Pin 5:	Clear to Send (CTS)
Pin 6:	Conexión interna
Pin 7:	Masa interna GND
Pin 8:	Masa interna GND
Pin 9:	Reset _ In ¹⁾ GND
Pin 10:	-12 V salida
Pin 11:	+12 V salida
Pin 12:	Reset _ Out ²⁾
Pin 13:	+5 V salida
Pin 14:	Masa interna GND
Pin 15:	
Pin 16:	
Pin 17:	
Pin 18:	
Pin 19:	
Pin 20:	Data Terminal Ready (DTR)
Pin 21:	Alimentación tensión masa GND
Pin 22:	Sin asignación
Pin 23:	Sin asignación
Pin 24:	Alimentación tensión entrada +15 ... 25 V
Pin 25:	+5 V salida

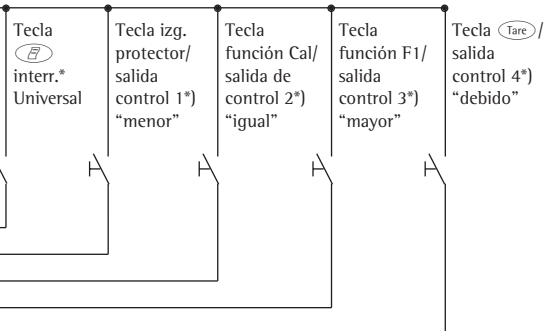

*) = modificación de asignación de terminales, ver en "Funciones adicionales"


¹⁾) = reinicio Hardware

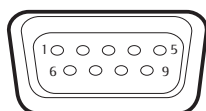²⁾) = periferia reinicio



Asignación de terminales hembrilla 9 contactos, RS 232 (opcional):

Pin 1:	Sin asignación
Pin 2:	Salida datos (TxD)
Pin 3:	Entrada datos (RxD)
Pin 4:	Clear to Send (CTS)
Pin 5:	Signal GND
Pin 6:	Sin asignación
Pin 7:	Sin asignación
Pin 8:	Data Terminal Ready (DTR)
Pin 9:	Sin asignación

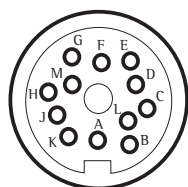


Asignación de terminales hembrilla redonda 12 contactos, RS 485 (opcional):

Pin A:	Tecla de función F2/línea de control 3 "mayor"
Pin B:	RS 485: TxD - N; RS 232: TxD
Pin C:	RS 485: TxD - P; RS 232: RxD
Pin D:	RS 485: Sin asignación RS 232: DTR
Pin E:	Signal GND
Pin F:	+5 V
Pin G:	Tecla izquierda protector/línea control 1 "menor"
Pin H:	RS 485: Sin asignación RS 232: CTS
Pin J:	Tecla de función Cal/línea de control 2 "igual"
Pin K:	Tecla /interruptor universal
Pin L:	Tecla /línea control 4 "set"
Pin M:	+ 12 V salida

Conexión lector código de barras/teclado adicional

Lector código de barras y teclado adicional pueden conectarse en las siguientes hembrillas:

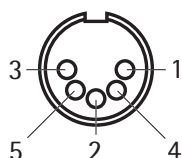- hembrilla 25 contactos D-Sub (con adaptador)
- hembrilla redonda 12 contactos (con adaptador)
- hembrilla DIN 5 contactos directo



Asignación de terminales hembrilla DIN 5 contactos (opcional)

Pin 1: Keyboard Clock

Pin 2: Keyboard Data

Pin 3: Sin asignación

Pin 4: Signal GND

Pin 5: +5 V




El lector código de barras YRB02FC tiene que ser alimentado con tensión externa, si están conectados impresora y segunda indicación.
El teclado PC tiene que ser alimentado con tensión externa.

Diagrama de conexión

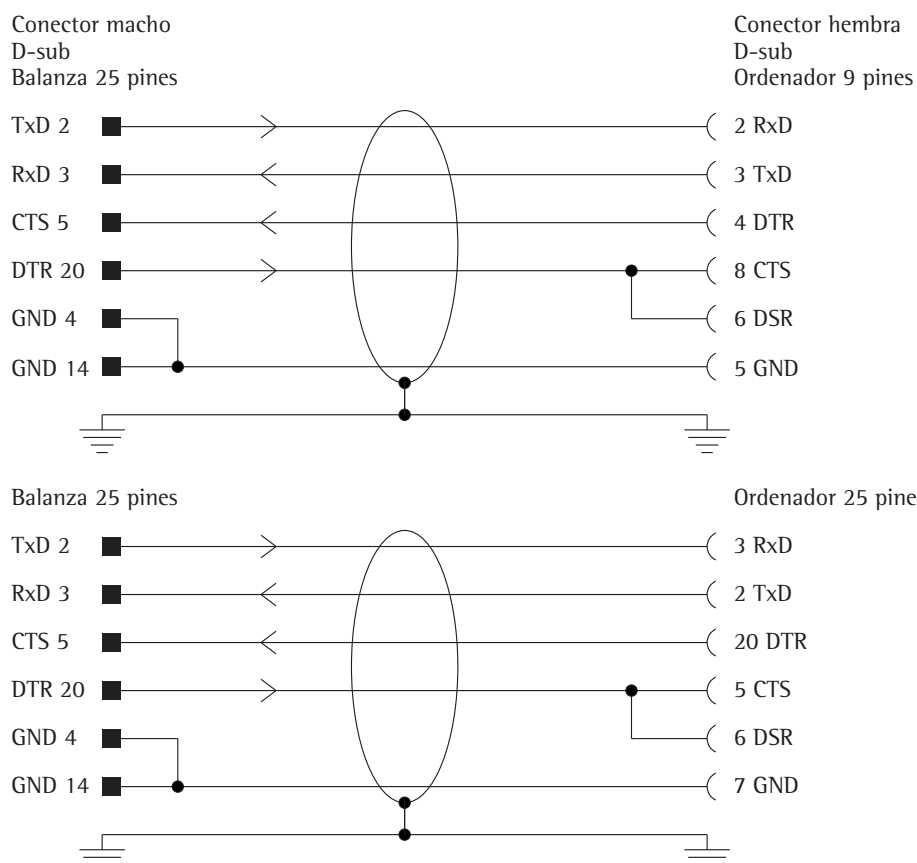Para la conexión de un ordenador u aparato periférico a la balanza según RS232C/V24 estándar, para líneas de 15 m longitud máx.




¡No deben asignarse más pines en la balanza!





Tipo de cable según AWG 24

Mensajes de error

Los mensajes de error aparecen en la indicación principal o línea para texto, por aprox. 2 segundos. Después, el programa retorna automáticamente al modo de pesada.

Indicación	Causas	Solución
Ningún segmento	Falta tensión de red	Controle tensión de red
	Adaptador de CA sin conectar	Conecte adaptador a la red
	En setup, seleccionado desconexión autom.	Encienda balanza con  , o bien, en Setup, seleccione "sin desconex. autom."
H	Desborde de capac. de pesada	Quite carga del plato
L o bien Err 54	Falta colocar plato de carga	Coloque plato de carga
Err 01 > Rango indicación	Salida de datos incompatible con formato de salida	Realice ajuste correcto en Setup
Err 02 Cal. no posible	Condición calibr./ajuste no fue observada, p. ej.: – faltó tara – plato con carga	Calibre/ajuste después de indicarse cero Tare con  Quite carga del plato
Err 03 Cancelac. Cal./ajus	Proceso de calibr. no se realizó dentro del tiempo definido	Calentamiento previo, luego, vuelva a calibrar
Err 06 Pesa int. defectuosa	Pesa integrada de calibración defectuosa	Comuniqué al serv. técnico Sartorius
Err 07 Funcion bloqueada	Ultima función activada no permisible en balanzas verificadas	Para modificar ajuste, comuníquese al suministrador o serv. técn. Sartorius
Err 08* <> Rango cero	Balanza con carga demasiado alta para la puesta a cero	Controle, si en la configuración se observó "Activar rango puesta a cero" Función adicional Cambio de resolución: descargar balanza
Err 09* < 0 no permisible	Con valor bruto ≤ cero, tara no es posible	Ponga balanza a cero
Err 10 Tara bloqueada	Tecla tara y 2. memoria tara bloqueadas con memoria cubierta en progr. formulación	Recién al borrar programa "Formulación" con  pueden activarse nuevam. tecla tara y 2. memoria de tara
	Pesada diferencial: tecla tara se bloquea con tara cubierta por muestra	Pesada diferencial: descargue balanza o cambie muestra
Err 11 Tara2 bloqueada	Pesada de tara no permisible: – descarga de tara-muestra no es posible – total de memoria tara mayor que el rango de pesada – valor tara mayor que el rango fino de una balanza verificada	Descargue balanza y tare
Err 12 Tara2 > Max.	Memoria tara mayor que rango pesada o límite de rango	Descargue balanza o cambie muestra
Err 17 Pesa cal > Max.	No es posible ajuste interno, precarga es muy alta	Disminuya precarga o selecc. otra configuración
Err 30 Impr. bloqueada	Interfaz de datos bloqueada para impresión	Avise serv. técn. Sartorius
Err 31 Impr. bloqueada	Handshake-interfaces bloq. (XOFF, CTS)	Enviar XON, liberar CTS

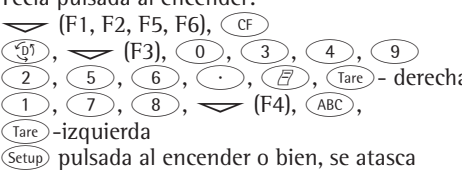* = sólo puede aparecer en funcionam. interfaz SBI (ESC f3_/f4_)

Indicación	Causas	Solución
P/ref.muy liviano	Error memoria referencia en pesada porcentaje o conteo	Peso muy liviano o plato sin cargar
Opt. no posible	Optimiz. de referencia en conteo no es posible	Observe criterios optimiz. – ver en “Progr. conteo”
Nen. peso xxxxx muy liviano xxxxx demasiado	Entrada errónea (posible en todos los progr. aplicación), p. ej.: entrada de letra no es posible	Observe pasos de manejo
Demas. caracteres	Texto entrado es muy largo	Longitud texto decimales: – ID-M, NUM, ID-L, ID máx. 20 caracteres – ID-P máx. 14 caracteres
Formato línea erróneo	Se seleccionó protocolo impr. configurado y formato línea “16 caracteres”	Impresión: Formato línea selecc. 22 caracteres
Lim. no ident. a la unidad	Unidad entrada límites toler. en pesada de control diferente a la aplicación utilizada	Adapte límites tolerancia de aplicación
Ecuac. muy larga	Ecuación con más de 28 caract. en cálculo	Límite ecuación a 28 caract.
Cancelación, entrar parám. ref.	Falta parám. de referencia para la determ. dens. del aire	Entre los parámetro de referencia
Función activa	Función realizándose	–
Sólo pueden memorizarse menos de 999 muestras en un máximo de 100 lotes	Memoria datos producto totalmente utilizada	Borre parcialmente mem. datos de productos
Err 10x x = 1 : x = 2 : x = 3 : x = 4 :	Tecla se atasca Tecla pulsada al encender: 	Suelte la tecla, o bien, comunique al serv. técn. Sartorius
Lectura fija como “tablero ajedrez”		
Err 320	Memoria progr. funcionam. defectuosa	Comunicar al serv. técnico Sartorius
Err 340	Parámetro funcionam. (EEPROM) defectuoso; RAM perdió datos Se cargó ajuste previo	Apagar/volver a encender balanza; con indic. Err 340 permanente, comunique al serv. técn. Sartorius
Err 341	Baterías descargadas	Deje conectado el aparato mínimo 10 horas
Ninguna PP	Célula de pesada defectuosa	Comunique serv. técn. Sartorius
Bloqueado	Ejecución de función bloqueada	Ninguna
Información especial  no desaparece	Después de encender no se ha pulsado aún ninguna tecla	Pulse alguna tecla
Variación permanente del valor de pesada	Lugar instalación inestable (mucha vibración o corr. aire)	Cambie de lugar instalación, adapte en Setup
	Cuerpo extraño entre plato de carga y carcasa de balanza	Retire cuerpo extraño
Resultado de pesada obviamente falso	Balanza sin ajustar	Calibre
	Antes de pesar no se realizó tara	Tare
	Balanza no está nivelada	Nivele balanza

¡En caso de aparecer otros errores, comunicarse con el servicio técnico Sartorius!

Indicación	Causas	Solución
Mensajes en pesada diferencial		
MUESTRA: borrar/omitir/confirmar	Aviso para muestra: borrar/ omitir en pág. catálogo “MUESTRAS: borrar”	Borre con tecla Si Omita con tecla Omitir
MUESTRA: incluir	Advertencia para muestra: incluir en pág. catálogo “MUESTRAS: borrar”	Incluya con tecla Omitir si la muestra está (omitida)
No es posible memorizar	Gestión de archivo: – no es posible mem. datos – memoria completa	Borre lote(s)
No es posible cargar	Gestión de archivo: – no es posible mem. datos – límite de memoria alcanzado	Borre lote(s)
Posible sólo 30 p-finales	Trata de memorizar pesada final 31	Ninguna
LOTE: existe	Ya existe lote en la página catálogo LOTES	Seleccione nombre lote diferente
Ninguna muestra	En la pág. catálogo LOTES: con pulsión tecla Muestr. , si el lote seleccionado no contiene muestra	Primero memorice muestras
Fuera del rango	En la página catálogo LOTES: o MUESTRAS: se seleccionó un lote o muestra con entrada alfanumérica y no se encontró	Entre lote o número de muestra correctos
Insuficiente memoria o bien 999 muestras máximo	Al definir muestras mediante teclas y Muest.# se definieron más de 999 muestras	Defina menos memoria o borre, evtlm. lote(s)
Muestra omitida	Al tratar de memorizar, cuando la muestra seleccionada está omitida	Ninguna
Demas. pequeño para memorizar	Ha de asegurarse un valor tara, inicial, final menor que un dígito de indicación	Coloque peso
Imposible seleccionar	Al seleccionar, en la página resultado, se rechaza el intento de selección Factor. No existe 2. modo de resolución	No seleccionable Comunicar al serv. técnico Sartorius
Imposible CF	Puede borrarse sólo una muestra o parte limitada de una muestra mediante tecla CF Si no es posible borrar más, aparece este mensaje	Posible borrar mstras indiv. mediante pág. catálogo “Muestras”
Calcular estadística	Info al calcular estadística. Proceso dura varios segundos con gran cantidad de muestras	Desaparece automáticam.
Estadística no disponible	En el lote no existen pesadas finales válidas	Desaparece automáticam.
No existen pesos iniciales	En p-serie y p-conjunta, si no existe pesada inicial	Realice pesadas iniciales

Cuidado y mantenimiento

Servicio

Un mantenimiento regular de la balanza por técnicos de servicio Sartorius asegura la continua exactitud de medición. Sartorius ofrece contratos de servicio en ciclos de 1 mes hasta 2 años.

La frecuencia de los intervalos de mantenimiento dependerá de las condiciones de funcionamiento y tolerancias.

Reparaciones

Las reparaciones deben ser realizadas sólo por técnicos autorizados. A causa de reparaciones inapropiadas pueden resultar graves peligros para el usuario.

⚠ Advertencia:

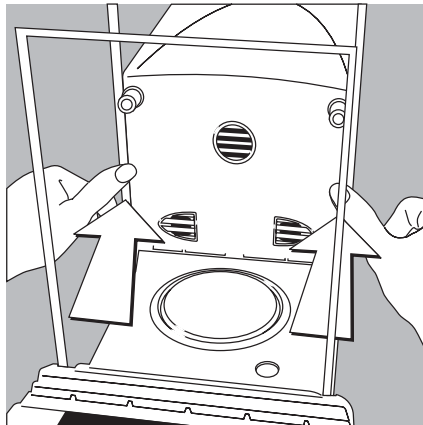
Partículas pueden depositarse en la carcasa debido a la aspiración del ventilador. Al emplear la balanza en la industria química, las piezas defectuosas o que necesitan limpieza han de ser tratadas de acuerdo a las prescripciones respectivas.

Limpieza de la carcasa

⚠ No debe infiltrarse líquido o polvo en la balanza


⚠ No utilizar detergentes agresivos (disolventes, o similares)

- Separar la alimentación de tensión: desconectar adaptador de CA
- En caso necesario, desconectar cable de datos de la balanza
- Quitar restos de muestras/polvo cuidadosamente con pincel o jeringa
- Limpiar la balanza con un paño suave humedecido en agua jabonosa
- Limpiar los vidrios del protector con un detergente común
- Secar la balanza con un paño suave




Limpieza de la cámara de pesada ME215/235/254/414/614/36S

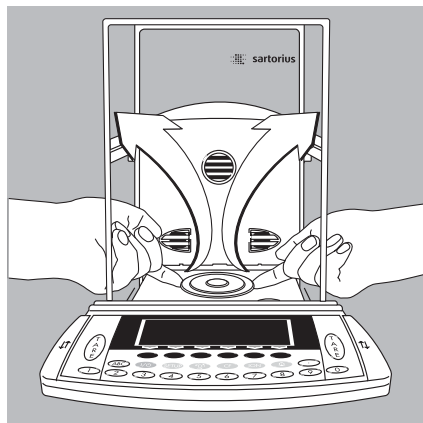- Deslizar las puertas del protector hacia atrás, hasta el tope





- Quitar cuidadosamente restos de polvos con jeringa apropiada

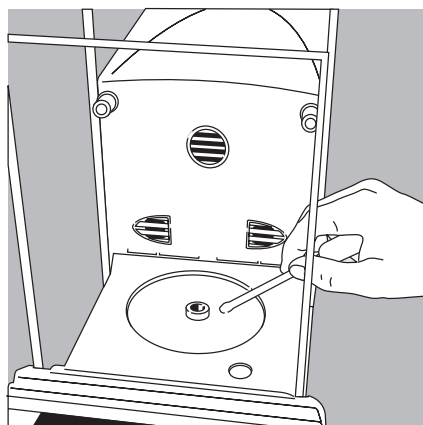- Limpiar restos líquidos con papel secante



- Eliminar cuidadosamente los restos de muestra pulverulenta debajo de la placa apantalladora, con un aspirador pequeño y minimanguera

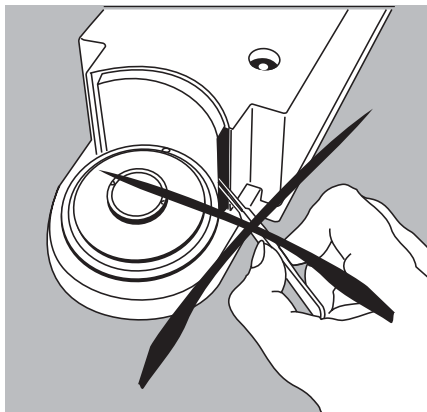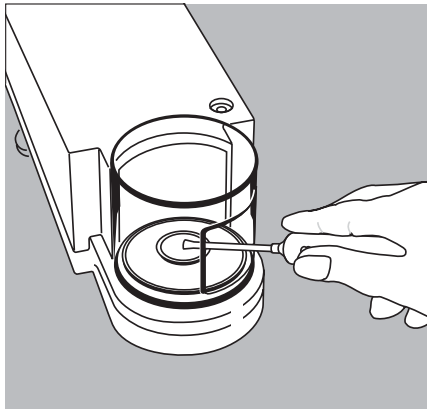- Eliminar restos de muestra líquida con papel secante



Limpieza de la cámara de pesada modelos ME5 | SE2

- Eliminar cuidadosamente los restos de muestra pulverulenta debajo de la placa apantalladora, con un aspirador pequeño y minimanguera
- Eliminar restos de muestra líquida con papel secante

⚠ No insertar pinza o similar detrás de la placa de presión del protector contra corrientes de aire.

Advertencia: el sistema de medición es hermético, separado por el área de la placa de presión. Aquí no debe penetrar suciedad.

Controles de seguridad

Si por algún motivo un funcionamiento libre de riesgo de la balanza ya no se garantiza:

- Separar alimentación de tensión:
desconectar adaptador de CA de la red
- > Asegurar adaptador de CA y la conexión de red contra el uso ulterior

Un funcionamiento libre de riesgo del adaptador de CA ya no se garantiza:

- si el adaptador de CA o conexión de red presenta daños visibles
- si el adaptador de CA no trabaja correctamente
- después de un almacenamiento por largo tiempo bajo condiciones inadecuadas

En tales casos, comuníquese con el servicio técnico Sartorius. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por especialistas que:

- tienen a su disposición los documentos e instrucciones necesarias, y
- tienen la capacitación debida

Un control regular del adaptador de CA por un especialista se recomienda para los siguientes puntos:

- Corriente de descarga $<0,05\text{mA}$ con un aparato de medición adecuado
- Resistencia de aislación $>7\text{Mohmios}$ con una tensión continua mínima de 500V y carga de 500kOhmios

Intervalo y magnitud del control lo determina el especialista, según las condiciones de entorno y empleo del adaptador de CA, en el lugar mismo, por lo menos una vez al año.

Eliminación de desechos

Información e instrucciones sobre desechos y reparación

Cuando ya no necesite el embalaje, deberá depositarlo en el punto de recogida de basuras establecido por las autoridades locales. El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden utilizarse como materia prima recuperada.



Ni el aparato, ni los accesorios, ni las pilas o acumuladores deben desecharse junto con los residuos urbanos no seleccionados. La legislación de la EU obliga a los Estados miembros a recolectar los aparatos eléctricos y electrónicos en forma separada de los residuos urbanos para reciclarlos.

En Alemania y en algunos otros países, Sartorius AG se encarga de recoger y eliminar correctamente sus equipos eléctricos y electrónicos conforme a la normativa. Estos equipos no deben desecharse junto con la basura doméstica, ni depositarse en los puntos oficiales de recogida de residuos urbanos no seleccionados. Esta prohibición afecta también a las pequeñas empresas.

Para mayores informaciones sobre la eliminación en Alemania o en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo, consulte a nuestros colaboradores del servicio técnico local o a nuestro centro de servicio en Goettingen, Alemania:

Sartorius AG
Service Center
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Alemania

En los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo o en los que Sartorius no disponga de filiales, comerciantes o distribuidores, el usuario deberá ponerse en contacto con las autoridades locales o con la empresa encargada de la eliminación de desechos.

Antes de desechar o destruir el aparato, se deben retirar las pilas o acumuladores y depositarlos en el punto de recogida correspondiente.

Sartorius AG, sus filiales, comerciantes y distribuidores no admitirán, para su reparación o eliminación, ningún aparato contaminado con sustancias peligrosas (contaminación ABC). Información más detallada sobre la reparación y eliminación de su aparato, así como direcciones de los servicios de reparación autorizados, la encontrará en el folleto informativo y en nuestra página de Internet (www.sartorius.com).

Datos técnicos

Modelos estándares

Modelo		ME235S	ME215S	ME235P	ME215P
Legibilidad	mg	0,01	0,01	0,01/0,02/0,05	0,01/0,02/0,05
Rango de pesada	g	60/230	60/210	60/110/230	60/110/210
Rango de tara (substractivo)	g	-230	-210	-230	-210
Repetibilidad	≤±mg	0,015/0,025	0,015/0,025	0,015/0,04/ 0,04	0,015/0,04/ 0,04
Desviación linealidad	≤±mg	0,1	0,1	0,15	0,15
Carga de esquina con mitad de carga máx. (posiciones seg. OIML R76)		0,15	-	0,2	-
Deriva de sensibilidad entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶
Repuesta de medición (típico)	s	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Valor pesa calibración estándar ext. (clase de precisión mínima)	g	200 (E2)	200 (E2)	200 (E2)	200 (E2)
Temperatura ambiente permisible de funcionamiento		+5 ... +40 °C			
Rango temperatura de empleo		+10 ... +30 °C			
Adaptación a las condiciones de empleo e instalación		4 escalas optimizadas de filtro			
Secuencia de indicación (seg. escala de filtro ajustada)		0,2 – 0,4			
Dimensión plato de pesada	mm	Ø 90			
Dimensiones (A × P × A)	mm	252 × 533 × 292			
Altura cámara de pesada	mm	239			
Peso neto, aprox.	kg	11,1			
Protección de la carcasa de balanza contra el agua y cuerpos extraños según EN 60529		IP32			
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V			
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz			
Consumo eléctrico		35 VA			
Horas de funcionamiento con equipo baterías ext. YRB05Z, con carga completa, aprox.		10 h			
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd			
Unidades de peso seleccionables		Gramos, kilogramos, quilates, libras, onzas, onzas troy, taeles Hongkong, taeles Singapur, taeles Taiwan, granos, pennyweights, miligramos, piezas por libra, taeles China, mommes, quilates austriacos, tolas, bahts y mesghales			
Programas de aplicación seleccionables		Conmutar unidades, conteo, pesada porcentaje, pesada animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección empuje del aire, determinación desidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria tara, identificador, memoria datos de producto			

Datos técnicos

Modelos estándares				
Modelo		ME614S	ME414S	ME254S
Legibilidad	mg	0,1	0,1	0,1
Rango de pesada	g	610	410	250
Rango de tara (subtractivo)	g	-610	-410	-250
Repetibilidad	≤±mg	0,1	0,1	0,07
Desviación linealidad	≤±mg	0,4	0,3	0,15
Carga de esquina con mitad de carga máx. (posiciones seg. OIML R76)		0,6	0,4	0,3
Deriva de sensibilidad entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1·10 ⁻⁶		
Repuesta de medición (típico)	s	≤ 3	≤ 2,5	≤ 2,5
Valor pesa calibración estándar ext. (clase de precisión mínima)	g	500 (E2)	2× 200 (E2)	200 (E2)
Temperatura ambiente permisible de funcionamiento		+5 ... +40 °C		
Rango temperatura de empleo		+10 ... +30 °C		
Adaptación a las condiciones de empleo e instalación		4 escalas optimizadas de filtro		
Secuencia de indicación (seg. escala de filtro ajustada)		0,2 – 0,4		
Dimensión plato de pesada	mm	Ø 90		
Dimensiones (A × P × A)	mm	252 × 533 × 292		
Altura cámara de pesada	mm	239		
Peso neto, aprox.	kg	11,1		
Protección de la carcasa de balanza contra el agua y cuerpos extraños según EN 60529		IP32		
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V		
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz		
Consumo eléctrico		máximo 35 VA		
Horas de funcionamiento con equipo baterías ext. YRB05Z, con carga completa, aprox.		10 h		
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd		
Unidades de peso seleccionables		Gramos, kilogramos, quilates, libras, onzas, onzas troy, taeles Hongkong, taeles Singapur, taeles Taiwan, granos, pennyweights, miligramos, piezas por libra, taeles China, mommes, quilates austriacos, tolas, bahts y mesghales		
Programas de aplicación seleccionables		Conmutar unidades, conteo, pesada porcentaje, pesada animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección empuje del aire, determinación desidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria tara, identificador, memoria datos de producto		

Datos técnicos

Modelos estándares

Modelo		ME36S	ME5	SE2	ME5-F	SE2-F
Legibilidad	µg	1	1	0,1	1	0,1
Rango de pesada	g	31	5,1	2,1	5,1	2,1
Rango de tara (substractivo)	g	31	5,1	2,1	5,1	2,1
Repetibilidad	≤±µg	2	1	0,25	1 ¹⁾	0,25 ²⁾
Desviación linealidad	≤±µg	10	4	0,9	4 ¹⁾	0,9 ²⁾
Deriva de sensibilidad entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶	1 · 10 ⁻⁶
Repuesta de medición (típico)	s	14–18	≤ 10	≤ 10	≤ 10 ¹⁾	≤ 10 ²⁾
Valor pesa calibración estándar ext. (clase de precisión mínima)	g	30 (E2)	5 (E2)	2 (E2)	5 (E2)	2 (E2)
Temperatura ambiente permisible de funcionamiento		+5 ... +40 °C				
Rango temperatura de empleo		+10 ... +30 °C				
Adaptación a las condiciones de empleo e instalación		4 escalas optimizadas de filtro				
Secuencia de indicación (seg. escala de filtro ajustada)		0,2 – 0,4	0,1 – 0,4	0,2 – 0,4	0,1 – 0,4	0,2 – 0,4
Dimensión plato de pesada	mm	Ø 30	Ø 30	Ø 20	Ø 50	Ø 50
Dimensiones (A × P × A) – Wägezelle – Auswerteeinrichtung	mm	223×410×232 254×320×106	122×316×122	122×316×122	122×316×122	122×316×122
Altura cámara de pesada – Wägezelle – Auswerteeinrichtung	kg kg	9,8 3,5	3,3 3,5	3,3 3,5	4,3 3,5	4,3 3,5
Protección de la carcasa de balanza contra el agua y cuerpos extraños según EN 60529*		IP32				
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V				
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz				
Consumo eléctrico		máximo 70 VA (típico 21 VA)				
Leistungsaufnahme nur Wägezelle und Anzeigeeinheit		ca. 7 W (típico)				
Horas de funcionamiento con equipo baterías ext. YRB05Z, con carga completa, aprox.		10 h				
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd				
Unidades de peso seleccionables		Gramos, kilogramos, quilates, libras, onzas, onzas troy, taeles Hongkong, taeles Singapur, taeles Taiwan, granos, pennyweights, miligramos, piezas por libra, taeles China, mommes, quilates austriacos, tolas, bahts y mesghales				
Programas de aplicación seleccionables		Conmutar unidades, conteo, pesada porcentaje, pesada animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección empuje del aire, determinación desidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria tara, identificador, memoria datos de producto				

¹⁾ con platillo estándar Ø 30 mm

²⁾ con platillo estándar Ø 20 mm

Datos técnicos

Modelos verificados con aprobación CE de tipo

Modelos		ME235S-OCE	ME215S-OCE	ME235P-OCE	ME215P-OCE
Identificación de tipo		BE BK	BE BK	BE BK	BE BK
Clase de precisión *		$\textcircled{\text{I}}$	$\textcircled{\text{I}}$	$\textcircled{\text{I}}$	$\textcircled{\text{I}}$
Escalón real d*	mg	0,01	0,01	0,01/0,02/0,05	0,01/0,02/0,05
Rango de pesada Máx.*	g	230	210	60/110/230	60/110/210
Escalón de verificación e*	mg	1	1	1	1
Alcance mínimo Mín.*	mg	1	1	1	1
Rango compensación de tara (substractivo)		≤100% del rango máximo de pesada			
Rango de aplicación, según Directiva *	g	0,001-230	0,001-210	0,001-230	0,001-210
Tiempo respuesta de medición (típico)	s	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Rango de aplicación (temperatura)		273 ... 313 K (0 ... +40°C, 32°F ... 104°F) con función "isoCAL"			
Adaptación a las condiciones de instalación y empleo		4 optimierte Filterstufen			
Secuencia de indicación (según escala ajustada de filtro)		0,2 – 0,4			
Dimensión platillo de pesada	mm	Ø 90			
Dimensiones (A × P × A)	mm	252 × 533 × 292			
Altura cámara de pesada	mm	239			
Peso neto, aprox.	kg	11,1			
Protección de la carcasa contra los cuerpos extraños y el agua, según EN 60529*		IP32			
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio, para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V			
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz			
Consumo eléctrico		35 VA			
Horas de funcionamiento con equipo externo de baterías YRB05Z, carga completa, aprox.		10 h			
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd			
Unidades de peso seleccionables		gramos, quilates y miligramos			
Programas de aplicación seleccionables		conmutación de unidad, conteo, pesada en porcentaje, pesada de animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección del empuje del aire, determinación de la densidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria de tara, identificación, memoria datos de productos			

* RL = Directiva = 90/384/CEE para instrumentos de medición de funcionamiento no automático, dentro del Espacio Económico Europeo

Datos técnicos

Modelos verificados con aprobación CE de tipo

Modelos		ME614S-OCE	ME414S-OCE	ME254-OCE
Identificación de tipo		BE BK	BE BK	BE BK
Clase de precisión *		Ⓘ	Ⓘ	Ⓘ
Escalón real d*	mg	0,1	0,1	0,1
Rango de pesada Máx.*	g	610	410	250
Escalón de verificación e*	mg	1	1	1
Alcance mínimo Mín.*	mg	10	10	10
Rango compensación de tara (substractivo)		≤100% del rango máximo de pesada		
Rango de aplicación, según Directiva *	mg	0,01-610	0,01-410	0,01-250
Tiempo respuesta de medición (típico)	s	≤2,5	≤2,5	≤2,5
Rango de aplicación (temperatura)		283 ... 303 K (+10 ... +30°C)	273 ... 313 K (0 ... +40°C, 32°F ... 104°F) con función "isoCAL"	
Adaptación a las condiciones de instalación y empleo		4 escalas optimizadas de filtro		
Secuencia de indicación (según escala ajustada de filtro)		0,2 – 0,4		
Dimensión platillo de pesada	mm	Ø 90		
Dimensiones (A × P × A)	mm	252 × 533 × 292		
Altura cámara de pesada	mm	239		
Peso neto, aprox.	kg	11,1		
Protección de la carcasa contra los cuerpos extraños y el agua, según EN 60529*		IP32		
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio, para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V		
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz		
Consumo eléctrico		máximo 35 VA		
Horas de funcionamiento con equipo externo de baterías YRB05Z, carga completa, aprox.		10 h		
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd		
Unidades de peso seleccionables		gramos, quilates y miligramos		
Programas de aplicación seleccionables		conmutación de unidad, conteo, pesada en porcentaje, pesada de animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección del empuje del aire, determinación de la densidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria de tara, identificación, memoria datos de productos		

* RL = Directiva = 90/384/CEE para instrumentos de medición de funcionamiento no automático, dentro del Espacio Económico Europeo

Datos técnicos

Modelos verificados con aprobación CE de tipo

Modelos		ME36S-OCE	ME5-OCE	SE2-OCE
Identificación de tipo		KD BM	KC BN	KC BN
Clase de precisión *		$\textcircled{\text{I}}$	$\textcircled{\text{I}}$	$\textcircled{\text{I}}$
Escalón real d*	µg	1	1	0,1
Rango de pesada Máx.*	g	31	5,1	2,1
Escalón de verificación e*	mg	1	1	1
Alcance mínimo Mín.*	mg	0,1	0,1	0,01
Rango compensación de tara (substractivo)		≤100% del rango máximo de pesada		
Rango de aplicación, según Directiva *	mg	0,1-31000	0,1-5100	0,01-2100
Tiempo respuesta de medición (típico)	s	14 – 18	≤10	≤10
Rango de aplicación (temperatura)		273 ... 313 K (0 ... +40°C, 32°F ... 104°F con función “isoCAL”		
Adaptación a las condiciones de instalación y empleo		4 escalas optimizadas de filtro		
Secuencia de indicación (según escala ajustada de filtro)		0,2 – 0,4		
Dimensión platillo de pesada	mm	Ø 30	Ø 30	Ø 20
Dimensiones (A × P × A)				
– Wägezelle	mm	223 × 410 × 232	122 × 316 × 122	122 × 316 × 122
– Auswerteeinrichtung		254 × 320 × 106	254 × 320 × 106	254 × 320 × 106
Peso neto, aprox.				
– Wägezelle	kg	9,8	3,3	3,3
– Auswerteeinrichtung	kg	3,5	3,5	3,5
Protección de la carcasa contra los cuerpos extraños y el agua, según EN 60529*		IP32		
Conexión a la red		a través de adaptador de CA rango amplio, para tensiones nominales de red 100 V hasta 240 V		
Frecuencia nominal de red		50 – 60 Hz		
Consumo eléctrico		máximo 23 VA		
Horas de funcionamiento con equipo externo de baterías YRB05Z, carga completa, aprox.		10 h		
Aliment. tensión nominal-cd		10,5...25 Vcd		
Unidades de peso seleccionables		gramos, quilates y miligramos		
Programas de aplicación seleccionables		conmutación de unidad, conteo, pesada en porcentaje, pesada de animales, recalculación, cálculo, determinación de la densidad, pesada diferencial, corrección del empuje del aire, determinación de la densidad del aire, pesada de control, funciones por control de tiempo, totalización, formulación, estadística, 2. memoria de tara, identificación, memoria datos de productos		



* RL = Directiva = 90/384/CEE para instrumentos de medición de funcionamiento no automático, dentro del Espacio Económico Europeo

Accesorios (opciones)



Accesorios	N° referencia
Equipo batería , externo, con indicador óptico del estado de carga	
• para SE2 y todos los modelos ME	YRB05Z
Platillo de pesada antiestático , para muestras cargadas electrostáticamente	
• para todos los modelos ME con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YWP01ME
• para ME5	YWP01MC
Kit determinación de densidad ,	
• para todos los modelos ME con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YDK01
• verificado (sustancias líquidas) para todos los modelos verificados ME con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YDK01-OD
Placa receptora , para aclimatar muestras para todos los modelos ME con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YGS01ME
Interruptor de pedal , incl. conector en T	YPE01RC
Interruptor manual , incl. Conector en T	YHS02
Ionizador , para muestras cargadas electrostáticamente	YIB01-ODR
Juego de pesas , para la determinación de la densidad del aire	
• para ME5	YSS35-00
• para todos los modelos con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YSS45-00
Impresora , verificable, con fecha, hora, estadística	YDP03-OCE
Rolls de papel , para YDP03-OCE, 5 unidades de 50 m c/u	6906937
Cinta de color , para YDO03-OCE	6906918
Kit calibración de pipetas , para todos los modelos con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg con programa	YCP03-1
Programa para la calibración de pipetas	YCP03-2
SartoConnect , programa para la transferencia de datos; para la transferencia directa de valores de medida a un programa de aplicación (p. ej. Excel)	
• con cable conexión RS232C, largo 1 m	YSC01L
• con cable conexión RS232C, largo 5 m	YSC01L5
• con cable conexión RS232C, largo 15 m	YSC01L15
Conector en T , para conectar 2 aparatos periféricos	YTC01
Maletín de transporte , para todos los modelos con legibilidad 0,1 mg y 0,01 mg	YDB01ME
Mesa de pesaje , para mediciones precisas y fiables	YWT01
Mesa de pesaje , de piedra sintética con amortiguadores de vibración	YWT03
Consola de pared	YWT04
Indicador adicional	
• LCD, tamaño de cifra 13 mm, reflectivo	YRD02Z
Lector código de barras	YBR02FC
Cable con conector en T , para conectar código de barras	YCC01-0024M01
Cable alargador , plataforma de pesaje sep. Terminal operacional (largo 2,70 m)	
• para todos los modelos ME	YCC01-MED27
Interfaz de datos compatible con PC (9 pines), para todos los modelos ME, incl. puerto DIN 5 pines para lector código de barras	YDO01ME
Interfaz de datos RS485 (redonda 12 pines), para todos los modelos ME. incl. puerto DIN 5 pines para lector código de barras	YDO02ME
Cable conexión RS232C , para conectar a PC con interfaz COM 25 pines, largo 1,5 m aprox.	7357312
Cable conexión RS232C , para conectar a PC con interfaz COM 9 pines, largo 1,5 m aprox.	7357314
Cuencos de pesada , de acero al cromo-níquel, 90 mm × 32 mm × 8 mm	641214
Platillos	
• acero inox. 20 g	6003
• vidrio 20 g	6015
• vertedor acero inox. 300 ml	6407
Platillos (cuencos aluminio puro)	
• 2,7 × 4 × 12 mm, aprox. 4,5 mg (250 unid.)	6565
• 6,5 × 7 × 25 mm, aprox. 52 mg (200 unid.)	6566

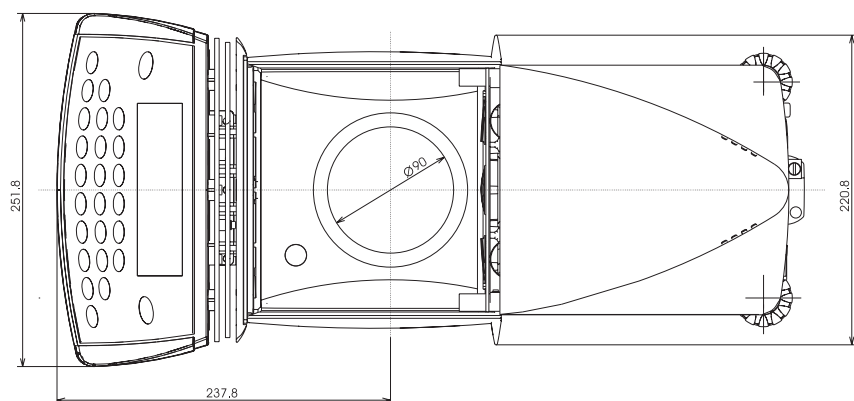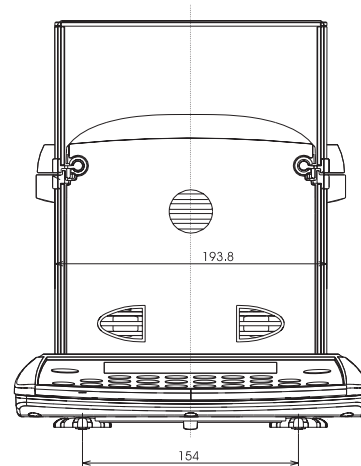
ME215/235/254/414/614






Todas las dimensiones en milímetros

Dimensiones (dibujos acotados)

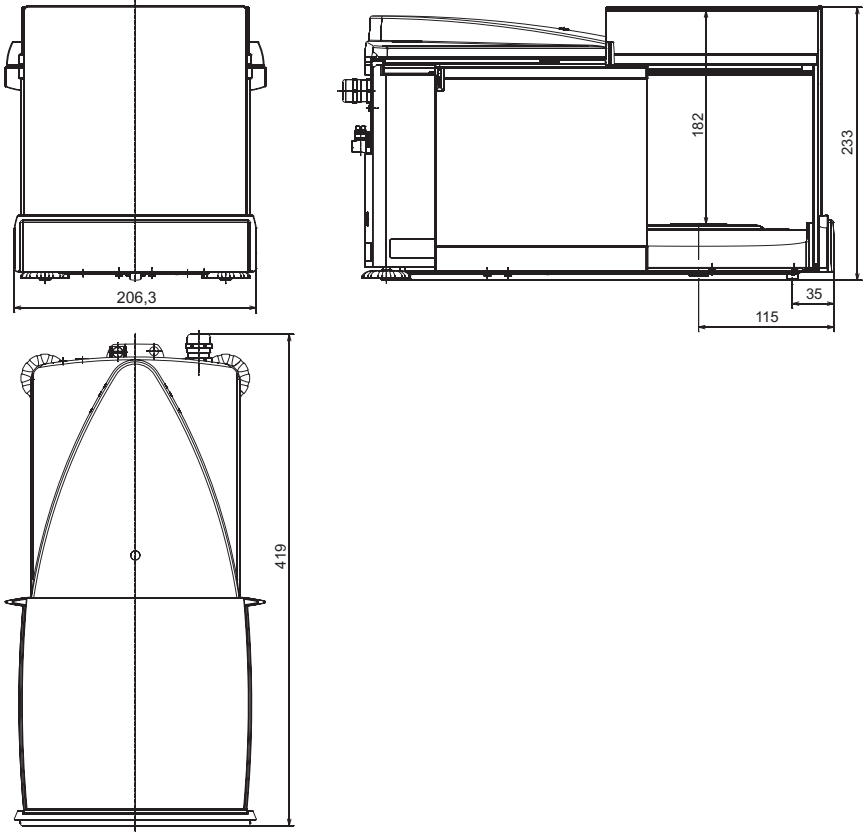ME36S



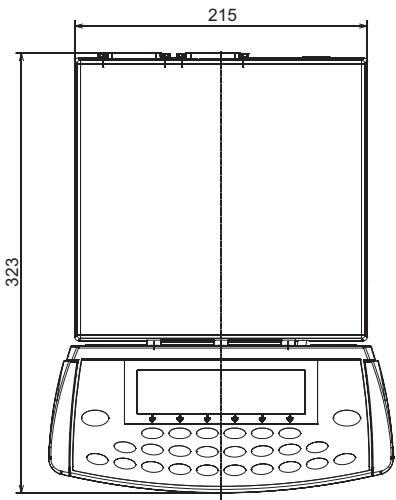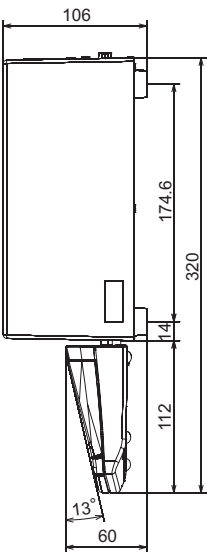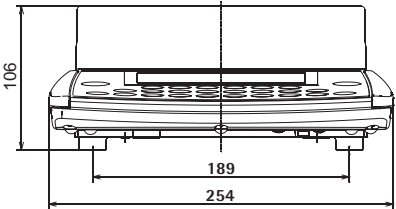
A la unidad de pesaje ME36S... pertenece también una unidad electrónica respectiva




Todas las dimensiones en milímetros

Dimensiones (dibujos acotados)

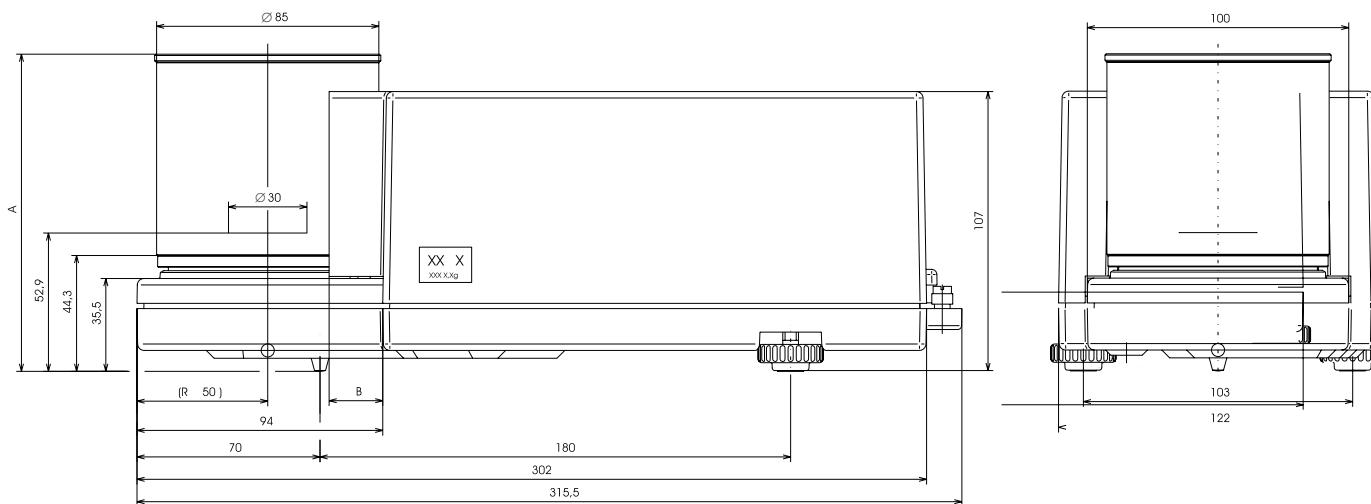ME5, SE2



Modelo	Medida A	Medida B
ME5 / ME5-OCE	121.3	20.5
SE2 / SE2-OCE	121.3	20.5
ME5-F	88.3	---
SE2-F	---	88.3

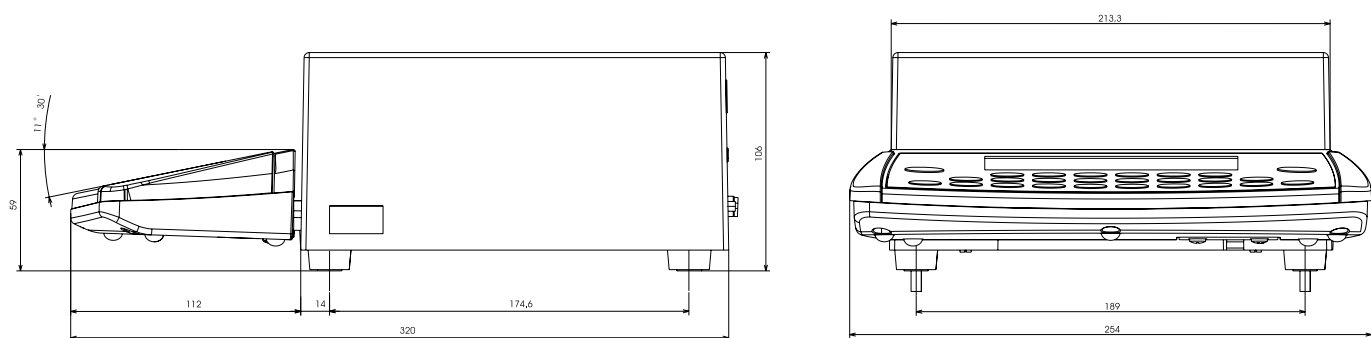

Todas las dimensiones en milímetros

Declaraciones de conformidad

Balanzas para el empleo en metrología legal: 90/384/CEE "Instrumentos de funcionamiento no automático"

Esta directiva regula la determinación de masa en las aplicaciones de metrología legal.

La correspondiente declaración de conformidad de tipo para las balanzas verificadas por SARTORIUS con certificado de aprobación CE de tipo, ver en la página subsiguiente.

Esta directiva regula también el procedimiento de verificación CE por el fabricante, en tanto exista un certificado de aprobación CE de tipo y que el fabricante haya sido acreditado por un organismo notificado de la Comisión de las Comunidades Europeas.

La base legal que permite a Sartorius realizar la verificación CE es la Directiva del Consejo 90/384/CEE respecto a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, vigente a partir del 01.01.1993 en el mercado interno armonizado, y también el reconocimiento otorgado para este efecto al sistema de gestión de la calidad Sartorius AG por la oficina de metrología legal del Estado de Bajo Sajonia del 15.02.1993.

Verificación ulterior en los Estados de las Comunidades Europeas

El tiempo de validez de verificación está supeditado a las leyes del país respectivo, en donde la balanza es utilizada. Para las informaciones respecto a las leyes actuales y vigentes en el país, así como del personal técnico autorizado, rogamos consultar en la oficina correspondiente de servicio técnico Sartorius.

Para mayores informaciones sobre el tema "Verificación" están a su disposición nuestras oficinas de servicio técnico.



Declaración de conformidad según las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE

**El instrumento de pesaje electrónico de precisión de la serie
ME/SE.....-**

cumple con los requerimientos citados en los principios siguientes, junto con las unidades de alimentación, dispositivos de medición adicionales y conexiones citados en el anexo A2 (lista de las denominaciones individuales de tipo y descripción técnica, ver en el anexo A1).

1. Compatibilidad electromagnética

1.1 Fuente de 89/336/CEE : Diario Oficial de las Comunidades Europeas, N° 2002/C62/02

EN 61326-1 Material eléctrico para medida, control y uso
en laboratorio
requisitos CEM
Parte 1: Requisitos generales

Limitación de las fuentes de distorsión: residencial, clase B
Inmunidad definida: área industrial, (funcionamiento continuo no vigilado "continuous unmonitored operation")

2. Seguridad de equipo eléctrico

2.1 Fuente de 73/23/CEE : Diario Oficial de las Comunidades Europeas, N° 2001/C106/03

EN 61010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos
de medida, control y uso en laboratorio
Parte 1: Requisitos generales
EN 60950 Seguridad de los equipos de tratamiento de la información

Sartorius AG
37070 Goettingen, Alemania
2003

W. Obermann
(Director, investigación y desarrollo
Electrónica
División Mecatrónica)

Dr. K. Klein
(Director, investigación y desarrollo
Mecánica
División Mecatrónica)



Declaración de Conformidad de tipo según Directiva N° 90/384/CEE

Esta declaración es válida para instrumentos de pesada electromecánicos de funcionamiento no automático para su empleo en metrología legal. Los instrumentos de pesada aceptables para la verificación tienen un certificado de aprobación CE de tipo. Se trata aquí del (los) modelo (s) con su correspondiente tipo, clase de precisión y número del certificado de aprobación CE de tipo:

Modelo	Tipo del instrumento de pesaje	Clase precisión	N° certificado aprobación de tipo	Con certificado de prueba	
				Tipo	N° Certificado
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓢ	D97-09-018	BE BK	D09-00.31
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓢ	D97-09-018	KC BN	D09-00.31
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓢ	D97-09-018	KD BM	D09-00.31
SE.....-OCE	iso-TEST	Ⓢ	D97-09-018	KC BN	D09-00.31

SARTORIUS AG declara que sus tipos de instrumentos de pesada cumplen con las reglamentaciones para "instrumentos de pesada de funcionamiento no automático" de la Directiva del Consejo Europeo N° 90/384/CEE de 20 de junio 1990, con la correspondiente Norma Europea referente a los aspectos metrológicos para instrumentos de funcionamiento no automático N° EN 45501, con la enmienda a las leyes y regulaciones nacionales relativo a la metrología y verificación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y/o Estados Signatarios del Acuerdo dentro del Espacio Económico Europeo, que han adoptado esta Directiva del Consejo en sus leyes nacionales actuales y vigentes, y con los requerimientos estipulados referente al Certificado de aprobación CE de tipo para la verificación.

Esta Declaración de Conformidad sólo es válida si el rótulo de identificación del instrumento de pesada contiene la marca de conformidad CE y la etiqueta de metrología de color verde con letra "M" impresa (el número grande de dos dígitos, corresponde al año en el cual fue colocada la marca):



Si estas marcas no se encuentran en el rótulo de identificación, entonces, esta Declaración no es válida. La validez se obtiene, por ejemplo, mediante expediente elaborado por la persona autorizada de SARTORIUS AG. La validez caduca después de cualquier intervención en el instrumento de pesada, o bien, en algunos Estados, al vencer el plazo correspondiente. Esta Declaración es válida sólo para el instrumento de pesaje sin dispositivos adicionales.

Es de responsabilidad del usuario preocuparse por la obtención de una prorrogación, como por ejemplo verificación ulterior o verificaciones periódicas.

Sartorius AG
37070 Goettingen, R.F. de Alemania
Goettingen, 14.12.2006

Dr. G. Maaz
(Director Gerente – División Mecatrónica)

J. Rehwald
(Director de Producción – División
Mecatrónica / Tecnología de Pesaje)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin



EG-Bauartzulassung

Certificado de Aprobación CE de Modelo

Zulassungsinhaber:
Extendido para

Sartorius AG
Weender Landstraße 94-108
37075 Göttingen
Alemania

Rechtsbezug:
De conformidad con

§ 13 des Gesetzes über das Meß- und Eichwesen vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 711), zuletzt geändert am 02.02.2007 (BGBl. I S. 58), in Verbindung mit Richtlinie 90/384/EWG, geändert durch 93/68/EWG / *el artículo 13 de la Ley de Verificación del 23 de marzo de 1992 (Boletín Oficial I. p. 711), modificada por última vez el 02.02.2007 (Boletín Oficial I. p. 58) en relación con la Directiva 90/384/CEE modificada por 93/68/CEE*

Bauart:
Modelo:

Nichtselbsttätige elektromechanische Waage
Instrumento de pesar de funcionamiento no automático electromecánico

Typ/modelo: iso-TEST

Genauigkeitsklasse/clase (I), (II), (III), (III) Max 2,1 g ... 300 t

Option: Mehrteilungswaage, Mehrbereichswaage
Opción instrumento multi-escalón, instrumento multi-rango

Zulassungsnummer:
Número de aprobación:

D97-09-018 7ª Revisión

Gültig bis:
Válido hasta:

26.06.2017

Anzahl der Seiten:
Número de páginas

18

Geschäftszeichen:
Número de referencia:

PTB-1.12-4030179

Benannte Stelle:
Organismo notificado:

0102

Im Auftrag
Por orden

Braunschweig, 29.06.2007

Siegel
Sello oficial


Link

Versión español

Las características principales, las condiciones de aprobación así como las imposiciones se estipulan en el anexo, que es parte integrante de este certificado de aprobación CE de modelo. Para notas e información sobre los recursos procedentes, véase la primera página del anexo. En caso de diferencias, sólo el texto original alemán es válido.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



Prüfschein

Certificado de Ensayo

Ausgestellt für:

Extendido para:

Sartorius AG

Weender Landstraße 94 – 108

37075 Göttingen

República Federal de Alemania

Prüfgrundlage:

De conformidad con:

EN 45501 (1992), Nr.8.1,

OIML R 76-1 (1992)

Gegenstand:

Objeto:

Lastaufnehmer mit Wägezelle und Auswerteelektronik mit digitalem Ausgang als Modul einer elektromechanischen Waage zum Anschluß an geeignete Anzeige- und Bedienterminals

Receptor de carga con célula de carga y convertidor analógico-digital de interfaz digital como modulo de instrumento de pesar electro-mecánico para conexión a dispositivos indicador y operación (suitable)

Typ / tipo: BE BK, KC BN, KD BM

Kennummer:

Número de identificación:

Prüfscheinnummer:

Número Certificado de Ensayo:

D09-00.31 2. Revision / 2ª Revisión

Datum der Prüfung:

Fecha del ensayo:

Anzahl der Seiten:

Número de páginas:

10

Geschäftszeichen:

Número de referencia:

PTB-1.12-4027521

Benannte Stelle:

Organismo notificado:

0102

Im Auftrag

Por orden

Braunschweig, 2006-12-12

Siegel

Sello oficial

L.S.

Link

392 00 e-rb

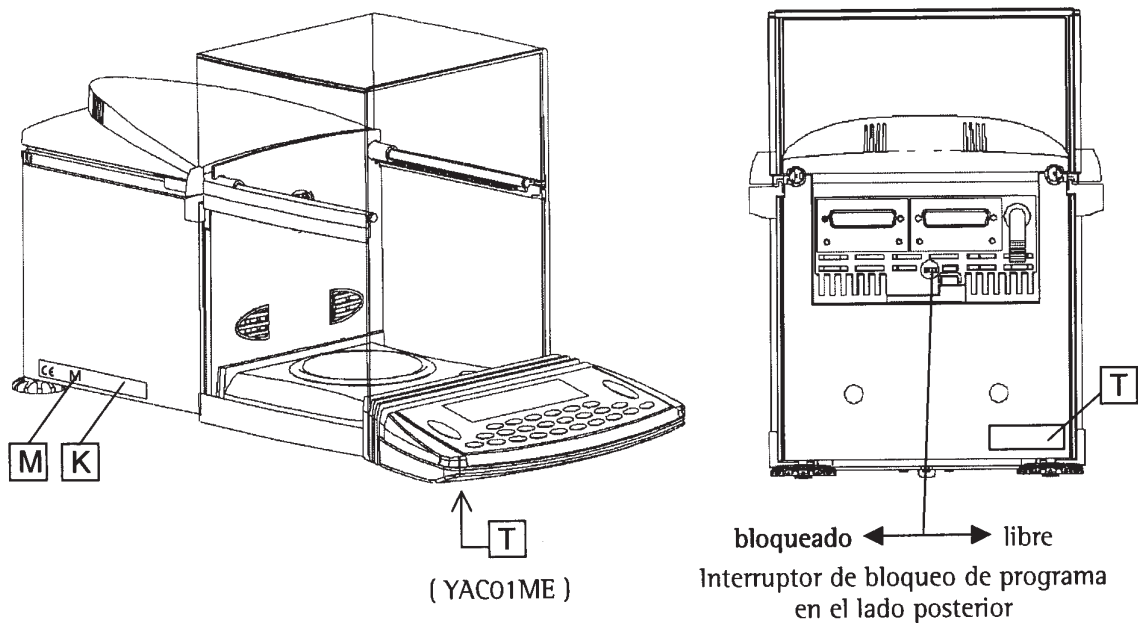
Versión español

Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheins ist.

Notas, véase primera página del anexo que es parte integrante del certificado de ensayo

Placas y Marcas

Tipo iso-TEST + BE BK



- K** Placa de características con la marca CE
- M** Marca verde con la M de metrología
- T** Placa indicadora de tipo


Ejemplo de placa de características del instrumento de pesar ya verificado (módulo de pesaje + terminal) **K**

SARTORIUS AG GÖTTINGEN Germany		iso-TEST	D97-09-018
CE03 0111		BE BK	D09-00.31
M		0°C / +40°C	12345678
		I	

Ejemplo de placa indicadora de tipo **T**

módulo de pesaje	y	terminal de indicación y manejo
<div>SARTORIUS AG GÖTTINGEN Germany ME215S-0CE 12345678 CE</div>		<div>SARTORIUS AG GÖTTINGEN Germany YAC01ME 12345678</div>

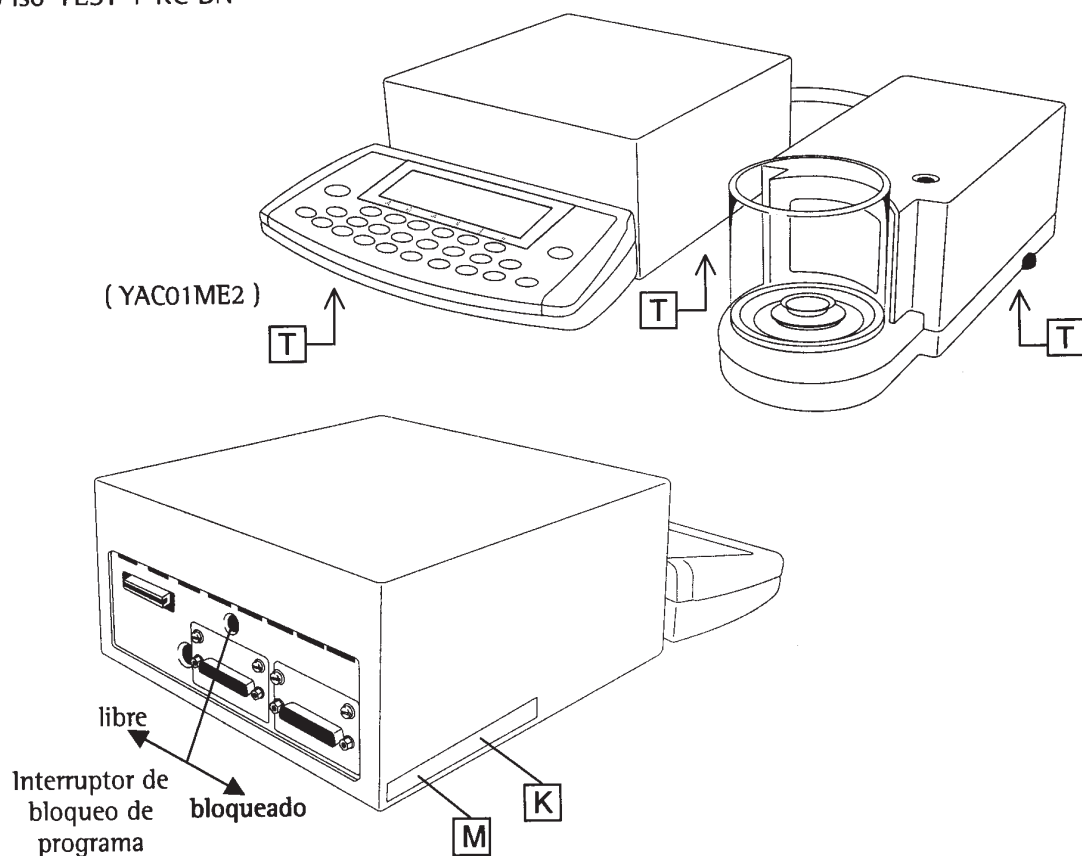Tipo iso-TEST + KC BN




K Placa de características con la marca CE

M Marca verde con la M de metrología

T Placa indicadora de tipo

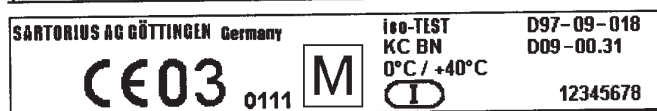Ejemplo de placa de características del instrumento de pesar ya verificado **K**
(módulo de pesaje + terminal)



Ejemplo de placa indicadora de tipo

módulo de pesaje

y


terminal de indicación y manejo



PPME071206s


Tipo: iso-TEST + KC BN
Certificado de Aprobación CE de modelo D97-09-018 + Certificado de Ensayo D09-00.31

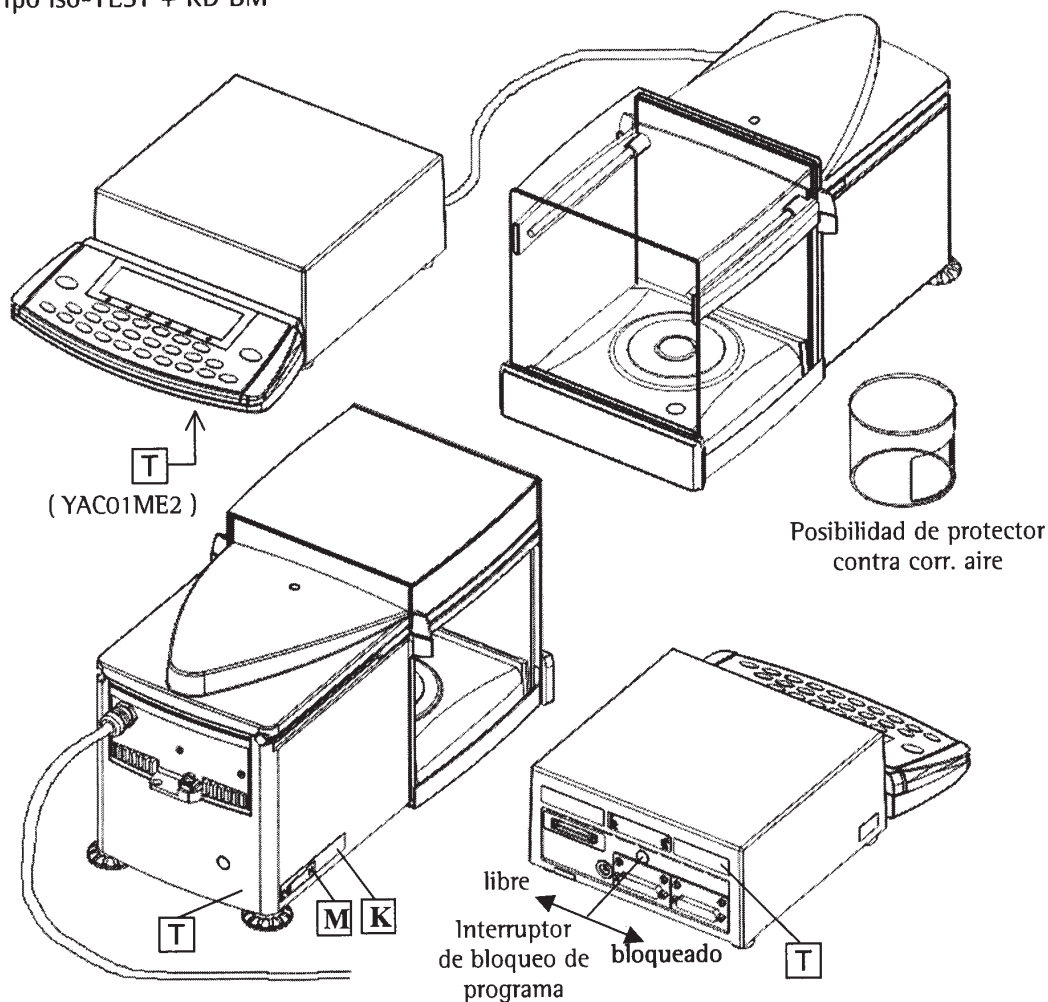Tipo iso-TEST + KD BM



- ☐ **K** Placa de características con la marca CE
- ☐ **M** Marca verde con la M de metrología
- ☐ **T** Placa indicadora de tipo

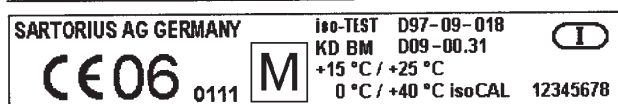Ejemplo de placa de características del instrumento de pesar ya verificado (módulo de pesaje + terminal) K



Ejemplo de placa indicadora de tipo T

módulo de pesaje y terminal de indicación y manejo



Tipo: iso-TEST + KD BM

Certificado de Aprobación CE de modelo D97-09-018 + Certificado de Ensayo D09-00.31

PPME071206s

Índice

	Página		Página
Abrir y cerrar protector contra corrientes de aire	51	Handshake	144
Accesorios (opciones)	159	ID usuario	31
Advertencias de instalación	13	Identificación individual (ID)	115
Advertencias de seguridad	4	Identificación valor medición	50
Ajustar lengua	17	Impresión automática	135
Ajustar salida de impresión	42 ss	Impresión calibración/ajuste (protocolo de bloque)	64
Ajuste automático	63	Impresión	136 ss
Ajuste externo	61	Impresora serial (PRINTER)	32, 136 ss
Ajuste interno	59	Incertidumbre de medición DKD	126
Ajuste	55 ss	Indicación	54
Ajustes de parámetros	26 ss	Informaciones específicas de aparato	46
Ajustes previos	18 ss	Inicio automático de aplicaciones al encender	66
Asesoría de aplicaciones	2	Interfaces	53–133 ss
Asignación de terminales	145	Interrupción externa	33, 54
Autoprint	135 ss	Ionizador	53
Barra gráfica	54	IsoCAL	63
Bloquear funciones de teclas	33, 54	Lector código de barras	146
Cálculo	75	Limpieza	150
Calentamiento previo	16	Línea para datos metrológicos	131
Calibración externa	59 ss	Linealización	55
Calibración interna	61 ss	Marca CE	164
Calibración	55 ss	Medidas de protección	16
Clave general, entrar	Apéndice	Memoria datos de producto	122
Clave: entrar, modificar	29	Memorización manual M+	119
Cambio de resolución	120	Mensajes de error	147
Combinaciones razonables de aplicaciones	129	Modo de encendido	54
Combinar aplicaciones	128	Montaje de la balanza	13 ss
Comunicación serial (PERIPHERALS)	31, 140 ss	Muestras imantadas o magnetizables	47
Concepto de manejo	8 ss	Nivelar	17
Condiciones de transporte y almacenamiento	12	Objeto de uso	2
Conexión a la red	15	Opciones (Accesorios)	158
Conexión función tara/cero	28	Optimización de referencia	70
Configuración de protocolo	44 ss	Parámetros de aplicación (sinopsis)	35 ss
Conmutación de unidades	66	Parámetros de aplicación	34 ss
Contenido	3	Pesada analítica	47
Conteo	69 ss	Pesada diferencial	83 ss
Contraste de indicación	33	Pesada en porcentaje	72 ss
Controles de seguridad	151	Pesar por debajo de la balanza	48
Corrección empuje del aire	95 ss	Pictogramas	132
Cuidado y mantenimiento	150	Placas y marcas	168
Datos técnicos	153	Programas de aplicación	66 ss
Descripción de teclas	12	Protocolo de bloque para calibración/ajuste	64
Desembalar	12	Protocolo ISO/GLP	139
Determinación de densidad con evaluación estadística	129	Puerto de control	33
Determinación de densidad	78 ss	Puesta en funcionamiento	12 ss
Determinación densidad del aire	99 ss	Rango de estabilidad	27
Determinación de diámetro	102 ss	Reparaciones	150
Diagrama de conexión	146	Reponer ajustes de fábrica	46
Eliminación de desechos	152	Representación del aparato	5, 6
Eliminador de electrostática	53	Salida de datos	131
Embajale	20	Segunda memoria de tara (Preset-tara)	113
Entrar fecha	25	Seguro antirrobo	17
Entrar hora	25	Selección modo de calibración	59
Entrar parámetros de balanza	26	Señal acústica	54
Entrar parámetros del aparato	29	Servicio	150
Estadística	108	Setup	18 ss
Exactitud de indicación	35, 67	Sincronización	144
Filtro de aplicación	27	Software-Handshake	144
Formato de línea	43, 146	Suministro	12
Formato entrada de datos	143	Tara	27
Formato salida de datos	141	Teclado adicional	144
Función auto-cero	27	Teclas	54
Función básica “pesar”	47	Test de repetibilidad (reproTEST)	65
Función CF	33, 54	Transporte	20
Función SQmin	124	Unidad de indicación separada	13
Funcionamiento	47 ss		
Funciones extras	54		
Funciones adicionales	113		
Funciones por control de tiempo	105		

Entrar clave general de acceso

Entrar clave

- Seleccionar ajuste previo:
pulsar tecla **Setup**

> aparece **SETUP**

- Seleccionar parámetro: Softkeys **↵** y **➤**

> aparece requerimiento
entrar clave:

SETUP	CTRL.	CLAVE
Entrar clave: XXXXXXXXXX		
<<		<

- Entrar clave general (ver más abajo)
- Confirmar clave de acceso:
Pulsar Softkey **↵**
- > aparecen parámetros en la indicación

- Seleccionar ajuste parámetros de aparato "Clave acceso":
en caso dado, pulsar repetidamente Softkey **↵** o **↶** y **➤**, hasta que

> aparezca **Clave acceso:** y,
en caso dado, aparece clave existente:

- Nueva clave: entrar cifras y letras de la nueva clave (máx. 8 caracteres)
Borrar clave de usuario:
entrar tecla **⋅** y memorizar

- Confirmar entrada: pulsar Softkey **↵**

- Abandonar ajustes previos:
Pulsar Softkey **↶**

> Reinicio de la aplicación

Clave general de acceso:
40414243

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen, Alemania

Teléfono +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-mechatronics.com

Derechos de impresión de Sartorius AG,
Goettingen, Alemania.
La reimpresión o traducción total o parcial
del texto no está permitido sin la previa
autorización por escrito de Sartorius AG.
Todo lo que la ley prevé sobre derechos de
la propiedad intelectual queda reservado
exclusivamente a Sartorius AG.
Las indicaciones y reproducciones
contenidas en este manual de instrucciones
corresponden a la fecha indicada más
abajo. Sartorius también se reserva los
derechos de realizar cualquiera modi-
ficación de la técnica, equipamiento y
diseño de los aparatos con respecto a las
indicaciones y reproducciones de estas
mismas instrucciones.

Fecha:
agosto 2009, Sartorius AG,
Goettingen, Alemania